

molift[®]

SCALE



molift[®]
by Etac

Sisällys

Yleistä.....	3
<i>Käyttöturvallisuusohjeita</i>	<i>3</i>
<i>Ympäristötietoa</i>	<i>4</i>
<i>Puhdistus</i>	<i>4</i>
<i>Huolto.....</i>	<i>4</i>
Punnitus	4
<i>Näytön ilmaisu.....</i>	<i>5</i>
<i>Näppäintoiminnot</i>	<i>5</i>
<i>Toimintojen asetukset.....</i>	<i>6</i>
Käytön vuokaavio	6
Vaa'an asetusten määrittäminen vaiheittain	7
<i>Vaihe 1.</i>	<i>7</i>
<i>Vaihe 2.</i>	<i>7</i>
<i>Vaihe 3.</i>	<i>7</i>
<i>Vaihe 4.</i>	<i>7</i>
<i>Vaihe 5.</i>	<i>7</i>
<i>Vaihe 6.</i>	<i>7</i>
<i>Vaihe 7.</i>	<i>7</i>
Ohjeet paristojen vaihtamiseen	8
Tekniset tiedot	9
<i>Malli: MHS-2500.....</i>	<i>9</i>
<i>Hävittäminen</i>	<i>9</i>
<i>Merkinnät</i>	<i>9</i>
Virheilmoitus	10
Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus....	11
FCC CLASS B vaatimustenmukaisuusvakuutus	11
<i>Korjaukset ja huolto.....</i>	<i>11</i>

Yleistä

Tämä vaaka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä potilasnostimien Molift Mover 205 ja Molift Mover 300 kanssa. Katso tiedot nostimien käytöstä niiden käyttöoppaista. Suosittelemme painokkaasti käyttämään vaakaa tasaisella ja kovalla pinnalla. Kaikki pehmeät pinnat, kuten matot, aiheuttavat epätarkkuutta.



*Molift Mover 205/300 -nostimen vakionostoripustin voidaan helposti vaihtaa vaa'alla varustettuun ripustimeen. Katso ohjeet ripustimen asen-
tamisesta nostimen käyttöoppaasta (Kokoaminen ja purkaminen). Vaaka
toimitetaan yhdessä nostimen kanssa tai yhdistettynä nostoripustimeen.
Vaakaa ei saa kiinnittää muuhun nostoripustimeen.*

Ota huoltoa, korjauksia tai tiedusteluja varten yhteyttä Etac Supply Gjøvikiin tai valtuutettuun huoltokumppaniin.

Käyttöturvallisuusohjeita

Lue käyttöohjeissa annetut tiedot huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ne sisältävät tärkeitä asennusta, asianmukaista käyttöä ja laitteen ylläpitohuoltoa koskevia ohjeita.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta seuraavien ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä:

- Noudata aina erityisten turvallisuusvaatimusten kohteena olevien sähkölaitteiden käytössä niitä koskevia säädöksiä.
- Epäasianmukainen asennus mitätöi takuun.
- Varmista virtalähteen jännitemerkintöjen vastaavan kytkentään käytettyä verkovirtaa.
- Laite on suunniteltu sisäkäyttöön.
- Noudata käytön aikana sallittua ilmanlämpötilaa.
- Laite täyttää sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimukset. Älä ylitä sovellettavien standardien määrittämiä enimmäisarvoja.

Ympäristötietoa

- Kaikki paristot sisältävät myrkyllisiä yhdisteitä ja niiden hävittäminen on annettava pätevän organisaation hoidettavaksi noudattaen ongelmajätesäädöksiä (Norjassa vuoden 1972 myrkyllisiä jätteitä koskevaa määräystä).
- Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Vaa'an paras käyttölämpötila on 0–40°C, joskin se toimii kuumemmassa ja kylmemmässä, tosin silloin paristojen käyttöikä lyhenee.

Puhdistus

Suosittelemme käyttämään vaa'an puhdistamiseen alkoholipyyhkeitä tai vastaavia.

Älkää käyttäkö vaa'an puhdistamiseen suurta määrää vettä, koska se vaurioittaa elektroniikkaa. Lisäksi on pidättäydyttävä käyttämästä syövyttäviä nesteitä tai korkeapainepesureita.

Irrottaa vaaka aina verkkovirrasta ennen puhdistusta.

Huolto

Vaaka ei tarvitse mitään säännöllistä ylläpitohuoltoa. Suosittelemme kuitenkin säännöllisesti tarkastamaan vaa'an tarkkuuden kalibroimalla. Näiden tarkastusten väli riippuu käytön määrästä ja vaa'an kunnosta. Jos epätarkkuuksia havaitaan, ottaa yhteyttä paikalliseen Molifin myyjään tai huoltokumppaniin.

Punnitus


Lukekaa ennen yksityiskohtaisten kaikkien vaa'an punnitustoimintojen ohjeiden lukemista seuraavat tärkeät yleisohjeet:

- Varmistakaa aina että vaaka näyttää nollaa ennen käyttöä. Jos näytössä on muu luku, painakaa NOLLAUS-painiketta.
- Ammattimaiseen hoitokäyttöön tarkoitettu nostinvaaka on suunniteltu tunnistamaan vakaan punnitustuloksen ja lukema tulee kirjata siinä tilassa.



Yli 3° kallistuskulma aiheuttaa väärän tuloksen!

Näytön ilmaisu

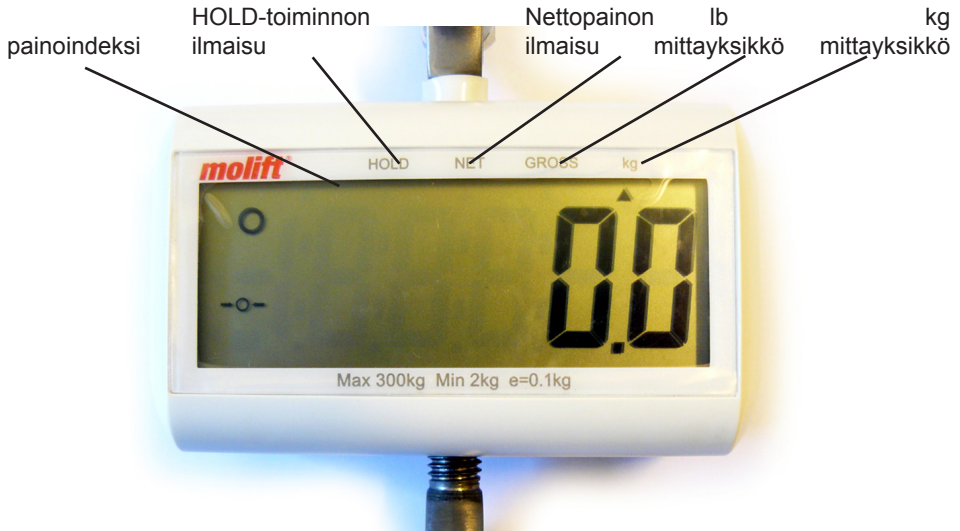

Näppäintoiminnot

PÄÄLLE/POIS/NOLLAUS/TAARA

- Käynnistää painamalla ja sammuttaa pitämällä painettuna 3 sekuntia.
- Nollatkaa painamalla (tarkkuus $\pm 2\%$ täydestä kantavuudesta).
- Taaratkaa painamalla.

HOLD/BMI

- Lukitkaa punnitustulos mittauksen aikana painamalla. Kytkekää lukitustoiminto pois päältä painamalla uudelleen Hold-näppäintä.
- Ottakaa käyttöön painoindeksitoiminto painamalla 3 sekuntia. Painoindeksitilassa syötetään pituus painamalla PÄÄLLE/POIS/NOLLAUS/TAARA- ja UNIT-näppäimiä. Lopettakaa pituuden syöttö painamalla uudestaan HOLD. Nestekidenäyttö näyttää nyt painoindeksin (BMI).

*Säätäkää pituutta jatkuvasti muuttuen painamalla PÄÄLLE/POIS/NOLLAUS/TAARA- ja UNIT-näppäimiä 3 sekuntia



UNIT: Valitkaa kilogrammojen ja naulojen (paunojen) välillä painamalla tätä.

Toimintojen asetukset

Automaattisen sammutuksen odotusajan säätö

Tämä toiminto vaikuttaa käyttämättömyysaikaan.

Kun laite on ollut käyttämättä yli asetetun ajan, se sammuu automaattisesti.

- Automaattinen sammutusaika: 120 s/180 s/240 s/300 s/pois

Summerin säätö


Tällä toiminnolla kytketään summerin merkkiäni PÄÄLLE tai POIS.

- Summeri: päällä/pois

Käytön vuokaavio

Asettakaa vaa'an asetukset halutuiksi käytön vuokaaviota seuraten.

Paina 3 sekuntia näppäintä **UNIT**.

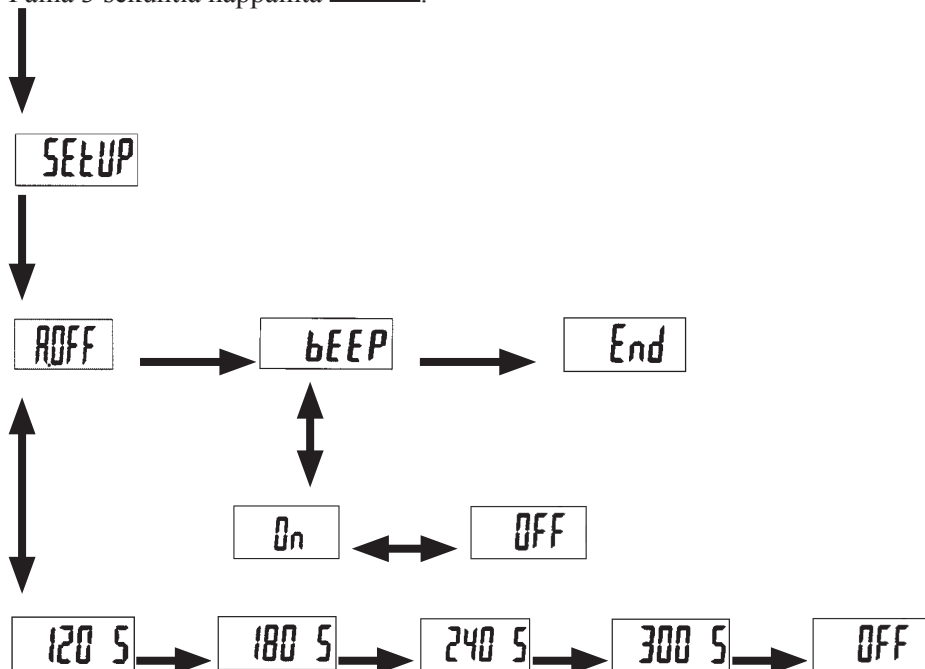

Vaa'an asetusten määrittäminen vaiheittain

Esimerkki: Asettakaa automaattisen sammutuksen ajaksi 180s ja summeri POIS.

Vaihe 1.

Ottakaa käyttöön asetustila  painamalla  3 sekuntia.

Vaihe 2.

Ottakaa käyttöön  tila painamalla  kun  näkyy näytössä.

Vaihe 3.

Säätäkää asetukseksi  painamalla Press , jolloin automaattisen sammutuksen ajaksi tulee 180 sekuntia.

Vaihe 4.

Palatkaa tilaan  painamalla  ja siirtykää asetustilaan  painamalla .


Vaihe 5.

Siirtykää asetustilaan  painamalla  ja vaihtakaa valinta  valinnaksi  painamalla .

Vaihe 6.

Palatkaa asetustilaan  painamalla .

Vaihe 7.

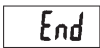Siirtykää asetustilaan  painamalla  ja lopettakaa asetustenmäärittäminen painamalla .


Ohjeet paristojen vaihtamiseen

Molift vaaka MHS-2500 käyttää kuutta AAA-koon alkaliparistoa.



1. Etsi paristokotelon kansi takaa.

2. Irrota paristokotelon kansi.

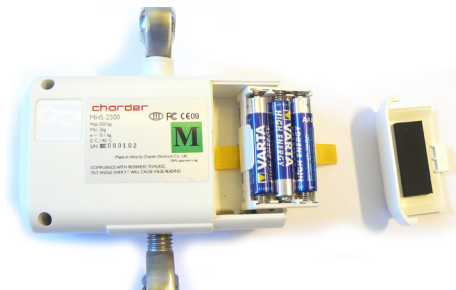

3. Vedä paristolipas ulos.

4. Vaihda 6 kpl AAA-paristoa.



5. Asenna paristolipas takaisin paikalleen.
lon kansi.

6. Asenna paristokote-
lon kansi.

Tekniset tiedot

Malli: MHS-2500

Kantavuus	300 kg (vähintään 2 kg)
Esitystarkkuus	e = 0,1 kg
Näyttövaihtoehdot	1,0 tuumaa 5 ja 1/2 numeroa
Painon mittayksikkö	kg ja lb
Mitat	120 x 50 x 160 mm
Virtalähde	1,5 V AAA-paristoja x 6
Käyttölämpötila	0–40 °C



Vain mittayksikkö kg on OIML:n (kansainvälisen lailla säädeltyjen mittauksen järjestön) hyväksymä



Sallittuna turvallisena kuormana (SWL) tai kantavuutena pidetään pienintä eri osien SWL-arvoista. Tästä johtuen vaa'alla varustetun Molift Smart -nostimen SWL on 150 kg, vaikka vaa'an kantavuus yksinään onkin 300 kg.

Hävittäminen

Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Erottele käsiteltäväksi erikseen paikallisten sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) koskevien määräysten mukaisesti.

Merkinnät



Virheilmoitus

Paristojen varaus vähissä

Varoitus näytetään kun paristojen jännite on liian matala laitteen käyttöä varten. Vaihtakaa uudet paristot.




Suuri nolla-arvo

Kuorma on liian suuri käynnistettäessä, vähentäkää kuormaa.




Pieni nolla-arvo

Kuorma on liian pieni käynnistettäessä, lisääkää kuormaa.

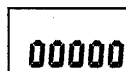


Ylikuorma tai laskuvirhe

Kuorma ylittää suurimman arvon, vähentäkää kuormaa ja yritetään uudelleen. Jos ongelma jatkuu, soittakaa huoltoon.

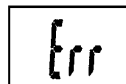

Laskuvirhe (liian pieni)

Kuorma alittaa alarajan käynnistettäessä, lisääkää kuormaa ja yritetään uudelleen. Jos ongelma jatkuu, soittakaa huoltoon.

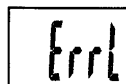

Eeprom-virhe

Vaa'an laiteohjelmassa on vikaa, soittakaa huoltoon.



Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on valmistettu harmonisoitujen eurooppalaisten standardien mukaisesti, noudattaen seuraavia alla mainittuja direktiivejä:

Lääkintälaitedirektiivi 93/42/ETY

Direktiivi 90/384/ETY (itsetoimivat vaa'at)

Matalajännitedirektiivi 73/23/ETY

FCC CLASS B vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä laite noudattaa luokan B digitaalilaitteen rajoja Yhdysvaltain tietoliikennekomission sääntöjen luvun 15 mukaisesti.

Korjaukset ja huolto

Jos vaakanne tarvitsee huoltoa, ottakaa yhteys myyjään tai huoltokumppaniin.

Valmistaja ei vastaa mistään seuraavista syistä aiheutuneesta vauriosta: sopimaton säilytys tai käyttö, omistajan tai kolmannen osapuolen väärin tekemä asennus tai käyttöönotto, tavanomainen kuluminen, muutokset tai muunnokset, väärä tai huolimaton käyttö, kemikaalien, sähköön tai niiden yhdistelmän aiheuttamat häiriöt tai kosteus.

Find your distributor
visit Molift.com

molift[®]
by Etac