



Gebruikershandleiding Convaid

Coaster* by Etac

REV.05 UG2601-DUT- 2025-07-14



Zie opmerking op pagina i



www.etac.com

UK
CA



Klantenservice

Gratis: 1-844-US Mobility (844-876-6245)

Telefoon: (310) 618-0111

Fax: (310) 618-8811

E-mail VS: convoidsales.us@etac.com

Website VS: www.etac.us.com

Internationaal e-mailadres: international.convaid.us@etac.com

Internationale website: www.etac.com

Kantoortijden voor technische ondersteuning of informatie over reparaties:

Maandag-vrijdag, 6:00-16:30 uur PST

Vóórdat u belt:

Vul alstublieft de volgende informatie in. De klantenservice kan u sneller helpen als de onderstaande informatie beschikbaar is.

Serienummer van de stoel: _____

Model van de stoel: _____

Aankoopdatum: _____

Opmerking: de informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Niets uit dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of vertaald naar een andere taal of computertaal, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Convoid.

Gebruik alleen accessoires en onderdelen van Convoid voor Convoid-producten. Convoid-onderdelen zijn niet uitwisselbaar met producten van andere fabrikanten. Vervang versleten onderdelen onmiddellijk.

***OPMERKING: De standaard modelnaam varieert per markt:**

- Coaster Scout (alleen VS)
- Coaster (Canada en internationale markten)

De specificaties en het ontwerp blijven identiek in alle regio's.

Arملهningen zijn standaard op de Coaster Scout, optioneel op de Coaster.

© Auteursrecht 2025 door Convoid.. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

Algemene informatie

Definitie van symbolen	1
Beoogd gebruik/beoogde gebruiker	2
Geschikte omgeving	2
Transport	3
Algemene waarschuwingen	4
Waarschuwingen voor transportmodellen	6
De juiste stoel en de juiste veiligheidsopties kiezen	8
Hergebruik	8

Productoverzicht

Coaster-productlijn	9
Productetikettering: Coaster Standaardmodel	10
Specificaties	11
Productetikettering: Coaster Scout - Alle soorten ondergrond, frame-optie	12

Instellen

Inhoud van de doos	13
De stoel gebruiksklaar maken	13
De stoel uitvouwen	14
De stoel opvouwen	15
De stoel tillen/dragen	16
Montagehandleiding	17
Hoogte van de rugleuning	17
Breedte van de zitting	17
Diepte van de zitting	17
Diepte van zitting aanpassen	18
Positie van de standaard tweedelige bekleding	19

De stoel instellen en afstellen

Kantelen en achteroverleunen	20
Zithoek (kanteling) aanpassen	21
Rugleuning (rughoek) afstellen	22
Rugleuning met verstelbare spanning	23
Kiepbeveiliging en drempelhulp aan de achterkant	23
Zwenkwielblokkering	24

Opties voor hoofdpositionering

Hoofdsteenverlenging	24
Occi-hoofdvleugels	25
Gewatteerde hoofdvleugels	25

Opties voor rompositionering

H-harnas met gewatteerde hoezen	26
Ondersteuningsvest voor de volledige romp	26
Rugsteun met verstelbare hoogte en spanning	27
Zijpanelen	28
Stoelverkleiner	28

Opties voor bekkenpositionering

Driepunts bekkengordel	28
------------------------------	----

Opties voor voet- en beenpositionering

Laterale dijbeensteun (adductor)	30
Mediale dijbeensteun (abductor)	30
Voetdragers	31
Bevestigingsband voor voetsteun	31
Hoogteafstelling voor voetsteun	32
Extra hoogteafstelling voor voetsteun	33
Individueel hoekverstelbare voetsteun	34
Diepteafstelling voor voetsteun	35
Voetsteun met verstelbare hoek	35
Volledig gewatteerde voetsteun (enkelvoudige voetsteun vereist)	36
Enkelvoudige hoekverstelbare opklapbare voetsteun	37
Kuitpaneel	37
Vaste voorstangen vervangen door verhoogde beensteun	38

Coaster Scout - Alle soorten ondergrondopties

Handrem voor begeleider - Alleen bij alle soorten ondergrond	39
Handremblokaanpassing voor alle soorten ondergrond	39
Handremblokslijtage voor alle soorten ondergrond	40
Handremblokvervanging voor alle soorten ondergrond	40
Remspanningaanpassing voor alle soorten ondergrond	41

Wielen

Wielen met snelkoppeling	42
Wielen monteren	42
Afstellen van los voorwiel	43
Wielblokkering vergrendelen en ontgrendelen	43

Accessoires

Hoofdsteenhoes (kap)	44
Infuusstandaard	44
Regenhoes	45
In hoogte verstelbare, opklapbare armsteun	46
In hoogte verstelbare armleuningen	47
Schuimset	47
Steunvlak voor bovenste ledematen (blad)	48
Zadeltassen	49
Opbergmand onder stoel	49
Multifunctionele tas	50

Instructies voor onderhoud, bediening en veiligheid

Afvalverwijdering	51
Reserveonderdelen	51
Onderhoud aan de stoel	52
Onderhoudstabel	52
Schoonmaken	53
Opslag	54
Reparaties	54
Veiligheidsinstructies	55
Bekleding verwijderen	56

Transport, opslag en afvoeren

Aanbevolen vrije ruimtes in het voertuig	57
Zorgen voor vrije ruimte en bescherming	57
De stoel vastzetten voor transport	58
De inzittende van de stoel vastzetten	60
Houdingsgordels en steunen gebruiken	62
Bladen en andere rolstoelcomponenten	62
WTORS-fabrikanten	62
Opslag	62
Reparaties	63
Geautoriseerde servicedealer	63
Conformiteitsverklaring	63

Garantie

Garantie	64
Garantieperiode	64

LEZEN VOOR GEBRUIK





Lees voor gebruik de gebruikershandleiding volledig door en zorg dat u de inhoud begrijpt. Maak uzelf vóór gebruik vertrouwd met de bediening en de functies van het product en oefen hiermee. Elke zorgverlener die deze stoel gaat bedienen moet de volledige gebruikershandleiding lezen.

U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruiker. De veiligheid van de gebruiker kan in gevaar komen als u de instructies in deze handleiding niet opvolgt. Desondanks kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en onvoorspelbare situaties in deze handleiding worden behandeld. Gezond verstand, verzorging en behoedzaamheid zijn géén kenmerken van het product. Deze worden gevraagd van de personen die het product gebruiken. Als de instructies niet duidelijk zijn en verdere uitleg nodig is, neem dan contact op met uw Convoid-leverancier. Als u niet alle instructies en waarschuwingen opvolgt, kan dit leiden tot ernstig letsel of schade aan de stoel. De meest recente versie van alle instructies en kennisgevingen over productveiligheid zijn beschikbaar op de Etac-website (www.etac.com) en kunnen in grotere formaten worden afgedrukt. Er zijn ook aanvullende video-instructies beschikbaar die u kunt raadplegen.

Algemene informatie

Definitie van symbolen

	Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen voor belangrijke informatie zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, die om verschillende redenen niet op het medische hulpmiddel zelf kunnen worden weergegeven.		Dit symbool is een verplichte markering voor apparaten die op de Europese markt verschijnen om de conformiteit aan te geven met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen zoals vastgelegd in Europese richtlijnen. Het symbool kan worden gecombineerd met een viercijferig identificatienummer van de aangemelde instantie. De hoogte hiervan mag niet minder dan 5 mm zijn.
	Geeft aan dat het om een medisch hulpmiddel gaat waarvoor de gebruiksaanwijzing moet worden geraadpleegd.		Geeft de bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap aan.
	Dit symbool geeft aan dat er sprake is van gevaar voor beknelling van de vingers.		Dit symbool geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat het medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.
	Dit symbool geeft de juiste hefpunten aan voor veilig transporteren en verplaatsen.		Geeft de fabrikant van het medische hulpmiddel aan.
	Dit symbool geeft het maximale gebruikersgewicht aan.		Geeft de datum aan waarop het medische hulpmiddel is geproduceerd.
	Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.		

	<p>Dit symbool geeft aan dat een rolstoel niet als autostoel in een motorvoertuig mag worden gebruikt. Deze rolstoel voldoet niet aan WC19 (RESNAWC-4:2012 voor ISO7176-19:2008) en mag niet worden gebruikt als autostoel om de gebruiker in een voertuig te vervoeren.</p>
	<p>Het symbool geeft een rolstoel aan die als autostoel in een motorvoertuig kan worden gebruikt. Deze rolstoel voldoet aan WC19 (RESNAWC-4:2012 en ISO 7176-19:2008) en kan worden gebruikt als autostoel om de gebruiker in een voertuig te vervoeren.</p>
	<p>Dit symbool geeft de positie van een ankerpunt aan tijdens transport bij gebruik van een bevestigingssysteem met vier punten voor de stoel (WTORS).</p>
	<p>Dit symbool geeft aan dat het voldoet aan de vereisten van sectie 19 van RESNA WC-4.</p>

Beoogd gebruik/beoogde gebruiker

Dit product is bedoeld voor gebruik door een persoon met een lichamelijke beperking die af en toe of permanent niet-mobiel is. Dit hulpmiddel is bedoeld om een persoon met een handicap te helpen bij het uitvoeren van een activiteit die de persoon anders moeilijk of niet zou kunnen doen, zoals de persoon zittend van de ene plaats naar een andere plaats vervoeren. De stoel is bedoeld om altijd onder controle en toezicht te staan van een begeleider en de gebruiker mag nooit zonder toezicht worden achtergelaten.

Geschikte omgeving

De stoel is voor gebruik binnen en buiten bedoeld. Als de stoel in de regen wordt gebruikt, moet het overtollige water met een zachte doek worden afgenomen. Als de zitting is bespat met modder of bijtende stoffen zoals zout water of strooizout, moet de zitting worden schoongemaakt met water en droog worden geveegd. Daarna moet opnieuw een hypoallergeen en biologisch afbreekbaar smeermiddel op de bewegende delen worden aangebracht.. Als u van buiten naar binnen gaat, moet u overtollig vuil of modder van de wielen verwijderen om vervuiling van binnenruimtes te voorkomen.



WAARSCHUWING: laat de stoel niet gedurende langere tijd in de zon of in directe hitte staan. Controleer de temperatuur van de stoel vóór gebruik.

Bijtende stoffen moeten te allen tijde worden vermeden. Als het frame is blootgesteld aan bijtende stoffen, moet dit zo snel mogelijk worden afgeveegd met een vochtige doek. Water en een zachte doek zijn voldoende voor een basisreiniging.

Contra-indicaties

Geen bekende contra-indicaties.

Transport

De optionele transportmodellen voldoen aan de normen van RESNA WC19 of ISO 7176-19. Om te voldoen aan WC19 moet de Coaster zonder optionele zitting functioneel worden gecombineerd met kussens die voldoen aan de eisen van WC-20-botsproeven. Dummygewichten zijn:

Model CTR12T/CRT12TS	66 lbs/30 kg
Model CTR14T/CRT14TS	100 lbs/45 kg
Model CTR16T/CRT16TS	170 lbs/77 kg
Model CTR18T/CRT18TS	170 lbs/77 kg

Indeling voor zijwaartse stabiliteit en voorzieningen voor gordels

Model stoel	Massa (gewicht) van de stoel (lbs/kg)	Testindeling	Zijdelingse stabiliteit** (in/mm)
CTR12T/ CTR12TS	27/12,2	Voldoet aan alle prestatiecriteria	0,35/8,9
CTR14T/ CTR14TS	28/12,7	Voldoet aan alle prestatiecriteria	1,18/29,9
CTR16T/ CTR16TS	32/14,5	Voldoet aan alle prestatiecriteria	1,97/50
CTR18T/ CTR18TS	30/13,6	Voldoet aan alle prestatiecriteria	1,57/39,9

** De 'zijdelingse stabiliteit' is de verplaatsing van punt P (het zwaartepunt van de rolstoel met inzittende) wanneer een platform met de rolstoel met inzittende 45° zijdelings wordt gekanteld ten opzichte van de horizontale positie. Hogere cijfers duiden op minder stabiliteit.

Deze tabel verwijst naar testen die zijn uitgevoerd in overeenstemming met WC19/7176-19 om de zijdelingse stabiliteit tijdens normale ritten en het gebruiksgemak en de juiste pasvorm van aan het voertuig bevestigde gordelbeveiliging vast te stellen. De letteraanduiding geeft de algemene beoordeling aan van de plaatsing en montage van de heup- en schoudergordels.

Algemene waarschuwingen



WAARSCHUWING: de bestuurder/verzorger moet deze handleiding lezen en begrijpen vóórdát dit hulpmiddel in gebruik wordt genomen. Als u een deel van de handleiding niet begrijpt, neem dan contact op met uw leverancier voor ondersteuning.



WAARSCHUWING: houd verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Plastic verpakkingen vormen een gevaar voor verstikking.



WAARSCHUWING: de stoel is bedoeld om slechts één gebruiker tegelijk te vervoeren. Vervoer niet meer dan één gebruiker tegelijk.



WAARSCHUWING: het gewicht dat de Coaster-zitting kan dragen, mag nooit het totale draagvermogen van de zitting overschrijden. (Maximale grootte van de gebruiker plus eventuele draagbare items.) Wanneer u de zitting tijdens het vervoer gebruikt, moeten alle accessoires van de zitting worden verwijderd en apart worden opgeborgen.



WAARSCHUWING: het gebruik van stangen voor kiepbeveiliging wordt aangemoedigd als de gebruiker minder weegt dan 22,5 kg (50 lbs).



WAARSCHUWING: om kantelen te voorkomen, mag u geen voorwerpen aan de duwbeugel hangen.



WAARSCHUWING: doe het volgende om het risico op ongevallen te verminderen:

- Lees de gebruikershandleiding ALTIJD zorgvuldig door en zorg ervoor dat u weet hoe u de zitting moet bedienen
- Let ALTIJD op obstakels en vermijd deze indien mogelijk.
- CONTROLEER of de stoel goed werkt. Repareer eventuele problemen vóór gebruik.
- Controleer ALTIJD of de snelkoppelingen geblokkeerd zijn, zodat de achterwielen niet los kunnen raken.
- Zet de gebruiker tijdens gebruik ALTIJD vast in de stoel.



WAARSCHUWING: let bij hellingen extra goed op om te voorkomen dat:

- de gebruiker uit de stoel valt.
- de stoel kantelt.
- de stoel wegrolt.



WAARSCHUWING: ga de trap niet op of af zonder hulp van een andere persoon of met de gebruiker in de stoel. Als hulpmiddelen zoals hellingen of liften beschikbaar zijn, maak daar dan gebruik van. Als deze niet beschikbaar zijn, moet de zitting door twee personen over het obstakel worden gedragen en zonder de gebruiker in de zitting.



WAARSCHUWING: zet de gebruiker altijd eerst vast met de riem vóórdát u andere aanpassingen doet.



WAARSCHUWING: schakel de wielblokkeringen altijd in vóórdát u de gebruiker uit de stoel haalt en vóórdát u de gebruiker weer in de stoel plaatst. Verwijder of plaats een gebruiker nooit zonder de wielblokkeringen vast te zetten.



WAARSCHUWING: laat de gebruiker nooit onbeheerd achter in de stoel, zelfs niet als deze is vastgebonden en de wielblokkeringen zijn vastgezet.



WAARSCHUWING: ga niet op de voetensteun staan als u in of uit de stoel stapt.



WAARSCHUWING: wanneer de gebruiker naar voorwerpen voor, opzij of achter de stoel reikt, zorg er dan voor dat de gebruiker niet te ver uit de stoel leunt, omdat de stoel door de verplaatsing van het zwaartepunt kan kantelen of omkiepen.



WAARSCHUWING: positioneringsgordels mogen nooit worden gebruikt als veiligheidsvoorziening in een motorvoertuig bij het vervoer van een stoel met inzittende. Als de stoel wordt gebruikt in transportvoertuigen, is een extra veiligheidsgordel conform WC19 (ISO 7176-19) voor auto's vereist.



WAARSCHUWING: gebruik de stoel alleen met luchtbanden met de juiste bandenspanning. (Vóór: 36 psi/achter: 30 psi, 248 kPa/200 kPa, 2,5 bar/2,0 bar). Pomp de banden niet te hard op. Als u deze instructies niet opvolgt, kan de band exploderen en schade en/of letsel veroorzaken. De bandenmaat en maximale bandenspanning staan op het wiel vermeld.



WAARSCHUWING: zorg dat de wielen correct zijn gemonteerd. U hoort een 'klik' wanneer het wiel vastklikt.



WAARSCHUWING: laat de stoel niet gedurende langere tijd in de zon of in directe hitte staan. Controleer de temperatuur van de stoel vóór gebruik.



WAARSCHUWING: de Coaster 18 is breder dan de aanbevolen maximale breedte. Wees voorzichtig bij het betreden/verlaten van kleine ruimtes.



WAARSCHUWING: de vlammenwerende eigenschappen van Coaster-bekleding zijn niet van toepassing bij gebruik van aftermarket-stoelen of -kussens.



WAARSCHUWING: voor de veiligheid van de inzittende moet de veiligheidsgordel altijd worden gebruikt.

- Laat de gebruiker niet zonder toezicht achter.
- Bind de gebruiker niet te strak vast.
- Riemen mogen de ademhaling of bloedsomloop niet belemmeren.
- Zet altijd de wielblokkeringen vast vóórdat u de stoel loslaat.
- Als de voorste rand van de zitting zich op of vóór het punt bevindt waar de banden de vloer raken, gebruik dan de buizen aan de voorkant van de zitting niet als steun bij het in- of uitstappen. Anders kan de stoel omkiepen.
- Vermijd het gebruik van de voetenplaten voor ondersteuning van het gewicht bij het in- of uitstappen van de stoel.

Waarschuwingen voor transportmodellen



WAARSCHUWING: om de kans op letsel te verkleinen, moet bij het transporteren van de stoel altijd de hoofdsteunverlenging worden gebruikt. De volgende instructies moeten worden opgevolgd om de impact bij een botsing zo klein mogelijk te houden:

1. Tijdens het transport moet de stoel naar voren gericht zijn en moeten het werkblad en de opbergmand zijn verwijderd.
2. Gebruik alleen een getest, beproefd en compatibel bevestigingssysteem met vier punten voor de stoel (WTORS) en een gordelsysteem met drie punten voor de inzittende in overeenstemming met SAE J2249.
3. De stoelbevestigingen moeten stevig zijn bevestigd aan de vier rode ankerpunten op de stoel. Zie de pijlen op de bovenstaande foto voor de ankerpunten.
4. De veiligheidsgordels voor de gebruiker moeten bestaan uit een heup- en een schoudergordel die rechtstreeks zijn bevestigd aan het frame van de Coaster en de zijkant van het dak van het voertuig.
5. Alle riemen voor vloerbevestiging aan de voor- en achterkant moeten strak zijn aangetrokken om te voorkomen dat de stoel naar voren of achteren kan bewegen.
6. Volg de instructies van de fabrikant van stoelbevestigingen nauwkeurig op om de beoogde werking te garanderen.

Let op: werkblad, opbergmand en andere accessoires moeten zijn verwijderd tijdens transport in een bus of bestelwagen, behalve wanneer dit medisch noodzakelijk is.

Opmerking: niet te strak aandraaien. Dit kan schade aan het frame veroorzaken.

De OPTIONELE transportversie van de Coaster kan gebruikers vervoeren in motorvoertuigen die compatibel zijn met bevestigingsystemen voor rolstoelen en inzittenden (WTORS). De stoel MOET voorwaarts gericht zijn vastgezet met een bevestigingssysteem voor de rolstoel en het gordelsysteem voor de inzittende (bevestigingsystemen voor rolstoelen en inzittenden, Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint Systems of WTORS) dat voldoet aan de vereisten van WC-4 of ISO 7176:



WAARSCHUWING: de stoel moet worden gebruikt zoals aangegeven in de gebruikershandleiding die bij de stoel is meegeleverd. Als u dit niet doet, neemt de kans op ernstig letsel bij een auto-ongeluk toe.



WAARSCHUWING: bevestig de bevestigingsmiddelen alleen op de daarvoor bestemde plaatsen.



WAARSCHUWING: tijdens transport moet de stoel naar voren gericht zijn met de zitmodule in de naar voren gerichte stand op het mobiliteitsonderstel. Alle accessoires moeten zijn verwijderd.



WAARSCHUWING: wijzig of vervang geen enkel onderdeel van de stoel, het stoelframe of het zitsysteem.



WAARSCHUWING: de Coaster is dynamisch getest in een naar voren gerichte configuratie met een dummy van relevante grootte die is bevestigd met gordels voor het bovenlichaam (schouders) en gordels voor het onderlichaam (heupen). Om de kans op hoofd- en borstletsel door contact met voertuigonderdelen te verkleinen, moet u zowel de bovenste als de onderste rompgordels gebruiken.



WAARSCHUWING: tijdens het reizen in een motorvoertuig moeten de bekken- en de rompgordel worden gebruikt.



WAARSCHUWING: bevestig de bevestigingsmiddelen alleen op de daarvoor bestemde plaatsen.



WAARSCHUWING: als u in een motorvoertuig plaatsneemt, verdient het de voorkeur dat de gebruiker van de stoel overstapt op de stoel van de fabrikant van het voertuig en een stoel gebruikt die door de overheid is goedgekeurd via een botsproef.



WAARSCHUWING: wanneer dit medisch niet noodzakelijk is, moeten de accessoires van de rolstoel zijn verwijderd en tijdens het vervoer in het voertuig worden vastgezet, zodat deze bij een botsing niet kunnen losraken en letsel kunnen toebrengen aan inzittenden van het voertuig.



WAARSCHUWING: gebruik de stoel niet als deze betrokken is geweest bij een ongeval. Als uw Coaster betrokken is geweest bij een ongeval, neem dan contact op met de Convaid-serviceaanbieder of een vertegenwoordiger van de Convaid-klantenservice om uw Coaster te laten inspecteren. Raadpleeg pagina 62 voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met uw vertegenwoordiger.



WAARSCHUWING: er is voldoende vrije ruimte nodig voor inzittenden die zijn beveiligd met de bovenste en de onderste rompgordel.

De juiste stoel en veiligheidsopties kiezen

Er zijn verschillende opties beschikbaar om aan de behoeften van de stoelgebruiker te voldoen. Zorg dat u (en uw zorgverlener) bij de keuze van de stoel en andere extra opties rekening houdt met het comfort, de houding, de fysieke beperkingen en de risico's waar de gebruiker bij dagelijks gebruik mee te maken kan krijgen.

Bediening van de stoel buiten de aanbevelingen van de fabrikant kan leiden tot gevaarlijke situaties.



WAARSCHUWING: de stoel is niet geschikt voor joggen, hardlopen, skaten en soortgelijke activiteiten. Zwenkwielen aan de voorkant hebben de neiging om bij hogere snelheden te gaan wiebelen en kunnen een plotselinge stop veroorzaken, waardoor de stoel kan omkiepen. Gebruik de stoel alleen op normale wandelsnelheid. Laat de duwbeugel in geen enkel geval los.

Als dit product wordt gebruikt met de juiste zorg en onderhoud overeenkomstig de gebruikershandleiding, is de levensduur vijf jaar.

De uiteindelijke keuze van het type hulpmiddel en eventuele accessoires of aanpassingen ligt uitsluitend bij de gebruiker en diens zorgverlener. Enkele belangrijke factoren om te overwegen bij het kiezen van een configuratie zijn onder andere:

1. De beperkingen van de gebruiker op het gebied van handicap, kracht, balans, coördinatie en vaardigheden.
2. Neurologische en orthopedische behoeften van de gebruiker.
3. Gedragsfactoren zoals volwassenheid en psychosociale ontwikkeling.
4. Neem alle factoren in overweging bij het kiezen van een configuratie voor de zitting, omdat dit de prestaties en het functioneren van de zitting kan beïnvloeden.

Hergebruik

Uw Convaid-stoel moet worden gedesinfecteerd vóórdat deze opnieuw wordt gebruikt. Gebruik een niet-giftig, biologisch afbreekbaar ontsmettingsmiddel dat geschikt is voor de desinfectie van oppervlakken. Controleer de volgende onderdelen op volledigheid voordat u de stoel in gebruik neemt (zie de ONDERHOUDSTABEL)

Repareer of vervang indien nodig:

- Wielen (profiel), luchtdruk indien van toepassing
- Frame
- Bekleding van zitting en rugleuning
- Wielblokkering
- Lagers en assen: controleer op slijtage/smering
- Recht lopen van de wielbevestigingen

Productoverzicht

Productlijn Coaster Standaardmodel



Coaster Standaardmodel
10° zithoek met rughoekverstelling



Coaster Standaardmodel
20° zithoek met rughoekverstelling



Coaster Standaardmodel
30° zithoek met rughoekverstelling

Productetikettering: Coaster

Waarschuwingslabel van stoel

Laat de inzittende nooit zonder toezicht achter. Wanneer de instructies in de gebruikershandleiding niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot ernstig letsel. Als u een vervangende gebruikershandleiding wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar sales.us@convaid.com of bellen naar 844-876-6245.



ANVISA-label
(Alleen Brazilië)



Label met serienummer

Logosticker van transportanker



PRODUCT

REF XXXXXXXX

SN XXXXXXXX

XXXXXXXX





















Convaid Products, LLC
2830 California Street, CA 90503, USA

EC REP R82 AJS
Parallevej 3, 8751 Gedved, Denmark



Verpakkingslabel
(referentie)

Specificaties

		CTR 12	CTR 14	CTR 16	CTR 18
	Breedte van de zitting	12" / 305 mm	14" / 356 mm	16" / 406 mm	18" / 457 mm
	Stoeldiepte (standaard)	10 - 12" / 254 - 305 mm	11 - 13" / 279 - 330 mm	12 - 15" / 305 - 381 mm	14,5 - 17,5" / 368 - 445 mm
	3" zittingdiepte "Option"	13 - 15" / 330 - 381 mm	14 - 16" / 356 - 406 mm	15 - 18" / 381 - 457 mm	17,5 - 20,5" / 445 - 521 mm
	Hoogte van rugleuning (10°/20°/30°)	22/23/24" 559/584/610 mm	25/26/27" 635/660/686 mm	26/27/28" 660/686/711 mm	28/28/29" 711/711/737 mm
	Zitting tot voetenplaat	6-16" / 152-406 mm	6-16" / 152-406 mm	6-20" / 152-508 mm	6-20" / 152-508 mm
	Van zitting tot vloer (10°/20°/30°)	19/20/21" 483/508/533 mm	19/20/21" 483/508/533 mm	21/22/23" 533/559/584 mm	21/22/23" 533/559/584 mm
	Totale hoogte	40"/1016 mm	41"/1041 mm	42"/1067 mm	44"/1118 mm
	Totale lengte	30"/762 mm	31"/787 mm	32"/813 mm	33"/838 mm
	Totale breedte	22"/559 mm	24"/610 mm	26"/660 mm	28"/711 mm
	Opgevouwen hoogte	17"/432 mm	17"/432 mm	17"/432 mm	17"/432 mm
	Opgevouwen lengte	32"/813 mm	32"/813 mm	35"/889 mm	35"/889 mm
	Opgevouwen breedte	22"/559 mm	24"/610 mm	26"/660 mm	28"/711 mm
	Hoogte van hoofdsteunverlenging	8"/203 mm	8"/203 mm	8"/203 mm	8"/203 mm
	Hoogte van schouderriem (10°/20°/30°)	10,5-18" / 11,5-17" / 12,5-18" 267-406/ 292-432 / 318-457 mm	13-19/14-20/15-21" 330-483 / 356-508 / 381-533mm	14-20/15-21/16-22" 356-508 / 381-533 / 406-559mm	16,5-24/17,5-25/18,5-26" 419-610 / 445-635 / 470-660 mm
	"Afstellingen van duwhendel"	32-46" / 813-1168 mm	34-47" / 864-1194 mm	34-50" / 864-1270 mm	35-51" / 889-1295 mm
	Gewichtscapaciteit regulair normaal/transport	75/66 lbs (34/30 kg)	100/100 lbs (45/45 kg)	170/170 lbs (77/77 kg)	170/170 lbs (77/77 kg)
	Gewicht van de stoel zonder stangen	29 lbs (13 kg)	30 lbs (13,5 kg)	31 lbs (14 kg)	32 lbs (14,5 kg)
	Kantelhoek van zitting en rugleuning	Zithoek 10°	Opties voor kanteling van 100°, 105°, 110°, 115° van rugleuning		
		Zithoek 20°	Opties van kanteling van 90°, 95°, 100°, 105° van rugleuning		
		Zithoek 30°	Opties van kanteling van 80°, 85°, 90°, 95° van rugleuning		

Productetikettering: Coaster Scout optie voor frame voor alle soorten ondergrond

Waarschuingslabel van stoel

Laat de inzittende nooit zonder toezicht achter. Wanneer de instructies in de gebruikershandleiding niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot ernstig letsel. Als u een vervangende gebruikershandleiding wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar sales.us@convaid.com of bellen naar 844-876-6245.



ANVISA-label
(Alleen Brazilië)



Label met serienummer

Logosticker van transportanker



Verpakkingslabel
(referentie)

Instellen

Inhoud van de doos

Lijst met meegeleverde items:

- Voetenplaten links en rechts
- Bestelde accessoires
- Coaster/Coaster Scout zoals besteld
- Inbussleutel (5/32 inch)
- Gebruikershandleiding

Benodigd gereedschap:

- Tang
- Inbussleutel 5/32 inch
- Inbussleutel 5 mm
- Sleutel 7/16 inch
- Kruiskopschroevendraaier
- Ratel met dopsleutel 3/4 inch

De stoel gebruiksklaar maken

Wanneer u alle bestelde onderdelen heeft, helpen de gebruiksaanwijzingen in deze handleiding u bij het gebruiksklaar maken van de stoel:

Convaid raadt aan om de eerste montage, aanpassingen en installatie te laten uitvoeren door uw Convaid-vertegenwoordiger en/of Convaid-dealer. Als de instructies in deze handleiding nauwkeurig worden opgevolgd, kan een verzorger of begeleider de stoel echter instellen.

De stoel uitvouwen



1. Zorg dat de stoel plat op de grond staat en maak de sluitband los.



2. Druk tegelijkertijd op de grijze knoppen aan weerszijden van de duwbeugel en draai de duwbeugel dan omhoog.



3. Pak de duwhendel met beide handen vast en trek deze omhoog om de rugleuning uit te klappen.



4. De rugleuning en het onderstel van de Coaster kunnen in één beweging worden uitgevouwen. Als u twee stappen gebruikt, duwt u de rugleuning naar voren om het basisframe uit te kunnen klappen.



5. Controleer of de rugleuning en het basisframe hoorbaar vastklikken.



6. Druk tegelijkertijd op de grijze knoppen aan weerszijden van de duwhendel en draai de duwhendel dan tot de gewenste hoogte.



WAARSCHUWING: houd uw vingers uit de buurt van de scharnieren.

De stoel opvouwen



1. Controleer of de wielblokkering is vastgezet.



2. Zorg ervoor dat de opklapbare armsteunen omhoog geklapt en vergrendeld zijn (indien van toepassing).



3. Druk op de grijze knoppen aan weerszijden van de duwhendel en draai de duwhendel nu helemaal naar beneden.



4. Ontgrendel de rugleuning door op de knop van de rugleuning te drukken en duw de rugleuning vervolgens naar voren.



5. Pak beide kanten van het frame vast en trek dan de grepen van het basisframe omhoog en naar achteren naar u toe om de stoel in te klappen.



6. Riem met gespsluiting.

Opmerking: zet de Coaster altijd goed vast op een veilige plaats wanneer u deze vervoert in een voertuig

De stoel tillen/dragen



1. Zorg dat de Coaster correct is ingevouwen en dat de sluitband vastzit.



2. De Coaster kan worden gedragen aan de onderdelen aan de zijkant van het onderstel.



3. De Coaster kan ook worden gedragen aan de zittingbeugel onder de zittingbekleding.

Opmerking: gebruik altijd beide handen om de stoel veilig op te tillen of mee te nemen. Draag de stoel niet aan de bekleding of accessoires.




WAARSCHUWING: zet de stoel altijd vast met de sluitband als u deze vervoert.

Montagehandleiding


Een juiste zithouding stimuleert een goede houding, wat op zijn beurt de bloedsomloop, ademhaling en spijsvertering bevordert. Neem de tijd om de stoel goed af te stemmen op de gebruiker. Als de gebruiker niet in de juiste houding zit, kijk dan in het hoofdstuk Accessoires van deze handleiding om te kijken of één of meer van onze accessoires kunnen helpen om de houding te verbeteren. Raadpleeg anders een fysiotherapeut. Een onjuiste zithouding kan problemen veroorzaken. Raadpleeg voor meer informatie een fysiotherapeut of arts.

Hoogte van de rugleuning

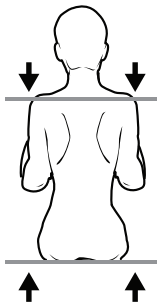


De hoogte van de rugleuning varieert afhankelijk van het type stoel en de breedte van de zitting. Er zijn hoofdsteunverlengingen verkrijgbaar als extra hoogte nodig is om het hoofd te ondersteunen. Om de rugleuninghoogte te bepalen, meet u de afstand van de zitting tot de bovenkant van de schouder of het bovenste deel van het hoofd terwijl de betreffende persoon zit.

Breedte van de zitting

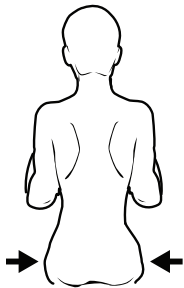

Als de zitting de de juiste breedte heeft, kan de gebruiker comfortabel zitten en worden problemen voorkomen. Meet de afstand van heup tot heup terwijl de gebruiker op een vlak oppervlak zit. De gebruiker moet genoeg ruimte hebben om te voorkomen dat heupen en dijnen tegen het frame schuren. De zitting mag echter niet te breed zijn, anders zal de gebruiker heen en weer schuiven en kan de houding nadelig beïnvloeden. De breedte van de zitting van de Coaster wordt gemeten vanaf de buitenkant van de zittingbuizen.

Diepte van de zitting

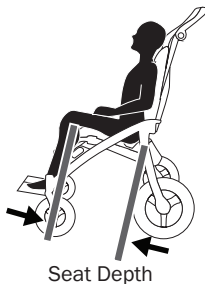

Meet de afstand van het achterste deel van de billen tot de achterkant van de knie. Trek hier 1 - 2 inch (3 - 5 cm) vanaf om voldoende ruimte over te houden tussen de zitting en de achterkant van de knie.


Diepte van zitting aanpassen



1. Om de diepte van de zitting te verstellen, verwijdert u de schroef uit de bekleding van de voorstoel waarmee deze is bevestigd aan de voorste bevestigingen met een kruiskopschroevendraaier.



2. Verwijder de bekleding van de zitting.

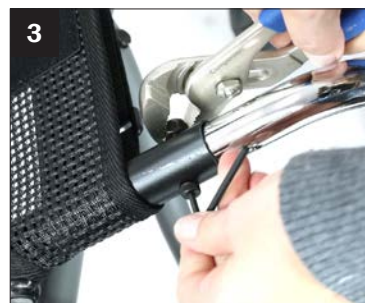

3. Maak de verlengbout van de zitting los en stel de diepte van de zitting in op de gewenste positie door de voorstang te bewegen of de voorstang te vervangen door een langere versie



4. Lijn de gaten uit en bevestig de bout en de moer opnieuw in de buizen van de zitting. Herhaal de stappen 3 en 4 aan de andere kant.



5. Installeer de steunband (als de diepte van de zitting is verlengd).
Opmerking: zorg dat de ruwe, glanzende kant van de riem naar buiten wijst.



6. Plaats de bekleding van de zitting weer terug en bevestig dan de schroeven aan beide kanten.

Positie van de standaard tweedelige bekleding

Opmerking: de bekleding van de onderste zitting is met klittenband bevestigd aan de bekleding van de rugleuning. Dit is bedoeld om de speling in het stoelpaneel op te vangen nadat de diepte van de zitting is afgesteld. Het is niet de bedoeling dat de stoelbekleding naar beneden helt.

Trek niet te veel aan het klittenband van de stoelbekleding om deze aan de bekleding van de rugleuning te bevestigen.

Maak het klittenband van de bekleding van de zitting losjes vast aan de bekleding van de rugleuning wanneer de gebruiker correct zit.

Een te grote overlap van het klittenband tilt de stof van de zitting op en duwt de heupen naar voren. Hierdoor ontstaat een slechte houding en neemt de diepte van de zitting af.


Als het klittenband juist is bevestigd, biedt dit ruimte voor de heupen en wordt de volledige diepte van de zitting gebruikt.




Corrigeren

De stoel instellen en afstellen


Kantelen en achteroverleunen

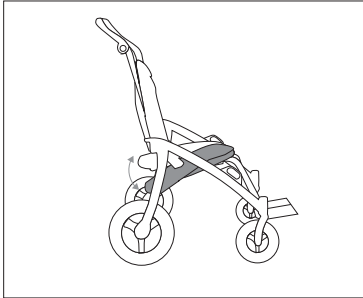

Kantelen: als u de kanteling aanpast, verandert de zithoek. Het aanpassen van de zithoek beïnvloedt de hoek van de rugleuning.

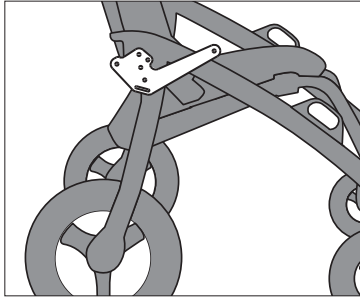


Plaats kantelplaat: onder de bekleding aan de achterkant van de zitting.

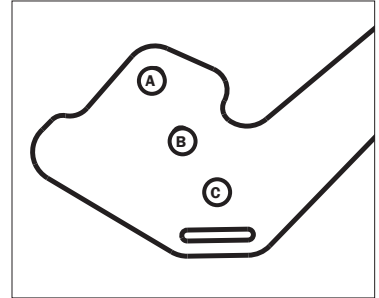


3. Kantelhoekgaten:


- A:** 10°
- B:** 20°
- C:** 30°

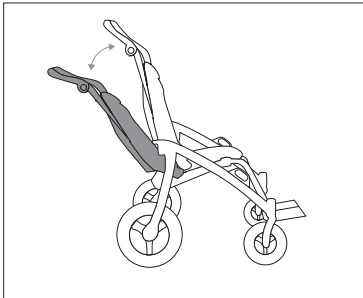

Rugleuning: als u de rugleuning aanpast, verandert de hoek van de rugleuning.

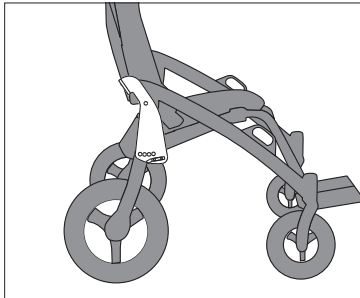

Plaats van de rugleuningplaat: onder de bekleding aan de onderkant van de rugleuning.

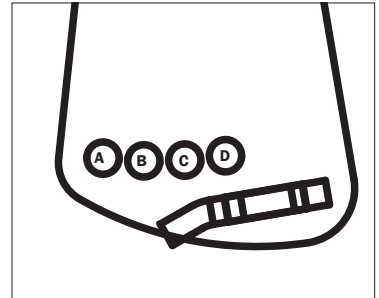

3. Hoekgaten voor de rugleuning:

De hoek van de rugleuning is afhankelijk van de zithoek.

Kantelhoek 10°

A: 115° **B:** 110° **C:** 105° **D:** 100°

Kantelhoek 20°

A: 105° **B:** 100° **C:** 95° **D:** 90°

Kantelhoek 30°

A: 95° **B:** 90° **C:** 85° **D:** 80°

Zithoek (kanteling) aanpassen



1. Maak het klittenband van de bekleding van de zitting los van de bekleding van de rugleuning om de kantelplaten aan beide kanten van het basisframe volledig bloot te leggen.



2. Gebruik een inbussleutel 5/32 inch en een tang om de moer en de bout te verwijderen waarmee de kantelplaat aan de stoelbuizen is bevestigd.



3. Gebruik de moersleutel om de moer vast te houden terwijl u de bout los draait. Verlies de afstandshouder niet.



4. Zet de zitting in de gewenste hoek (zie het hoofdstuk De zitting instellen en afstellen) en zet de moer en de bout dan weer terug. Herhaal dit aan de andere kant.



5. Maak het klittenband van de bekleding van de zitting weer vast aan de bekleding van de rugleuning.



Waarschuwing: zorg dat de bouten goed vastzitten voordat u de Coaster gebruikt.

Opmerking: het aanpassen van de kantelhoek van de zitting kan van invloed zijn op de hoogte en de hoek van de rugleuning van de zitting.

Rugleuning (rughoek) afstellen



1. Klap de rugleuning neer door de knop van de rugleuning in te drukken en de rugleuning naar voren te duwen.



2. Maak de haak en het klittenband van de bekleding van de bekleding van de zitting los van de rugleuning om de rugleuningplaten aan beide kanten van het basisframe volledig bloot te leggen.



3. Gebruik een inbusleutel van 5/32 inch en één van 5 mm om de bout te verwijderen waarmee de rugleuningplaat is verbonden met de zijscharnierplaat.



4. Plaats nu in de gewenste stand en zet de bout terug. Zie het hoofdstuk De zitting instellen en afstellen voor de juiste hoek van de rugleuning. Herhaal vervolgens de stappen 3 en 4 aan de andere kant.



5. Pak de duwhendel met beide handen vast en trek deze omhoog om de rugleuning uit te klappen.



6. Maak het klittenband van de bekleding van de zitting weer vast aan de bekleding van de rugleuning.



Waarschuwing: zorg ervoor dat de bouten goed vastzitten voordat u de Coaster gebruikt.

Opmerking: het aanpassen van de hoek van de rugleuning kan invloed hebben op de diepte van de zitting.

Rugleuning met verstelbare spanning



1. Om de rugleuning met verstelbare spanning aan te passen, maakt u de klittenbandjes los en trekt u deze vervolgens naar de gewenste positie.



2. Maak de klittenbandjes weer vast nadat de aanpassingen zijn aangebracht.



3. Herhaal stap 1 en 2 voor elke set riemen.

Stangen voor kiepbeveiliging en drempelhulp aan de achterkant



1. Om de stang voor de kiepbeveiliging te monteren, plaatst u de stang op één lijn met het uiteinde van de ronde framebuis naast het achterwiel.



2. Druk op de borgpen terwijl u de stang voor kiepbeveiliging op de ronde framebuis plaatst. Druk dan totdat de borgpen door het gat in de ronde framebuis klikt.



3. Herhaal stappen 1 en 2 voor de andere kant. Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om de stangen voor kiepbeveiliging te verwijderen.

Opmerking: de drempelhulp is een standaardfunctie in Duitsland

Opmerking: de drempelhulp wordt op dezelfde manier gemonteerd als de stang voor kiepbeveiliging aan de achterkant. Zorg dat de drempelhulp schuin omhoog wijst.



WAARSCHUWING: het gebruik van stangen voor kiepbeveiliging wordt aanbevolen als de gebruiker minder weegt dan 50 lbs (22,5 kg).



Zwenkwielblokkering



1. Om de zwenkwielblokkering in te schakelen, drukt u op de knop bovenop het mechanisme voor zwenkwielblokkering.



2. Druk op het metalen lipje aan de onderkant van het mechanisme voor zwenkwielblokkering om het uit te schakelen.

Opties voor hoofdpositionering

Hoofdsteunverlenging




1. Steek de verlengbuizen van de hoofdsteun in de hoofdsteunbeugels en duw ze dan naar beneden.


Occi-hoofdvleugel



1. Bevestig de Occi-hoofdvleugel op de gewenste hoogte door de touwtjes door de ogen te steken.

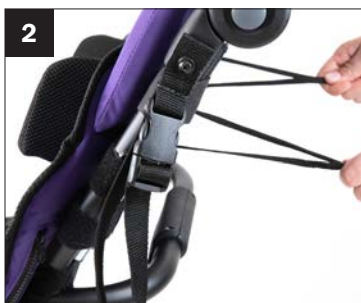

2. Maak de hoofdvleugels vervolgens vast door veters door de ogen te steken en vast te maken.

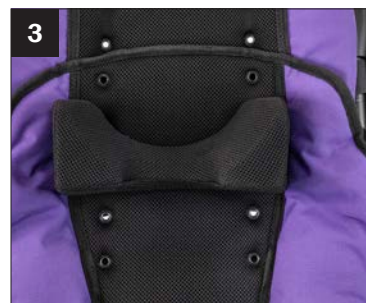


3. Occi-hoofdvleugel op zitting gemonteerd.

Gewatteerde hoofdvleugels



1. Bevestig de gevoerde hoofdvleugels op de gewenste hoogte door de klittenbanden rond de achterkant van het frame te wikkelen.

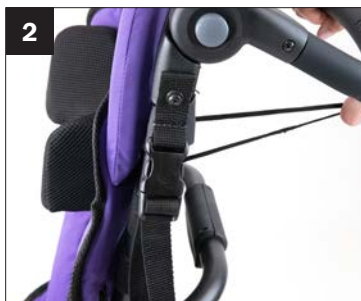

2. Maak de hoofdvleugels vervolgens vast door veters door de ogen in de rugleuning van de stoelbekleding of de hoofdsteunverlenging te steken en deze vast te maken.



3. Gewatteerde hoofdvleugel gemonteerd op de stoel met behulp van klittenband en veters.

Opties voor romppositionering

H-harnas met gewatteerde hoezen



1. Om het H-harnas te bevestigen, steekt u de bout aan het uiteinde van de riem door het oog in de bekleding van de rugleuning.




2. Om de hoogte van het H-harnas te verstellen, draait u de knop met schroefdraad aan de achterkant van de stoelbekleding los. Steek de bout aan het uiteinde van de riem door het oog in de bekleding van de rugleuning en zet de knop met schroefdraad dan weer vast.




3. H-harnas op de stoel gemonteerd.

Opmerking: de gekozen ogen moeten zich op gelijke hoogte bevinden met of hoger zijn dan de bovenkant van de schouders. Kies een oog dat de gebruiker goed beveiligd zonder dat de riem langs het gezicht of de nek schuurt.

Ondersteuningsvest voor de volledige romp

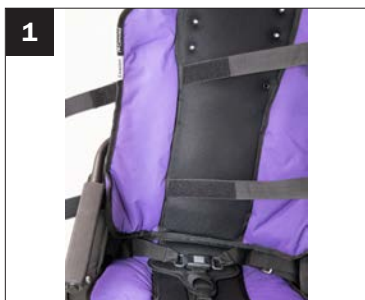

1. Bevestig het vest aan de stoel door de klittenbanden rond de rugleuning van de stoel te wikkelen en stevig vast te maken.

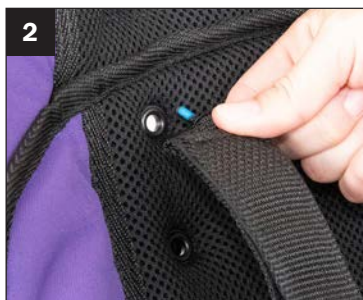

2. Schroef dan de bovenkant van de schouderriemen met de handknop in de ogen van de bekleding van de rugleuning en draai deze vast.




3. Stel de zijriemen af voor een goede pasvorm.


Rugsteun met verstelbare hoogte en spanning




1. Maak het klittenband van de hoes los.

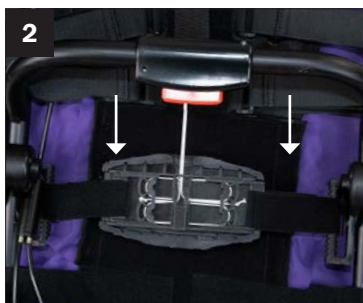


2. Om de hoogte van de rugleuning in te stellen, maakt u de riemen aan weerszijden van de kunststof rugleuning los.

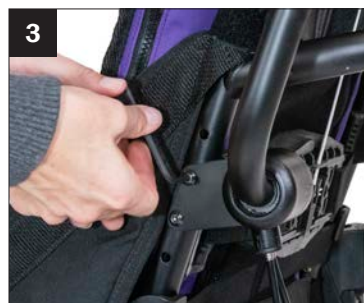

3. Indien nodig voor extra hoogteaanspassing, kunt u u de bout losdraaien waarmee de positieversteller voor de rugleuning op het frame is bevestigd.

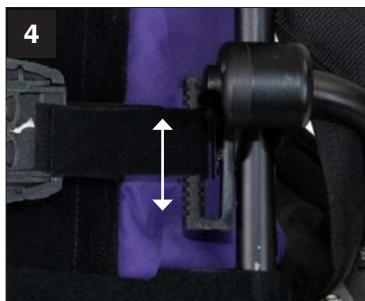

4. Verplaats de hardware naar de gewenste hoogte op het achterframe en draai de bouten vervolgens weer vast.

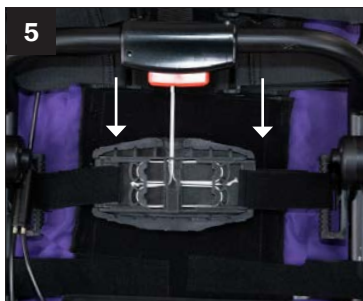

5. Trek de riemen aan weerszijden van de kunststof rugleuning strak. Zorg er bij het vastmaken van het klittenband voor dat de bewegende onderdelen van de rugleuning elkaar in het midden raken.



6. Pas de spanning aan richting de rug van de gebruiker door het lipje omhoog te trekken en de klittenband stevig vast te maken aan de achterkant van de verstelbare rugbekleding op het juiste spanningsniveau.

Zijpanelen



Opmerking: Wanneer de kanteling en rughoekverstelling worden aangepast, moeten mogelijk ook de zijpanelen worden aangepast om de hoek tussen de stoel en de rugleuning niet te beperken. Gebruik de klittenbandriem voor deze aanpassing, voorafgaand aan gebruik.

Stoelverkleiner



Opmerking: Raadpleeg het instructieblad, geleverd met stoelverkleiner, voor de installatiehandleiding.

Opmerking: De zijpanelen zijn vereist om de stoelverkleiner te bevestigen.

Opties voor voet- en beenpositionering

Laterale dijbeensteun (adductor)



1. De adductor wordt bevestigd met klittenbanden aan beide kanten. Deze worden onder de zitting gevouwen en vastgemaakt.



2. Kruis de adductorflappen over de dijnen van de patiënt.



3. Wikkel de riemen rond de zijkanten van het achterframe en maak ze dan vast met de gesp.




4. Om de gordel los te maken, drukt u op het midden van de gesp die aan de kruisgordel vastzit en waarmee de kruisgordel aan beide gordels vastzit.

Opties voor voet-en beenpositionering

Laterale dijbeensteun (adductor)



1. De adductor wordt bevestigd met klittenbanden aan beide kanten. Deze worden onder de zitting gevouwen en vastgemaakt.

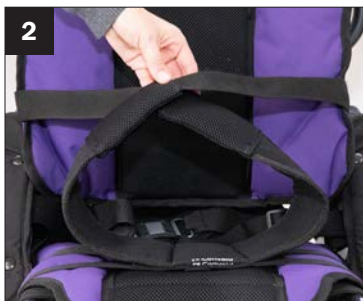

2. Kruis de adductorflappen over de dijnen van de patiënt.




3. Wikkel de riemen rond de zijken van het achterframe en maak ze dan vast met de gesp.


Mediale dijbeensteun (abductor)



1. De abductor wordt bevestigd met klittenbanden aan beide kanten. Deze worden onder de zitting gevouwen en vastgemaakt.

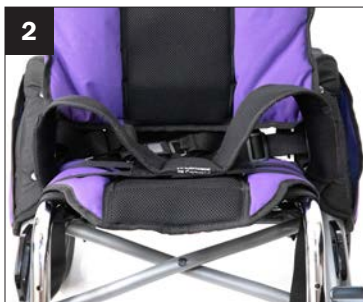

2. Wikkel de abductorflappen van binnen naar buiten over de dijnen van de gebruiker.

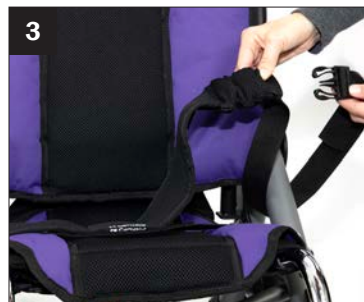

3. Maak de gespen vast rond het onderaan de zijken van het frame.

Voetdragers

Voetriemen kunnen schuin over de voet worden gelegd om de hele voet vast te zetten. Ze kunnen ook worden omgevormd tot eenvoudige enkelbanden.



1. Haal het riempje door de voetplaat door de voetriem te bevestigen.



2. Kruis de adductorflappen over de dijnen van de patiënt.



3. Bevestig de riem met een kruiskopschroevendraaier aan de onderkant van de voetplaat.

Opmerking: voor het bevestigen van optionele voetriemen en/of bevestigingsbanden te monteren wordt dezelfde schroef gebruikt.

Bevestigingsband voor voetenplaat

De bevestigingsband houdt de twee voetplaten bij elkaar om te voorkomen dat ze op en neer klappen.



1. Om de voetplaten vast te zetten, gespt u de linker- en rechterriem aan elkaar.



2. Om de bevestigingsband van de voetplaat te verwijderen, draait u de schroef aan de onderkant van de voetplaat los met een schroevendraaier.

Hoogteafstelling voor voetenplaat

De hoogte van het zitvlak tot de voetenplaat wordt gemeten vanaf de achterkant van de knie tot de onderkant van de hiel. Voeten of hielen moeten comfortabel op de bovenkant van de voetenplaat rusten.

De hoogte van alle Convaid-voetenplaten is verstelbaar. Voetenplaten kunnen worden weggedraaid voor toegang of om de stoel in te klappen.



1. Trek aan de ring om de borgpen te verwijderen die de voetenplaat op zijn plaats houdt.



2. Beweeg de voetenplaat omhoog of omlaag.



3. Lijn de gaten uit en plaats de vergrendelpen door de gaten in de buis

Extra hoogteafstelling voor voetenplaat

Als de hierboven beschreven minimale hoogteafstelling van de voetenplaat onvoldoende is, kunnen extra aanpassingen worden gedaan.



1. Trek de borgpen eruit.



2. Verwijder de verlengbuis van de voetenplaat uit de voorste stangen.



3. Druk op de veerknop.



4. Trek vervolgens de stang van de voetenplaat uit de behuizing van de verlengbuis.



5. Steek de voetenplaat in het tegenoverliggende uiteinde van de behuizing van de verlengbuis en laat de veerknop vervolgens vastklikken.



6. Plaats de verlengbuis van de voetenplaat terug in het frame en zet deze dan vast met de borgpen.



WAARSCHUWING: houd uw vingers uit de buurt van de afstelgaten


Individueel hoekverstelbare voetplaten

Om de minimale stoel- tot voetsteunhoogte aan te passen:

1. Draai en verwissel de afzonderlijke voetsteunassemblages.
2. Gebruik een 5/32" inbussleutel om de moeren en bouten van elke voetsteun los te maken.
3. Schuif de voetsteun uit en stel de vergrendelpen in op de bovenste vergrendelpositie.
4. Bevestig de voetsteunen opnieuw in de gewenste hoek.
5. Draai de steunen opnieuw aan.
6. Stel in op de gewenste hoogte.


Opmerking: De vergrendelpen moet in de vergrendelingspositie staan.

Opmerking: Verhoogde beensteun vereist.

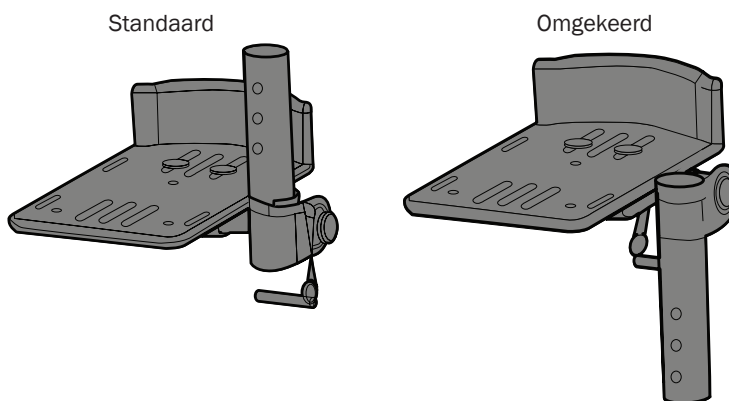

Diepteafstelling voor voetenplaat


De diepte van de voetenplaten van alle Coaster-stoelen is verstelbaar.

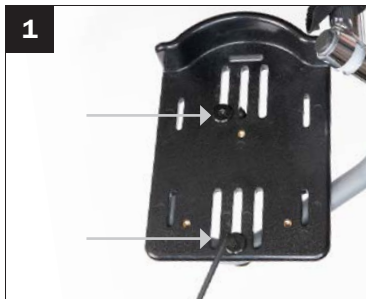

1. Gebruik de inbussleutel van 5/32 inch om de twee bouten aan de bovenkant van de voetenplaat los te draaien.



2. Schuif de voetenplaat naar voren of naar achteren tot de gewenste diepte.

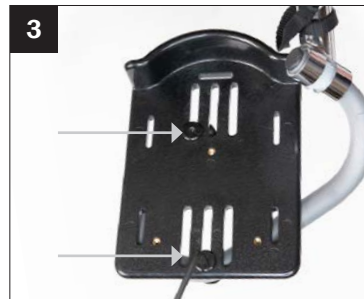


3. Draai de bouten weer vast.

Voetenplaten met verstelbare hoek

Voetenplaten met verstelbare hoek kunnen naar voren en opzij worden verplaatst en verticaal en horizontaal gedraaid.




1. Om de hoek aan te passen, verwijdert u de bouten op de voetenplaat met een inbussleutel. Verplaats de voetenplaat nu naar de gewenste stand.

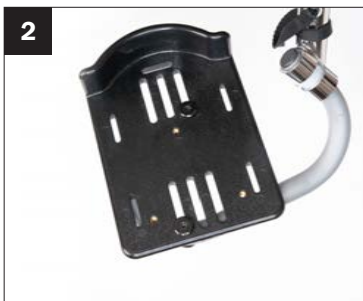

2. Plaats de bouten en draai ze vast met de inbussleutel van 5/32 inch.


Volledig gewatteerde voetplateau (enkelvoudige voetsteun vereist)

Om de hoes van het voetplateau op de enkelvoudige voetsteun te installeren:

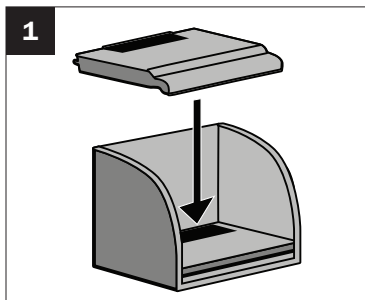


1. Bevestig de hoes van het voetplateau aan de basis van het voetplateau met klittenband.


Opmerking: Zorg ervoor dat de voorflap van het kussentje naar voren is gericht bij het bevestigen van het kussentje.

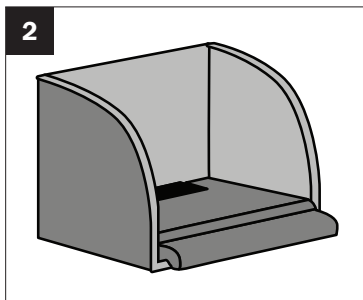

2. Bevestig het kussen aan het voetplateau door de voorflap van het kussen onder het voetplateau te wikkelen.

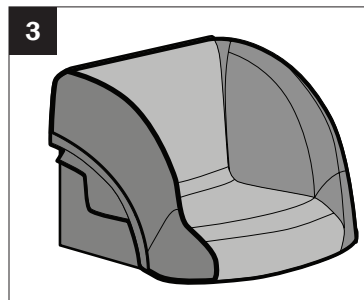

3. Nadat u het kussen aan het voetplateau hebt bevestigd, bevestigt u de hoes door deze over de basis van het voetplateau te wikkelen.

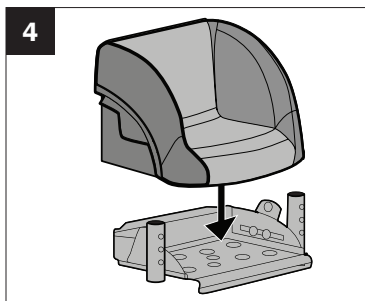

4. Bevestig de hoes van het voetplateau aan de voetsteun met behulp van de meegeleverde klittenbandstrip.

Enkelvoudige hoekverstelbare opklapbare voetsteunen



1. Om de hoogte van de voetenplaat uit één stuk verder af te stellen, verwijdert u de voetenplaat van de voorste buizen.




2. Verwijder de achterste bout en moer aan beide kanten van de voetenplaat uit één stuk.



3. Draai de bout en moer om, zodat de dop van de bout aan de buitenkant zit van de voetenplaat uit één stuk.



4. Bevestig de bout en moer weer aan de beide kanten van de voetenplaat uit één stuk.

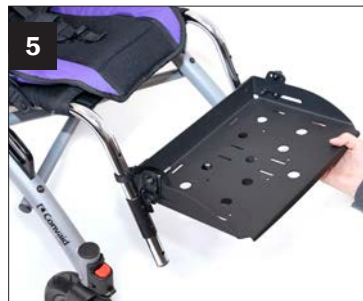

5. Zie stap 3, en draai beide buizen van de voetenplaat naar beneden totdat deze volledig zijn omgedraaid. Zet ze nu terug op de voorste stangen en zet vast met borgpennen.

Kuitpaneel



1. Leg het kuitpaneel plat neer en maak de klittenbandsluitingen los.



2. Maak de riempjes met klittenband vast aan de voorkant.



3. Plaats het kuitpaneel dwars op de stoel en bevestig de klittenbanden aan de tegenoverliggende voorstangen.

Vaste voorstangen vervangen door verhoogde beensteun



1. Verwijder de bekleding met een kruiskopschroevendraaier om bij de verlengbout en moer van de zitting en de voorstangbevestiging te komen.



2. Om de vaste voorstangen te verwijderen, verwijdert u de verlengbout en -moer van de zitting met een inbussleutel van 5/32 inch en een tang.



3. Verwijder de vaste voorstang van de zittingbuis.



4. Breng de verhoogde beensteun (Elevating Leg Rest, ELR) op één lijn met de naar buiten wijzende plastic knop en schuif deze in de zittingbuis.



5. Zet de verlengbout en -moer van de zitting weer vast met een inbussleutel van 5/32 inch en een tang wanneer de voorstang op de juiste diepte van de zitting is gemonteerd.



6. Plaats de bekleding terug en maak de schroef vast met een kruiskopschroevendraaier door de band van de stoelbekleding in de voorstang. Om te wisselen tussen een verhoogde beensteun en vaste voorstangen, volgt u stappen 1 - 5 in omgekeerde volgorde.

Coaster Scout - Alle soorten ondergrondoptie

Handrem voor begeleider – Alleen bij alle soorten ondergrond




1. Om de handrem in te schakelen, trekt u aan de hendel in de richting van de stuurstang.



2. Duw de rode hendel omhoog om de rem te blokkeren en duw de zwarte handrem omlaag om de rem te ontgrendelen.

Handremblokaanpassing voor alle soorten ondergrond

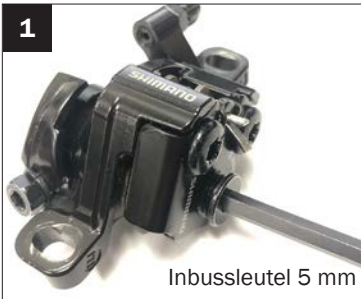


1. Draai de inbussleutel van 5 mm rechtsonder om het blok dichterbij de schijf te brengen (het wiel moet draaien en mag niet klemmen). Deze procedure kan worden uitgevoerd terwijl het wiel is gemonteerd.


Handrem voor begeleider voor alle soorten ondergrond - Slijtage van Remblokken

Remblokken mogen niet dunner zijn dan 0,078 inch (2 mm). Onder deze dikte moeten ze worden vervangen.

Handremblokvervanging voor alle soorten ondergrond

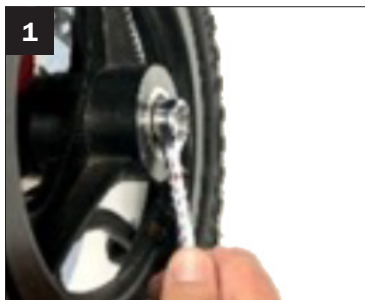

1. Draai het wiel los met een sleutel van 5/8 inch.

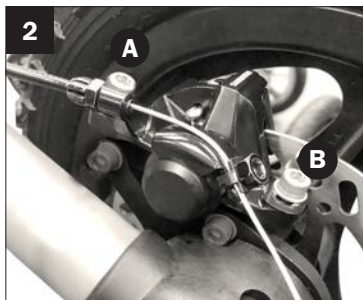

2. Verwijder de remklauwen van de assteunen door de zeskantbouten (A) en (B) los te draaien met een inbussleutel van 5 mm.



3. Verwijder de splitpen met een tang.



4. Om de remblokken te verwijderen, duwt u de remblokken door de remklauw.



5. Vervang de blokken.



6. Plaats de remblokken terug in de remklauw. Volg stappen 1-3 in omgekeerde volgorde

Opmerking: een remsysteem heeft tijd nodig om in te lopen. In het begin kan het wrijven van het blok over de schijf geluid veroorzaken.

Spanningsaanpassing voor handrem voor begeleider voor alle soorten ondergrond



1. Identificeer de handremkabel van de geleider. Deze is alleen te vinden op het Coaster Scout-model.



2. Het afstellen van de spanning op het schroefdeel aan het uiteinde van de remkabel via de spanningsknop kan voldoende zijn.



3. Als meer afstelling van de spanning nodig is, gebruikt u een inbusleutel van 5 mm om de bout los te draaien waarmee de remkabel aan de schijfrem is bevestigd. Zet de bout weer vast zodra de remkabel de juiste spanning heeft.



4. Als de remkabel correct gespannen is, worden de wielen volledig geblokkeerd als de rem ingeschakeld is, maar kunnen de wielen goed draaien als de rem niet ingeschakeld is.

Wielen

Achterwielen met snelkoppeling



1. Om het wiel te verwijderen, houdt u de wioldop in het midden ingedrukt.




2. Pak het wiel vast en trek het opzij.

Wielen monteren



1. Controleer of de wielblokkering niet is vastgezet.

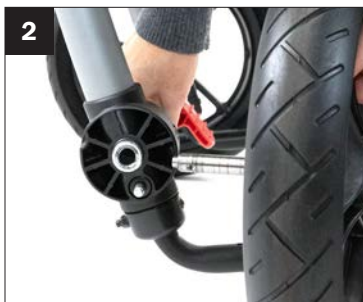

2. Controleer vóór de montage of de as vrij is van vuil.



3. Houd de wioldop in het midden ingedrukt.



4. Lijn de as uit met de wielstang.




5. Schuif de wielas op de wielstang totdat deze vastklikt.




WAARSCHUWING: zorg dat de wielen correct zijn gemonteerd. U hoort een 'klik' wanneer het wiel vastklikt.

Afstellen van los voorwiel

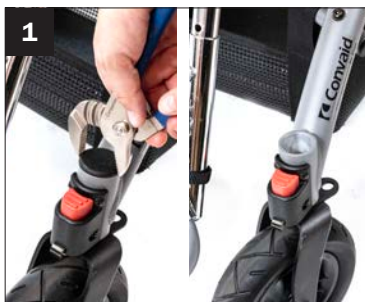

1. Als de voorwielen los gaan zitten, verwijdert u de dop van de zwenkwielstang.

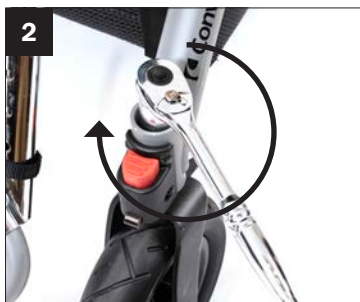

2. Gebruik een ratel van $\frac{3}{4}$ inch om de stangmoer vast te draaien. Stel de stangmoer rechtsom af tot deze stevig vastzit.



3. Plaats de dop van de zwenkwielstang dan weer terug.

Wielblokkering vergrendelen en ontgrendelen



WAARSCHUWING: neem de juiste zorg en het juiste onderhoud in acht voor een goede werking van de met de voet bediende wielblokkeringen.



WAARSCHUWING: gebruik bij het bedienen van de wielblokkering niet te veel kracht bij het vastzetten van de vergrendelingen met uw voet. Er is slechts lichte druk nodig om de vergrendelingen volledig in te schakelen.



WAARSCHUWING: breng wekelijks teflonspray aan op de onderdelen van de wielblokkering om een goede werking te garanderen.



WAARSCHUWING: door overmatige kracht of onvoldoende onderhoud kan kunnen de wielblokkeringen defect raken.



1. Ontgrendelen: duw de voetbediening van de wielblokkering omhoog.



2. Vergrendeling inschakelen: duw de voetbediening van de wielblokkering omlaag.

Accessoires

Hoofdsteunhoes (kap)



1. Lijn de bevestigingsklemmen van de kap uit met de bovenste buis aan de achterkant van de stoel.



2. Druk met de palm van uw hand op de clips totdat het frame van de kap vastklikt.



3. Om vast te zetten, legt u de klittenbandjes rond de zijframes en bevestigt u deze in de buurt van drukclips.



4. Om te openen, pakt u de bovenkant van de kap vast en trekt u deze naar voren.



WAARSCHUWING: volg de instructies altijd nauwkeurig op en vermijd verdraaien bij het bevestigen of verwijderen van de kap om te voorkomen dat de clips kapot

Infuusstandaard



1. Bevestig de infuusstandaard stevig aan de zijkant van de Coaster-mobiliteitsbasis met behulp van een 5/32" inbussleutel.



2. Om de verticale oriëntatie van de infuusstandaard aan te passen, drukt u op de knop en draait u omhoog. Om de hoogte te verlengen maakt u de vergrendeling los en bevestigt u de vergrendeling daarna opnieuw.

Opmerking: De infuusstandaard kan worden opgevouwen of verwijderd wanneer deze niet in gebruik is.


Regenhooes



1. Pak de bovenkant van de regenhoes vast en wikkel deze rond de bovenkant van de kap.




2. Plaats de regenhoes om de stoel en trek de onderkant van de regenhoes over de voetenplaat.

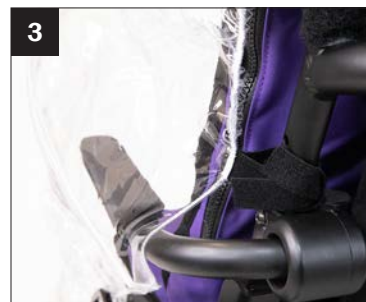

3. Zoek de twee riempjes aan de rechter- en linkerkant van de regenhoes.



4. Maak de regenhoes vast aan de stoel door de riemen rond de beide kanten van het frame te wikkelen.

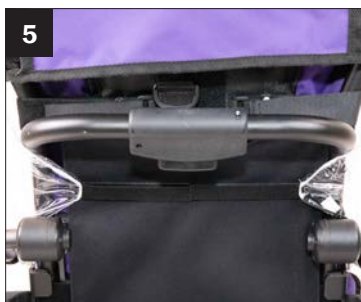

Opmerking: bij kleinere stoelen kunnen de riemen achter de stoel aan elkaar vastgemaakt worden voor een strakkere pasvorm.

Kap van muskietennet



1. Pak de bovenkant van het muskietennet vast en wikkel deze om de bovenkant van de kap. De bovenkant is herkenbaar aan de twee zwarte bandjes.




2. Plaats het muskietennet rond de rolstoel en trek de onderkant van het muskietennet over de voetenplaat.



3. Zoek de twee klittenbanden aan de rechter- en linkerkant van het muskietennet.



4. Bevestig het muskietennet aan de rolstoel door de klittenbanden rond de beide kanten van het frame van de rolstoel te wikkelen.

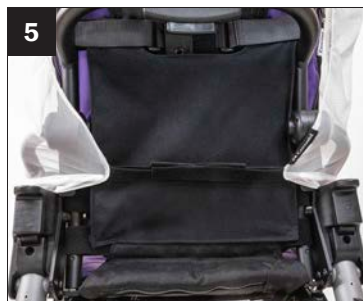


Opmerking: bij kleinere stoelen kunnen de riemen achter de stoel aan elkaar vastgemaakt worden voor een strakkere pasvorm.

In hoogte verstelbare armleuningen



1. Om de hoogte van de armsteun aan te passen, plaatst u de armsteun rechtop.

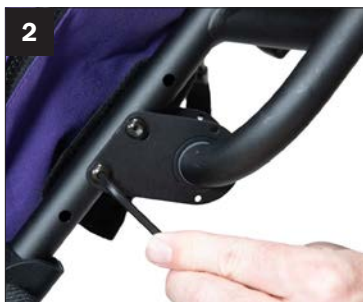

2. Gebruik een inbussleutel van 5/32" om de plaatsing van de bout en de armsteunklem op en neer te bewegen op de buizen van het achterframe.

Schuimset

Ingebouwde bekledingsritsen ontworpen voor extra vulling en positionering. Positioneringswiggen/schuimset bevat vijf positioneringsschuim-inzetstukken.



1. Twee stoelpositioneringswiggen.



2. Twee rugpositioneringswiggen



3. Een vlak inzetstuk dat is geïnstalleerd via de rits achter de stoel/rugleuning.

Steunvlak voor bovenste ledematen (blad)



1. Druk op de veerknop aan de onderzijde van de arMLEuning totdat de buis van de werkbladbevestiging naar buiten schuift.



2. Trek de buis van de werkbladbevestiging uit en verleng deze totdat deze in de vergrendelde positie staat.



3. Houd het werkblad met beide handen vast, knijp in de zwarte handgrepen en schuif het op de buizen van de werkbladbevestiging.



4. Werkblad geïnstalleerd



5 Om het werkblad te verwijderen, knijpt u in de zwarte handgrepen en schuift u deze van de buizen van de werkbladbevestiging af. Druk vervolgens op de veerknop aan de onderzijde om de buizen van de werkbladbevestiging terug in de arMLEuning te schuiven, in de vergrendelde positie.

Zadeltassen



1. Breng het klittenband van de zadeltas aan rond de buis van het zijframe, tussen de twee drukknoppen.



2. Klik de twee drukknoppen op hun plaats op de twee tegenoverliggende knoppen op het zijframe.



3. Wikkel het achterste klittenband rond de zittingbuis en zet deze dan vast.

Opbergmand voor onder de stoel/mand voor medische benodigdheden



1. Verbind de klittenbandriemen aan de voorkant door deze over de voorste x-beugel van het frame te leggen.




2. Voer het klittenband door de dunne rechthoekige opening aan de onderkant van de kantelplaat. Zet vervolgens vast. Herhaal dit voor de andere kant.



3. Opbergmand onder de stoel gemonteerd.

Opmerking: overschrijd de gewichtscapaciteit van de opbergmand onder de stoel van 25 lbs (11 kg) niet. De mand voor medische benodigdheden kan een gewicht van 50 lbs (22 kg) dragen.

Multifunctionele tas

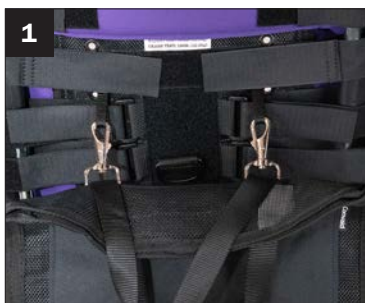

1. Om de multifunctionele tas te bevestigen, gebruikt u de haken van de tas en de riemen aan de achterkant van de rugbekleding.



2. De multifunctionele tas kan worden verwijderd en als draagtas worden gebruikt.



WAARSCHUWING: doe de tas niet te vol; de stoel kan namelijk kantelen als niemand erop zit.


Instructies voor onderhoud, bediening en veiligheid

- LEES ALLE INSTRUCTIES VÓÓRDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT
- VOLG DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ALTIJD OP
- BEWAAR DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK



WAARSCHUWING: • De Coaster-riem moet om veiligheidsredenen altijd worden gebruikt.

- Laat de gebruiker niet zonder toezicht achter.
- Maak de gebruiker niet te strak vast.
- Riemen mogen de ademhaling of bloedsomloop niet belemmeren.
- Zet de wielblokkeringen altijd vast voordat u de stoel loslaat.
- Als de voorste rand van de zitting zich op of vóór het punt bevindt waar de banden de vloer raken, gebruik de buizen aan de voorkant van de zitting dan niet als steun bij het in- of uitstappen. Anders kan de stoel omkiepen.
- Vermijd het gebruik van de voetenplaten voor ondersteuning van het gewicht bij het in- of uitstappen van de stoel.

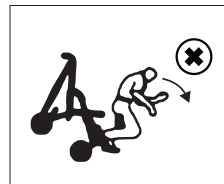

Afvalverwijdering

De verpakkingendoos moet worden bewaard voor eventuele retourzending naar de fabrikant/het servicepunt voor reparatie of onderhoud. Ander verpakkingsafval van papier moet afzonderlijk worden afgevoerd voor recycling. Voor het afvoeren van vervangen onderdelen of van de complete stoel moeten de materialen worden gescheiden in plastic, rubber, staal, aluminium, enz., en afzonderlijk worden afgevoerd voor recycling.

Reserveonderdelen

Als u reserveonderdelen voor uw stoel nodig heeft, bezoek of bel dan Convaid of uw servicedealer. Als het onderdeel niet onder de garantie valt, ontvangt u een schatting van de kosten en, indien nodig, instructies voor het retourneren van de stoel voor reparatie.

Onderhoud aan de stoel

De volgende onderhoudsprocedures moeten regelmatig worden uitgevoerd: controleer uw Convoid-product regelmatig visueel op mogelijke slijtage. Smeer het frame en de bewegende delen in met smeermiddel om ze gemakkelijk te kunnen opvouwen en afstellen.

- a) **Bandendruk:** de luchtdruk in de luchtbanden moet WEKELIJKS worden gecontroleerd, omdat een lage luchtdruk het remvermogen kan beïnvloeden. De aanbevolen luchtdruk staat op de zijkant van de band.
- b) **Assen en bewegende delen:** de assen en bewegende delen moeten WEKELIJKS worden afgeveegd met een licht vochtige doek om stof, vuil en modder te verwijderen. Breng na elke reiniging een klein beetje hoogwaardige teflonspray* aan. GEBRUIK GEEN WD-40, siliconen- of andere sprays om te smeren, omdat deze sprays stof en vuil aantrekken.
- c) **Repareer of vervang** losse, versleten, verbogen, ontbrekende of beschadigde onderdelen vóórdat u de stoel gebruikt.
- d) **Lekke band:** neem in het geval van een lekke band contact op met de klantenservice of de plaatselijke dealer voor specifieke instructies voor reparatie of vervanging.
 * Gebruik een niet-giftig, hypoallergeen, droog smeermiddel voor alle bewegende delen van het frame.

Onderhoudstabel	Wekelijks	Iedere drie maanden	Iedere zes maanden	Indien nodig
Velgen en banden	•			
Wielblokkering en handremmen	•			
Accessoires	•			
Voor- en achterwielassen	•			
Alle bewegende delen reinigen en smeren*°	•			
Riemen, ritsen en klittenbandsluitingen		•		
Bekleding zitting/rugleuning**/op strakheid		•		
ArMLEUNINGEN en schuim (bektele onderdelen)			•	
Frame			•	
Contact opnemen met een Convoid-dealer voor service of reparatie***				•

* Gebruik een niet-giftig, hypoallergeen, droog smeermiddel voor alle bewegende delen van het frame.

** Volg de reinigingsinstructies voor de juiste gebruikershygiëne.

*** **OPMERKING:** reparatie of vervanging van niet-verwijderbare, versleten of defecte onderdelen moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd servicepunt.

° **OPMERKING:** gebruik GEEN WD-40 of andere spray om te smeren op basis van siliconen.

Schoonmaken

Schoonmaken en desinfectie

Om de verspreiding van ziektekiemen te voorkomen, moet u alle delen die in contact komen met de huid regelmatig reinigen met desinfecterende doekjes. Houd het frame droog en smeer alle bewegende delen in met een niet-giftig, hypoallergeen en biologisch afbreekbaar smeermiddel. Na langere opslagperioden en voor verder gebruik moet de hele stoel worden onderhouden, gereinigd en gedesinfecteerd.

Het frame schoonmaken

Het frame moet droog en vrij van vuil worden gehouden en moet worden afgeveegd met een niet-giftig, hypoallergeen en biologisch afbreekbaar doekje. Bewegende onderdelen moeten indien nodig worden ingesmeerd met smeermiddel, zodat ze gemakkelijk kunnen worden ingeklapt en afgesteld.

Wielen en remmen schoonmaken

Na ieder gebruik van de wielen en de remmen moeten vuil en modder worden verwijderd. Voorwerpen van buitenaf kunnen de bewegende onderdelen hinderen. Veeg wielen en remmen indien nodig schoon met een vochtige doek en stel de remmen indien nodig weer af.

Scout-banden reinigen

Gebruik voor het reinigen van de remklauw alleen alcohol of water om schade aan de remafdichtingen te voorkomen.

Stoffen bekleding schoonmaken

De bekleding van de zitting en de rugleuning kan eenvoudig worden verwijderd, gewassen, in de lucht gedroogd en opnieuw bevestigd aan de stoel. Gebruik een normaal wasmiddel voor het wassen van textiel.

Schuimrubberen/gevoerde onderdelen zoals hoofdsteunen/kussens kunnen ook uit de zitting worden gehaald en gewassen of afgeveegd met een vochtige doek. Zorg dat deze helemaal droog zijn vóórdat u ze weer aan de stoel bevestigt. Gebruik een mild wasmiddel om de stof te wassen. Gebruik een zacht wasprogramma met koud water. Ophangen om te laten drogen.



Opslag

Berg de stoel op in een schone, droge ruimte en vermijd langdurige blootstelling aan hitte of vocht. Na langere opslagperioden en voordat de stoel opnieuw wordt gebruikt, moet de hele stoel worden onderhouden, gereinigd en gedesinfecteerd.




Reparaties

Gebruiker: de gebruiker kan verwijderbare onderdelen of accessoires eenvoudig zelf vervangen, bijv. voetsteunen, hiellussen, alle onderdelen van textiel, handgrepen, enz.

Fabrikant/servicepunt: Fabrikant/servicepunt: reparatie of vervanging van permanent bevestigde, versleten of kapotte onderdelen moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd servicepunt. Elk afzonderlijke onderdeel van de stoel kan worden vervangen. Neem contact op met de fabrikant/het servicepunt voor de nodige reparaties. De stoel moet worden verpakt in de originele of een andere geschikte verzenddoos voor retourzending naar de fabrikant/het servicepunt.

Veiligheidsinstructies

- Als iemand in de stoel zit, moeten trappen, roltrappen, steile hellingen en ijzige of gladde oppervlakken worden vermeden.
- Belast de stoel niet te zwaar en hang geen zware voorwerpen aan de handgrepen. Hierdoor kan de stoel omkiepen.
- Controleer de afstellingen op het frame en de accessoires voor positionering regelmatig.
- Gebruik de stoel niet meer als de gebruiker eruit gegroeid is.
- Negeer kleine storingen niet en houd de stoel in goede staat.
- Inspecteer de wielblokkeringen en de remmen regelmatig en stel deze zo nodig af.
- Indien mogelijk en haalbaar moet de persoon de stoel verlaten en in een goedgekeurd voertuigzitzje en/of passagiersveiligheidssysteem plaatsnemen. Als uitstappen niet mogelijk is, gebruik dan echter alleen stoelen in een rijdend voertuig met het Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint System (WTORS) volgens de vereisten van SAE J2249. Volg de instructies van de fabrikant van de bevestigingen zorgvuldig op en raadpleeg het hoofdstuk Transport voor specifieke informatie.
- Als u een stoeprand of trede opgaat, kijk dan naar voren en kantel de stoel naar achteren om de voorwielen over de stoeprand te tillen. Beweeg naar voren en til de achterwielen over de stoeprand.
- Als u van een stoeprand afrijdt, loopt u achterwaarts naar de stoeprand toe. Laat de achterwielen van de stoeprand zakken en loop verder achteruit, waarbij u het gewicht van de voorwielen haalt zodat u deze voorzichtig kunt laten zakken.
- Houd de stoel altijd goed onder controle terwijl u de helling op of af gaat. Vermijd steile hellingen, vooral met een zwaardere inzittende. Ga in geval van twijfel niet verder, tenzij een derde persoon aanwezig is om de stoel onder controle te houden.
- Gebruik de voetbediening van de wielblokkeringen bij het verplaatsen van de gebruiker van of naar de stoel.

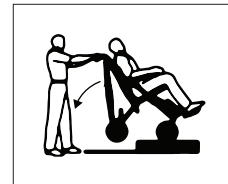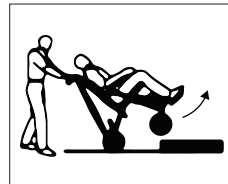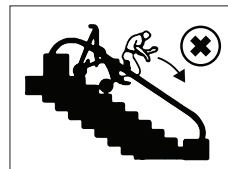


Bekleding verwijderen



1. Om de bekleding van de zitting te verwijderen, verwijdert u het klittenband waarmee de bekleding van de zitting vastzit aan de onderkant van de bekleding van de rugleuning.




2. Verwijder de klittenbandjes onder de stoelbekleding.

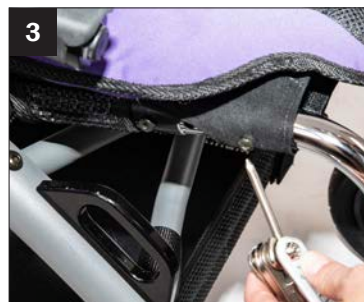

3. Verwijder de schroeven waarmee de stoelbekleding aan de voorstangen is bevestigd met een kruiskopschroevendraaier.




4. Verwijder het klittenband van de stoelbekleding en het gaas aan de onderkant en verwijder vervolgens de stoelbekleding.

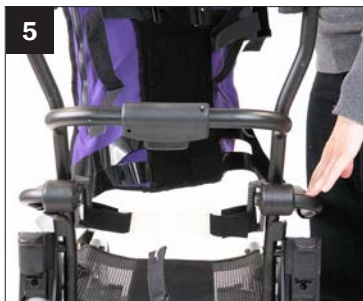

5. Om de rugbekleding te verwijderen, verwijdert u de klittenbandjes waarmee de rugbekleding aan het frame is bevestigd en haalt u de bekleding eraf.

Transport, opslag en afvoeren

Aanbevolen vrije ruimtes in het voertuig

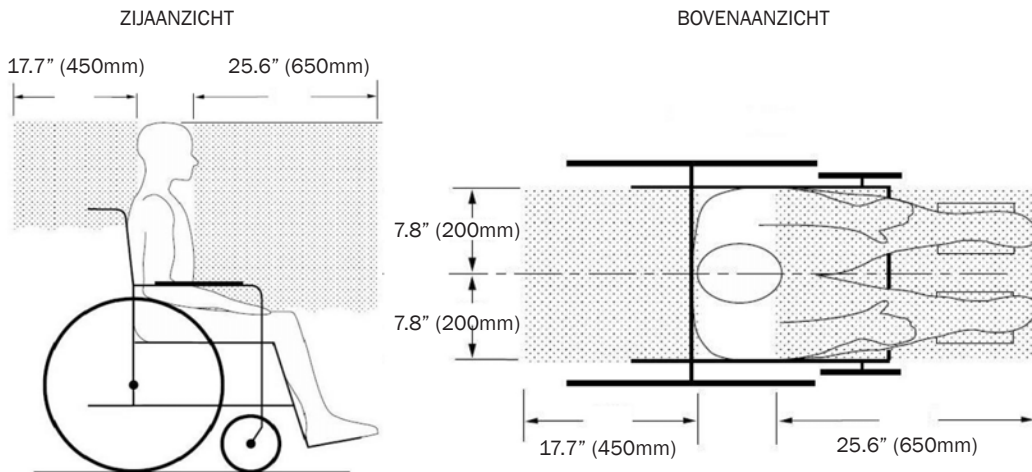

De vrije ruimte achteraan wordt gemeten vanaf het achterste punt van het hoofd van een inzittende. De vrije ruimte vooraan wordt gemeten vanaf het voorste punt van het hoofd van de inzittende.

Zorgen voor vrije ruimte en bescherming

Plaats de stoel zodanig in het motorvoertuig dat er voldoende vrije ruimte voor en achter de inzittende is.




WAARSCHUWING: als er harde of scherpe voorwerpen of onderdelen in de buurt van de stoel zijn, zoals onderdelen van liften of opklapbare stoelen, moeten deze worden afgedekt met zeer sterke energieabsorberende bekleding, om de veiligheid van de inzittende van de stoel en andere passagiers te waarborgen.


De stoel vastzetten voor transport




1. Controleer alle spanbanden op tekenen van slijtage aan de riemen en vervang de banden die versleten zijn. Als er sprake is van slijtage, mag u deze bevestigingsriemen niet gebruiken. Gebruik in plaats daarvan nieuwe bevestigingsriemen.

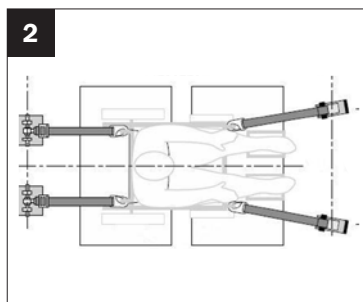


2. Plaats de stoel tussen de voorste en achterste verankeringspunten, zodat de riemen in de juiste hoek kunnen worden vastgezet.

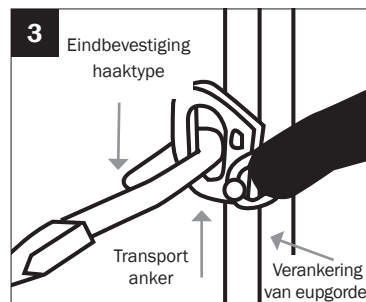


3. Bevestig de bevestigingsriemen aan de 4 bevestigingspunten (haakbeugels) op de poten van de zitting, volgens de instructies van de fabrikant van WTORS.

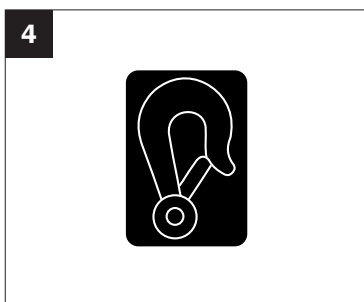

4. Bevestigingspunten worden aangeduid met het symbool.

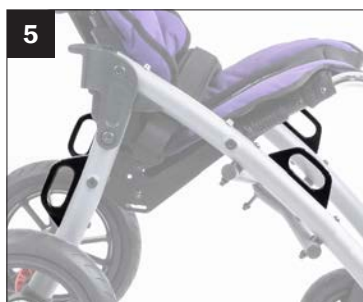

5. Plaats van de bevestigingspunten op de rolstoel.

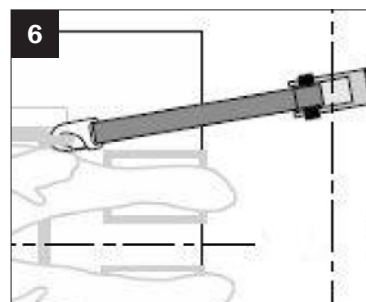


6. Trek de riemen aan zodat deze niet slap hangen en verdeel de spanning over de voorste en achterste spanbanden.

Bij het vastzetten van de Coaster met daarin de gebruiker is het belangrijk dat de WTORS-ankerpunten op de vloer en de wand van het motorvoertuig correct zijn geplaatst volgens de instructies van de WTORS-fabrikant. De stoel moet naar voren gericht in het voertuig worden geplaatst.

De punten voor vloerbevestiging en de stoel moeten aan de volgende eisen voldoen:

- Zorg dat de bevestigingsriemen recht en ongehinderd kunnen lopen van de punten voor stoelbevestiging naar de punten voor vloerbevestiging en
- Zorg dat de voorste riemen schuin naar buiten staan ten opzichte van de zijkanten van de stoel

VOORKEURSLOCATIES VAN PUNTEN VOOR VLOERVERANKERING

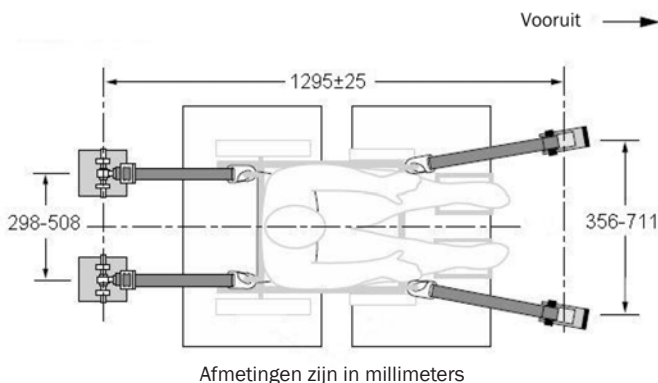


- Zorg dat de achterste riemen recht naar achteren zijn verankerd vanaf de punten voor stoelbevestiging




Voorste riemen zijn naar buiten gericht vanaf de zijkanten van de stoel.



Juiste posities van schouder- en heupgordelbevestigingen en rolstoelbevestigingen.

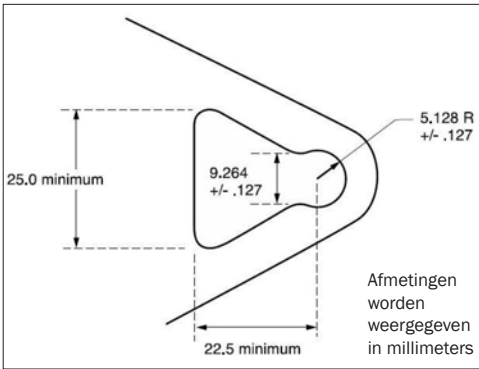

Standaard metalen clip aan de onderkant van de schoudergordel en aan het uiteinde van de optionele, aan een zitting bevestigde heupgordel.

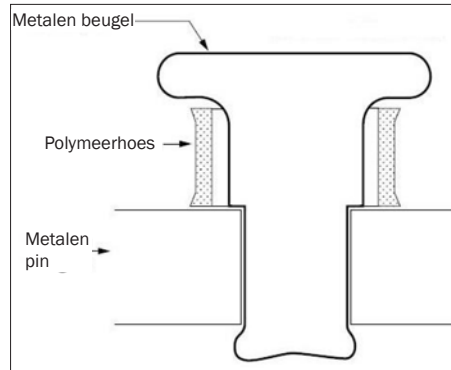

Pen-/busverbinding op de heupgordel of op punten voor stoelbevestiging waar de standaard metalen clip aan wordt bevestigd.


De inzittende van de stoel vastzetten

Uw Convaïd-transportstoel is dynamisch getest met een botsproef in een naar voren gerichte configuratie met behulp van een dummy van de juiste grootte die wordt vastgehouden door zowel een bovenlichaamsgordel (schoudergordel) als een onderlichaamsgordel (heupgordel). Om de kans op hoofd- en borstletsel door contact met voertuigonderdelen te verkleinen, moet u zowel de bovenste als de onderste rompgordels gebruiken.

Uw Convaïd-transportstoel voorziet in het gebruik van een optionele, aan de stoel bevestigde heupgordel. De optionele gordel, die dynamisch is getest in overeenstemming met WC19/7176-19, kan tegen een nominale meerprijs worden besteld bij Convaïd. Om de heupgordel van de stoel te bevestigen, maakt u de metalen clips aan de uiteinden van de heupgordel vast aan de pen-/busverbindingen op de achterste bevestigingspunten van de stoel.

Maak de heupgordel vast over het bekken van de gebruiker vóórdat u de stoel in de autolift laadt. De gebruiker van de stoel moet de optionele heupgordel zo laag mogelijk over het bekken en zo strak mogelijk dragen, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort. De in het voertuig bevestigde schoudergordel kan dan worden vastgeklikt aan de pen-/busverbinding op de heupgordel, vlakbij waar deze aan de stoel is bevestigd. De optionele heupgordel kan onder de stoel worden doorgevoerd, vastgespsd en aangetrokken als deze niet wordt gebruikt.

Als de stoel is aangeschaft zonder de optionele heupgordel of als de gebruiker van de stoel ervoor kiest de gordel niet te gebruiken, moet een in de auto verankerde heup- en schoudergordel worden gebruikt. Net als bij de aan een stoel bevestigde heupgordel is het zeer belangrijk dat de aan een stoel bevestigde heupgordel laag over het bekken wordt geplaatst. De hoek van de heupgordel moet binnen de voorkeurszone van 45° tot 75° vallen ten opzichte van de horizontale zone of binnen de optionele zone van 30° tot 45° ten opzichte van de horizontale zone.

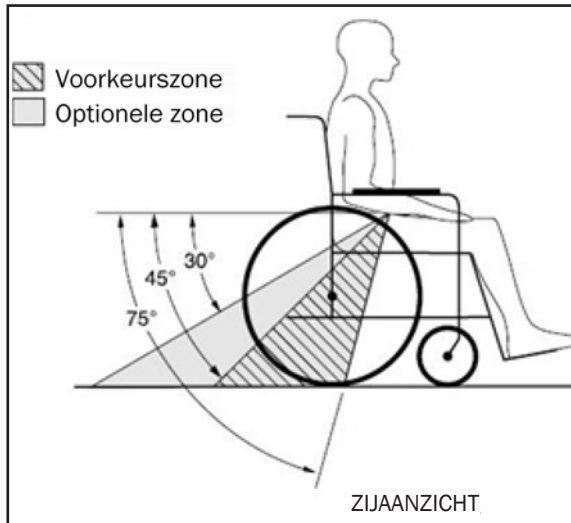

Opmerking: grotere hoeken voor de bekkengordel zijn vooral belangrijk als de bekkengordel niet alleen bedoeld is om de inzittende bij een frontale botsing te beschermen, maar ook ter ondersteuning van de zithouding. Steilere hoeken verminderen de kans dat er een verticale opening ontstaat tussen de gebruiker en de gordel als gevolg van de flexibiliteit van de zittingkussens en de beweging van de gordel. Hierdoor is de kans kleiner dat de gebruiker onder de gordel door glijdt en de gordel omhoog schuift op de zachte buik tijdens normaal gebruik.

Opmerking: grotere gordelhoeken verminderen ook de kans dat de bovenlichaamsgordels de bekkengordel op de buik te trekken bij frontale botsingen.

Zorg dat de schoudergordel over de borst en het midden van één schouder loopt en dat de gordels niet van het lichaam worden gehouden door delen van de stoel, zoals armleuningen of stoelpoten.

Schuif de heupgordel onder de framebuizen direct onder de ellebogen van de gebruiker en trek de gordel strak tegen het bekken. Zorg dat de riem niet gedraaid is en in contact blijft met de schouder en borst van de gebruiker, omdat dit de veiligheid in gevaar kan brengen.

Houdingsgordels en -steunen gebruiken

Accessoires voor positionering zoals gordels voor bekkenpositionering, rompsteunen aan de voorzijde en aan de zijkant kunnen tijdens het vervoer worden gebruikt. Maar deze zijn niet ontworpen om bescherming te bieden tijdens een botsing.

Houdingssteunen en -gordels mogen niet worden gebruikt als bescherming bij een aanrijding en mogen alleen worden gebruikt in combinatie met heup- en schoudergordels die zijn ontworpen voor bescherming in een motorvoertuig en die zijn getest volgens RESNA WC-4-19 en/of ISO 7176-19.

Bladen en andere stoelonderdelen

Om het risico van mogelijk letsel voor de gebruiker van de stoel of andere inzittenden bij een botsing met een motorvoertuig te verminderen, moeten op de stoel gemonteerde accessoires, zoals bladen en ademhalingsapparatuur, tijdens het vervoer worden verwijderd en afzonderlijk worden vastgezet. Gebruik tetherriemen of andere stevige bevestigingen om te voorkomen dat voorwerpen losraken en letsel veroorzaken tijdens een botsing.

WTORS-fabrikanten

Convaid is een rolstoelfabrikant en biedt geen vergrendelings- en veiligheidssystemen voor rolstoelen (WTORS). Producten die aan de huidige WTORS-normen voldoen, zijn verkrijgbaar bij de volgende bedrijven die gespecialiseerd zijn in WTORS met botsproeven:

Ortho Safe Systems

P.O. Box 9435
Trenton, NJ 08650 U.S.A
(609) 587-9444

Unwin Safety Systems

Unwin House
The Horseshoe Coat Road, Martock,
TA12, 6EY Verenigd Koninkrijk
(44) (01935) 827740

Q'Straint

Verenigde Staten en Latijns-Amerika
4031 NE 12th Terrace Oakland Park,
FL 33334 Verenigde Staten
(954) 986-6665

Opslag

Berg de stoel op in een schone, droge ruimte en vermijd langdurige blootstelling aan hitte of vocht. Na langere opslagperioden en voordat de stoel opnieuw wordt gebruikt, moet de hele stoel worden onderhouden, gereinigd en gedesinfecteerd.

Reparaties

Gebruiker: de gebruiker kan verwijderbare onderdelen of accessoires eenvoudig zelf vervangen, bijv. voetsteunen, hiellussen, alle onderdelen van textiel, handgrepen, enz.

Fabrikant/servicepunt: reparatie of vervanging van permanent bevestigde, versleten of kapotte onderdelen moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd servicepunt. Elk afzonderlijke onderdeel van de stoel kan worden vervangen. Neem contact op met de fabrikant/het servicepunt voor de nodige reparaties. De stoel moet worden verpakt in de originele of een andere geschikte verzenddoos voor retourzending naar de fabrikant/het servicepunt.

Geautoriseerde servicedealer

Noteer bij welke Convaid-dealer u de stoel heeft gekocht:

Bedrijf: _____

Adres: _____

Telefoon: _____ Website: _____

Contact: _____ E-mailadres: _____

Serienummer: _____

Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de vereisten van de Verordening betreffende medische hulpmiddelen (2017/745).

De CE-markering moet worden verwijderd als:

- Het product opnieuw wordt opgebouwd
- Het product buiten het beoogde doel en de conformiteitsverklaring wordt gebruikt
- Geen originele Convaid-onderdelen en -bevestigingsmaterialen worden gebruikt

Wanneer het apparaat met andere producten wordt gecombineerd, mag de combinatie het beoogde doel van de producten niet veranderen. Ook mogen de producten niet zodanig worden gewijzigd dat de naleving van de toepasselijke vereisten in het gedrang komt. De persoon/het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de combinatie van de producten moet ervoor zorgen dat aan de toepasselijke eisen wordt voldaan.



Garantie

Convoid garandeert de oorspronkelijke koper van het Convoid-product dat als een onderdeel daarvan binnen de gespecificeerde garantieperiode functioneel defect blijkt te zijn wat betreft materiaal of vakmanschap, een dergelijk defect onderdeel kosteloos zal worden gerepareerd of vervangen (naar goeddunken van Convoid). De garantieservice kan worden uitgevoerd door het Convoid-servicepunt of (naar goeddunken van Convoid) de fabriek.

Garantieperiode

Frame.....Vijf jaar
Andere onderdelen.....Eén jaar
Stof en riemen.....Eén jaar

Deze garantie dekt geen normale slijtage of schade veroorzaakt door ongelukken of verkeerd gebruik. Om aanspraak te maken op deze beperkte garantie moet de gebruiker eerst een retournummer aanvragen bij de klantenservice van Convoid. Het product moet, tegen vooruitbetaling, naar de fabriek of een geautoriseerd servicepunt worden teruggestuurd, samen met een kopie van de originele factuur, het retourautorisatienummer en een schriftelijke beschrijving van het probleem.

DEZE BEPERKTE GARANTIE SLUIT ELKE AANSPRAAK OP INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE UIT. ELKE IMPLICIETE GARANTIE DIE VAN TOEPASSING IS, IS BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE SCHRIFTELIJKE GARANTIE. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF DE BEPERKING VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP DE GEBRUIKER. ER ZIJN GEEN GARANTIES DIE VERDER GAAN DAN DE DE BESCHRIJVING OP DE VOORKANT. DEZE GARANTIE BIEDT DE GEBRUIKER SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER KUNNEN PER STAAT OF LAND VERSCHILLEN. DE GARANTIE GELDT ALLEEN IN DE VS EN KAN IN ANDERE LANDEN AFWIJKEN.

Opmerkingen

Opmerkingen

VK REP

Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

EU REP

R82 A/S

Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
+45 796 858 88



Convoid Products, LLC

2830 California Street
Torrance, CA 90503, USA



+1 (844) US-Mobility (876-6245)



convoidsales.us@etac.com



www.etac.us.com



International.convoid.us@etac.com



www.etac.com

 **Convoid**
by Etac