


wombat[™]

Návod k použití

CZ CONTENTS

Bezpečnost.....	4
Záruka	4
Nářadí.....	4
Wombat - příprava k užití	5
Nastavení sedadla a opěradla.....	6
Výškově nastavitelný BASIC rám	7
Výškově nastavitelný rám upgrade.....	8
Opěrka hlavy	9
Odklopné postranní opěrky	10
Područka a táč.....	11
Opěrky boků	12
Rozsocha.....	12
Odklápěcí opěrky kolen	13
Stupačky.....	14
Vesty a pásy	15
Madlo pro asistenta	15
Madlo.....	16
Pohodlný zadní polštář	17
Pohodlný polštář sedadla	18
Označení výrobku.....	19
Rozměry	20
Technické údaje.....	21
Výrobce	21
Distributor	21
Péče a údržba	22
Průvodce odstraňováním skvrn	23

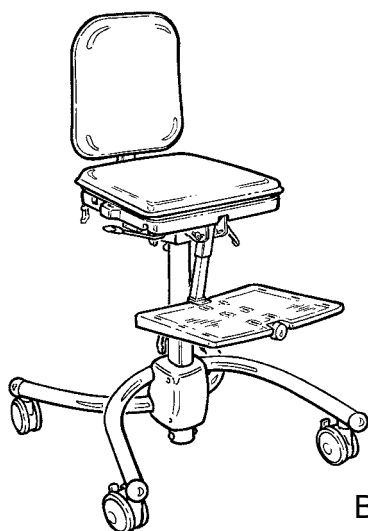

Basic



Upgrade


CZ WOMBAT

Gratulujeme vám k zakoupení vozíku Wombat od společnosti R82. Jsme přesvědčení, že splní vaše očekávání. Jako všechny produkty R82, byl WOMBAT vytvořen na základě mnohaletých zkušeností s výrobou a upravováním pomůcek a zařízení pro invalidní lidi.

Wombat je aktivní křeslo společnosti R82, dostupné ve 3 velikostech a 2 verzích: WOMBAT basic a WOMBAT upgrade.

Základní Wombat je dostupný s manuálním nastavením výšky či s plynovou pružinou. Wombat upgrade je dostupný s plynovou pružinou či elektrickým motorem. Obě verze jsou dodávány s nastavitelným sedadlem, opěradlem a stupačkami.

Tato uživatelská příručka vám pomůže využít veškeré výhody, které Wombat nabízí. Proto doporučujeme, abyste si tuto příručku pozorně přečetli, než začnete Wombat používat.

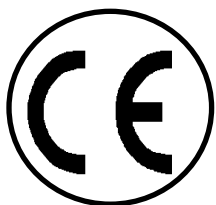

CZ BEZPEČNOST

Wombat získal označení CE. Toto označení potvrzuje, že splňuje všechny příslušné evropské požadavky na bezpečnost. Životnost tohoto výrobku je 5 let při každodenním používání. Poté doporučujeme, aby byl výrobek renovován (zaměstnanci R82), čímž se prodlouží jeho životnost.

 Při přestavbě výrobku či používání jiných náhradních dílů a fitinku než dílů a fitinku společnosti R82 odstraňte označení CE.

 Nikdy nenechávejte své dítě v tomto výrobku bez dozoru. Zajistěte neustálý dohled dospělou osobou. Nesprávné použití výrobku může způsobit uživateli vážná poranění. Před každým použitím se ujistěte se, že pás je řádně upevněn k výrobku.

 Wombat určen pouze pro užití v interiéru.

 Wombat je konstruován pouze pro jednoho uživatele. Na vozíku nesmí sedět více osob.

 Nedoporučuje se používat uživateli, kteří sedí velmi neklidně.

 Poslední verze příručky je vždy přístupná online: www.R82.com

CZ ZÁRUKA

Společnost R82 poskytuje 2letou záruku na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě a 5letou záruku na zlomení kovového rámu v důsledku vadných svarů. Platnost záruky může být ovlivněna zanedbáním odpovědnosti ze strany zákazníka při provádění servisu či každodenní údržby v souladu s pokyny a v intervalech předepsaných dodavatelem či uvedených v příručce. Další informace naleznete na domovské stránce společnosti R82 v části Ke stažení. Záruka platí pouze pokud je výrobek společnosti R82 používán ve stejné zemi, v jaké byl zakoupen, a jestliže jej lze identifikovat podle výrobního čísla. Záruka se nevztahuje na náhodné poškození včetně poškození způsobené nesprávným použitím či nedbalostí. Záruku nelze rozšířit na díly, jež nejsou odolné, podléhají běžnému opotřebení a vyžadují pravidelnou výměnu. Záruka pozbývá platnosti použitím neoriginálních náhradních dílů či příslušenství k výrobku společnosti R82 nebo v případě, že byl výrobek opraven či pozměněn jinou osobou než autorizovaným zástupcem společnosti R82 či školeným personálem oficiálně oprávněným společností R82 k provádění oprav a údržby výrobků společnosti R82. Společnost R82 si před uznáním garančních nároků vyhrazuje právo na prohlídku výrobku s příslušnou dokumentací a na rozhodnutí, zda bude vadný výrobek vyměněn či opraven. Výrobek, na nějž je uplatňován garanční nárok, je zákazník povinen předat na adresu místa nákupu. Poskytovatelem záruky je společnost R82 nebo následně zprostředkovatel společnosti R82.

CZ NÁŘADÍ

Použijte přiložené šestihranné klíče pro provedení úprav popsanych v této příručce.

 Po provedení úprav se ujistěte, že jsou utaženy veškeré šrouby.

CZ WOMBAT - PŘÍPRAVA K UŽITÍ


Wombat Basic:

Po vybalení křesla Wombat naleznete opěradlo křesla zabalené samostatně.

Nejprve vyjměte rám z krabice. Uvolněte páku (A) na centrální vzpěře. Uvolněte páku (B) pod pravou stranou sedadla, aby mohlo být zvednuto.

Vytáhněte stupačku, aby byla v pravém úhlu ke vzpěře. Uvolněte upínací páku (C) pro vzpěru stupačky pod sedadlem a nastavte stupačku.

Opěra zad je připevněna k sedadlu otočením tlačítka po směru hodinových ručiček a vytažením tlačítka (D) za vzpěrou opěrky zad a připevněním opěradla.

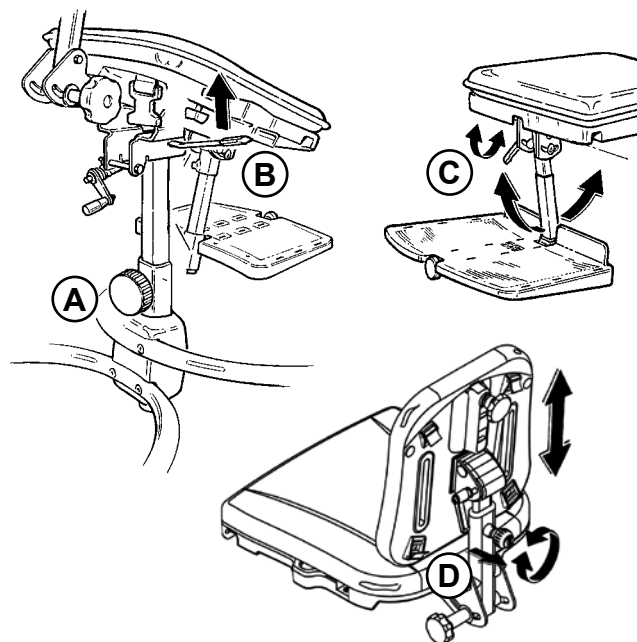

Wombat Upgrade:


Po vybalení křesla Wombat, naleznete opěradlo křesla zabalené samostatně.

Nejprve vyjměte rám z krabice. Nazdvihněte sedadlo položením nohy na pedál (E). Nezapomeňte nejdříve uvolnit bezpečnostní zámek (F) napravo od pedálu.

Vytáhněte stupačku, aby byla v pravém úhlu ke vzpěře. Uvolněte upínací páku (G) pro vzpěru stupačky pod sedadlem a nastavte stupačky.

Velikost 1+2: Opěra zad je připevněna k sedadlu otočením tlačítka po směru hodinových ručiček a vytažením tlačítka (D) za opěrkou zad a připevněním opěradla.

Velikost 3: Nejdříve odstraňte bezpečnostní matku (I) a připevněte opěradlo na velikost 3. Vytáhněte blokovací páku (J). Připevněte vzpěru opěrky zad do fitinku a nakloňte do vertikální polohy. Stlačte modrý kroužek (K) a stlačte vzpěru ve fitinku. Znovu připevněte bezpečnostní matici. Nastavte výšku do požadované polohy. Opětne zabezpečte blokovací páku.

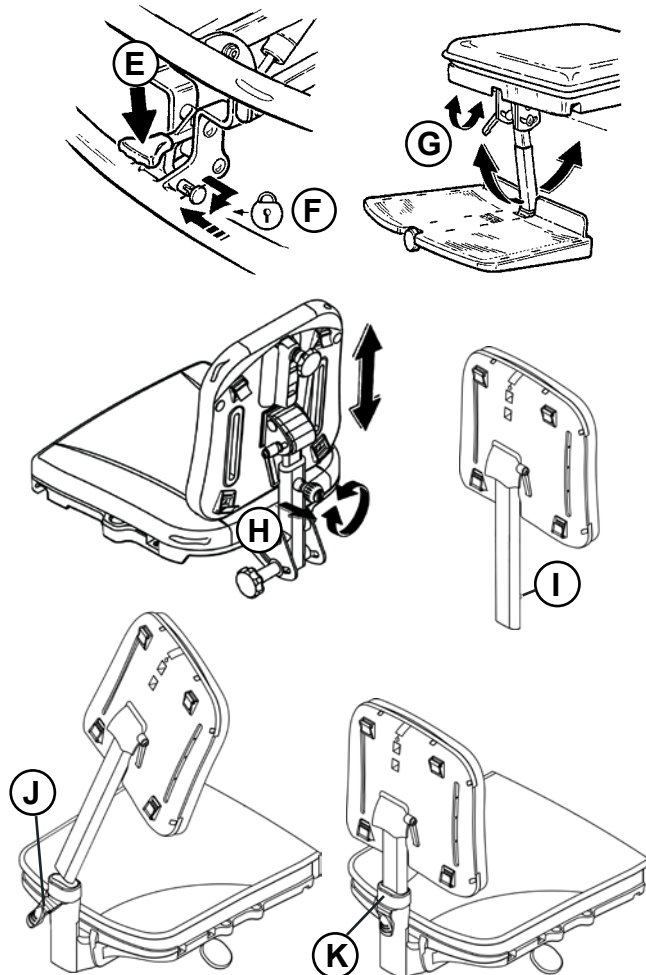

CZ NASTAVENÍ SEDADLA A OPĚRADLA

Úhel sedadla Wombat Upgrade je nastavitelný jednoduše stisknutím uvolňovací páky (A) umístěné pod sedadlem. Odklopte bezpečnostní zabezpečení (B) před stlačením uvolňovací páky.

Úhel sedadla Wombat Basic je nastavitelný otočením páky (C), umístěné pod sedadlem.



Vždy držte ruku na opěrce zad, abyste zabránili sedadlu přílišnému naklonění dopředu.

Dále je možné nastavit úhel opěradla uvolněním ruky (D) na opěradle sedadla.

Hloubka sedadla (velikost 1+2):

Pro minimalizaci hloubky sedadla, stlačte opěradlo dopředu a nastavte úhel. Pro nastavení opěradla uvolněte páku (E).

Hloubka sedadla (velikost 3):

Zatáhněte za páku pod sedadlem (I) a stlačte opěradlo dopředu či dozadu.

Uvolněte páku (J) na opěradle a nastavte opěradlo dle potřeby.

Výška opěradla (velikost 1+2):

Nastavte výšku opěradla uvolněním šroubu (F). Otočte šroubem proti směru hodinových ručiček pro uvolnění. Poté vytáhněte šroub a nastavte opěradlo do požadované výšky.

Pust'te. Zatlačte šroub a požadovaná výška zad bude uzamčena. Otočte znovu šroubem - tentokrát po směru hodinových ručiček a zámek bude znovu uzamčen.

Výška opěradla (velikost 3):

Vytáhněte blokovací páku (G) a stiskněte modrý kroužek (H) pro nastavení výšky opěradla. Nastavte výšku do požadované polohy a uvolněte modrý kroužek (H). Opět zabezpečte blokovací páku (G).

CZ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ BASIC RÁM


Ram Wombat Basic je výškově nastavitelný buď manuálně či s plynovou pružinou.


Wombat basic s manuálním nastavením:

Pro nastavení výšky Wombat basic, uvolněte páku (A). Nastavte výšku a utáhněte v požadované poloze.

Wombat basic s plynovou pružinou:

Pro nastavení výšky rámu s plynovou pružinou, stlačte uvolňovací páku (B) pod sedadlem. Odkloňte zabezpečovací zařízení před stlačením uvolňovací páky.

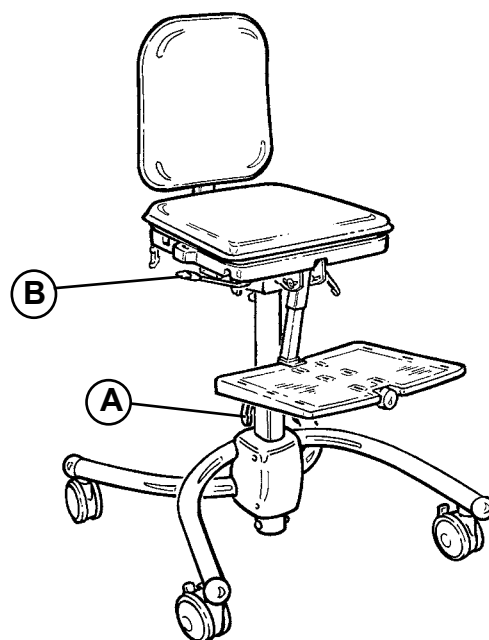

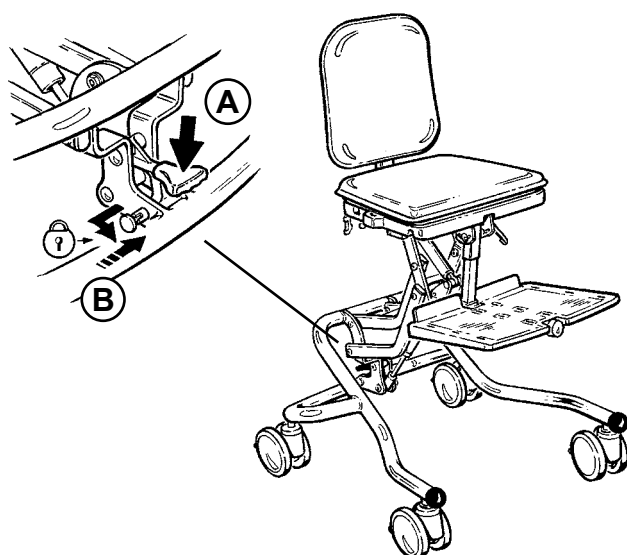

CZ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ RÁM UPGRADE

Rám Wombat upgrade lze nastavit buď plynovou pružinou či elektrickým motorem.

Wombat upgrade s plynovou pružinou:


Výška je nastavitelná od podlahy k výšce stolu. Stlačení pedálu (A) dovoluje nastavení výšky. Pedál je vybaven zabezpečovacím tlačítkem (B).

Wombat upgrade s elektrickým motorem:

Použijte ovladač (C) k nastavení výšky sedadla.



Pokud musíte použít křeslo v nejnižší poloze, uvolněte nejdříve stupačku.

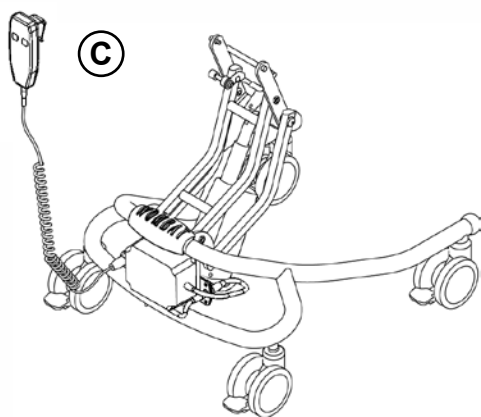

Dobíjení baterií (D):

- 1) Zapojte konektor nabíječky do ručního ovladače.
- 2) Nabíječku zapojte do zásuvky a zapněte, kontrolka se rozsvítí.
- 3) Nabíjejte do zhasnutí kontrolky.
- 4) Baterie nabíjejte 8-12 hodin. Baterie nemohou být nabity příliš, avšak nikdy je nenechte vybit úplně. Baterie se vyměňují po 4 letech.




Pro optimální životnost ovladače ho připojte do elektrické sítě 12 hodin před použitím.



Nenechávejte dítě samotné s ovladačem a nenechávejte ostatní děti si s ovladačem hrát.



Elektrický rám nemá bezpečnostní zámek na funkci nastavení výšky.



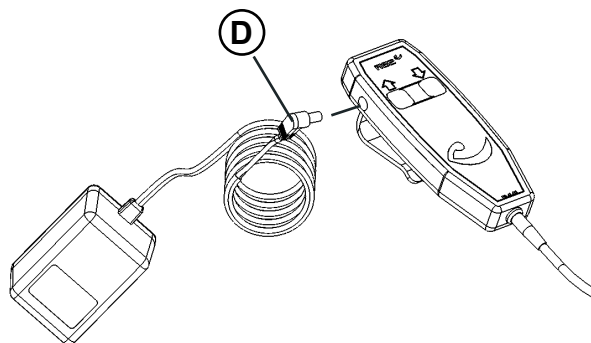




CZ OPĚRKA HLAVY

Opěrka hlavy je připevněna na opěradle křesla a je upevněna křídlovým šroubem (A).

Použijte přiložený 5 mm šestihranný klíč k uvolnění šroubů (B) a nastavte opěrku hlavy.

Nastavte úhel opěrky hlavy uvolněním šroubu (C). Nastavte opěrku hlavy do stran uvolněním šroubu (D).

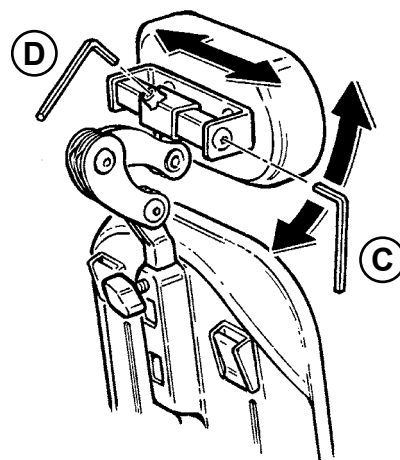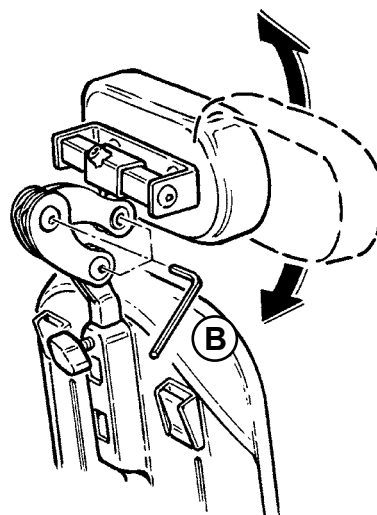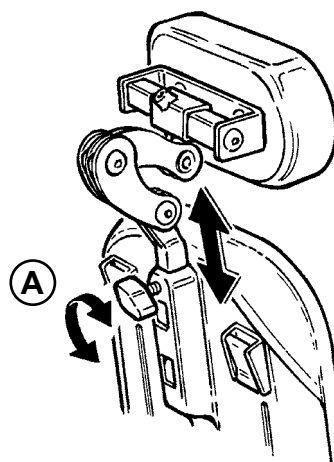

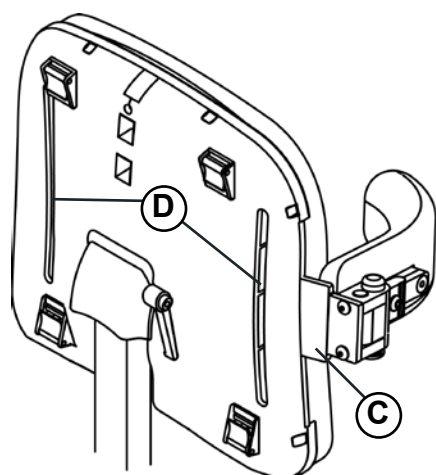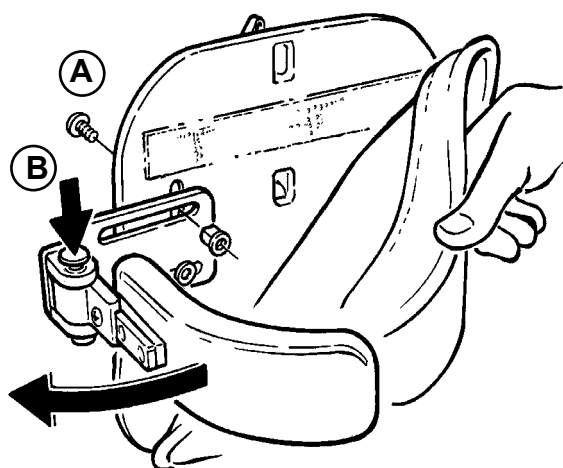

CZ ODKLOPNÉ POSTRANNÍ OPĚRKY

Wombat velikost 1+2:

Odstraňte zadní polštář a připevněte postranní opěrky do zdířek v opěradle, použitím přiložených šroubů a 5 mm šestihranného klíče (A). Nepoužívejte dlouhé šrouby.

Stlačte červené tlačítko (B) pro odklopení postranní opěrky.

Wombat velikost 3:

Nastavitelná odklápěcí postranní opěrka je připevněna do drážky na opěradle židle (C). Zasuňte postupně dlouhé šrouby do drážek (D) na zadní straně opěrky zad. Umístěte postupně matky do malého otvoru vpředu opěrky zad. Ujistěte se, že první šroub projde deskou a je správně zasazen do matky, než zajistíte další šroub. Nepoužívejte krátké šrouby.



Doporučuje se příležitostně promazat odklopné díly.

CZ PODRUČKA A TÁC

Připevněte fitink pro područky na stranu sedadla a nastavte vzdálenost loketních opěrek. Utáhněte křídlovým šroubem pod sedadlem (A).

Područky jsou výškově nastavitelné uvolněním šroubu (B). Otočte šroubem proti směru hodinových ručiček pro uvolnění. Poté vytáhněte šroub a můžete nastavit výšku područky. Pust'te šroub a požadovaná výška opěradla bude uzamčena. Otočte šroubem znovu - tentokrát po směru hodinových ručiček, a zámek bude zajištěn.




Nastavte úhel područky uvolněním páčky (C). Zajištěte požadovaný úhel.


Područka pro velikost 3 má dvě vertikální vzpěry, které odpovídají dvěma otvorům na sedadle (D). Uvolněte a otočte šroub pro nastavení úhlu područky.

Tác je připevněn za vedením tyče do trubky pod sedadlem. Upevněte požadovanou polohu křídlovým šroubem (E).



Tác lze stabilizovat připevněním vzpěr na obě strany tácu.

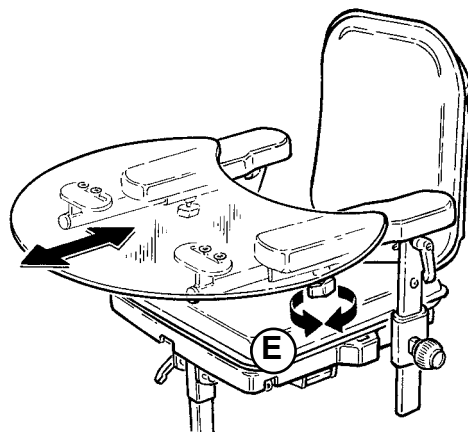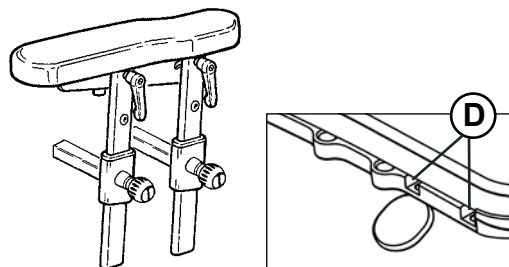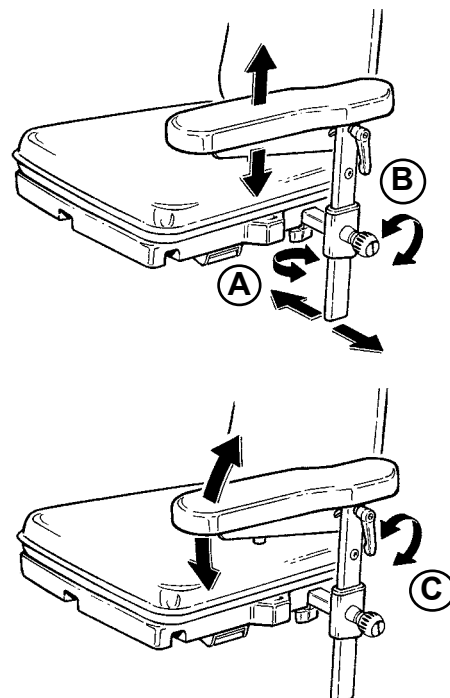

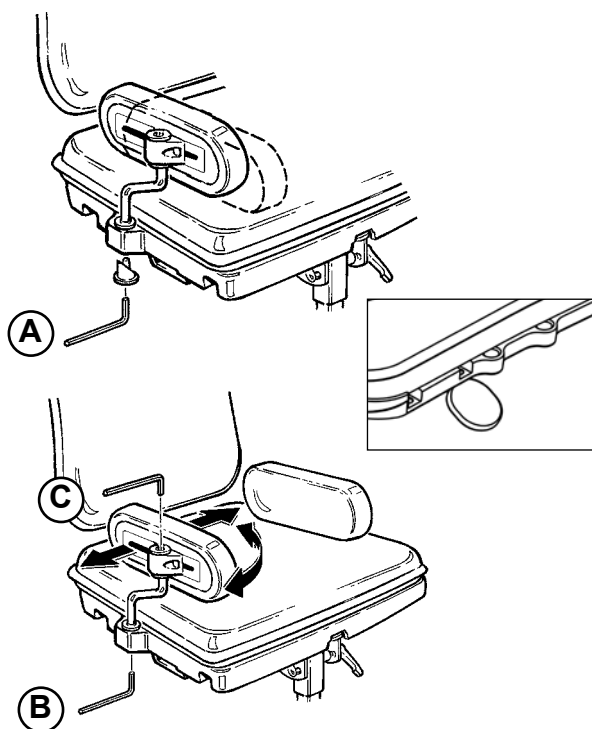



CZ OPĚRKY BOKŮ

Pro správnou montáž opěrek boků na opěradlo použijte přiložený 5 mm šestihranný klíč (A).

! Wombat velikost 3 nabízí dvě různé možnosti fitinku pro opěrku boků.

Povolte dva šrouby (B) a (C) pro nastavení opěrky boků. Utáhněte přiloženým 5 mm šestihranným klíčem.

Použijte přiložený 4 mm šestihranný klíč na uvolnění šroubů (D) a nastavení hloubky opěrky boků. Nastavte polohu opěrky v drážkách a utáhněte v požadované poloze.

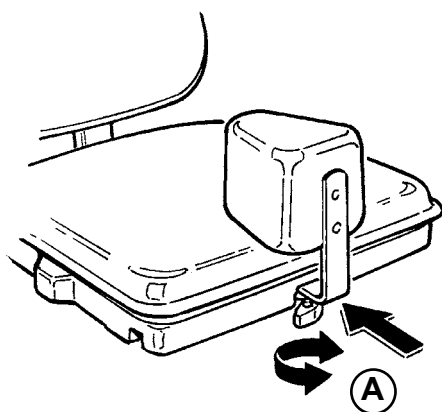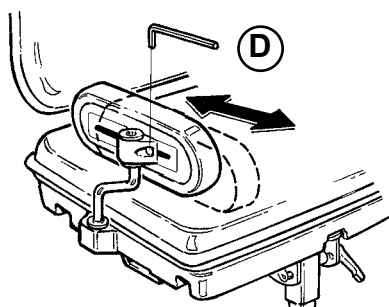

CZ ROZSOCHA

Připevněte rozsochu dopředu sedadla.

Nastavte hloubku povolením křídlových šroubů (A) pod sedadlem.

CZ ODKLÁPĚCÍ OPĚRKY KOLEN

Opěrky kolen jsou připevněny na straně sedadla a utaženy dvěma 4 mm šrouby pod sedadlem (A).

Použijte 5 mm šestihranný klíč na uvolnění šroubu (B) a nastavení úhlu opěrek kolen.





Nastavte úhel polštáře na opěrce kolen použitím 4 mm šestihranného klíče a uvolněním šroubu (C).




Použijte 4 mm šestihranný šroub na uvolnění šroubu (D) a nastavení hloubky. Utáhněte v požadované poloze.

Stlačte červené tlačítko (E) a odklopte opěrky kolen.



Doporučuje se příležitostně odklápěcí díly vyčistit.

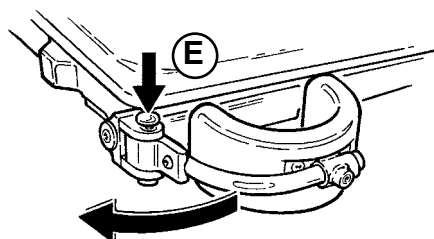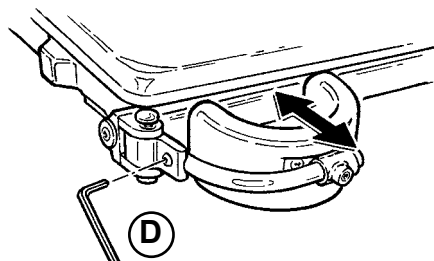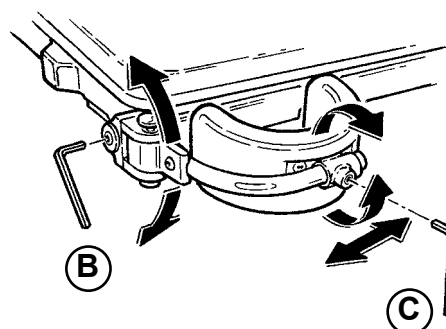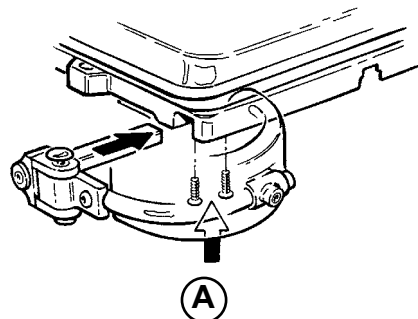

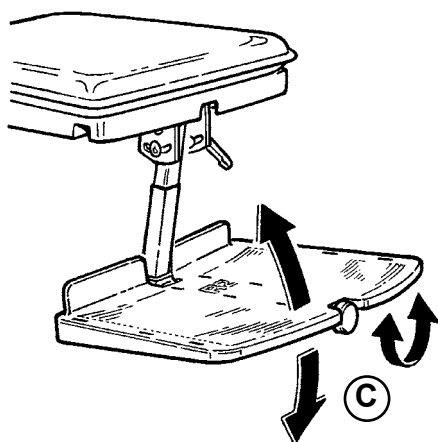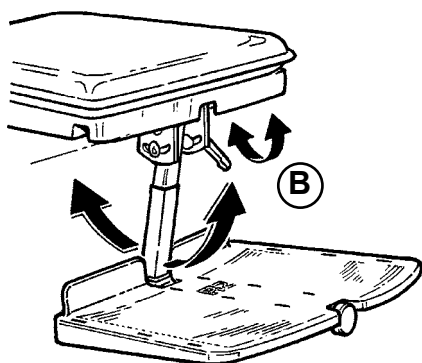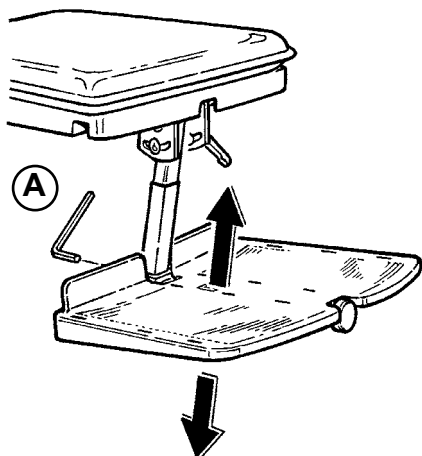

CZ STUPAČKY


Wombat je standardně dodáván se stupačkou. Stupačku lze odmontovat - výhoda při použití Wombat ve výšce podlahy. Dále můžete nastavit výšku stupačky. Použijte přiložený 4 mm šestihranný klíč pro uvolnění/utažení (A).

Pro nastavení úhlu vzpěry stupačky, uvolněte páčku (B). Nastavte úhel a utáhněte.

Úhel stupačky nastavte otočením šroubu na přední hraně stupačky (C).

CZ MADLO PRO ASISTENTA

Připevněte madla na zadní stranu sedadla a dle potřeby nastavte výšku.

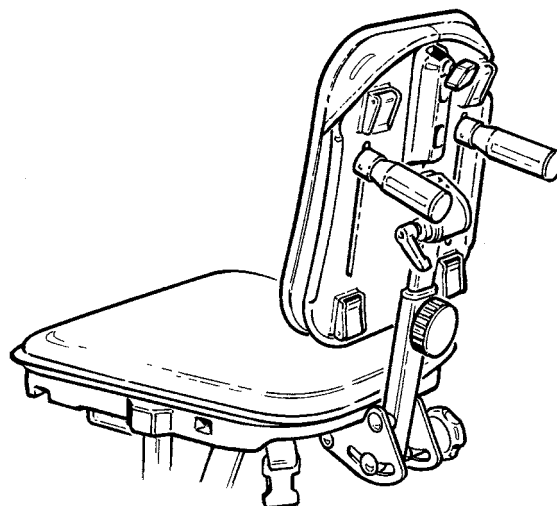


CZ VESTY A PÁSY


Křeslo Wombat lze vybavit různými vestami a pásy.

Pro zjednodušené připevnění je křeslo Wombat vybaveno dvěma 40 mm a dvěma 25 mm přezkami pod sedadlem a čtyřmi 25 mm přezkami na opěradle.



Ujistěte se, že jste všechna připevnění provedli správně a pravidelně je kontrolujte.

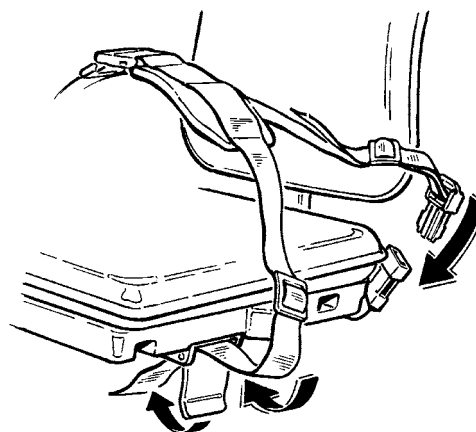

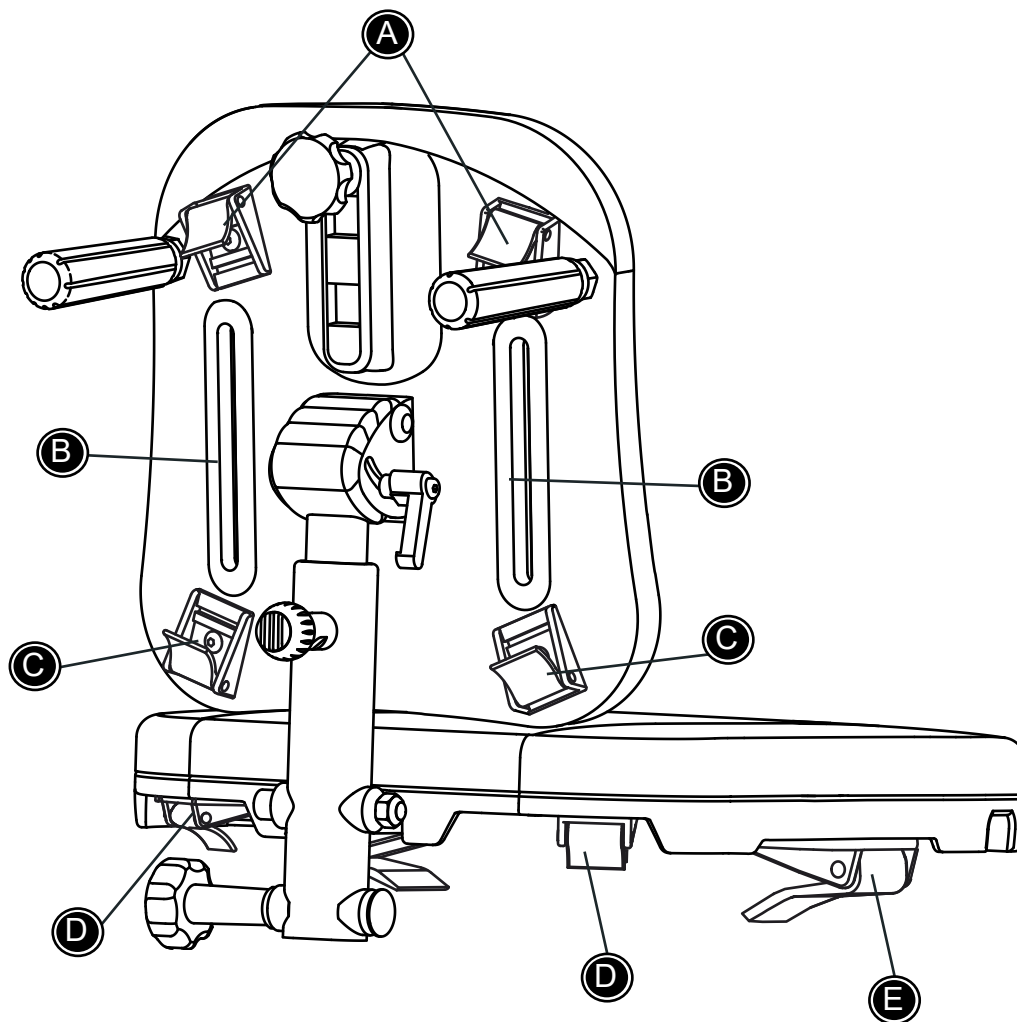

Použijte obrázek spolu s popisem na následujících stránkách.

CZ VESTA A KŘÍŽOVÁ VESTA


Vestu a křížovou vestu můžete otevírat a zavírat pomocí zipu a zámků.

Použijte tento návod a zohledněte nápovědu na str. 20.

- * Namontujte ramenní pásy do držáků umístěných na horní straně opěradla (A).
- * Namontujte horní pásy do držáků umístěných na opěradle (B).
- * Namontujte dolní pásy do držáků umístěných na dolní straně opěradla (C).



Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolyte jejich stav.

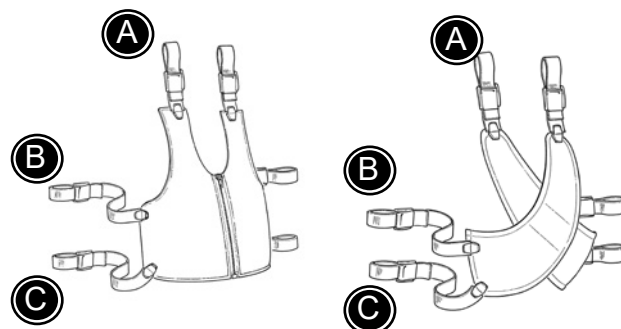

CZ PÁS NA HRUDNÍ KOST


Namontujte zámký na opěradle (viz str. 19)
Pás na hrudní kost můžete otevírat a zavírat pomocí zámků.


Použijte tento návod a zohledněte nápovědu na str. 20.

- * Namontujte ramenní pásy do držáků umístěných na horní straně opěradla (A)
- * Namontujte horní pásy do držáků umístěných na opěradle (B)
- * Namontujte dolní pásy do držáků umístěných na dolní straně opěradla (C)



Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolyte jejich stav.

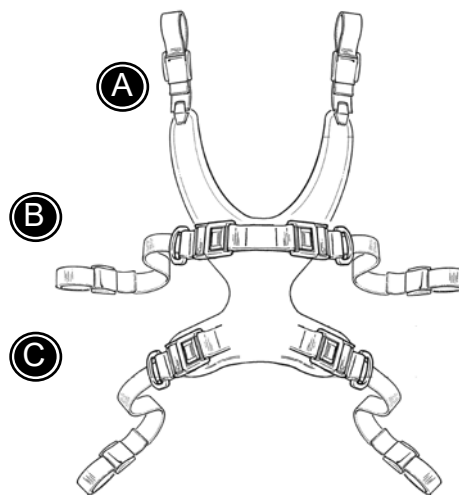

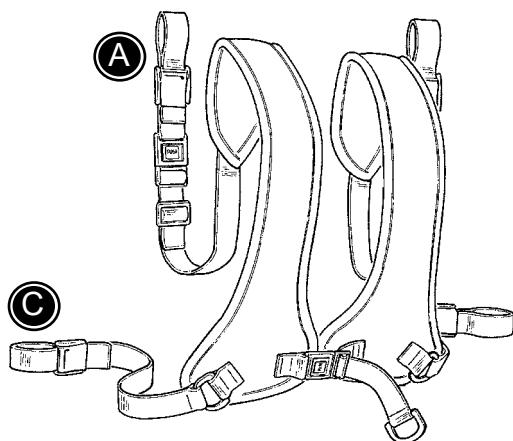

CZ HRUDNÍ PÁS


Namontujte zámků na opěradle (viz str. 19)
Hrudní pás můžete otevírat a zavírat pomocí zámků.

Použijte tento návod a zohledněte náповědu na str. 20.

- * Namontujte ramenní pásy do držáků umístěných na horní stráně opěradla (A)
- * Namontujte boční pásy do držáků umístěných na opěradle (B)



Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.

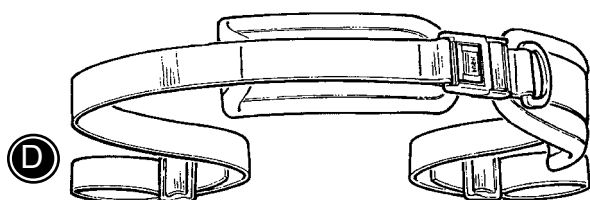

CZ BEDERNÍ PÁS

Bederní pás můžete otevírat a zavírat pomocí zámků.

Namontujte pásy do držáků umístěných na sedáku(D).



Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.

CZ Y-KYČELNÍ PÁS

Y-kyčelní pás se zapíná/odepína pomocí spony.


Dodržujte instrukce uvedeny níže společně s instrukcemi na straně 16:

- * Nasadíte popruhy (D) do zámků ve spodní části sedačky.
- Nasadíte popruhy (E) do zámků v přední části sedačky.

(D) a (E) mohou být prohozeny.



Ujistěte se, že všechna nastavení a upevnění jsou provedena správně ještě před prvním použitím. Toto pravidelně kontrolujte.

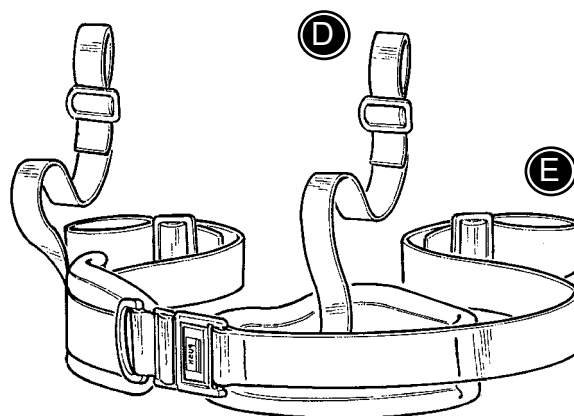


CZ PÁNEVNÍ POPRUHY


Použijte tento návod a zohledněte náповědu na str. 20.

- * Otevřete zámký (G).
- * Namontujte pásy (D) do držáků umístěných pod sedákem (D).
- * Umístěte dítě na popruzích a zamkněte zámký (G) kolem stehén.



Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.

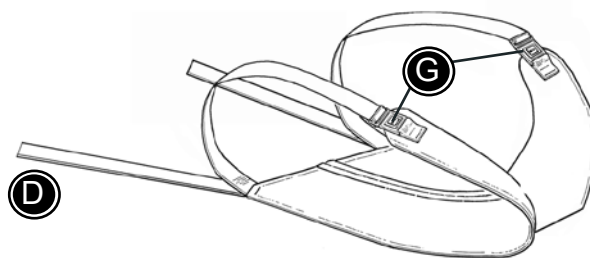

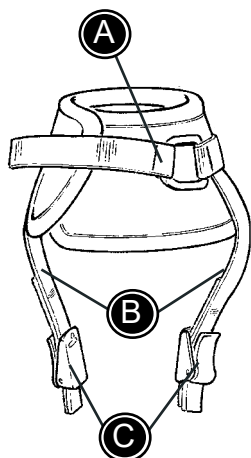

CZ KOTNÍKOVÉ PÁSY

Kotníkové pásy můžete otevírat a zavírat pomocí suchého zipu a zámků (A).


Použijte tento návod pro namontování pásů.

- * Odstraňte zámký (C)
- * Protáhněte pásy (B) otvory v opěrci nohou
- * Namontujte zámký (C) a ujistěte se, že pásy jsou dobře připevněné.

Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.



Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.

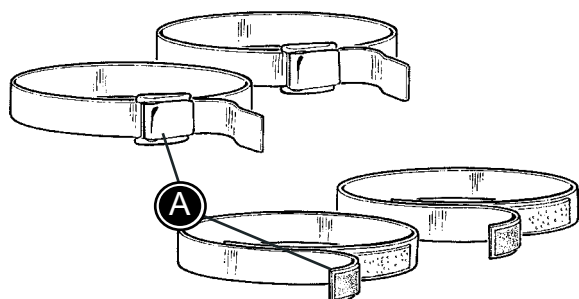

CZ NOŽNÍ PÁSY

Nožní pásy můžete otevírat a zavírat pomocí suchého zipu a zámků (A).

Použijte tento návod pro namontování pásů.

- * Odstraňte zámký (C).
- * Otevřete a protáhněte pásy (A) otvory v opěrci nohou.
- * Zamkněte pásy kolem nohou dítěte.

Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.



Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontrolujte jejich stav.

CZ MANŽETY


Manžetu můžete otevírat a zavírat pomocí zámku (A).

Použijte tento návod pro namontování manžet.

- * Umístěte manžety kolem zápěstí dítěte.
- * Namontujte pás (B) kolem tyče opěrky předloktí.



Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontro-lujte jejich stav.

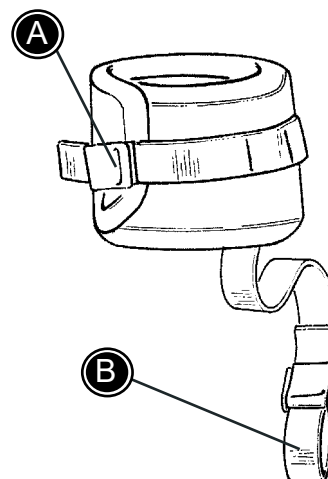

CZ PÁS H


Namontujte zámký na opěradle (viz str. 19)
Pás H můžete otevírat a zavírat pomocí zámku.


Použijte tento návod a zohledněte ná-povědu na str. 20.

- * Namontujte ramenní pásy do držáků umístěných na horní straně opěradla (A)
- * Namontujte boční pásy do držáků umístěných na opěradle (B)



Věnujte pozornost tomu, aby všechny fixační a seřizovací prvky byly správně umístěny a zajištěny. Pravidelně kontro-lujte jejich stav.

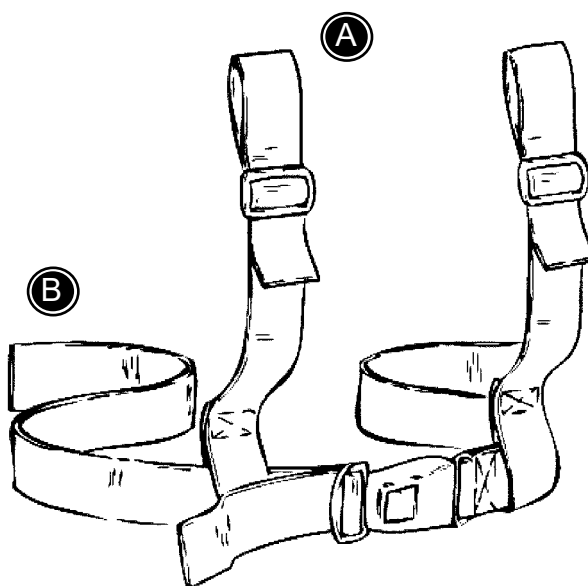

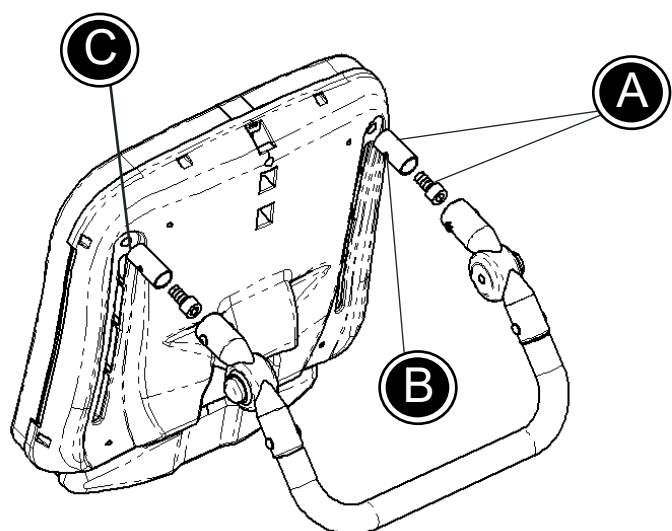


CZ MADLO


Umístěte kulatou objímku na obě strany opěradla křesla Wombat a připevněte je velkými šrouby (A). Dávejte pozor, aby dvě objímky byly umístěny horizontálně (B), a připevněte přiloženým 8 mm šestihranným klíčem. Objímka by měla být upevněna na zadní straně křesla v rovné poloze (C).

Umístěte madlo na dvě objímky.

Umístěte dva malé šroubky (D) do vnějších otvorů skrz madlo a objímku. Šroub a matka jsou umístěny uvnitř a utaženy přiloženým 3 mm šestihranným klíčem.

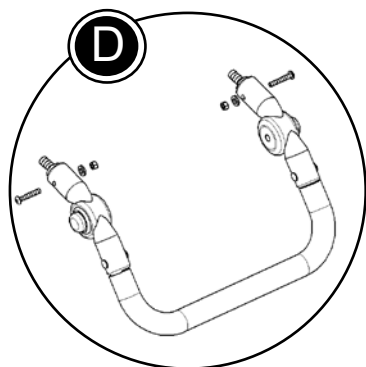

Nikdy nepoužívejte madlo k nadzvednutí/tažení křesla ze či do schodů, podest, obrubníků apod. Křeslo lze nadzvednout pouze dvěma osobami současně na bocích křesla. Nikdy nepoužívejte madlo k nadzvednutí křesla.

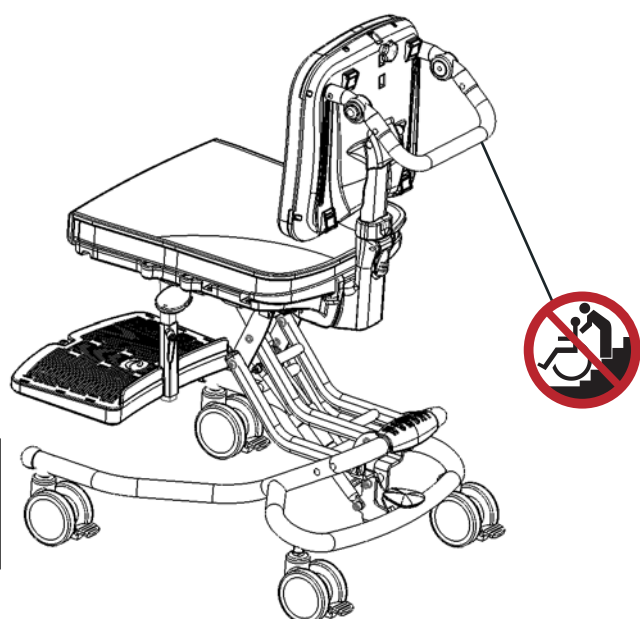

CZ POHODLNÝ ZADNÍ POLŠTÁŘ




Optimální pohodlí pro sezení v křesle Wombat získáte snadno použitím povlečených klínů na suchý zip.





- 1) Otevřete utěsnění na suchý zip nahoře a po stranách povlaku (A) a otočte povlak úplně či částečně.
- 2) Uvolněte přední potah (B) a srolujte ho.
- 3) Bederní opěra (C) a klíny (D) jsou nastavitelné a vyměnitelné dle potřeby.
- 4) Úprava potahu:

Pokud byl povlak z polštáře sundán, je důležité vždy ho zpět připevnit ve správném sledu.

Položte polštář vzhůru nohama a otočte povlak naruby.

Pro navlečení potahu položte potah vedle polštáře a spojte suchým zipem (E). Nyní umístěte potah na přední část polštáře a upevněte strany a horní část.

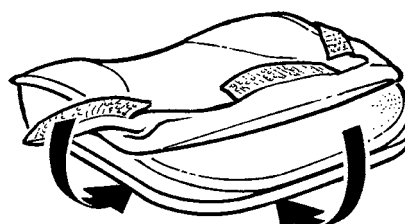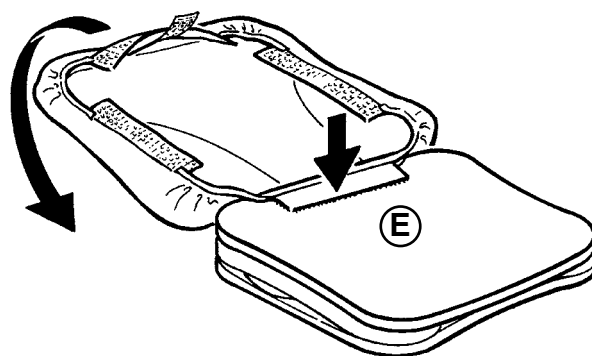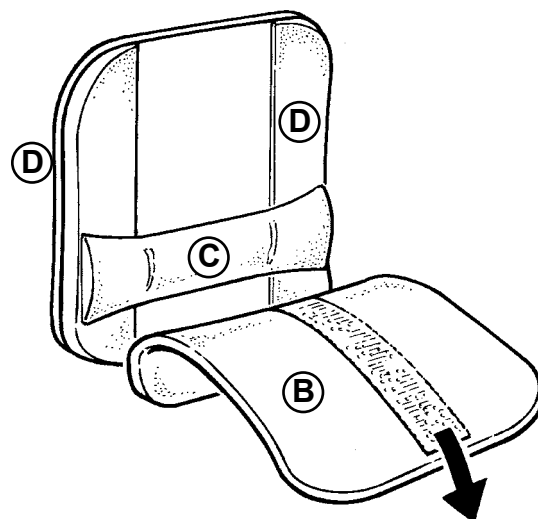

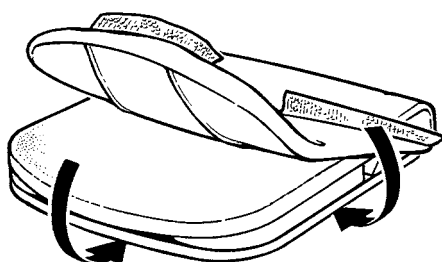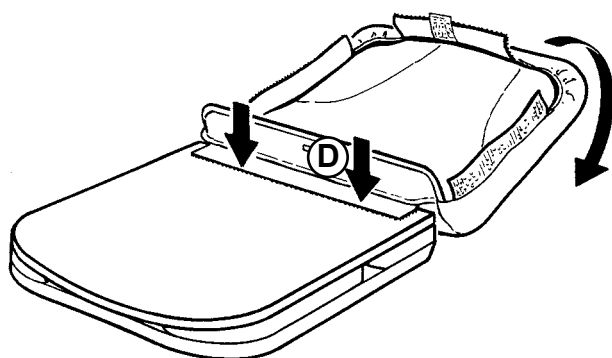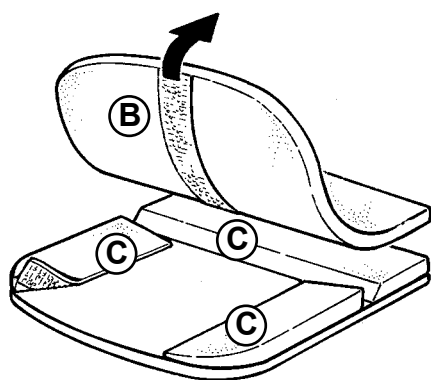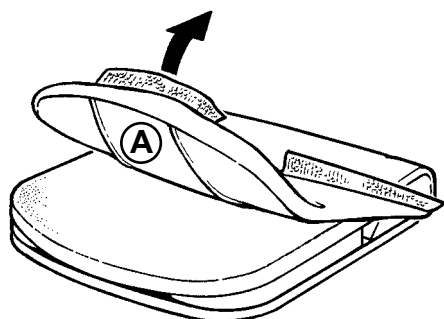

CZ POHODLNÝ POLŠTÁŘ SEDADLA

Optimální pohodlí pro sezení v křesle Wombat získáte snadno použitím povlečených klínů na suchý zip.

- 1) Otevřete utěsnění na suchý zip nahoře a po stranách povlaku (A) a otočte povlak úplně či částečně.
- 2) Uvolněte přední potah (B) a srolujte ho.
- 3) Klíny (C) jsou nastavitelné a vyměnitelné dle potřeby.
- 4) Úprava potahu:

Pokud byl povlak z polštáře sundán, je důležité vždy ho zpět připevnit ve správném sledu.

Položte polštář vzhůru nohama a otočte povlak naruby.

Pro navlečení potahu položte potah vedle polštáře a spojte suchým zipem (D). Nyní umístěte potah na přední část polštáře a upevněte strany a horní část.

CZ OZNAČENÍ VÝROBKU

A) Výrobní číslo


WOMBAT basic:

Nálepka je umístěna na vnitřní straně rámu nad levým zadním kolem.

WOMBAT upgrade:

Nálepka je umístěna na vnitřní straně rámu nad levým zadním kolem.

WOMBAT Basic

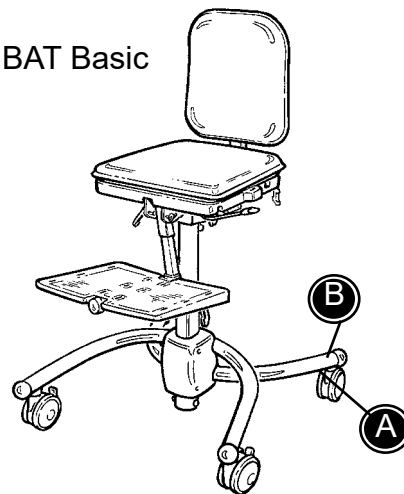

B) Výrobce


WOMBAT basic:

Nálepka je umístěna na rámu nad levým zadním kolem.


WOMBAT upgrade:

Nálepka je umístěna na rámu nad levým zadním kolem.


WOMBAT Upgrade

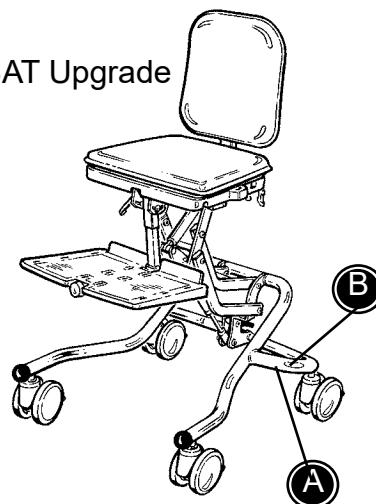

WOMBAT Basic

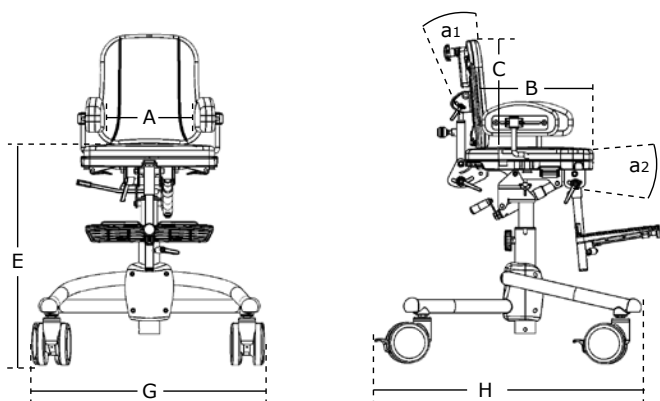

WOMBAT Upgrade

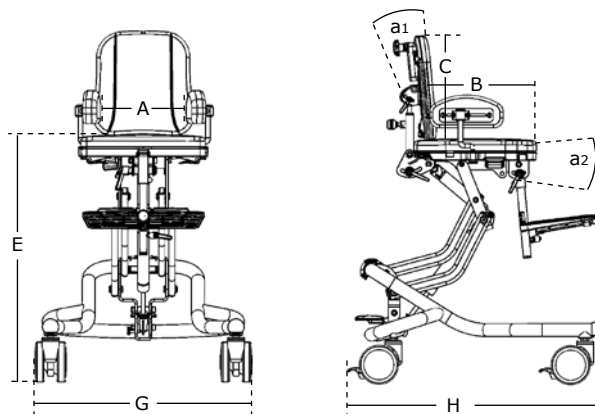

CZ ROZMĚRY

	Wombat basic	Wombat basic	Wombat upgrade	Wombat upgrade	Wombat upgrade
	Vel 1	Vel 2	Vel 1	Vel 2	Vel 3
	mm (palce)	mm (palce)	mm (palce)	mm (palce)	mm (palce)
Šířka sedadla (A)	210-300 (8¼-11½")	280-370 (11-14½")	210-300 (8¼-11½")	280-370 (11-14½")	250-440 (13¾-17¼")
Hloubka sedadla (B)	160-290 (6¼-11¼")	230-360 (9-14")	160-290 (6¼-11¼")	230-360 (9-14")	300-480 (11½-18¾")
Výška zad(C)	280-340 (11-13¼")	310-380 (12-14¾")	280-340 (11-13¼")	310-380 (12-14¾")	390-500 (15¼-19½")
Výška sedadla (E)	460-660 (18-25¾")	460-660 (18-25¾")	340-690 (13¼-27")	340-690 (13¼-27")	380-680 (14¾-26½")
Šířka rámu (G)	550 (21½")	550 (21½")	550 (21½")	550 (21½")	610 (21½")
Délka rámu (H)	600 (23¾")	600 (23¾")	610 (23¾")	610 (23¾")	720 (28¾")
Úhel zad	40°	40°	40°	40°	43°
Úhel sedadla	-20° to +15°	-20° to +15°	-20° to +15°	-20° to +15°	-22° to +10°
Max. zátěž	45 kg (99 lb)	45 kg (99 lb)	45 kg (99 lb)	45 kg (99 lb)	70 kg (154 lb)
Váha	14,5 kg (32 lb)	14,5 kg (32 lb)	15,5 kg (34 lb)	15,5 kg (34 lb)	22 kg (48½ lb)

CZ TECHNICKÉ ÚDAJE

Sedadlo: ABS
Polštáře: Ohnivzdorná pěna
Potah: Ohnivzdorná Trevira CS
Rám: Práškem lakovaná ocel

CZ VÝROBCE

R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved
Dánsko

CZ DISTRIBUTOR



Svého distributora naleznete na www.R82.com

PÉČE A ÚDRŽBA

ČALOUNĚNÍ

Čalounění je vyrobeno z ohnivzdorného pěnového a pohodlného materiálu. Čalounění lze snadno odstranit z polštáře a lze ho prát v pračce při teplotě 40°. Pravidelné luxování a kartáčování pomůže uchovat barvu a vzhled látky.

KOLA

Kola křesla Wombat by měly být pravidelně čištěny vlhkým hadrem. Pokud jsou velice znečištěná, lze použít odmašťovadlo.

CENTRÁLNÍ BRZDY

Lanka centrální brzdy by měla být utahována dle potřeby. Alespoň jednou měsíčně zkontrolujte, že brzdy fungují.

RÁM

Pravidelně utahujte všechny šrouby pod sedadlem. Dále je důležité udržovat vozík čistý, jak pro pohodlí uživatele tak pro dlouhou životnost vozíku. Rám by měl být pravidelně čištěn vlhkým hadrem.



Nepoužívejte žádné čisticí materiály obsahující chlór či metylalkohol.

KONTROLA

Je důležité pravidelně utahovat všechny šrouby na vozíku. Alespoň jednou měsíčně zkontrolujte všechny šrouby zabezpečující doplňky. Dále je důležité všimnout si jakýchkoli náznaků počínajících vad na rámu, dílech PVC apod.

OPRAVA

Pokud nastane problém s vaším vozíkem, měli byste okamžitě kontaktovat vašeho prodejce. Porouchané vozíky by neměly být používány. Pokud váš vozík potřebuje renovaci či opravu, mohou být použity pouze originální díly R82. Doplňky či dostupné náhradní díly, které jsou rozbité, mohou být předány R82 k opravě. Pokud nastane problém s jakoukoli základní částí, musí být celý vozík vrácen R82 k opravě. R82 neodpovídá za poškození či zranění způsobené používáním neoriginálních částí či opravami provedenými osobou neautorizovanou R82.



Plynová pružina funguje bez jakékoli údržby.
Nevystavujte plynovou pružinu tlaku, vysokým teplotám či perforaci.



Bateriová skříň
Bateriová skříň může být nebezpečná pro životní prostředí, proto by měla být předána do recyklačního centra, pokud již nebude používána.

CZ PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM SKVRN

Krev

Smyjte krev studenou vodou. Pokud skvrna zůstane, přidejte neutrální kuchyňský čistící prostředek.

Inkoust

Odstraňte co nejvíce savým papírem. Vyčistěte 20% denaturovaným lihem a umyjte vodou, do které přidáte neutrální kuchyňský prostředek.

Čokoláda a sladkosti

Odstraňte vlažnou vodou.

Tráva a zelenina

Odstraňte vlažnou vodou s či bez neutrálního kuchyňského čistícího prostředku.

Káva, čaj a mléko

Odstraňte co největší množství skvrny savým papírem. Odstraňte vlažnou vodou s neutrálním kuchyňským přípravkem.

Kuličkové pero a kosmetika

Vyčistěte lihem

Lak na nehty

Nakapejte odlakovačem na nehty. Použijte aceton, pokud skvrna zůstává.

Olej a tuk

Nejdříve pokapejte skvrnu mastkem a nechte působit. Potom vykartáčujte. Nakonec opatrně setřete hadříkem namočeném v benzenu či lihu.

Krém na boty

Opatrně setřete hadříkem navlhčeném v benzenu či lihu.

Džem, sirup, ovoce a džusy

Nejdříve odstraňte co největší množství skvrny lžící. Poté setřete vlažnou vodou.

Víno a alkohol

Nejdříve odstraňte co největší množství skvrny savým papírem. Poté setřete vodou obsahující neutrální kuchyňský přípravek. Nakonec opláchněte ředěným denaturovaným lihem.

Olejové barvy

Nejdříve očistěte terpentýnem. Poté setřete vodou obsahující neutrální kuchyňský prostředek. Vyhledejte odbornou pomoc, pokud je skvrna příliš zaschlá.

Vodové barvy

setřete studenou vodou obsahující neutrální kuchyňský prostředek. Vyhledejte odbornou pomoc, pokud je skvrna příliš zaschlá.

