


wombat[™]

Manuel de l'utilisateur en français

FR SOMMAIRE

Wombat	3
Sécurité	4
Garantie.....	4
Outils	4
Wombat prête à l'emploi.....	5
Réglage du siège et du dossier.....	6
Cadre basic réglable en hauteur	7
Cadre upgrade réglable en hauteur.....	8
Support pour la tête.....	9
Supports latéraux escamotables	10
Accoudoir et plateau.....	11
Supports des hanches.....	12
Pommeau	12
Supports escamotables pour les genoux	13
Repose-pied	14
Vestes et ceintures	15
Poignées pour les assistants.....	15
Barre de poussée	16
Le confort d'assise du coussin de dossier.....	17
Le confort d'assise du coussin de siège.....	18
Identification du produit	19
Dimensions.....	20
Informations techniques	21
Fabriquant	21
Distributeur	21
Entretien et maintenance.....	22
Guide d'élimination des tâches.....	23

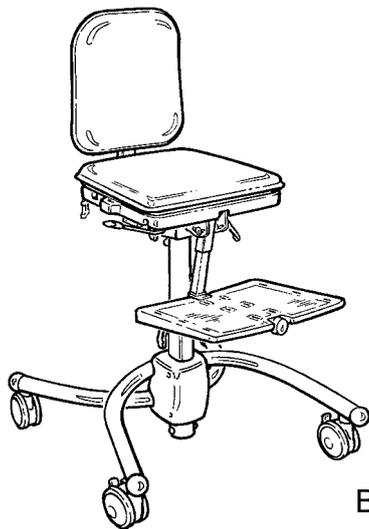

Basic



Upgrade


FR WOMBAT

Félicitations pour avoir choisi le WOMBAT. Nous sommes convaincus qu'il répondra parfaitement à vos attentes. Comme tout autre produit de qualité conçu par R82, le modèle WOMBAT est le fruit de nombreuses années d'expérience, de fabrication et d'adaptation de produits d'aide et d'appareils pour les personnes handicapées.

Le Wombat est le fauteuil d'activité de R82. Il est disponible en 3 tailles et 2 versions : WOMBAT basic et WOMBAT upgrade

Le Wombat basic est disponible avec un réglage en hauteur manuel ou par vérin à gaz. Le Wombat upgrade est disponible avec vérin à gaz ou moteur électrique. Les deux versions sont livrées avec un siège à réglage multiple, un dossier et un repose-pied.

Ce guide de l'utilisateur est conçu pour aider l'utilisateur à tirer le meilleur profit des nombreuses options du Wombat. Par conséquent, nous vous recommandons de le lire entièrement avant d'utiliser le Wombat.

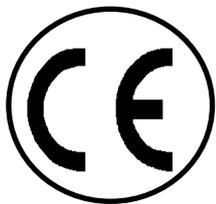

FR SÉCURITÉ

Le modèle Wombat a obtenu la marque CE. Cela garantit qu'il répond à tous les critères de sécurité de l'Union Européenne. La durabilité de ce produit est de 5 ans dans des conditions d'utilisation quotidiennes. Plus tard le produit doit être rénové (par le personnel de R82) pour allonger sa durée de vie.

 Retirez la marque CE lorsque vous remettez à neuf le produit ou lorsque vous utilisez des pièces de rechange autres que les pièces et fixations R82 d'origine.

 Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans ce produit. Veillez à ce qu'un adulte soit toujours présent. Toute mauvaise utilisation du produit peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur. Avant chaque utilisation, veillez à ce que la ceinture soit correctement fixée au produit.

 Le Wombat ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

 Le fauteuil roulant est conçu pour un seul utilisateur. Ne pas mettre plus d'un utilisateur dans le fauteuil.

 N'est pas recommandé pour des usagers ayant beaucoup de mouvements involontaires.

 La dernière version du manuel est toujours disponible en ligne : www.R82.com

FR GARANTIE

R82 offre une garantie de deux ans contre les défauts de fabrication et de matériaux ainsi qu'une garantie de 5 ans sur la rupture du cadre en métal provoquée par des défauts au niveau des soudures. La garantie peut être rendue caduque si la responsabilité du client consistant en un entretien et/ou une maintenance quotidienne n'est pas exécutée conformément aux instructions et aux intervalles prescrits par le fournisseur et/ou indiqués dans le manuel. Pour plus d'informations, nous nous reportons à R82 homepage/download (page d'accueil R82/téléchargement). La garantie ne peut être appliquée que si le produit R82 est utilisé dans le pays où il a été acheté et s'il peut être identifié par le numéro de série. La garantie ne couvre pas les avaries accidentelles, notamment celles provoquées par une mauvaise utilisation ou par négligence. La garantie ne s'étend pas aux pièces non-durables qui sont soumises à l'usure normale et doivent être remplacées à intervalles réguliers. La garantie est nulle est non avenue si des pièces/accessoires R82 non d'origine sont utilisés, ou si le produit est réparé ou transformé par toute autre personne que le représentant R82 agréé ou du personnel formé dûment reconnu par R82 pour la réparation et la maintenance des produits R82. R82 se réserve le droit d'inspecter le produit pour lequel est présentée une réclamation et la documentation qui s'y rattache avant d'accepter la demande d'activation de la garantie et de décider s'il convient de remplacer ou de réparer le produit défectueux. Il incombe au client de retourner l'article sur lequel porte la garantie à l'adresse d'achat. La garantie est fournie par R82 ou, ultérieurement, par un revendeur R82.

FR OUTILS

Utilisez les clés Allen pour effectuer les réglages décrits dans le présent manuel.

 Une fois les réglages effectués, veillez à bien les serrer.

FR WOMBAT PRÊTE À L'EMPLOI

Wombat Basic :

Lorsque vous déballerez votre Wombat, vous constaterez que le dossier du fauteuil est emballé séparément.

Commencez par retirer le cadre de la boîte. Desserrez la poignée (A) sur la barre centrale. Relâchez la poignée (B) sous le côté droit du siège de façon à ce que ce dernier puisse être soulevé.

Tirez sur le repose-pied de sorte qu'il forme un angle droit avec la barre. Desserrez la poignée de serrage (C) de la barre du repose-pied sous le siège et réglez le repose-pied.

Pour ajuster le support de dossier sur le siège, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre et tirez le bouton (D) derrière le support de dossier pour y fixer le dossier.

Wombat Upgrade :


Lorsque vous déballerez votre Wombat, vous constaterez que le dossier du fauteuil est emballé séparément.


Commencez par retirer le cadre de la boîte. Soulevez le siège en plaçant votre pied sur la pédale (E). N'oubliez pas de commencer par desserrer le verrou de sécurité (F) à droite de la pédale.

Tirez sur le repose-pied de sorte qu'il forme un angle droit avec la barre. Desserrez la poignée de serrage (G) de la barre du repose-pied sous le siège et réglez le repose-pied.

Taille 1+2 : Pour ajuster le support de dossier sur le siège, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre et tirez le bouton (D) derrière le support de dossier pour y fixer le dossier.

Taille 3 : Commencez par retirer l'écrou de sécurité (I) pour pouvoir monter le dossier sur la taille 3. Tirez le levier de verrouillage (J). Montez le support de dossier dans la fixation et placez-le en position verticale. Enfoncez l'anneau bleu (K) pour pousser la barre vers le bas dans la fixation. Remontez l'écrou de sécurité. Ajustez la hauteur dans la position voulue. Fixez le levier de verrouillage.

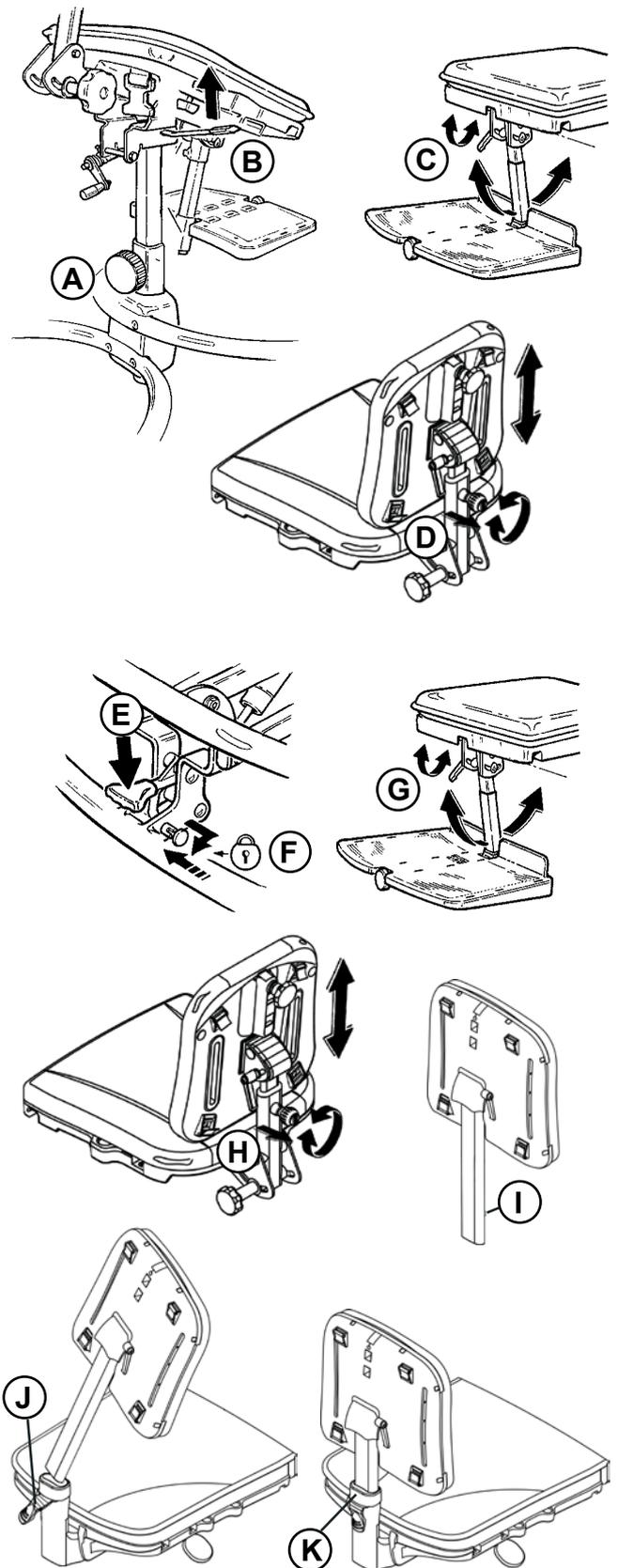

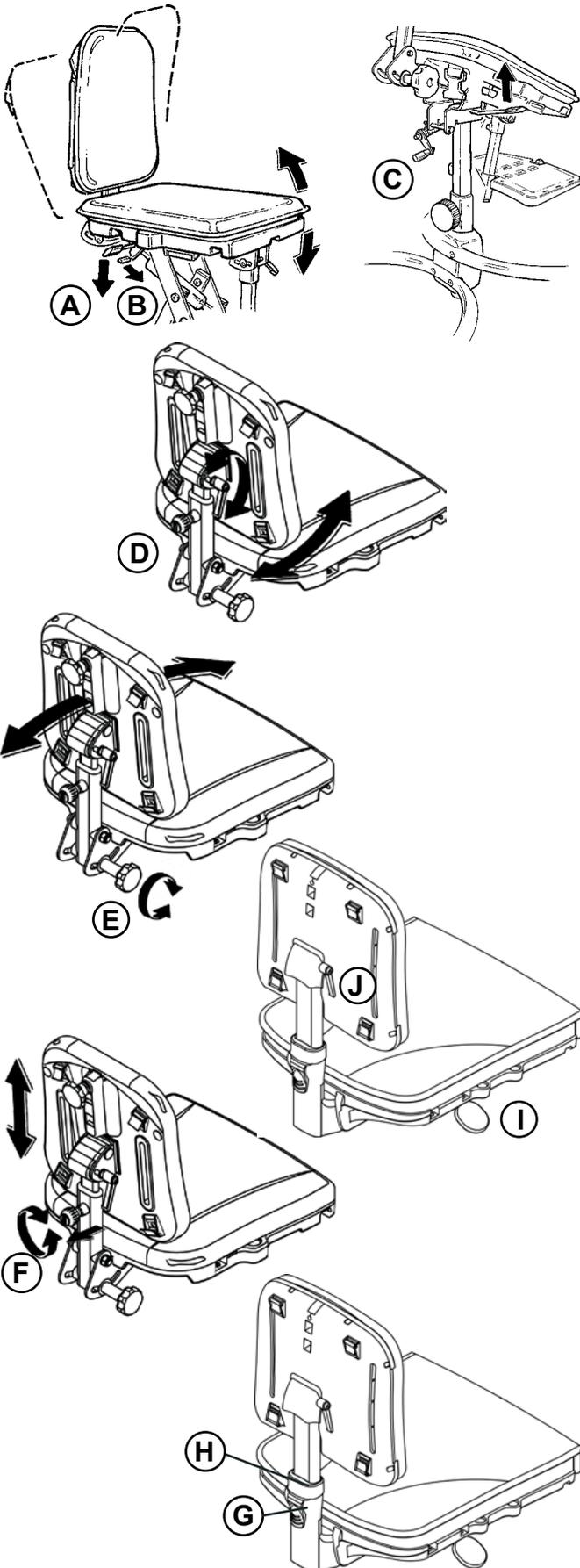

FR RÉGLAGE DU SIÈGE ET DU DOSSIER

L'angle du siège Wombat Upgrade est réglable par une simple poussée sur le levier (A), situé sous le siège. Dégagez le dispositif de sécurité (B) avant d'actionner le levier.

Pour régler l'angle du siège Wombat Basic, tournez la poignée (C), située sous le siège.

! Gardez une main sur le dossier pour éviter que le siège ne s'incline trop en avant.

De plus, il est possible d'orienter le dossier en desserrant la poignée (D) au dos du fauteuil.

Profondeur du siège (taille 1+2) :

Pour réduire la profondeur du siège, poussez le dossier en avant et réglez l'angle. Pour ajuster le dossier, desserrez la poignée (E).

Profondeur du siège (taille 3) :

Tirez la poignée sous le siège (I) et poussez le dossier en avant ou en arrière. Desserrez la poignée (J) sur le dossier et réglez celui-ci selon les besoins.

Hauteur du dossier (taille 1+2) :

Réglez la hauteur du dossier en desserrant le bouton (F). Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer. Ensuite, tirez le bouton et le dossier est réglable en hauteur.

Laissez revenir le bouton et le siège sera verrouillé à la hauteur voulue. Tournez à nouveau le bouton cette fois dans le sens horaire, et le verrou sera davantage fixé.

Hauteur du dossier (taille 3) :

Tirez le levier de verrouillage (G) et appuyez sur l'anneau bleu (H) pour régler la hauteur du dossier. Ajustez la hauteur à la position voulue et relâchez l'anneau bleu (H). Fixez à nouveau le levier de verrouillage (G).

FR CADRE BASIC RÉGLABLE EN HAUTEUR


Le cadre du Wombat basic est réglable en hauteur manuellement ou à l'aide d'un vérin à gaz.


Le Wombat basic avec réglage manuel :

Pour régler le Wombat basic en hauteur, desserrez la poignée (A). Réglez la hauteur et fixez à la position voulue.

Le Wombat basic avec vérin à gaz :

Pour régler la hauteur du cadre à l'aide d'un vérin à gaz, rabattez la poignée de dégagement (B) sous le siège. Dégagez le dispositif de sécurité avant d'actionner le levier.

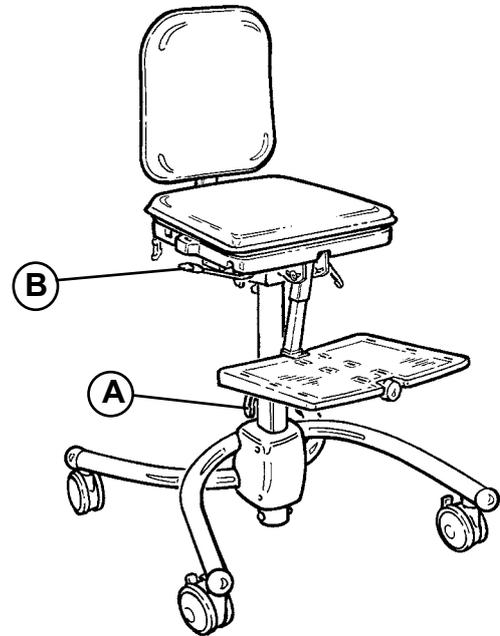

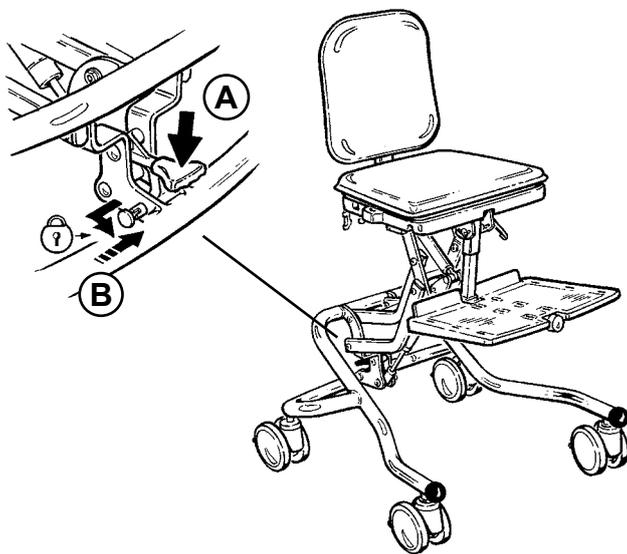


FR CADRE UPGRADE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Le cadre du Wombat upgrade est réglable en hauteur à l'aide d'un vérin à gaz ou d'un moteur électrique.

Le Wombat upgrade avec vérin à gaz :
la hauteur est réglable, du sol à la hauteur de table. Une pression sur la pédale (A) permet de régler la hauteur. La pédale est équipée d'un bouton de sécurité (B).

Le Wombat upgrade avec moteur électrique :
Utilisez le combiné (C) pour régler la hauteur du siège.

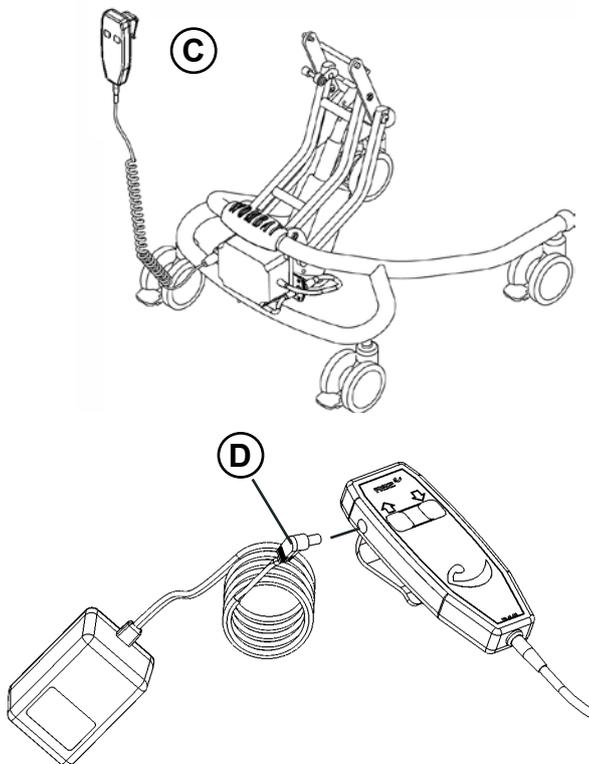

! Si le fauteuil doit être utilisé dans la position la plus basse, retirez d'abord le repose-pied.

Rechargement des batteries (D) :

- 1) Brancher le chargeur sur une prise
- 2) Mettre les fils du chargeur dans le boîtier de commande. La diode du chargeur s'allume.
- 3) Charger la batterie jusqu'à ce que la diode du chargeur s'éteigne.
- 4) Chargez les batteries chaque nuit ou pendant 8 à 12 heures. Les batteries ne peuvent pas être trop chargées. Ne videz pas complètement les batteries. Par ailleurs, elles doivent être remplacées dans une période de 4 ans.

! Pour obtenir une durée de vie optimale du moteur, branchez-le pendant 12 heures au réseau avant utilisation.

! Ne laissez pas l'enfant utiliser lui-même le combiné et ne laissez pas non plus un autre enfant jouer avec le combiné.


! Le cadre électrique ne dispose pas d'arrêt de sécurité pour la fonction de réglage de la hauteur.


FR SUPPORT POUR LA TÊTE

Le support pour la tête est monté sur le dossier du fauteuil et serré à l'aide de la vis à serrage à main (A).

Utilisez la clé Allen de 5 mm fournie pour desserrer les vis (B) et régler le support pour la tête.

Régalez l'inclinaison du support pour la tête en desserrant la vis (C). Ajustez les ailes latérales du support pour la tête en desserrant la vis (D).

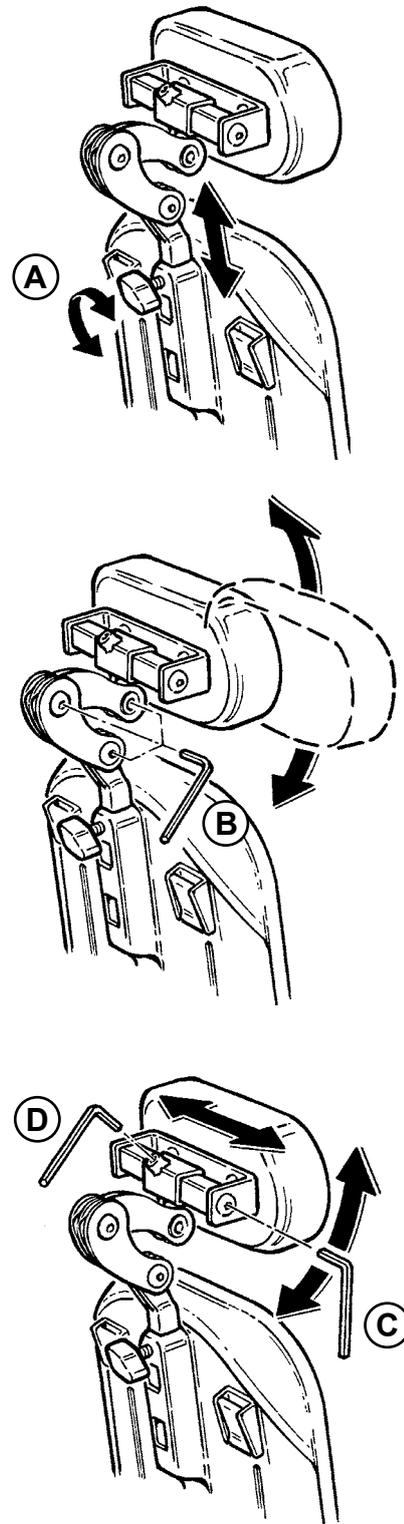

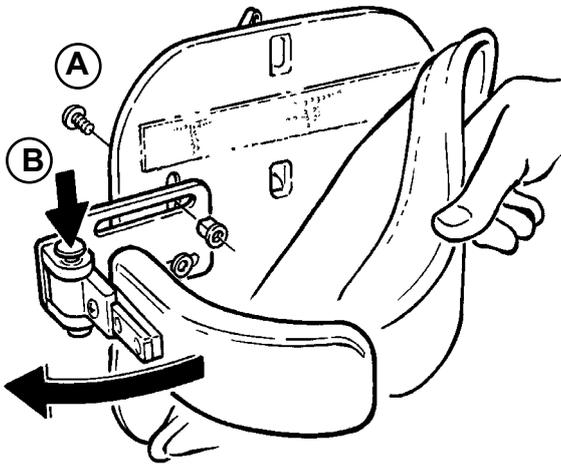

(A)

(B)

FR SUPPORTS LATÉRAUX ESCAMOTABLES


Wombat taille 1+2 :

Retirez le coussin du dossier et montez le support latéral dans les fentes prévues à cet effet dans le dossier, en vous servant des vis fournies et de la clé Allen 5 mm (A). N'utilisez pas les vis longues.

Enfoncez le bouton rouge (B) pour rabattre le support latéral.

Wombat taille 3 :

Le support latéral escamotable est fixé dans la rainure dans le dossier du fauteuil (C). Fixez les longues vis une à une dans les rainures (D) à l'arrière du support de dos. Placez les écrous un à un dans le petit trou devant le support de dos. Vérifiez que la première vis passe par la plaque à rainure et est correctement vissée dans l'écrou avant de fixer la vis suivante. N'utilisez pas les vis courtes.

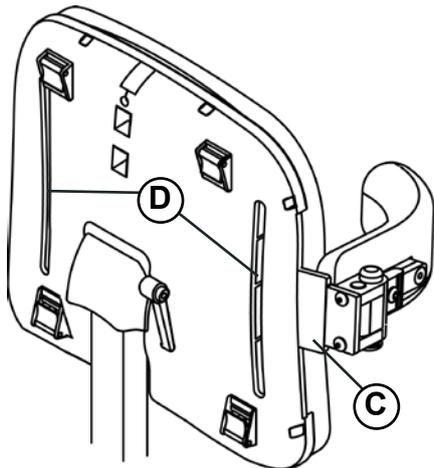

(D)

(C)



Il est recommandé de lubrifier occasionnellement les parties escamotables.

FR ACCOUDOIR ET PLATEAU




Montez la fixation de l'accoudoir dans le côté du siège et ajustez-le de façon latérale. Serrez avec les vis à serrage à main sous le siège (A).

Pour régler les accoudoirs en hauteur, desserrez le bouton (B). Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer. Ensuite, tirez le bouton et l'accoudoir est réglable en hauteur. Laissez revenir le bouton et le siège sera verrouillé à la hauteur voulue. Tournez à nouveau le bouton cette fois dans le sens horaire, et le verrou sera davantage fixé.


Orientez l'accoudoir en desserrant la fixation (C). Serrez à l'angle souhaité.


L'accoudoir pour la taille 3 a deux barres verticales qui sont placées dans les deux trous qui se trouve sur le siège (D). Desserrez et tournez le bouton pour régler l'inclinaison de l'accoudoir.

Pour monter le plateau, introduire la barre dans le tuyau sous le siège. Serrez à la position voulue à l'aide des vis à serrage à main (E).

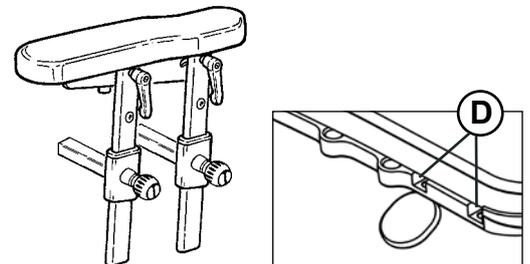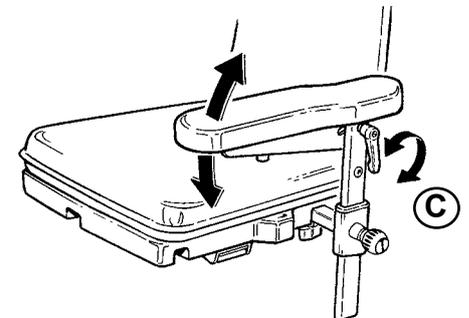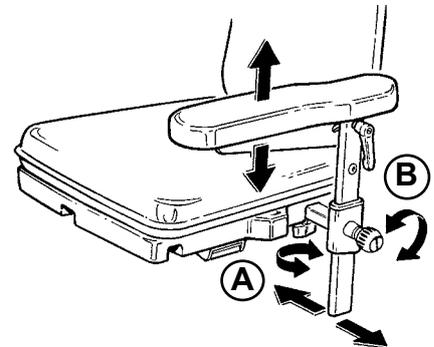

! Vous pouvez monter des barres des deux côtés du plateau pour le stabiliser.

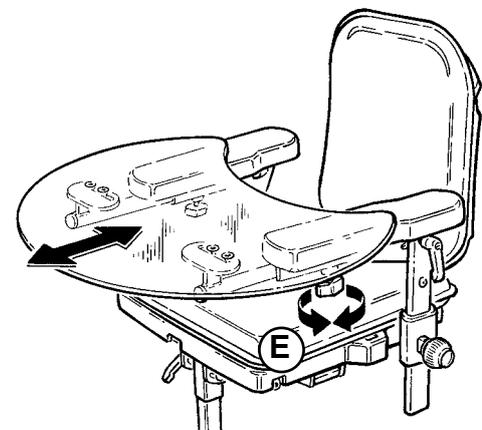

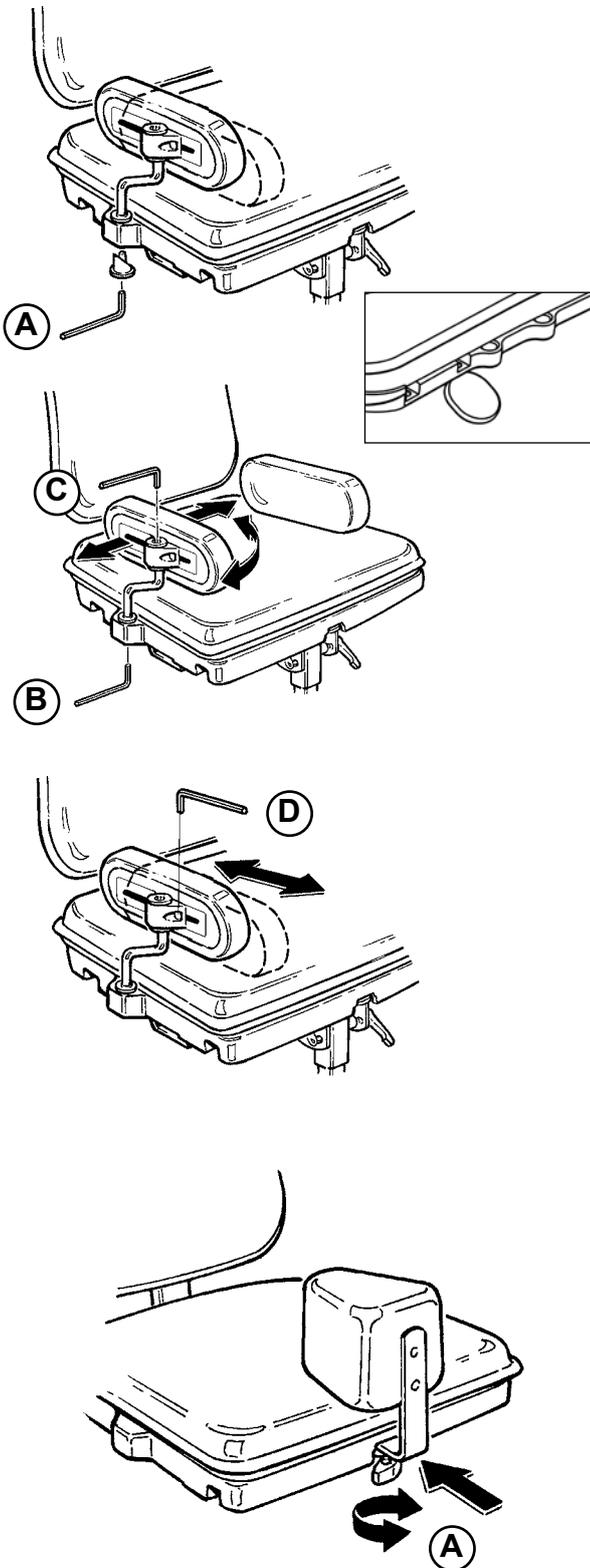

FR SUPPORTS DES HANCHES

Servez-vous de la clé Allen 5 mm incluse pour monter les supports de hanches dans le siège (A).

 Le Wombat taille 3 dispose de deux options différentes pour placer les supports de hanches.

Desserrez les deux vis (B) et (C) et réglez les supports de hanches tout autour. Serrez à l'aide de la clé Allen 5 mm fournie.

Utilisez la clé Allen de 4 mm fournie pour desserrer les vis (D) et réglez la profondeur du support de hanches. Réglez la profondeur dans les fentes et serrez à la position voulue.

FR POMMEAU

Montez le pommeau devant le siège.

Réglez la profondeur en desserrant la vis à ser-
rage à main (A) sous le siège.

FR SUPPORTS ESCAMOTABLES POUR LES GENOUX

Les supports de genou sont montés sur le côté du siège et sont fixés à l'aide de deux vis 4 mm sous le siège (A).





Utilisez la clé Allen 5 mm pour desserrer la vis (B) et orienter les supports de genou.

Orientez le coussin sur le support de genou en vous servant de la clé Allen 4 mm et desserrez la vis (C).


Utilisez la clé Allen 4 mm pour desserrer la vis (D) et ajustez la profondeur. Serrez à la position souhaitée.

Enfoncez le bouton rouge (E) pour rabattre le support de genou.

 Il est recommandé de lubrifier occasionnellement les parties escamotables.

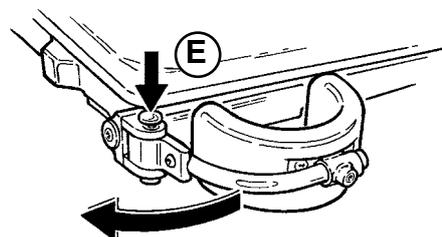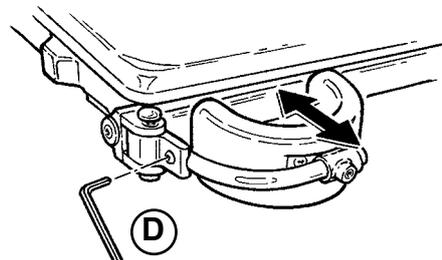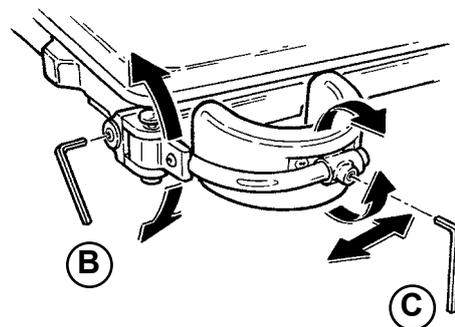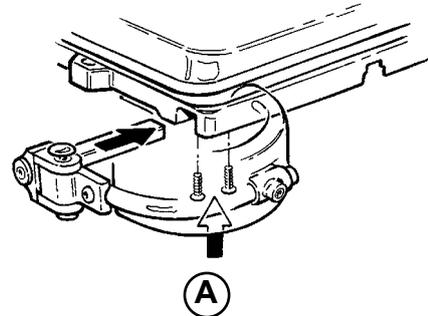


FR REPOSE-PIED

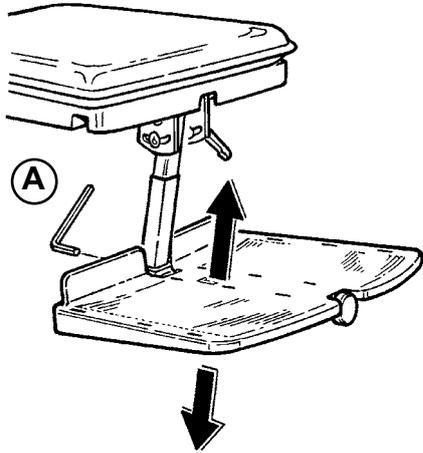


Le Wombat est livré de série avec un repose-pied. Il est possible de démonter le repose-pied, ce qui représente un avantage lorsque le Wombat est utilisé à hauteur de plancher. D'autre part, le repose-pied peut être réglé en hauteur. Utilisez la clé Allen 4 mm pour desserrer/reserrer (A).

Pour incliner la barre du repose-pied, desserrez la poignée (B). Réglez l'inclinaison et serrez.

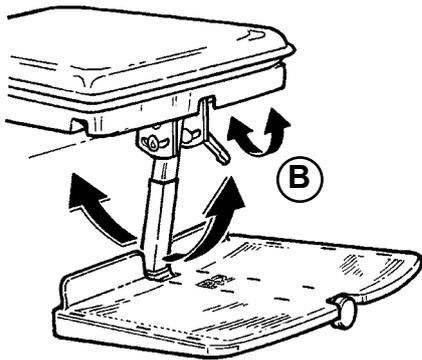


Inclinez la plaque du repose-pied en tournant la vis devant la plaque (C).

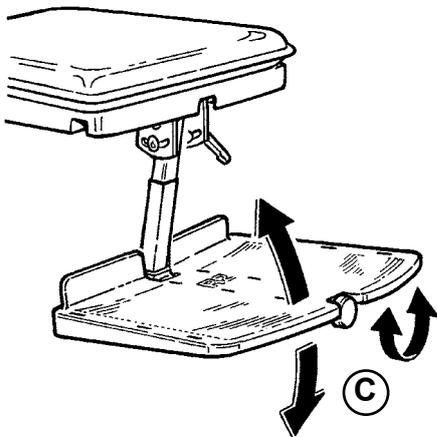

FR POIGNÉES POUR LES ASSISTANTS


Montez les poignées sur le dossier du siège et inclinez vers le haut/bas selon le besoin.

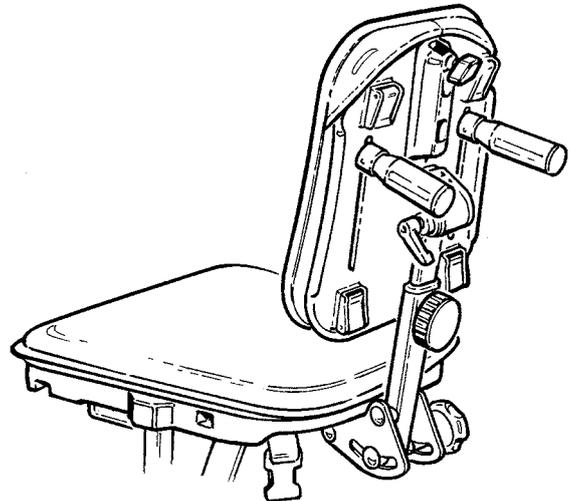


FR VESTES ET CEINTURES

Le Wombat peut être équipé de diverses vestes et ceintures.

Pour faciliter le montage, le Wombat est équipé de deux boucles de 40 mm et de deux autres de 25 mm sous le siège ainsi que de quatre boucles de 25 mm sur le dossier.

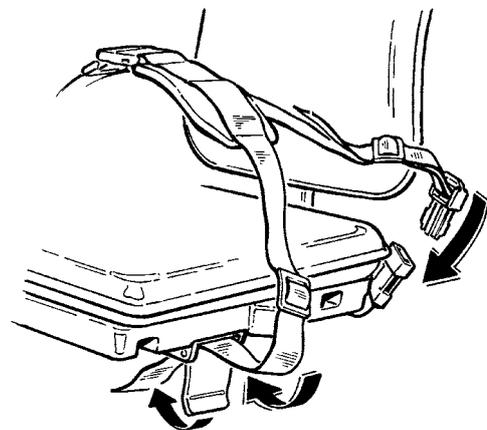

Veillez à ce que tous les réglages et fixations soient positionnés et ajustés correctement et vérifiez-les régulièrement.

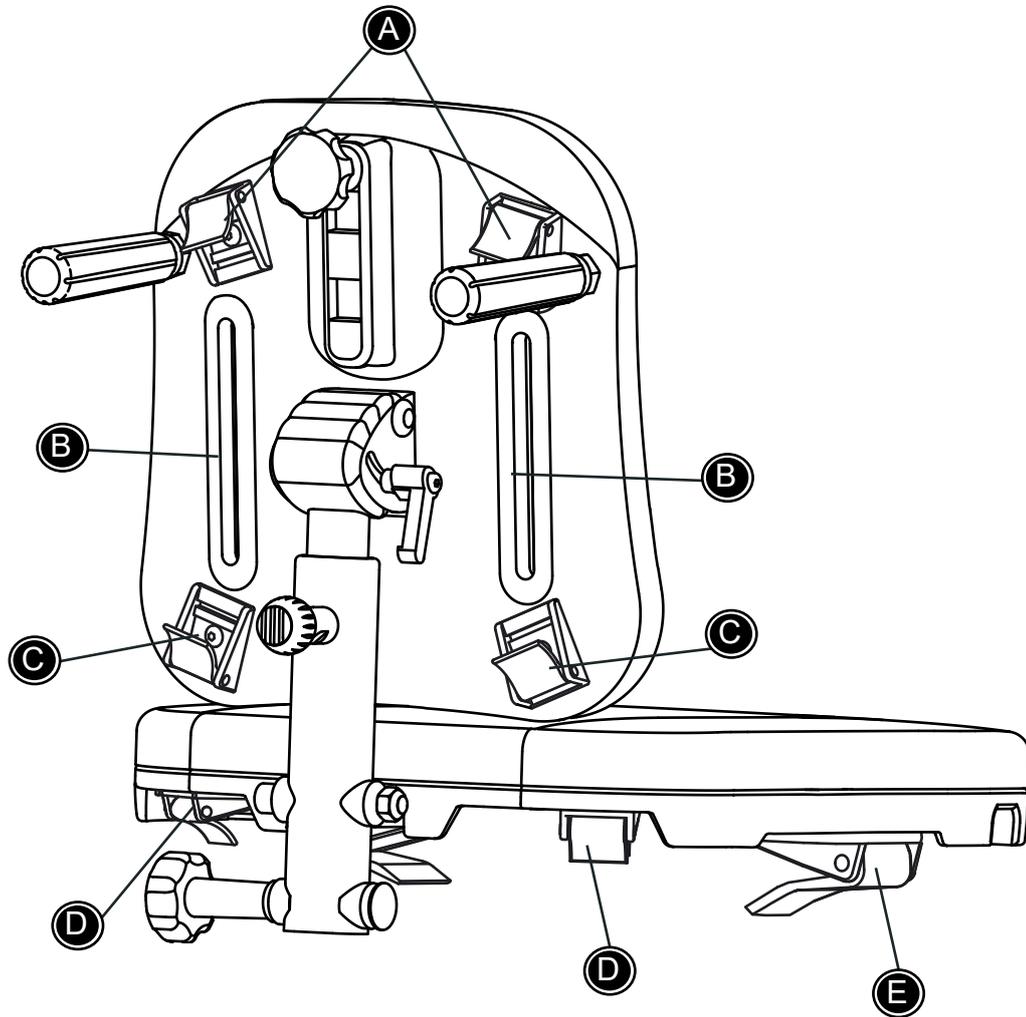


Utiliser ce dessin avec dans les descriptions des pages suivantes

FR LE HARNAIS VESTE

Le Harnais vest et la vest croisée peuvent être ouverts ou fermés en utilisant les boucles et la fermeture à glissière.

Suivre les instructions ci-dessous, à l'aide de la page 16.

- * Monter les sangles d'épaule dans les fixations de sangle en haut du dossier (A)
- * Passer les sangles hautes par les fentes sur les cotés du dossier (B) et mettre un blocage sur la sangle.
- * Passer les sangles basses dans les fixations les plus externes en bas du dossier (C).

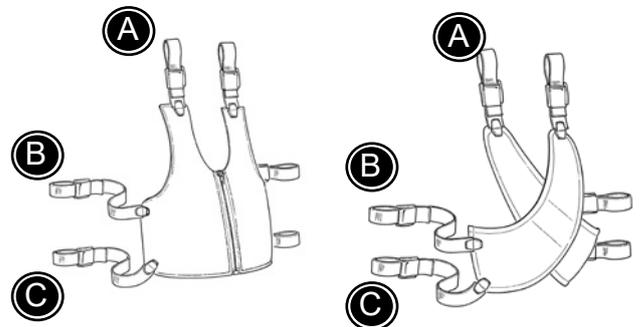


! Veillez à ce que tous les réglages et fixations soient positionnés et ajustés correctement et vérifiez-les régulièrement.

FR LE HARNAIS THORACIQUE


Le harnais thoracique peut être ouvert ou fermé en utilisant les boucles.

Suivre les instructions ci-dessous à l'aide de la page 16.

- * Monter les sangles d'épaule dans les fixations de sangle en haut du dossier (A)
- * Passer les sangles hautes par les fentes sur les cotés du dossier (B) et mettre un blocage sur la sangle.
- * Passer les sangles basses dans les fixations les plus externes en bas du dossier (C).

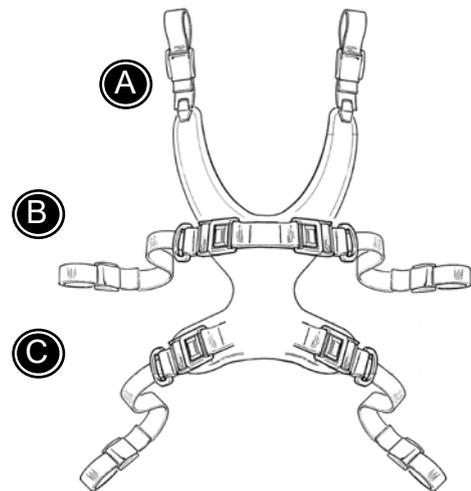

! Veillez à ce que tous les réglages et fixations soient positionnés et ajustés correctement et vérifiez-les régulièrement.

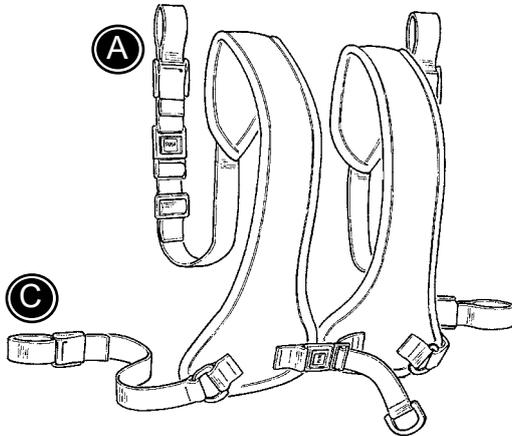


FR LE HARNAIS REMBOURRÉE

Le harnais rembourré peut être ouvert ou fermé en utilisant les boucles.

Suivre les instructions ci-dessous avec l'aide de la page 16.

- * Monter les sangles d'épaule dans les fixations de sangle en haut du dossier (A)
- * Mettre les sangles sur les cotés dans les fixation de sangles du dossier (B).

 Veillez à ce que tous les réglages et fixations soient positionnés et ajustés correctement et vérifiez-les régulièrement.

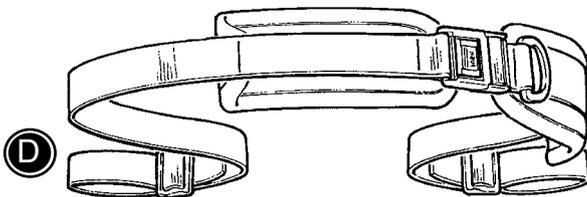

FR LA CEINTURE

La ceinture rembourrée peut être ouverte ou fermée en utilisant la boucle.

Suivre les instructions ci-dessous avec l'aide de la page 16 .

- * Mettre les sangles dans les fixations placées sous le siège (D).

 Veillez à ce que tous les réglages et fixations soient positionnés et ajustés correctement et vérifiez-les régulièrement.

FR LA CEINTURE EN Y REMBOURRÉE


La ceinture en Y rembourrée peut être ouverte ou fermée en utilisant la boucle.

Suivre les instructions ci-dessous avec l'aide de la page 16 .

- * Mettre les sangles dans les fixations placées sous le siège (D).
- * Mettre les sangles (E) dans les fixations (E) placées sur le devant du siège.

E et D peuvent être intervertis.

 Veillez à ce que tous les réglages et fixations soient positionnés et ajustés correctement et vérifiez-les régulièrement.

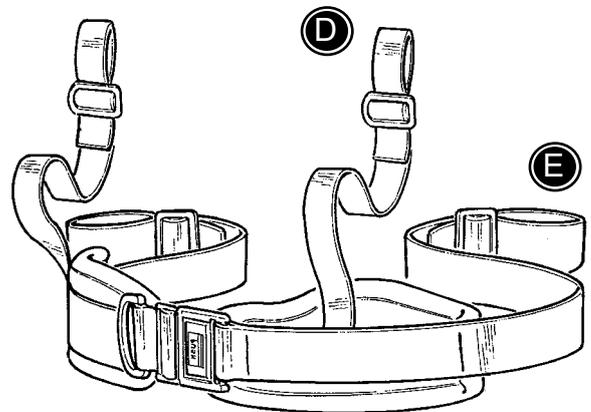


FR LA SANGLE D'ABDUCTION


Monter les fixation –blocage de sangles sur le siège voir page 15.

Suivre les instructions ci-dessous avec l'aide de la page 16 .

- * Ouvrir les boucles (G).
- * Mettre les sangles (D) dans les fixations de ceinture sous le siège (D).
- * Placer l'enfant sur le harnais et fermer les boucles G sur les cuisses.

 Veillez à ce que tous les réglages et fixations soient positionnés et ajustés correctement et vérifiez-les régulièrement.

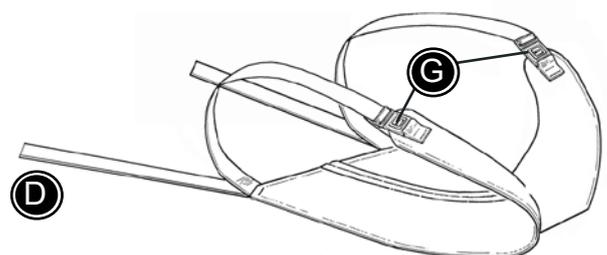

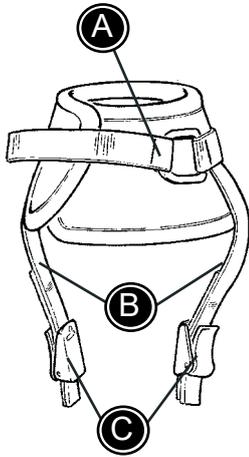

FR LA SANGLE DE CHEVILLE


La sangle de cheville peut être ouverte ou fermée à l'aide du Velcro ou de la boucles (A).

Pour le montage suivre les instructions ci-dessous.

- * Retirer les boucles (C).
- * Tirer les sangles (B) par les fentes dans le repose pieds.
- * Remettre les boucles (C) et s'assurer que les sangles ne glissent pas.



Veillez à ce que tous les réglages et fixations soient positionnés et ajustés correctement et vérifiez-les régulièrement.

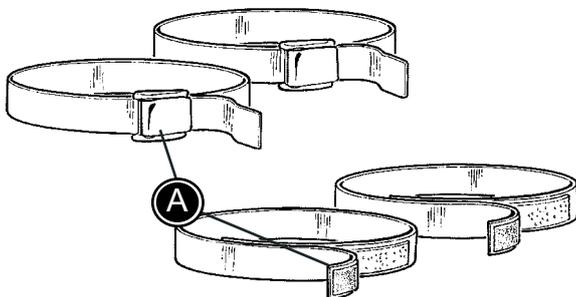

FR LA SANGLE DE PIED

Les sangles de pied peuvent être ouvertes et fermées en utilisant le velcro ou la boucle (A).

Pour le montage suivre les instructions ci-dessous

- * Ouvrir les sangles et les tirer (A) par les fentes des palettes repose pied.
- * Fermer les sangles autour du pied




Veillez à ce que tous les réglages et fixations soient positionnés et ajustés correctement et vérifiez-les régulièrement.

FR SUPPORT DE POIGNET

La sangle de poignée peut être ouverte ou fermée en utilisant la boucle (A).

Pour le montage suivre les instructions ci dessous

- * Mettre la sangle de poignée autour du poignet de l'utilisateur
- * Mettre la sangle (B) autour du montant du repose bras.

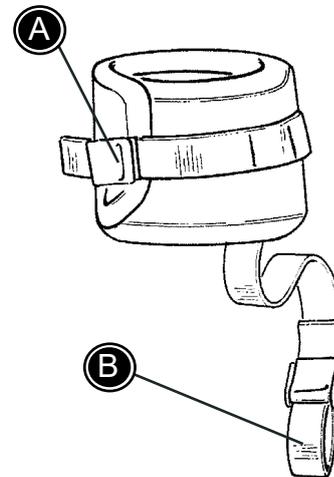


Veillez à ce que tous les réglages et fixations soient positionnés et ajustés correctement et vérifiez-les régulièrement.

FR LE HARNAIS EN H


Le harnais en H peut être ouvert ou fermé en utilisant la boucle

Suivre les instructions ci-dessous avec l'aide de la page 16.

- * Monter les sangles d'épaule dans les fixations de la partie haute du dossier (A)
- * Monter les sangles latérales dans les fixations pour ceinture du dossier (B)

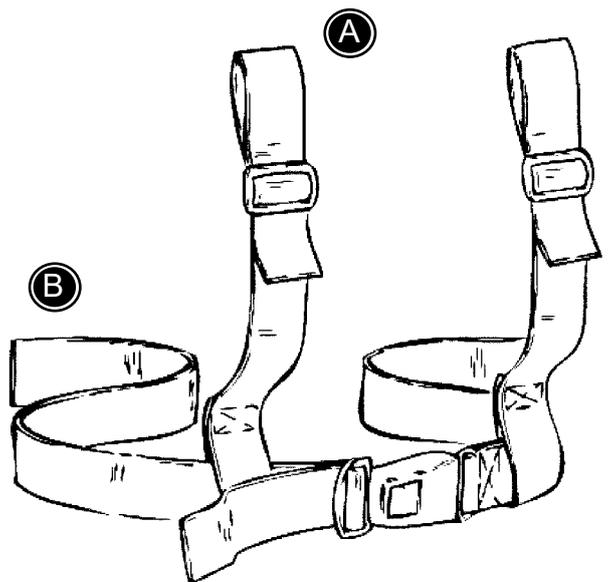


Veillez à ce que tous les réglages et fixations soient positionnés et ajustés correctement et vérifiez-les régulièrement.

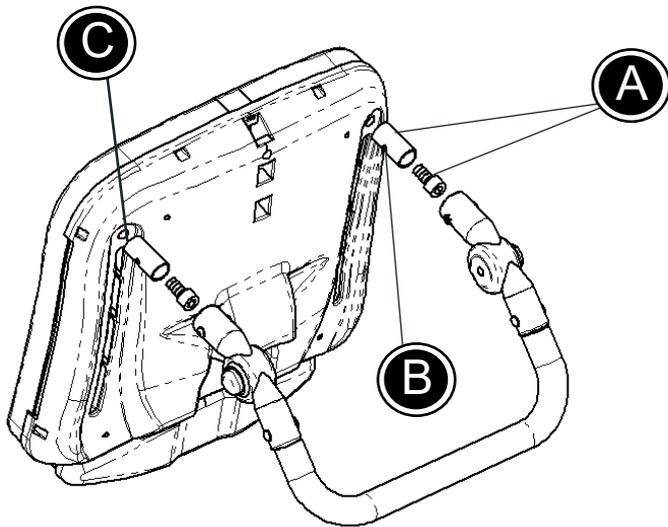

FR BARRE DE POUSSÉE


Placez les douilles arrondies de chaque côté du dossier du Wombat et montez-les à l'aide du gros boulon (A). Veillez à ce que les deux trous dans la douille soient placés horizontalement (B), lorsque celle-ci est serrée à l'aide de la clé Allen 8 mm jointe. Faites attention à la face inclinée de la douille. Cette dernière doit être montée sur le dossier du fauteuil en position droite (C).

Placez la barre de poussée dans les deux douilles.

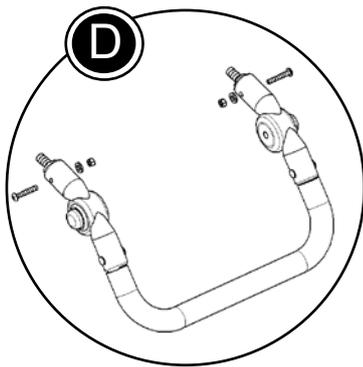

Placez les petits boulons (D) dans les trous extérieurs, par la barre de poussée et la douille. Le boulon et l'écrou sont placés à l'intérieur et fixés à l'aide de la clé Allen de 3 mm incluse.

 N'utilisez jamais la poignée de poussée pour soulever/tirer le fauteuil en vue de monter ou descendre des escaliers, paliers, courbes, etc. le fauteuil ne peut être soulevé que par deux personnes qui soulèvent le cadre en même temps. N'utilisez jamais la poignée de poussée pour soulever le fauteuil.

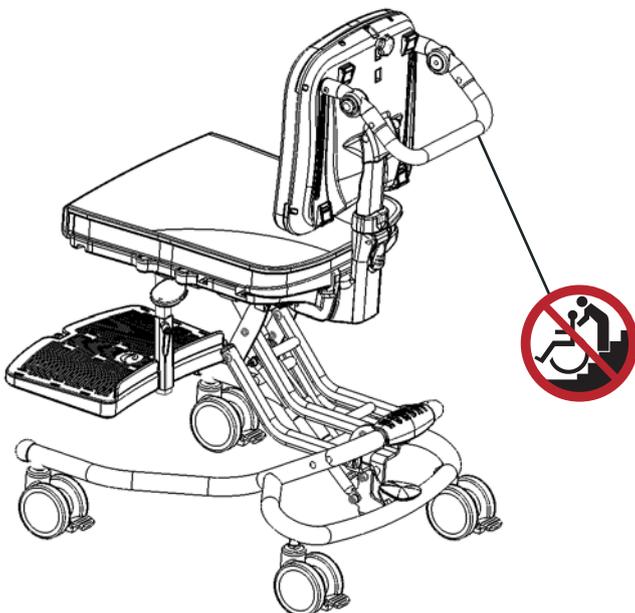

FR LE CONFORT D'ASSISE DU COUSSIN DE DOSSIER




Il est très facile d'obtenir un confort d'assise optimale dans le Wombat à l'aide de cales avec système velcro.





- 1) Ouvrez les fermetures velcro au sommet et sur les côtés du revêtement (A) et retournez ce dernier complètement ou partiellement.
- 2) Défaites la partie avant du revêtement (B) et enroulez-la .
- 3) Le soutien lombaire (C) et les cales (D) sont réglables et amovibles selon le besoin.
- 4) Montage du revêtement :

Si le revêtement est retiré du coussin, il est important de toujours effectuer le montage dans le bon ordre.

Renverser le coussin et retournez le revêtement.

Pour monter le revêtement, commencez par monter le velcro sur le bord inférieur (E) du revêtement et du coussin. A présent, placez le revêtement sur l'avant du coussin et fixez-le sur les côtés et au sommet.

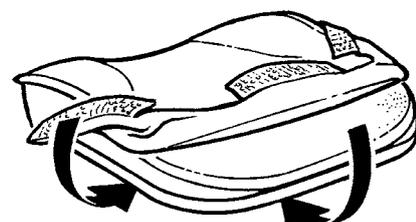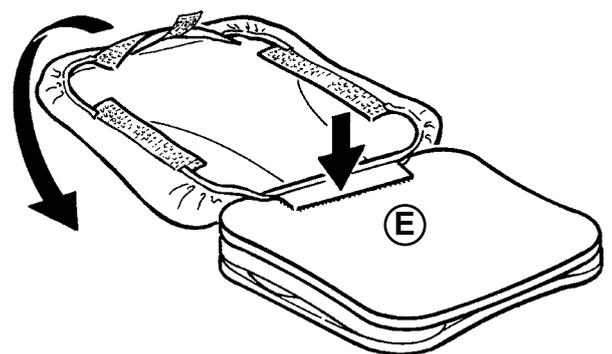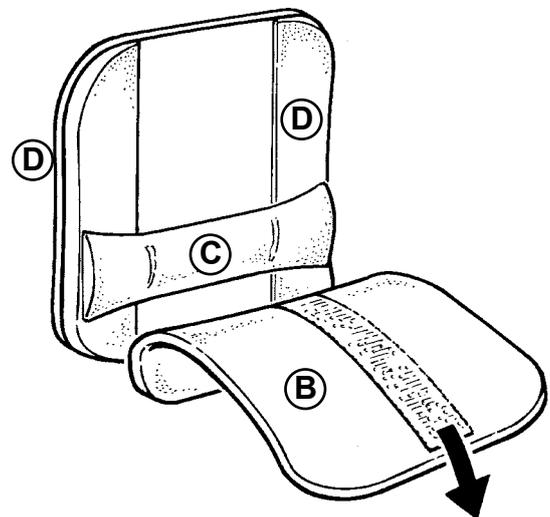

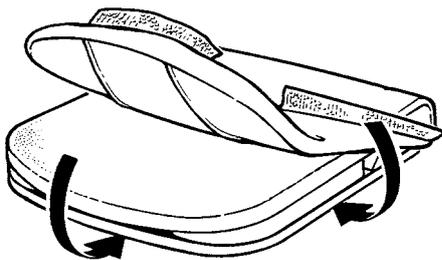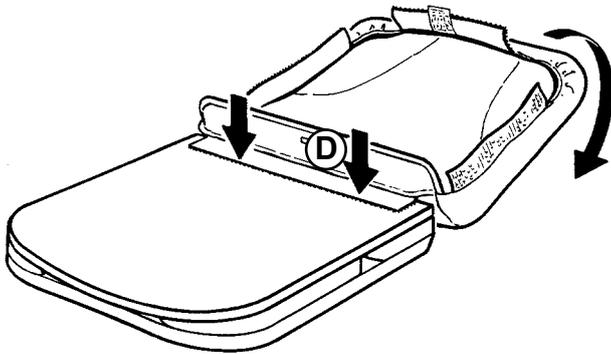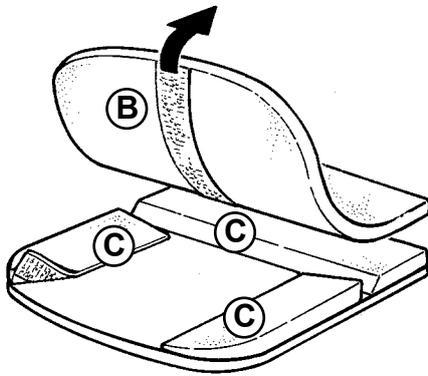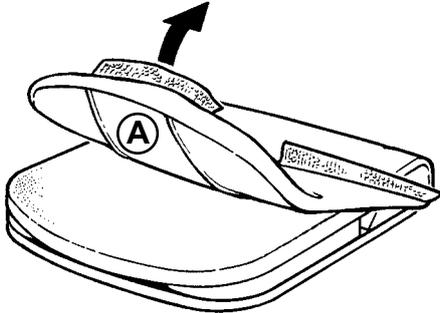

FR LE CONFORT D'ASSISE DU COUSSIN DE SIÈGE

Il est très facile d'obtenir un confort d'assise optimale dans le Wombat à l'aide de cales avec système velcro.

- 1) Ouvrez les fermetures velcro à l'avant et sur les côtés du revêtement (A) et retournez ce dernier complètement ou partiellement.
- 2) Defaites la partie supérieure du revêtement (B) et enrroulez-la .
- 3) Les cales (C) sont réglables et amovibles selon le besoin.
- 4) Montage du revêtement :

Si le revêtement est retiré du coussin, il est important de toujours effectuer le montage dans le bon ordre.

Renverser le coussin et retournez le revêtement.

Pour monter le revêtement, commencez par monter le velcro sur le bord arrière (D) du revêtement et du coussin. A présent, placez le revêtement sur l'avant du coussin et fixez-le sur les côtés et sur le bord avant.

FR IDENTIFICATION DU PRODUIT

A) Numéro de série


WOMBAT basic :

L'étiquette est placée à l'intérieur du cadre juste au dessus de la roue arrière gauche.

WOMBAT upgrade :

L'étiquette est placée à l'intérieur du cadre juste au dessus de la roue arrière gauche.

WOMBAT Basic

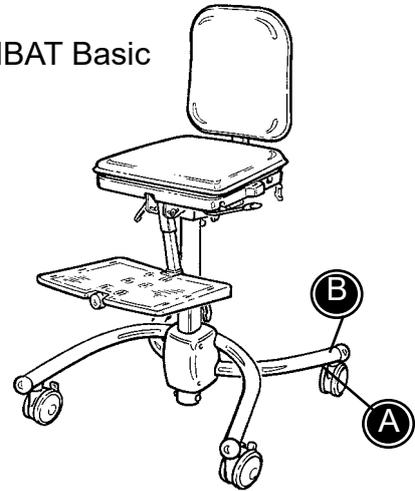

B) Fabricant

WOMBAT basic :

L'étiquette est placée sur le cadre juste au dessus de la roue arrière gauche.

WOMBAT upgrade :

L'étiquette est placée sur le cadre juste au dessus de la roue arrière gauche.

WOMBAT Upgrade



SN XXXXXX Max load: xxx kg
 DMR ver.: XXXX
 Art. no.: XXXXXXXX
 Product: XXXXXXXX - Size X

(xx)xxxxxxxxxxxxxxxxxx(xxx)xxxxxxxxxx(xxx)xxxxxxxx




R82®


Parallevej 3
 DK-8751 Gedved
 R82.org
 Made in Denmark

CE
 YYYY-MM-DD

WOMBAT Basic

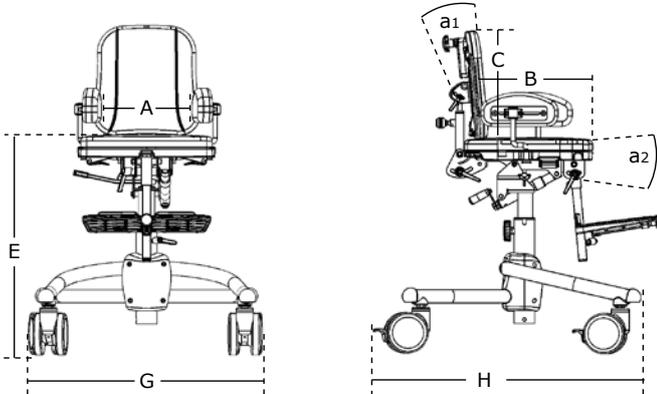

WOMBAT Upgrade

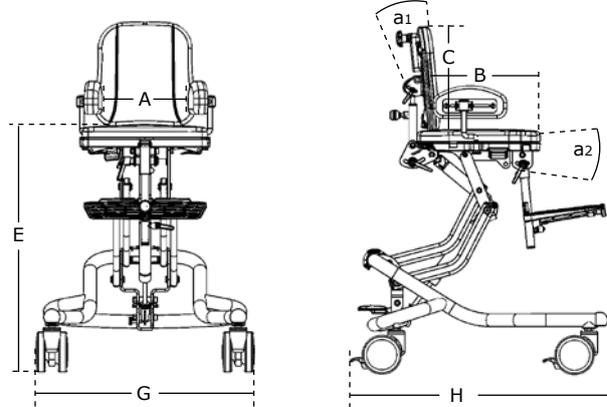

FR DIMENSIONS

	Wombat basic	Wombat basic	Wombat upgrade	Wombat upgrade	Wombat upgrade
	Taille 1	Taille 2	Taille 1	Taille 2	Taille 3
	mm (pouces)				
Largeur du siège (A)	210-300 (8¼-11½")	280-370 (11-14½")	210-300 (8¼-11½")	280-370 (11-14½")	250-440 (13¾-17¼")
Profondeur du siège (B)	160-290 (6¼-11¼")	230-360 (9-14")	160-290 (6¼-11¼")	230-360 (9-14")	300-480 (11½-18¾")
Hauteur du dossier (C)	280-340 (11-13¼")	310-380 (12-14¾")	280-340 (11-13¼")	310-380 (12-14¾")	390-500 (15¼-19½")
Hauteur du siège (E)	460-660 (18-25¾")	460-660 (18-25¾")	340-690 (13¼-27")	340-690 (13¼-27")	380-680 (14¾-26½")
Largeur du cadre (G)	550 (21½")	550 (21½")	550 (21½")	550 (21½")	610 (21½")
Longueur du cadre (H)	600 (23¾")	600 (23¾")	610 (23¾")	610 (23¾")	720 (28¾")
Angle du dossier	40°	40°	40°	40°	43°
Angle du siège	-20° to +15°	-20° to +15°	-20° to +15°	-20° to +15°	-22° to +10°
Charge max.	45 kg (99 lb)	70 kg (154 lb)			
Poids	14,5 kg (32 lb)	14,5 kg (32 lb)	15,5 kg (34 lb)	15,5 kg (34 lb)	22 kg (48½ lb)


FR INFORMATIONS TECHNIQUES

Siège : ABS
Coussins : Mousse résistante au feu
Couverture : Trevira CS résistant au feu
Cadre : Acier revêtu de poudre

FR FABRIQUANT

R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved
Danemark

FR DISTRIBUTEUR

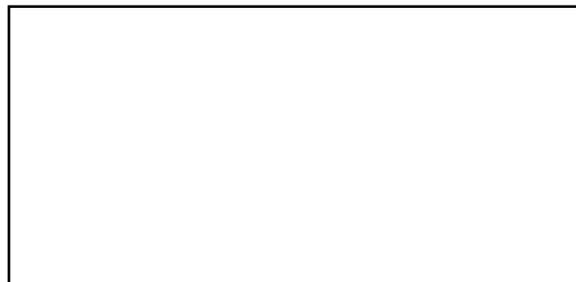

Pour trouver votre distributeur, reportez-vous au site www.R82.com

FR ENTRETIEN ET MAINTENANCE

REMBOURRAGE

Le rembourrage est fait en mousse résistante au feu et matériau de confort. Il peut facilement être retiré du coussin et lavé en machine à 40°. De plus, un nettoyage régulier à l'aspirateur et un brossage aident à préserver la couleur et l'aspect du tissu.

ROUES

Les roues du Wombat doivent être régulièrement nettoyées à l'aide d'un chiffon humide. Si les roues sont particulièrement sales, utiliser un produit dégraissant.

FREINS CENTRAUX

Les câbles de freins centraux doivent être resserrés lorsque cela s'avère nécessaire. Vérifier le fonctionnement des freins au moins une fois par mois.

CADRE

Serrez régulièrement toutes les vis sous le fauteuil. De plus, il est important de maintenir le fauteuil propre, à la fois pour votre confort et pour la longévité du fauteuil. Le cadre doit être régulièrement nettoyé à l'aide d'un chiffon humide.

 Ne pas utiliser de produits de nettoyage à base de chlore ou d'alcool dénaturé.

INSPECTION

Il est important de serrer régulièrement toutes les vis du fauteuil. Toutes les vis qui servent à fixer les accessoires doivent être contrôlées au moins une fois par mois. De plus, il est important de connaître tous les signes de début de défauts sur le cadre, les pièces en PVC et autres.

REPARATION

En cas de défaut sur votre fauteuil, vous devez contacter immédiatement votre revendeur. Ne pas utiliser les fauteuils défectueux. Si votre fauteuil doit être remis en état ou réparé, cela doit être fait uniquement avec des pièces R82 d'origine. Les accessoires ou pièces détachées disponibles qui sont cassées peuvent être renvoyées à R82 en vue de leur réparation. En cas de défaut dans les pièces fondamentales, l'ensemble du fauteuil doit être renvoyé à R82 pour réparation. R82 ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou blessure provoquée par l'utilisation de pièces non d'origine ou de réparations effectuées par une personne non agréée par R82.

 Le vérin à gaz fonctionne sans maintenance.
Ne pas exposer le vérin à gaz à de la pression, des températures élevées ou une perforation.

 Boîtier de la batterie
Le boîtier de la batterie peut être dangereux pour l'environnement. Par conséquent, au moment de sa mise au rebut, il convient de le déposer dans un centre de recyclage.

FR GUIDE D'ELIMINATION DES TÂCHES

SANG

Laver le sang à l'eau froide. Si cela ne suffit pas, ajouter un détergent de cuisine neutre.

ENCRE

Retirer la plus grande quantité possible à l'aide de papier absorbant. Nettoyer avec de l'alcool dénaturé à 20 % et laver avec de l'eau à laquelle un détergent de cuisine neutre aura été ajouté.

Chocolat ET SUCRERIES

Tamponner avec de l'eau tiède

HERBES ET VEGETAUX

Tamponner avec de l'eau tiède avec ou sans détergent de cuisine neutre.

CAFE, THE et LAIT

Retirer la plus grande quantité possible à l'aide de papier absorbant. Tamponner avec de l'eau contenant un détergent de cuisine neutre.

STYLOS A BILLE ET COSMETIQUES

Nettoyer à l'alcool

VERNIS A ONGLES

Tamponner avec un dissolvant pour vernis à ongles. Utiliser de l'acétone si cela ne suffit pas.

HUILE ET GRAISSE

Commencer par saupoudrer de talc sur la tâche, puis laisser agir. Brosser. Enfin, tamponner délicatement avec un tissu imbibé de benzène ou d'alcool.

CIRAGE

Tamponner délicatement avec un tissu imbibé de benzène ou d'alcool.

CONFITURE, SIROP, fruit ET JUS

Commencer par retirer la plus grande quantité possible à l'aide d'une cuillère. Ensuite, tamponner avec de l'eau tiède.

VINS ET SPIRITUEUX

Commencer par retirer la plus grande quantité possible à l'aide de papier absorbant. Ensuite, tamponner avec de l'eau contenant un détergent de cuisine neutre. Enfin, rincer avec de l'alcool dénaturé dilué.

PEINTURE A L'HUILE

Commencer par nettoyer avec de l'essence de térébenthine. Ensuite, tamponner avec de l'eau contenant un détergent de cuisine neutre. Si la tâche est ancienne, consulter un expert.

PEINTURE A L'eAU

Tamponner avec de l'eau froide contenant un détergent de cuisine neutre. Si la tâche est ancienne, consulter un expert.



