



***molift***<sup>®</sup>

# Molift Duo

Un portique autonome et modulable

# Molift Duo

Portique autonome et réglable sans aucune fixation au plafond, mur ou sol. La solution pour une utilisation ponctuelle du lève-personne sur rail.

## La solution pour toutes les dimensions de lit ou de chambre

Molift Duo propose un système simple à mettre en oeuvre sans installation au plafond ou aux murs. Il est parfait pour un recours au lève-personne sur rail sur une courte durée, à l'hôpital, en établissement de long séjour ou à la maison.

Associé au moteurs Molift Air ou Nomad et avec les Harnais Molift, le portique Molift Duo répond à tous les besoins de manutention de personne. Sa capacité de levage atteint 300 kg et il est parfait pour lever et transférer une personne du lit à tout type de fauteuil, depuis le sol, etc.

## Léger et robuste

Molift Duo est composé d'aluminium et il est conçu pour être assemblé simplement, puis facilement démonté et déplacé.

Ce portique comporte 2 poteaux réglables avec 4 positions prédéfinies et une hauteur maximum de 2550 mm. Le rail peut, quant à lui, mesurer entre 2000 mm et 3500 mm. Ceci en fait un portique adaptable à toute taille de lit ou de pièce.



### Modèle

Modèle	Réf.
Molift Duo 2000	1600013
Molift Duo 2500	1600015
Molift Duo 3000	1600017
Molift Duo 3500	1600019

### Poids des composants

Poteau (complet)	14,8 kg
Poteau (sans plétement)	11 kg
Rail	4,2 kg/m
Plétement	3,8 kg

### Réf.

### Poids

Capacité max. (CMU)	300 kg
Poids total	38 - 44 kg

### Matériaux

Aluminium anodisé, plastique




Nettoyer /désinfecter à l'aide d'une solution standard non abrasive au pH entre 5 et 9 ou avec une solution désinfectante à 70°

## Caractéristiques



### Facile à installer

Son faible poids facilite le montage et l'installation du portique et son transport dans une autre pièce.

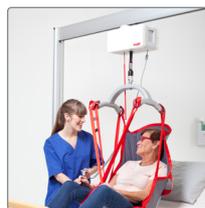

### Grande stabilité

Le portique possède une stabilité inégalée et un design hors pair.




### Hauteur réglable

La hauteur du rail peut être réglée entre 225 et 255 cm grâce à quatre positions prédéterminées sur les poteaux. La position est conservée grâce à des goupilles à ressort.



### Station de charge intégrée

Les moteurs Molift Air et Nomad peuvent surcharger en positionnant la télécommande dans la station de charge intégrée au poteau.

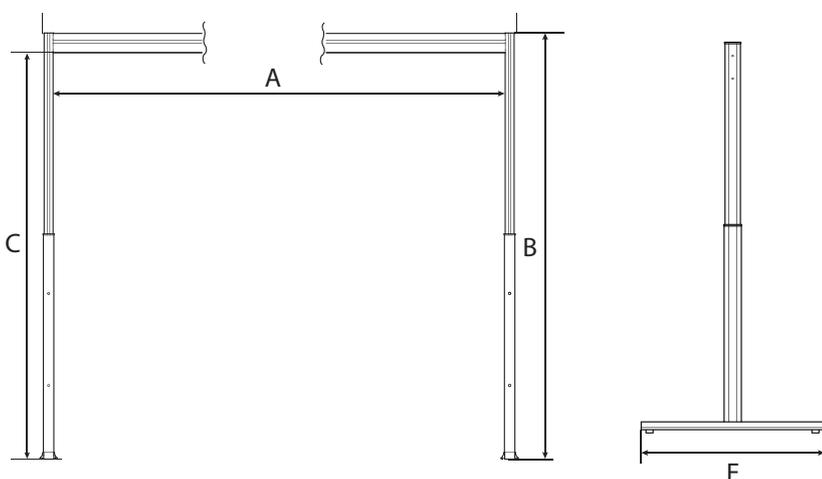

### Dimensions

A: Longueur de rails	2000, 2500, 3000, 3500mm
B: Hauteur	2250 - 2550 mm
C: Hauteur interne	2400 mm
E: Profondeur	1200 mm
Espace interne max.	3500 x 2400mm





Etac est un leader mondial spécialisé dans la conception et la production de d'aides techniques et d'équipement d'aide à la mobilité des personnes. Nous avons à coeur de proposer des solutions pour optimiser la qualité de vie des personnes, de leur entourage et des soignants.

Restez informés de nos dernières nouveautés en consultant  
notre site internet: [www.etac.com](http://www.etac.com)

Etac



+33 03 74 09 77 68



[info.france@etac.com](mailto:info.france@etac.com) / [sav.france@etac.com](mailto:sav.france@etac.com)



[www.etac.com](http://www.etac.com)

 **etac**<sup>®</sup>

Creating Possibilities