



molift[®]

Molift Transfer Pro

Den Transfer im Sitzen verbessern und die Mobilität fördern

Molift Transfer Pro

Ein Transfer ist mehr als nur eine Bewegung - er ist ein wichtiger Teil der Rehabilitation und Erhaltung körperlicher Fähigkeiten. Der Molift Transfer Pro trägt zu einer sicheren und gesunden Pflegeumgebung sowohl für den Nutzer als auch für das Pflegepersonal bei.

Optimiert für den Transfer im Sitzen

Transfer Pro ist eine Aufstehhilfe für den Transfer im Sitzen, z. B. zwischen Bett, Rollstuhl, Toilette oder ähnlichem. Der Nutzer sollte über eine gute Rumpfstabilität verfügen und in der Lage sein, den Anweisungen zu folgen und das eigene Körpergewicht hochzuziehen.

Der Transfer Pro ist die ideale Lösung für verschiedene Bereiche des Gesundheitswesens wie Krankenhäuser, Pflegeheime und die häusliche Pflege.

Erhöhter Komfort und Sicherheit durch innovatives Design

Mit seinem ergonomischen Griff, der sowohl dem Nutzer als auch dem Pflegepersonal mehrere Griffmöglichkeiten bietet, und dem einfachen Zugang zum Waschbecken sorgt der Transfer Pro für eine bessere Benutzerfreundlichkeit. Die Sitzpolster sorgen für einen bequemen und sicheren Transfer, während sich die weich gepolsterte Beinstütze den Schienbeinen anpasst und so den Komfort erhöht. Dank der niedrigen Einstiegshöhe und der abgeschrägten Kante kann der Nutzer seine Füße ganz leicht auf der Fußplatte platzieren. Die Breite der Beine lässt sich von den Pflegekräften bequem eingestellt werden. Die Zentralbremse bietet sowohl eine akustische als auch eine visuelle Rückmeldung und blockiert beide Räder gleichzeitig.



Ergonomische Griffe

Ergonomische Griffe für Nutzer und Pflegepersonal, die sowohl Komfort als auch eine ergonomische Positionierung der Hände gewährleisten.



Zentralbremse

Intuitive Zentralbremse, die beide Räder unabhängig von ihrer Position blockiert und gleichzeitig ein akustisches und visuelles Feedback gibt.



Sitzpolster

Die stabilen Sitzpolster ermöglichen dem Nutzer einen bequemen Transfer. Die abgeschrägten Kanten sorgen für einen sicheren Halt.



Wenderadius

Die hochwertigen Räder sorgen für ein leichtes Manövrieren, so dass beim Schieben/Ziehen nur ein minimaler Kraftaufwand erforderlich ist.

Klinischer Nutzen:

- Verringert arbeitsbedingte Verletzungen oder Belastungen des Pflegepersonals.
- Ermöglicht eine frühzeitige Rehabilitation.
- Bequeme und sichere Transfers.
- Unterstützt den Nutzer bei der Verwendung der eigenen körperlichen Fähigkeiten.
- Ermöglicht eine einhändige Pflege.

Natürliches Bewegungsmuster

Ein natürliches Bewegungsmuster bezieht sich auf die Art und Weise, wie der Mensch seinen Körper bei Aktivitäten des täglichen Lebens bewegt.

Diese natürlichen Bewegungsmuster sind Bestandteil der menschlichen Physiologie und wurden von der Evolution so geformt, dass sie Aktivitäten wie Aufstehen und Hinsetzen erleichtern.

Der Transfer Pro unterstützt das natürliche Bewegungsmuster, indem er es dem Nutzer ermöglicht, die Beine anzuwinkeln und die Füße unter sich zu platzieren. Das großzügige Design des Griffs erlaubt es dem Nutzer zusätzlich, sich beim Aufstehen nach vorne zu lehnen.



Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr über den Molift Transfer Pro.

Produkt	Artikelnummer	Spezifikationen
Molift Transfer Pro	16090300	Höhe 1179 mm Länge 920 mm Breite 669 mm Höhe der Fußplatte 56 mm Wenderadius mit offenen/geschlossenen Beinen 1030/1146 mm
Nutzerhöhe Minimum - Maximum	1490-2000 mm	
Gewicht Gesamtgewicht Max. Nutzergewicht (SWL)	28,2 kg 200 kg	
Material Pulverbeschichtetes Aluminium, Kunststoff, Stahl, Polyuretanschaum		
		<p>Reinigen/desinfizieren Sie das Produkt mit einem handelsüblichen, nicht scheuernden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9 oder mit einer 70%igen Desinfektionslösung.</p>


Zubehör



Molift Handgürte

Hilft dem Nutzer, den Griff zu erreichen.

Molift Handgürte82511

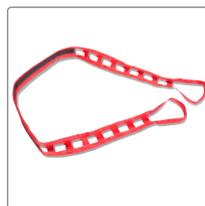

Molift Sicherheitsgurt

Ein Sicherheitsgurt, der für zusätzlichen Halt und Stabilität sorgt. In zwei Größen erhältlich.

Molift Sicherheitsgurt S/M 82508

Molift Sicherheitsgurt L/XL 82509



Molift Gürtel

Ein Gürtel mit Gleitbezug, der dem Nutzer beim Aufstehen/Hinsetzen unterstützt und beim Transfer zusätzlichen Halt bietet.

Molift Gürtel S/M 82528

Molift Gürtel L/XL 82529



Molift Gürtel mit Schnalle

Ein Gürtel mit Schnalle, der dem Nutzer beim Aufstehen/Hinsetzen unterstützt und beim Transfer zusätzlichen Halt bietet.

Molift Gürtel mit Schnalle S/M 82964

Molift Gürtel mit Schnalle L/XL 82965



Molift Gürtel, breit

Ein L/XL-Gürtel mit Gleitbezug, der dem Nutzer beim Aufstehen/Hinsetzen unterstützt und beim Transfer zusätzlichen Halt bietet.

Molift Gürtel, breit 90301



Molift Transfer Pro Infusionshalterung

Eine höhenverstellbare Infusionshalterung zur Montage am Molift Transfer Pro.

Molift Infusionshalterung1630030



Molift Transfer Pro O-Halterung

Die O-Halterung dient der sicheren Aufbewahrung und dem Transport von Sauerstoffflaschen.

Molift Transfer Pro O-Halterung1630040

Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities