

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities



R82<sup>®</sup>

# R82 Wombat Living

Funksjonell arbeidsstol for barn i barnehage, skole og i hjemmet



# Wombat Living

Wombat Living er en funksjonell arbeidsstol med mange tilpasningsmuligheter. Den passer perfekt for ulike aktiviteter i barnehagen eller skolen. Arbeidsstolen er justerbar fra gulvhøyde til bordhøyde, noe som gjør den til en allsidig aktivitetsstol som fremmer aktivitet og deltakelse for brukeren.

## En perfekt kombinasjon av design og funksjon

Wombat Living er en robust aktivitetsstol designet for både barn og tenåringer. Stolens minimalistiske utseende gjør at den passer godt innendørs.

Det høydejusterbare understellet kan justeres helt ned til 29 cm, og opp til 70 cm over gulvet. Kombinert med en tiltfunksjon fremover på opptil  $-10^\circ$ , gjør stående forflytning enklere, og bidrar til å unngå unødvendig og gjentakende løfting. Det høydejusterbare understellet bidrar også til mer aktivitet og deltakelse i hverdagslivet fordi barnet kommer nærmere aktiviteten.

Tiltfunksjonen for sete og rygg gjør det mulig å endre sittestilling, noe som øker kroppsaktiviteten. Dette kan redusere smerte og utmattelse hos barnet.



## Smarte funksjoner for ulike behov

Wombat Living kommer i tre størrelser, og med ulike alternativer for puter og tilbehør for å imøtekomme ulike behov for kroppsstøtte.

Stolen kommer med nedvippbare kjørehåndtak som monteres på baksiden. Disse gjør det enklere å flytte stolen mellom arbeidstasjoner/klasserom.

Wombat Living er utstyrt med fire lettrullende hjul som gjør stolen enkel å manøvrere. Alle hjulene er utstyrt med bremses for sikker forflytning inn og ut av stolen.

Wombat Living har i tillegg håndbetjent sentralbrems, som kan flyttes til høyre og venstre side, på forhjulene som standard.



## Standardkonfigurasjon til NAV Hjelpemiddelsentral

### Wombat Living

- Wombat Living str 1
- Wombat Living str 2
- Wombat Living str 3

### Art.nr

32950103  
32950203  
32950303

### HMS.nr

322384  
322385  
322386

**Understell:** Sort. Pulverlakkert ramme

**Høyderegulering:** Elektrisk

**Setehøyde:** 32-69 cm, gulv til topp setepute

**Rygg:** høyde-, dybde- og vinkelregulerbar

**Sete:** ABS-plast, vinkelregulerbart

**Hjul:** 100mm, lettjørte - låsbare

**Bremses:** Sentralbrems på forhjul, håndbetjent

**Puter:** Grå farge, avtakbare og vaskbare trekk

**Armlen:** Vinkel-og høyderegulerbare

**Fotplate:** Avtagbar, høyde- og vinkelregulerbar, oppfellbar

**Kjørehåndtak:** Nedfellbare

**Vippepedal:** Forenkler forflytning mellom rom

## Tilpass etter behov

Wombat Living er en arbeidsstol med mange tilpasningsmuligheter. For noen brukere passer en stol uten tilbehør og enkle standardfunksjoner. Andre kan trenge en stol med tilbehør og andre tekniske funksjoner. Her er mulighetene mange.

## Puter og trekk

Trekket er pustende og vannavstøtende for ekstra komfort. Både sete- og ryggpute har en overflatebehandling som gjør dem skitt- og vannavvisende. Eventuelt sølt væske kan enkelt tørkes bort eller børstes av.

Wombat Living blir levert med standard puter med korsryggstøtte i farge, grå.



## Det handler ikke bare om å sitte!

God sittestøtte er viktig for alle. Putene til Wombat Living tilbys i ulike størrelser og former for å møte ulike behov for kroppsstøtte. Velg mellom standardputer som gir god komfort og en behagelig sitteopplevelse, eller formede puter for komfort både for sete og rygg.

God sittestilling handler ikke bare om å sitte komfortabelt og med riktig støtte, men også om energieffektivisering og deltakelse i aktiviteter.

En god sittestilling bør bidra til:

- Riktig bruk av overkroppen og hendene i aktiviteter som å skrive, spise og drikke
- Riktig bruk av kommunikasjonshjelpemidler som fremmer barnets taleferdigheter
- Øke lysten til å leke og samhandle med jevnaldrende
- Selvstendighet for brukeren





## Mål og vekt

Det er viktig å måle brukeren for å få riktig konfigurering av stolen. For nøyaktige mål må brukeren ligge på en fast og plan overflate med hofter, knær og ankler i en 90 graders vinkel.

		<b>1</b> Gassylinder & EI	<b>2</b> Gassylinder & EI	<b>3</b> Gassylinder & EI
	Setebredde	300 mm	370 mm	420 mm
	Sittedybde	180-310 mm	250-380 mm	320-500 mm
	Ryggstøtتهøyde	280-340 mm	310-380 mm	390-475 mm
	Ryggstøtتهøyde (høy rygg)	360-430 mm	395-460 mm	460-550 mm
	Sittehøyde over gulv*	230-610 mm	230-610 mm	330-630 mm
	Max. brukervekt	45 kg	45 kg	70 kg
	Ryggstøtتهinkel	0° -28°	0° -28°	0° -33°
	Plan sitteinkel	-10° - 30°	-10° - 30°	-10° - 22°
	Lengde	650 mm	650 mm	650 mm
	Totalbredde	550 mm	550 mm	550 mm
	Vekt	18 kg	18,5 kg	23,5 kg

\*Målt med 75 mm svinghjul, ekskludert puter. I standardutførelsen med 100 mm svinghjul øker målene for setehøyde og totalhøyde med 30 mm.

## Egenskaper og funksjoner

### Riktig støtte

Wombat Living er en arbeidsstol som egner seg utmerket for daglige aktiviteter som lesing og læring på skolen, ha det gøy med venner og hjelpe til med husarbeid.

### Bekvem sittestilling

Putene kan fås i ulike størrelser og former slik at de oppfyller ulike behov for kroppsstøtte. Velg mellom standardputer som gir god komfort og en behagelig sitteopplevelse, eller formede puter for utmerket komfort både for sete og rygg.

### Tiltfunksjon fremover

Wombat Living kan tiltes opp til  $-10^{\circ}$  fremover. Et sete i en fremoverlent stilling oppmuntrer barnet til å flytte vekten sin fremover.

### Barnet kan vokse med stolen

Wombat Living er en aktivitetsstol med mange tilpasningsmuligheter.

### Selvstendighet

Wombat Living har en lav innstigningshøyde, tiltfunksjon fremover og brems på alle hjul, noe som gjør det enkelt for brukeren å bevege seg på en stabil og sikker måte.

### Høy sittekomfort

Putene er laget av tykt og komfortabelt skum med et luftgjennomtrengelig trekk. Seteputen har ekstra slitesterke kanter og en form som beskytter brukers knær.

### Høydejustering

Høyden på Wombat Living kan justeres på ulike måter. Omsorgspersonen kan justere høyden ved hjelp av pedalen på understellet eller med kontrollspaken på styrehåndtaket, begge drevet av en gassylinder. Alternativt kan både omsorgspersonen og brukeren justere det elektrisk via håndkontrollen. Vi leverer Wombat Living med elektrisk høydejustering.

### Lav innstegshøyde

Wombat Living kan justeres fra sittehøyde så lavt som 29 cm og opp til 70 cm over gulvet, avhengig av størrelse og konfigurasjon.



## Tilbehør



### Kjørebøyle, vinkeljusterbar

Str 1-2	3195148-1
Str 3	3195148-3



### Bord, farget plast

Gir støtte til armene		
Str 1-2	60x34 cm (BxD)	3195125
Str 3	60x46 cm (BxD)	3195126



### Puter formet

Formet rygg og sittepute for økt komfort.  
Grå, inkl. trekk

#### Ryggpute

Str 1	31955031-238
Str 2	31955032-238
Str 3	31955033-238

#### Sittdyna

Str 1	31955021-238
Str 2	31955022-238
Str 3	31955023-238



### Armlener, Swing away

Str 1-2	Kort armlensstang	3195112-1S
Str.1-2	Lang armlensstang	3195113-1S



### Formet sittepute inkl inkontinesentrekk

Vaskbart trekk

Str 1	31955021-237
Str 2	31955022-237
Str 3	31955023-237



### Rygg, fra kort til høy rygg

Str 1	3195560-1
Str 2	3195561-1
Str 3	3195562-1




### Sittepute inkl inkontinesentrekk

Str 1	31955321-282
Str 2	31955622-282
Str 3	31955623-282



### Sidestøtte, fast

For korrekt posisjonering og støtte  
Str 1-2 15x11 cm (HxD) 3195121

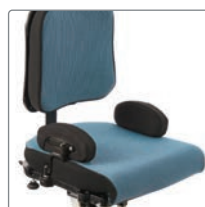

### Hoftestøtte


For ekstra støtte og smalere sittebredde

Str 1-2	8x19 cm (HxB)	3195110-1
Str 3	10x25 cm (HxB)	3195111-1
Trekk str 1-2, par		3195110-60
Trekk str 3, par		3195111-60



### Sidestøtter, utsvingbare

For korrekt posisjonering og støtte.  
For mer informasjon, alternativer og mål,  
se nettside.

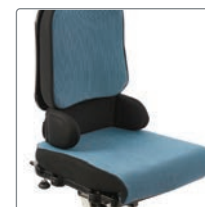

### Bekkenstøtte med sidevanger

Skaper stabilitet ved bekkenposisjonering. I kombinasjon med hoftestøttene gir det omfattende støtte rundt både bekken og lår. I kombinasjon med høy rygg.

Str 1	17-24 cm (HxB)	3195140-64
Str 2	23x30 cm (HxB)	3195140-65
Str 3	29x36 cm (HxB)	3195140-66



### Hjul med retningsstabilisator, sett

Str 1-3	3189592-KIT
---------	-------------



**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities



**R82**<sup>®</sup>

# R82 Wombat Solo

Hjelper deg til å bli selvstendig!



# R82 Wombat Solo

Wombat Solo er en elegant og enkel arbeidsstol for småbarn, førskolebarn, skolebarn og tenåringer. De tre størrelsene har innebygde vekstmuligheter som gjør at barnet kan vokse med arbeidsstolen. Det moderne designet, den diskre rammen og fargene gjør Wombat Solo egnet for bruk i alle innendørs miljøer.

## Optimal uavhengighet!

Bruk Wombat Solo til alle dagligdagse aktiviteter. Arbeidsstolen kan betjenes både av brukeren og omsorgspersonen. Velg den konfigurasjonen som passer best for deg. Høyde-, vippe- og svingjusteringshendler under setet gjør at brukeren kan ta kontroll over egen sittestilling. Vippe- og høydejustering kan betjenes av omsorgspersonen ved hjelp av en fotpedal på rammen eller en håndhendel på skyvebøylen.



## Funksjon og stil

Wombat Solo er dansk design og har minimalistiske utseende, diskre ramme og unike farger som gjør at den passer inn overalt. Stolen finnes i 3 størrelser og kan konfigureres slik at den passer til alle former og størrelser. Den unike svingfunksjonen kan betjenes av brukeren ved å løfte spaken under setet slik at det blir enklere med stående overføringer og reduserer behovet for fysisk assistanse fra omsorgspersoner.

## Dansk design | Innovasjon | Kvalitet



# Funksjoner

## Mye tilbehør

Wombat Solo er en arbeidsstol med mange konfigurasjonsmuligheter. For noen brukere kan en stol med bare noen få tilbehør være passende, mens andre kan ha behov for flere tilbehør.

## Komfort

Putene er laget av tykt og behagelig skum med pustende trekk. Formede puter som beskytter baksiden av brukerens knær har også ekstra holdbare kanter.

## Tilt

Setet kan tiltes for å tilpasses både avslappet og aktiv sittestilling. Brukere kan aktivere dette selv ved å bruke spaken under setet.

## Voks med stolen

Wombat Solo tilbyr trinnløs justering for vekst. Flytt ryggstøtten fremover eller bakover og juster hoftestøttene for å passe den enkelte bruker. Hoftestøttene kan også vinkles for å støtte brukerens hofter og lår.

## Uavhengighet

Wombat Solo hjelper brukeren til selv å ta kontroll over egen sittestilling ved å aktivere de tydelig merkede spakene under setet.

## Sving

Svingfunksjonen kan betjenes av brukeren og vil redusere plassen som trengs bak stolen.

## Åpen ramme

Det er ikke bare rammen til Wombat Solo elegant og diskret, men det åpne designet gjør det enkelt å forflytte seg inn og ut av setet. Velg enten 75 mm eller 100 mm hjul, begge med individuelle bremses, og muligheten for en sentralbrems med de 100 mm hjulene.

## Lav innstegshøyde

Wombat Solo tilbyr en lav innstegshøyde på 38 cm. Kombinert med den fremre vippefunksjonen blir stående forflytninger enkle.



Se instruksjonsvideo

Se alle mål





# En åpen ramme med et elegant design

Rammen til Wombat Solo er ikke bare elegant og diskret, den har også en "åpen" ramme. Dette gir brukeren en stor fordel når vedkommene skal forflytte seg inn og ut av stolen.

## Lav innstegshøyde!

Wombat Solo tilbyr en lav innstegshøyde på 38 cm. Kombinert med den fremre vippefunksjonen og det åpne rammehuset blir stående forflytninger enklere. Søylesenteret kan plasseres i 6 posisjoner, hver med en høydejustering på 12 cm fra minimum til maksimum.

## 90° sving!

Den unike svingfunksjonen kan betjenes av brukeren ved å løfte spaken under setet. Å svinge 90° gjør forflytninger inn og ut av setet enklere og lettere.



# Konfigurering av Wombat Solo

## Velg størrelse



Tilgjengelig i størrelse 1, 2 og 3

## Velg bakside



Lav rygg



Lang rygg

## Rammefarge



Antrasitt grå

## Velg hjul og brems



75 mm eller 100 mm svinghjul. Bremses på alle 4 svinghjul



100 mm svinghjul. Tilgjengelig med sentralbrems

## Velg høyde- og vippejustering



Høydejusteringshendel under sete, ingen tilt



Høyde- og tilt justeringshendel under sete



Høydepedal med låsefunksjon på rammen, tilhøvel under setet



Høyde- og tiltpedaler med låsefunksjon på rammen



Høydepedal med låsefunksjon på rammen, tilhøvel på skyvebøylen



Høyde- og tilthøvel på kjørehåndtak

## Velg fotstøtte



Montert under sete



Montert på rammen (Anbefalt hvis svingefunksjon er valgt)



Ingen fotstøtte

## Velg svingfunksjon



Tilgjengelig med 90° rotasjon. Hendel under setet




**Wombat Solo mål**

		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Ryggstøtte (A) (Lang rygg)	280-340 mm (360-430 mm)	310-380 mm (395-460 mm)	390-500 mm (460-550 mm)
	Effektiv setedybde (B)	180-310 mm	250-380 mm	320-500 mm
	Rygg bredde, flat pute (C)	250 mm	300 mm	350 mm
	Ryggmål, formet pute (D)	170 mm	230 mm	270 mm
	Effektiv setedybde (E)	300 mm	370 mm	420 mm
	Ryggstøttevinkel	0-28°	0-28°	0-33°
	Setevinkel	-10-15°	-10-15°	-10-10°
	Vinkel mellom ben og seteflate	-30-30°	-30-30°	-30-30°
	Lengde (I)	645 mm	645 mm	645 mm
	Avstand fra fotstøtte til sete, montert på setet**	85-185 mm	85-285 mm	85-375 mm
	Avstand fra fotstøtte til sete, montert på rammen**	95-320 mm	95-320 mm	245-395 mm
	Høyde på seteflaten ved fremre kant*	310-430 mm	310-430 mm	375-491 mm
	Høyde på seteflaten ved fremre kant med pute	375-495 mm	375-495 mm	440-556 mm
	Total bredde	560 mm	560 mm	560 mm
	Max brukervekt	45 kg	45 kg	70 kg
	Vekt på stol	12.5 kg	13 kg	16 kg

\* Målt uten puter. Det er 6 posisjoner for høydejustering i midtsøylen. Hver økning legger til 22 mm til målingen fra posisjon -1.

\*\* Legg til 65 mm til målingen med pute..

(A-E) Nålt med pute

(I) Legg til 5 mm på målingen når 100 mm hjul er montert. (L) Legg til 10 mm på målingen når 100 mm hjul er montert.



Etac er verdensledende innen utvikling av innovative hjelpemidler og utstyr forflytning av pasienter. Siden 1973 har vi arbeidet for å forbedre livskvaliteten til enkeltpersoner, familiemedlemmer og pleiere.

For produktenes tiltenkte formål og oppdatert informasjon, gå til [etac.no](http://etac.no)

Etac Norge AS

☎ 815 69 469

✉ [hovedkontor.norge@etac.com](mailto:hovedkontor.norge@etac.com)

🌐 [www.etac.no](http://www.etac.no)

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities