

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

# PI - Produktinformation

## Molift Air 200 - nye tiltag/ændringer i forhold til Molift Air 205

Denne kompakte og kraftfulde loftlift i et smukt design, er optimal til brug i institutioner, plejeboliger og hjemmeplejen. Molift Air 200 er det mindste medlem af familien Molift Air, og kombineret med Molift skinnesystemer og løfteåg, løser den langt de fleste dagligdags forflytningsbehov inden for sundhedsplejen.

- Lav egenvægt på 8,56 kg
- Har soft start/-stop – dette giver en behagelig og sikker følelse for brugeren.
- Er udstyret med nye ladeindikationer – med 4 stk. lamper, får man løbende en indikation af ladestatus.
- Udstyret med ny ledning på håndbetjeningen, der er monteret direkte ind på printet, med en solid aflastningskrue.
- Cover er ændret, så det nu er uden kanter og fremspring - Cover kan demonteres uden brug af værktøj.

- Quick release løbekat - gør det nemt at opsætte/-nedtage hejs - uden brug af værktøj.
- Hejs og løbekat er adskilt – dette gør det ekstremt nemt at flytte hejs til andre typer skinner / andet fabrikat uden brug af værktøj.



- Med integreret plastrør, for nem reset af nødstop, som kan nås fra gulvet.


- 3 mtr. løftestrop som standard.

- Ny dockingstation – sikrer enkel og nem opladning.

- Ny integreret krave - for nem og naturlig placering af håndbetjening.

- Nye forstærkede kroge på vores 2 pkt. og 4 pkt. løfteåg udført i pulverlakeret zink.

- Ny intuitiv håndbetjening, der reagerer ved let tryk.

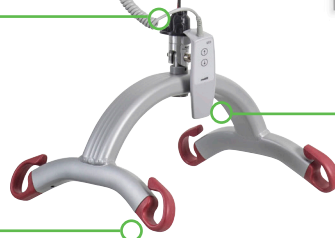

Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller Intern salg på:  
 info@etac.dk  
 tlf. +45 79 68 58 33

**etac**®

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Produkt	Beskrivelse	Varenr.	HMI-nr.
Molift Air 200	Lofthift, håndbetjening, lader, SLA batteri	M26200	115176
Molift Air 200	Lofthift, håndbetjening, lader, Lithium batteri	M26201	119220

Indføres fra

Uge 36 2019

## Fakta

Max. brugervægt (SWL)	205 kg
Total vægt (inkl. SLA batteri)	8,6 kg
Længde	360 mm
Bredde	190 mm
Højde	195 mm
Batteri	26.4 V SLA 2.6 Ah
Batterilader	100–240 V AC, 40–60 Hz
Ladetid, batteri	6 timer
Løftemodul	24 V DC
Løfteinterval	3000 mm
Løftehastighed ved 75 kg	60 mm/sek.
Forventet levetid	30.000 lifts SWL/10 år
Molift service software	Inkluderet
Nødfir	Elektrisk og Mekanisk
Nødstop	Kan nås fra gulv Reset muligt fra gulv
Tæthedsklasse: håndbetjening og løftemodul	IP24

Ved spørgsmål kontakt din konsulent  
eller Intern salg på:  
info@etac.dk  
tlf. +45 79 68 58 33

