

etac[®]
Creating Possibilities



etac[®]

Etac Duschhocker

Platzsparend und einfach

Duschhocker, auf die Sie sich verlassen können

Das Thema Sicherheit ist bei der täglichen Hygieneroutine und beim Duschen im Badezimmer einer der wichtigsten Faktoren, auf die man achten sollte, damit es nicht zu Unfällen kommt. Etac hat ein breites Sortiment an Duschhockern für maximalen Komfort und Sicherheit im Angebot.

Das wichtigste Merkmal eines Duschhockers ist die Stabilität. Die Etac-Modelle Easy, Smart und Edge haben stabile, leicht ausgestellte Beine für größtmögliche Stabilität unabhängig von der Höhe. Sie sind alle mit einzigartigen Füßen ausgestattet, die sich an unebene Oberflächen anpassen und stabilen Halt auch auf nassen Böden bieten. Die Duschhocker werden zudem nach europäischen und internationalen Normen geprüft und haben ein erhöhtes Benutzergewicht von 150 kg–200 kg (Easy & Smart) und 130 kg (Edge).



Duschhocker für jeden Bedarf

Das Etac Duschhockersortiment umfasst eine Vielzahl von Formen, Höhen und Farben und bietet für fast alle Nutzerbedürfnisse eine Lösung.



Mit seiner klassisch runden Sitzfläche eignet sich Etac Easy für viele Bedürfnisse und Umgebungen. Unabhängig von der Position des Hockers kann man sich einfach darauf setzen.



Der Etac Smart ist äußerst einfach in der Handhabung, hat ein geringes Gewicht und ist dabei trotzdem außerordentlich stabil. Die einzelnen, in der Höhe verstellbaren Beine gewährleisten zudem sicheren Stand.



Etac Edge passt mit seinem smarten, dreieckigen Design gut in kleinere Räume oder Ecken von Duschen. Die Benutzer können sich auch auf die Ecke setzen, um eine erhöhte Mobilität zu erreichen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein Bein über die Ecke hinaus auszustrecken. So ergibt sich ein etwas breitbeiniger Sitzwinkel, was zur Entlastung einer schmerzenden Hüfte beitragen kann.



Etac Smart und Easy werden auch mit Drehkissen für mehr Mobilität angeboten. Die Polster ermöglichen eine Drehung ohne Reibung. Zudem sind sie wasserabweisend, wärmereflektierend und haben eine rutschfeste Oberfläche.

Farben

Die Etac Duschhocker sind in drei verschiedenen Farben erhältlich: Grau, Eisblau und Weiß. So haben Sie mehrere Optionen und die Möglichkeit, den Duschhocker auf den Rest des Badezimmers abzustimmen.



Bei Etac liegt der Schwerpunkt auf Sicherheit, Hygiene und Nachhaltigkeit der Produkte. Sie haben eine geschätzte Lebensdauer von 10 Jahren, wenn sie gemäß den Anweisungen benutzt und behandelt werden. Wir bieten Ihnen eine 5-Jahres-Garantie.

Leistungsmerkmale




Stabil

Die Beine der Hocker sind zur Erhöhung der Stabilität leicht ausgestellt. Leicht flexible, rutschfeste Füße passen sich dem Boden an und sorgen auch auf nassen und unebenen Oberflächen für Stabilität.



Komfortabel und sicher

Großzügige Sitzflächen mit weich abgerundeten Formen und rutschfesten Oberflächen sorgen für bequemes und sicheres Sitzen. Über spezielle Öffnungen kann überschüssiges Wasser schnell ablaufen.

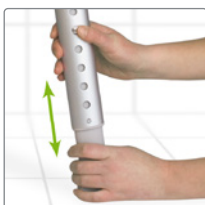

Höhenverstellbar

Die Höhe lässt sich einfach durch Klicken und Drücken einstellen. Die ovale Form verhindert ein Verdrehen der Teleskopbeine bei der Einstellung. Es gibt keine losen Teile, die verloren gehen können.



Einfache Montage

Die Duschhocker werden in praktischen, flachen Verpackungen ausgeliefert und sie lassen sich schnell und werkzeuffrei montieren. Die Druckknopfverriegelungsfunktion erleichtert das Anbringen der Beine.





Zubehör

Sitzpolster:

Für zusätzlichen Komfort und Wärme kann ein weiches Sitzkissen hinzugefügt werden. Es rastet auf dem Sitz ein und kann nach Gebrauch trocken gewischt werden.



Etac Edge Sitzpolster

Material: Polypropylen
 Artikel-Nr.81801132



Etac Smart Sitzpolster

Material: Polypropylen
 Artikel-Nr.80209502



Etac Easy Sitzpolster

Material: Polypropylen
 Artikel-Nr.80209501

Drehkissen:

Das Drehkissen sorgt für eine einfache Drehung ohne Reibung. Es fühlt sich sofort warm an, ist wasserabweisend und hat eine rutschfeste Oberfläche.



Drehkissen

Passt zu Smart und Easy
 Material: Polypropylen
 Artikel-Nr.80209503

Etac Duschkocker	Weiß	Grau	Eisblau
Edge	81801060	81801010	81801030
Edge, niedrig		81801040	
Easy (200kg)	81901060	81901010	81901020
Easy (150kg)	81901090	81901070	81901080
Easy, inkl. Drehsitz (200kg)		81901050	
Smart (200kg)	81951060	81951010	81951020
Smart (150kg)	81951090	81951070	81951080
Smart, niedrig		81951030	
Smart, inkl. Drehsitz (200kg)		81951050	

Farben



Maße

Sitzbreite: Edge: 45 x 45 x 45 cm
 Easy: 40 cm x 40 cm
 Smart: 43 x 38 cm

Sitzhöhe: Edge, 42 - 57 cm
 Edge, niedrig, 34,5 - 42 cm
 Easy, 42 - 57 cm
 Smart, 42 - 57 cm
 Smart, low, 34,5 - 42 cm

Material

Sitz: Polypropylen
 Beine: Aluminium, Polypropylen, Polyamid
 Füße: TPE
 Weicher Sitz: Polyethylen

Gewicht

Edge: 2,6 kg
 Edge, niedrig: 2,4 kg
 Easy: 2,75 kg
 Smart: 3,15 kg

Max. Benutzergewicht

Edge: 130 kg
 Easy: 150/200 kg
 Smart: 150/200 kg

Wartung



Das Produkt wird mit einem herkömmlichen, nicht scheuernden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9 oder mit einer 70%igen Desinfektionslösung gereinigt/desinfiziert. Das Produkt kann in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät bei 85 °C 3 Minuten lang sicher gereinigt werden.





Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006 0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities