

etac[®]
Creating Possibilities



etac[®]

Etac My-Loo

Toilettensitzerhöhung, fest

Next Level – Eine neue Generation von Toilettensitzerhöhungen, die neue Möglichkeiten schafft



Die Toilettensitzerhöhung My-Loo fest gehört zu einer ganz neuen Generation intelligent entwickelter Produkte von Etac. Wir stellen höchste Anforderungen an Sicherheit, Komfort, Anpassbarkeit und einer einfachen Installation. Etac führt ein Sortiment, das innovative, einzigartige Lösungen anbietet.

Mit dieser neuen Produktserie bringen wir Toilettenhilfen ganz einfach auf ein neues Niveau. "Das Design treibt die Entwicklung an" war schon immer unser Leitsatz. Wir sind überzeugt, dass Etac My-Loo Anwendern und Versorgern helfen wird eine neue Qualität in der Versorgung zu ermöglichen.



Patentierte Armlehnen-Lösung

Die innovative Armlehne der Etac My-Loo fest verfügt über einen völlig einzigartigen Mechanismus zur Höhenverstellung. Zudem lassen sich die Armlehnen bequem und ohne Einklemmrisko für den Benutzer auf- und abklappen. Diese patentierte Lösung bietet eine optimale, individuelle Unterstützung rund um die Toilette.



Die Höhe der Armlehnen wird mit einer einfachen manuellen Verstellung eingestellt. Wählen Sie eine Einstellung, indem Sie den orangefarbenen Regler in eine der drei Positionen schieben. Die Stufen sind auf der Armlehne deutlich mit 1, 2, 3 gekennzeichnet. Die Armlehnen werden von oben montiert, ohne die Toilettenbrille abnehmen zu müssen - perfekt für beengte Platzverhältnisse. Zur Demontage wird die Armlehne

hochgeklappt und gerade nach oben gezogen, um sie aus ihrer Halterung zu entfernen. Die Armlehne kann mit einer Schraube (im Lieferumfang enthalten) in der gewünschten Position fest arretiert werden. Wenn nur eine Armlehne verwendet wird, wird die Öffnung auf der gegenüberliegenden Seite durch eine Abdeckung (im Lieferumfang enthalten) abgedeckt.

Etac My-Loo

Mit einzigartigen, patentierten Armlehnen, einer designten Sitzoberfläche und einer schnellen, einfachen Installation bietet die My-Loo fest einen sicheren Halt, hohen Komfort und einfache Handhabung. Die Toilettensitzerhöhung ist für die meisten Toiletten geeignet und sitzt fest und sicher an ihrem Platz.

Entwickelt für Unabhängigkeit und Würde

My-Loo fest ermöglicht es Benutzern mit eingeschränkter Mobilität oder Gleichgewichtsproblemen, den Toilettengang selbstständig und sicher zu gestalten. Die Toilettensitzerhöhung und die stabilen Armlehnen erleichtern das Hinsetzen auf und das Aufstehen von der Toilette. Die extra grosse Sitzöffnung und eine grosszügige Hygieneausparung erleichtert die persönliche Hygiene.

Erhältlich in fünf verschiedenen Ausführungen

Etac My-Loo fest ist in verschiedenen Ausführungen mit oder ohne Armlehnen und in Sitzhöhen von 20, 60 und 100 mm erhältlich. Bei Bedarf können bei dem Modell ohne Armlehnen nachträglich Armlehnen hinzugefügt werden. Mit dem modernen, diskreten Design fügt sich My-Loo unauffällig in die meisten Badezimmerumgebungen ein.



My-Loo Toilettensitzerhöhung, fest

	Art.-Nr.
My-Loo mit Armlehnen, 20 mm	80301510
My-Loo mit Armlehnen, 60 mm	80301511
My-Loo mit Armlehnen, 100 mm	80301512
My-Loo, 60 mm	80301513
My-Loo, 100 mm	80301514

Gewicht

My-Loo mit Armlehnen, 20 mm: 3,2 kg	My-Loo, 60 mm: 2,2 kg
My-Loo mit Armlehnen, 60 mm: 3,4 kg	My-Loo, 100 mm: 2,4 kg
My-Loo mit Armlehnen, 100 mm: 3,7 kg	

Maximales Nutzergewicht

150 kg / Zusammen mit Zubehör Stützbeinen, 80301603: 200 kg

Material

Armlehne: Polypropylen
Sitz/Deckel: Polypropylen
Befestigung: Edelstahl, Polypropylen, TPE

HMV-Nr.

My-Loo mit Armlehnen, 60 mm; Art.-Nr.: 80301511 - HMV 33.40.01. 2008 (HMV 33.40.01.2010; Art.-Nr.: 80301603 mit Stützbeinen)

My-Loo mit Armlehnen, 100 mm; Art.-Nr.: 80301512 - HMV 33.40.01.2009 (HMV 33.40.01.2010; Art.-Nr.: 80301603 mit Stützbeinen)

My-Loo, 60 mm; Art.-Nr.: 80301513 - HMV 33.40.01.0126

My-Loo, 100 mm; Art.-Nr.: 80301514 - HMV 33.40.01.0127

Design

Myra Industriell Design AB

Reinigung



Reinigen/ desinfizieren Sie das Produkt mit einem nicht scheuernden Standardreinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9 oder mit einer 70%igen Desinfektionsmittellösung. Das Produkt kann sicher in einer Reinigungs-/Desinfektionsmaschine bei 85 °C für 3 Minuten gereinigt werden.

Eigenschaften



Verstellbare Armlehnen

Dank einer einzigartigen, patentierten Lösung können die Armlehnen bei Bedarf schnell und einfach angepasst werden. Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Höhen für die beste Unterstützung. Die stabilen Armlehnen lassen sich leicht und ohne Einklemmrisko für den Benutzer auf- und abklappen.



Einfache, bequeme Installation

Etac My-Loo fest wird mit einer innovativen neuen Lösung schnell und einfach installiert. Praktische Schnellverschlussmutter ermöglichen es, die Toilettensitzerhöhung von oben zu befestigen. Sitz und Armlehnen lassen sich problemlos in ihre Halterungen einklicken, auch wenn die Toilette nahe an der Wand installiert ist.



Praktische und bequeme Nutzung

Große Aussparungen und eine extragroße Sitzöffnung sorgen für eine ausgezeichnete Zugänglichkeit. Das besondere Design der Toilettensitzerhöhung und der Armlehnen bietet viel Platz für alle Körperformen.



Stabil

My-Loo, fest sitzt sicher an ihrem Platz und hat ein maximales Benutzergewicht von 150 kg. Für zusätzliche Unterstützung und einer höheren Nutzerlast können zusätzliche Stützbeine hinzugefügt werden (max. Benutzergewicht 200 kg).



Sicher und bequem

Mit stabilen, ergonomischen Armlehnen und dem neu designten Sitz macht die My-Loo fest den Toilettenbesuch sicher und bequem für den Benutzer. Für zusätzlichen Komfort ist eine weiche Sitzauflage als Zubehör erhältlich.



Leicht zu reinigen

Die glatten Oberflächen lassen sich leicht mit einem weichen Tuch abwischen und säubern. Sollte eine getrennte Reinigung erforderlich sein, lassen sich Sitz und Armlehnen leicht aus ihren Halterungen entfernen und ebenso einfach wieder einsetzen, ohne die Toilettensitzerhöhung zu deinstallieren.



My-Loo mit Armlehnen
20 mm



My-Loo mit Armlehnen
60 mm



My-Loo mit Armlehnen
100 mm




My-Loo
60 mm



My-Loo
100 mm

Technische Daten

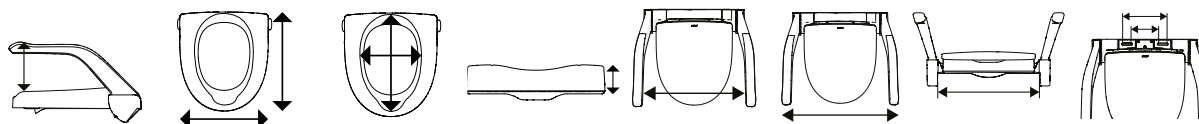

Art.-Nr.	Armlehnenhöhe	Breite/Länge	Maße Innen	Höhe	Breite zwischen den Armlehnen	Gesamtbreite	Befestigungsbreite (max Toilettenbreite)	Maße zwischen Löchern
80301510	215/245/285 mm	360/400 mm	215/285 mm	20 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
80301511	175/205/245 mm	360/400 mm	230/360 mm	60 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
80301512	135/165/205 mm	360/400 mm	230/360 mm	100 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
80301513	-	360/400 mm	230/360 mm	60 mm	-	-	400 mm	c/c 123-203 mm
80301514	-	360/400 mm	230/360 mm	100 mm	-	-	400 mm	c/c 123-203 mm

My-Loo 20 mm - funktionelle Armlehne

My-Loo 20 mm ist die perfekte Toilettensitzerhöhung für den Toilettenbereich mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Das Produkt besteht aus Armlehnen und einer Toilettenbrille, die direkt auf die Toilette montiert wird. Bei allen Versionen können die Armlehnen auf drei verschiedene Höhen eingestellt werden, um den Bedürfnissen verschiedener Benutzer gerecht zu werden. Mit dem modernen, diskreten Design fügt sich die My-Loo fest unauffällig in die meisten Badezimmerumgebungen ein.



Etac My-Loo wird zur einfachen Handhabung in einem eleganten und flachen Karton geliefert

Zubehör



Soft Sitz

80301604

Ergonomisch geformt, weich und komfortabel. Bietet hervorragende Druckentlastung und komfortable Unterstützung.

Material: Polyurethan



Top Montagesatz

80301626

Für Toiletten ohne durchgehende Befestigungslöcher (blinde Befestigung). Sollte nur mit den mitgelieferten Stützbeinen installiert werden. Geeignet für Installation in Ø20 mm. Material: Aluminium, Polyamid, Edelstahl, EPDM



Stützbeine

80301603

Für zusätzliche Stabilität. Erhöht das max. Nutzergewicht auf 200 kg. Faltpbar beim hochklappen der Armlehnen.

Material: Aluminium, Polyamid, Polypropylen, TPE, Edelstahl



Toilettenpapierhalter

80301601

Wird an der Armlehne befestigt. Material: Polyamid, Edelstahl



Aufbewahrungskorb

80301602

Wird an der Armlehne befestigt.

Material: Polyamid, Polyester/Netzgewebe, Edelstahl



Sicherheitsbügel

80303034

Zur sicheren Unterstützung und zum Festhalten. Wird an den Armlehnen befestigt. Breite: 605 mm

Material: Aluminium, Polyethylen



Armlehnen (Paar)

80301606

Die rechte bzw. linke Seite ist nur auf der jeweiligen Seite installierbar und nicht beidseitig nutzbar.

Material: Polypropylen





Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities