

 **etac**[®]

Creating Possibilities



 **etac**[®]

Etac Swift

Duschhocker/-stuhl

Etac Swift

Duschhocker & Duschstuhl

Seit 20 Jahren verlassen sich Benutzer auf der ganzen Welt auf die Swift Duschhocker/-stühle. Die in Zusammenarbeit mit Reha-Fachleuten, Industriedesignern und Anwendern entwickelten Swift Duschhocker/-stühle sind so konzipiert, dass sie Wohlbefinden, Sicherheit, Unterstützung und Komfort gewährleisten.

Nach 40 Jahren, in denen wir Lösungen für die häusliche Krankenpflege und im Rehabilitationsmarkt geschaffen haben, sind wir stolz auf eine einzigartige Angebotspalette hochwertiger Produkte. Mit seinem preisgekrönten Design und den sorgfältig verarbeiteten Funktionen ist **der Swift Duschstuhl ein echtes Etac-Original!**



Für einen sicheren und nachhaltigen Einsatz entwickelt

Ein wirklich hochwertiges Produkt bietet über die gesamte Produktlebensdauer praktische Funktionalität. Der Swift Duschhocker/-stuhl wird zur Vereinfachung von Lagerung, Versand und Transport in einer praktischen Flachverpackung geliefert. Das Produkt selbst lässt sich ganz einfach und ohne Werkzeug zusammenbauen.

Bei Etac liegt der Schwerpunkt auf Sicherheit, Hygiene und Nachhaltigkeit der Produkte. Der Swift Duschhocker/-stuhl wurde gründlich nach europäischen und internationalen Normen getestet und hält einer intensiven Nutzung und Aufbereitung stand. Die geschätzte Lebensdauer beträgt 10 Jahre und die Garantie beträgt 5 Jahre.



Die Vorteile

Mit stabilen, höhenverstellbaren Beinen und abnehmbaren Rücken- und Armlehnen, die sanft einrasten, wurde der Swift Duschhocker/-stuhl für eine sichere Nutzung und einfache Einstellung konzipiert.



Swift
Duschschemel

Swift
Duschstuhl mit Armlehnen

Einfach einstellbar

Abnehmbare, modulare Rücken- und Armlehnen, die ohne Werkzeug sanft einrasten.

Stabiler Griff

Ohne Armlehnen bieten die seitlichen Öffnungen stabilen Halt und hervorragende Unterstützung.

Intelligente Wasserabführung

Speziell entwickelte Öffnungen, durch die überschüssiges Wasser schnell ablaufen kann.

Rutschfeste Oberfläche

Die Oberflächenstruktur sorgt auch bei Nässe für einen sicheren, rutschfesten Sitz.

Flexibler Sitz


Flexibel einstellbarer Sitz mit großzügigem Hygieneausschnitt.

Höhenverstellbar

Stabile Beine mit praktischer integrierter Höhenverstellung.

Zuverlässig stabil

Flexible, rutschfeste Füße sorgen für Stabilität auf allen Böden.

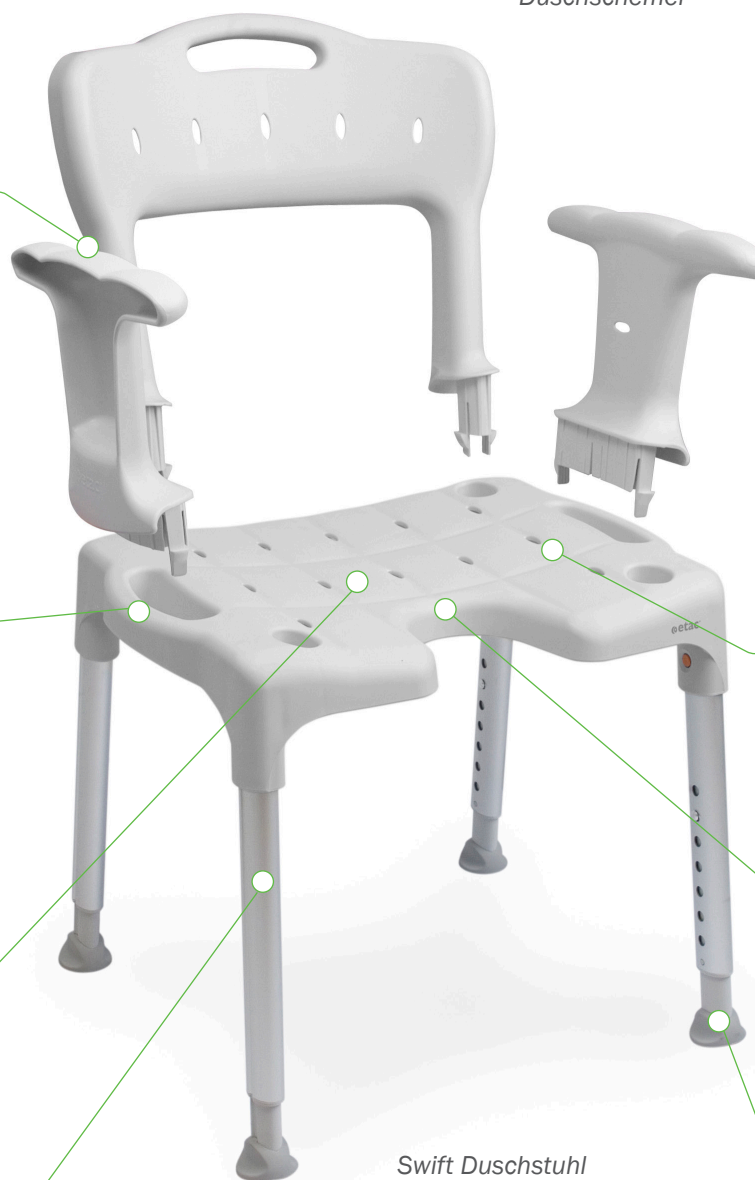

Swift Duschstuhl

Etac Swift Duschhocker/-stuhl

Ein Duschstuhl mit vielen Varianten.

Ein Swift – drei Varianten

- Die Basisversion des Swift wird ohne Armlehnen geliefert. Die seitlichen Öffnungen bieten stabilen Halt und hervorragende Unterstützung.
- Die Armlehnen bieten zusätzliche Unterstützung beim Hinsetzen und Aufstehen.
- Die Armlehnen und Rückenlehne ergeben einen Swift-Duschstuhl, mit dem Duschen komfortabel und sicher wird.



In zwei Höhen erhältlich

Der Swift Duschhocker/-stuhl ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich, die beide vollständig verstellbar sind. Das niedrigere Modell kann in vier verschiedene Höhenpositionen und das höhere Modell in sieben Positionen verstellt werden.

Mit der Höhenverstellung kann der Swift Duschstuhl auch leicht nach vorne gekippt werden. Dies ist besonders praktisch für alle diejenigen, die Schwierigkeiten haben, eine sitzende Position einzunehmen und wieder aufzustehen.



Swift	Weiß	Grau	Lagoon grün	Eisblau
- Duschhocker	81701610	81701410	81701710	81701510
- Duschhocker mit Armlehnen	81701620	81701420	81701720	
- Duschstuhl mit Rückenlehne und Armlehnen	81701630	81701430	81701730	81701530
- Duschstuhl niedrig mit Rückenlehne und Armlehnen		81701460		

Farben



Abmessungen:

Gesamthöhe mit Rückenlehne: 80 – 95 cm
 Gesamthöhe Swift niedrig mit Rückenlehne: 72,5 – 80 cm
 Gesamtbreite Hocker: 54 cm
 Gesamtbreite, mit Armlehnen: 54,5 cm
 Gesamttiefe: 50 cm
 Gesamttiefe Swift niedrig: 46,5 cm
 Breite zwischen den Armlehnen: 45 cm
 Sitzhöhe: 42 – 57 cm
 Sitzhöhe Swift niedrig: 34,5 – 42 cm
 Sitzfläche: 54 x 41 cm

Gewicht

Swift Duschschemel: 3,1 kg
 Swift Duschhocker, niedrig: 2,9 kg
 Swift Duschstuhl: 4,7 kg
 Swift Duschstuhl, niedrig: 4,5 kg

Max. Benutzergewicht

Max. Benutzergewicht: 160 kg

Material

Sitz: Polypropylen
 Beine: Aluminium, Polyamid
 Füße: TPE
 Sitzpolster: Polyethylen


Wartung



Das Produkt wird mit einem herkömmlichen, nicht scheuernden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9 oder mit einer 70%igen Desinfektionslösung gereinigt/desinfiziert. Das Produkt kann in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät bei 85 °C 3 Minuten lang sicher gereinigt werden.



Eigenschaften

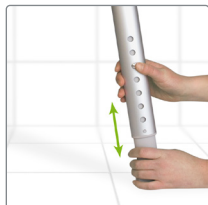

Höhenverstellbar

Die Höhe lässt sich problemlos einstellen. Einfach Klicken und Drücken! Die ovale Form verhindert ein Verdrehen der Teleskopbeine bei der Einstellung. Es gibt keine losen Teile, die verloren gehen können.



Zuverlässig stabil

Die flexiblen, rutschfesten Füße passen sich dem Boden an und sorgen auch auf sehr unebenen Oberflächen für Stabilität.



Einfach einstellbar

Modulares Design mit abnehmbaren Rücken- und Armlehnen, die ohne Werkzeug sanft einrasten. Dies ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Nutzerbedürfnisse.



Einfacher Zugang

Ein flexibel einsetzbarer Duschhocker mit großzügigem Hygieneausschnitt und glatter Oberfläche sorgt für einen einfachen Zugang und Komfort.

Farben

Die Swift Duschhocker/-stühle sind in vier verschiedenen Farben erhältlich: Grau, Lagoongrün, Eisblau und Weiß. So haben die Benutzer mehrere Optionen und die Möglichkeit, den Duschhocker/-stuhl auf das Badezimmer abzustimmen.





Zubehör



Rückenlehne

Abnehmbare, modulare Rückenlehne, die ohne Werkzeug sanft einrastet.

Grau	84006181
Lagoongrün.....	84006198
Eisblau	84006183
Weiß	84006196



Armlehnenpaar

Abnehmbare, modulare Armlehnen, die ohne Werkzeug sanft einrasten.

Grau	84006184
Lagoongrün.....	84006199
Eisblau	84006186
Weiß	84006197



Seifenablage

Wird seitlich am Sitz befestigt. Sie ist der perfekte Platz zur Aufbewahrung von Duschgel oder Shampoo. Sie verfügt außerdem über eine integrierte Duschhalterung.

Grau	80209266
------------	----------



Sitzpolster

Die rutschfesten Sitzkissen sorgen für ein sofortiges Wärmegefühl. Man sitzt bequem und weniger rutschig. Leicht abwischbar und einfach einrastend.

Grau	84005073
------------	----------



Rückenlehnenpolster

Die rutschfesten Polster sorgen für ein sofortiges Wärmegefühl. Leicht abwischbar und einfach einrastend.

Grau	84005072
------------	----------



Der Swift Duschhocker/-stuhl wird in einer praktischen, flachen Verpackung geliefert.



Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities