



molift[®]

Molift Air Tilt

Deckenlifter mit elektrischer Winkelverstellung

Molift Air Tilt

Der Air Tilt bietet ein ergonomisch verbessertes Arbeitsumfeld für das Pflegepersonal dank des elektrisch kippbaren Hebebügels. Er reduziert die Belastung des Pflegepersonals und erhöht den Komfort für den Pflegebedürftigen, da keine körperliche Anstrengung erforderlich ist und die manuelle Handhabung minimiert wird.

Umlagern ohne körperliche Anstrengung

Mit dem Air Tilt kann eine einzelne Pflegekraft die anspruchsvollen, alltäglichen Transfers und Umlagerungen von Nutzern sicher und komfortabel ergonomisch bewerkstelligen. Ohne jegliche Anstrengung kann die Pflegekraft die Höhe und Position des Benutzers gleichzeitig und präzise einstellen. So kann der Benutzer einfach in eine optimale Sitzposition transferiert werden, z.B. im Rollstuhl. Dank der offenen Bauweise gibt der Air Tilt sowohl dem Benutzer als auch dem Pflegepersonal ein komfortables Erlebnis. Der Patient bekommt durch das erweiterte Sichtfeld ein Gefühl von Offenheit, gleichzeitig hat die Pflegeperson mehr Gelegenheit den Blickkontakt halten.

Eine flexible Lösung

Der Air 350 ist ein etablierter Deckenlifter der Molift-Familie, der auch in einer modifizierten Version mit Kippfunktion verfügbar ist. Die Kippfunktion wird mit dem Handschalter bedient. Das macht den Air Tilt in der Bedienung sehr intuitiv und benutzerfreundlich. Der Air Tilt und das Molift Schienensystem eignen sich für die meisten Pflegeeinrichtungen, wie Krankenhäuser, Pflegeheime und die häusliche Umgebung. Die Lösung stellt sicher, dass jeder Schritt zur maximalen Funktionalität, einer komfortablen und ergonomischen Hebesituation für das Pflegepersonal und des Pflegebedürftigen beiträgt. Der Air Tilt stellt zudem eine flexible und kostengünstige Investition für den Gesundheitssektor da.



Ausführung	Beinhaltet	Art.-Nr.	Spezifikation Air Tilt Hebebügel	
Air Tilt	Deckenlifter, Hebebügel	M26355	Gewicht	7,3 kg
Spezifikation Air 350 Tilt Lifter			Länge	580 mm
Maximales Nutzergewicht (SWL)		273 kg	Breite	580 mm
Material		Stahl, Kunststoff	Höhe	500-790 mm
Lebenszyklus		30 000 Zyklen SWL oder 10 Jahre	Kippbereich	75°
Molift Service Tool		Inklusive	Geschwindigkeit der Winkelverstellung	12,6 mm/Sekunde
Gewicht		8,6 kg	Schutzklasse	IPX4
Länge		360 mm		
Breite		190 mm		
Höhe		195 mm		
Batterie		26.4 V SLA 2.6 Ah		
Ladezeit Batterie		6 Stunden		
Motor		24V DC		
Hubintervall		2600 mm		
Hubgeschwindigkeit		50 mm/Sekunde		
Notabsenkung		mechanisch und elektrisch		
Not-Aus		vom Boden aus mit Schnur erreichbar		
Schutzklasse		zurücksetzen vom Boden aus möglich		
		IP24		



Alk. 70%
pH 5-9




Reinigen / desinfizieren Sie das Produkt mit einem handelsüblichen, nicht scheuernden Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9 oder mit einer 70 %igen Desinfektionslösung.

Eigenschaften




Einfache Positionierung im Rollstuhl

Durch die Möglichkeit der gleichzeitigen Verstellung des Winkels, kann der Pflegebedürftige leicht in eine optimale Sitzposition im Rollstuhl gebracht werden.

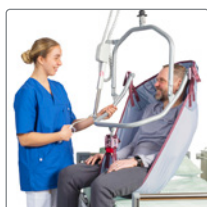

Erhöhter Komfort für den Benutzer

Der Hebebügel ist sehr offen gestaltet und bietet dem Pflegebedürftigen viel Platz um den Kopf herum. Diese trägt zu einer guten Sicht, Offenheit und der Möglichkeit zu mehr Blickkontakt zwischen dem Pflegebedürftigen und dem Betreuer.

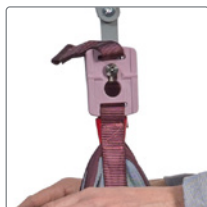


Flexible Befestigung des Hebegurts

Die Clip-Hebegurtbefestigung bietet Flexibilität und ermöglicht einen bequemen Transfer. Die Hebegurte werden an einem Bolzen am Hebebügel befestigt. Die Beinschlaufe hat eine flexible Verbindung, so dass sie an die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen angepasst werden kann.



Schnellverschluss-Kupplung

Die Hebebügel von Molift sind mit einer Schnellwechsel-Kupplung versehen. Das macht es einfach und problemlos zwischen verschiedenen Hebebügeln werkzeuglos zu wechseln.

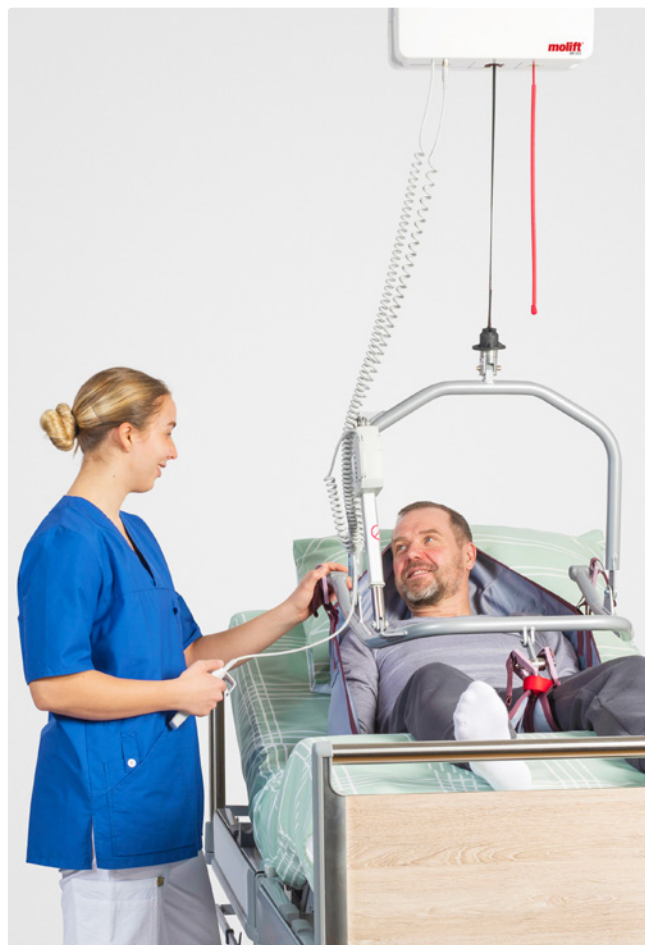

Hebegurt mit Clip-Befestigung



Lifertuch "Easy" mit Kopfunterstützung

Clip-Befestigungen, Polyester, SWL 220 kg

S	HYASMCP
M	HYAMEDCP
L	HYALRGCP
XL	HYAXLRGCP



Toilettentuch "Easy" mit Kopfunterstützung

Clip-Befestigungen, Polyester, SWL 220 kg

S	DA-ST3ASM
M	DA-ST3AMED
L	DA-ST3ALRG
XL	DA-ST3AXLRG



Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

 **etac**[®]
Creating Possibilities