

etac[®]
Creating Possibilities



R82[®]

R82 Stingray Swing-out

Der Autositz mit einzigartigen Funktionen

R82 Stingray Swing-out

Der Stingray Swing-out erleichtert den Transfer des Kindes in bzw. aus dem Fahrzeug und bietet eine sichere und komfortable Unterstützung während der Autofahrt.

Der Stingray Swing-out Autositz vereint die beliebten und komfortablen Sitzeinstellungen unseres Stingray Rehawagens mit der einzigartigen Drehfunktion und 30 Grad Sitzkantelung des Panda Easy fit. Das Grundmodell kann in der Sitztiefe und Rücken-höhe eingestellt werden. Mit der umfangreichen Zubehörpalette, wie z.B. Seitenpelotten, die ohne Werkzeug verstellt werden können, breitenverstellbare Beckenführungen und eine höhen- und winkelverstellbare Fußplatte kann der Autositz optimal auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes angepasst werden. Dies garantiert eine sichere und stets optimale Sitzposition auch auf langen Fahrten und längeres Mitwachsen.

Der ausschwenkbare Rahmen ermöglicht es den Eltern, den Sitz zu drehen und aus dem Auto zu schieben, so dass sie sich nicht verbiegen müssen, wenn sie das Kind in den Sitz heben. So können ungünstige Belastungen des Rückens während des Hebens vermieden werden. Der Autositz lässt sich einfach in Fahrzeuge mit ISOFIX einbauen, die ISOFIX-Halterung ist im Grundmodell bereits enthalten. Die Schwenkfunktion ist in einer linken oder rechten Version erhältlich.



Dreh- und Ausschwenk-Funktion

Die einzigartige Konstruktion erleichtert die Transferbedingungen für das Kind und die Begleitperson.



EasyFit System

Einfache und sichere Montage dank Isofix-Befestigung im Grundmodell. Für Fahrzeuge ohne Isofix ist ein alternatives Befestigungssystem erhältlich.



Sitzkantelung

Die ausgeklügelte Kantelung von 10-30 Grad ermöglicht es, das Kind in eine aktive oder entspannte Position zu bringen.



Getestet und Zugelassen nach ECE4404

Der Stingray Swing-out ist erfolgreich crash- und seitenaufprallgetestet und erfüllt die Anforderungen nach ISO/DIS 14646.

Zubehör



Seitenpelotten breiten- und höhenverstellbar

Die Seitenpelotten sind in zwei Größen erhältlich.



Beckenpelotten breiten- und tiefenverstellbar

Die Beckenpelotten sind in zwei Größen erhältlich.



5-Punkt-Gurt mit zentraler Spannvorrichtung

Der Gurt verfügt über komfortable Schulter- und Bauchpolster und ist in zwei Größen erhältlich.



Beinführungen außen

Die Beinführungen sind in zwei Größen erhältlich.




Fußplatte höhenverstellbar, Fußwinkel verstellbar

Die Fußplatte ist in einer Größe erhältlich.



Der Stingray Swing-out ist in vier Größen erhältlich.

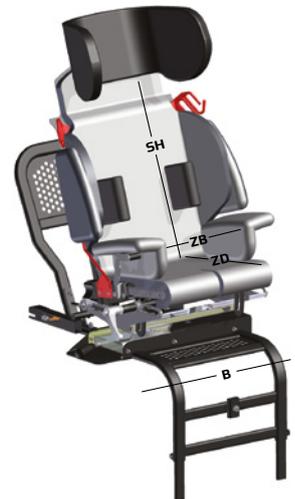

Grundausrüstung



Kopfstütze mit Seitenaufprallschutz

Höhenverstellbare Kopfstütze.



Gurtführung höhenverstellbar

Für den 3-Punkt-Gurt im Fahrzeug.

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Sitzbreite	200–280 mm*	200–280 mm*	260–380 mm*	260–380 mm*
Sitztiefe	170–240 mm	210–280 mm	270–340 mm	290–360 mm
Schulterhöhe	350–450 mm	380–480 mm	430–530 mm	480–580 mm
Sitzkantelung	10–30°	10–30°	10–30°	10–30°
Sitzhöhe hinten	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Rahmenbreite	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Gewicht	21 kg	22 kg	23 kg	24 kg

* mit Beckenpelotten

Farben



Pink

Rot

Grün

Blau

Grau



Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de


Creating Possibilities