



R82[®]

x:panda shape

Um den individuellen Bedürfnissen Ihres Kindes gerecht zu werden

Für den individuellen Bedarf konzipiert

Der x:panda shape wurde entwickelt, um den besten Sitz zu schaffen, in dem Ihr Kind das Leben in vollen Zügen genießen kann. Er ist so konzipiert, dass er sich zusammen mit Ihrem Kind entwickelt und kann in Sitzbreite und -tiefe sowie in Rückenbreite und -höhe verstellt werden, um eine maßgeschneiderte Passform mit hohem Komfort zu gewährleisten. So entsteht ein stabiler und gleichzeitig komfortabler Sitz, der Ihrem Kind mehr Selbstständigkeit und Teilhabe am Leben ermöglicht.




Dynamische Rückenlehne

Der x:panda shape verfügt über eine einzigartige dynamische Rückenlehne. Mit seinem verstellbarem dynamischen Rücken bietet er die einzigartige Möglichkeit, den Widerstand präzise einzustellen, um den richtigen Gegendruck für das jeweilige Kind zu gewährleisten. Das Design des dynamischen Rückens stellt sicher, dass der Widerstand gleich bleibt, wenn der Rücken zurückgelehnt wird, und dass der physiologische Drehpunkt in der Nähe der Hüftachse liegt.



Wahres Wachstum

Der x:panda shape ist so konzipiert, dass er mit der Entwicklung des Kindes mitwächst. Er kann in Sitzbreite und -tiefe sowie in Rückenbreite und -höhe verstellt werden, um eine maßgeschneiderte Passform mit hohem Komfort zu gewährleisten. So entsteht immer ein stabiler Sitz, von dem aus das Kind möglichst selbstständig am Leben teilnehmen kann.

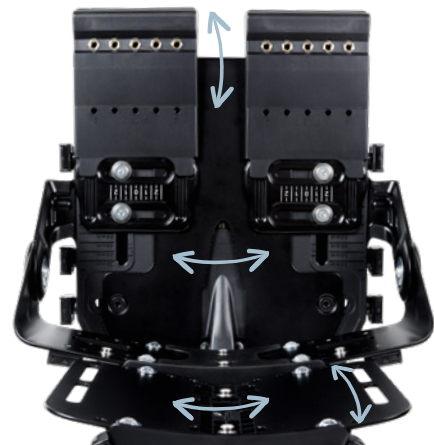

Mini, Classic oder Advanced

Die Sitzbasis des x:panda shape ist die Grundlage für den Aufbau der Varianten Mini, Classic und Advanced. Entwickelt, um die Passform präzise einzustellen und ein Mitwachsen mit dem Kind zu gewährleisten.



Sitzbasis

Sitzkeile schaffen eine sanfte Kontur im Sitz und verbessern die Funktion und Druckverteilung. Die Keile vergrößern die Kontaktfläche zwischen dem Nutzer und dem Polster, wodurch eine höhere Beckenstabilität bzw. Kontrolle ermöglicht wird und sie verhindern, dass das

Becken nach hinten rutscht. Die Keile sind in der Länge einstellbar, um den Bedürfnissen eines wachsenden Kindes gerecht zu werden. Nur für den x:panda shape Advanced erhältlich!




Early Intervention

Der x:panda shape Mini bietet eine unterstützende Sitzeinheit für Kleinkinder, um die Beteiligung und soziale Interaktion mit dem Umfeld zu fördern.

Dieses Sitzsystem wurde so konzipiert, dass es selbst für die Kleinsten einen bequemen, sicheren und passgenauen Sitz bietet. Der Sitz kann mit der umfangreichen Zubehörpalette weiter individualisiert werden, um die gewünschte Positionierung noch besser zu unterstützen.

Hilfsmittel wie der x:panda shape können eingesetzt werden, um die kognitiven, sozialen, emotionalen, sprachlichen, fein- und grobmotorischen Fähigkeiten des Kindes zu fördern und zu entwickeln.

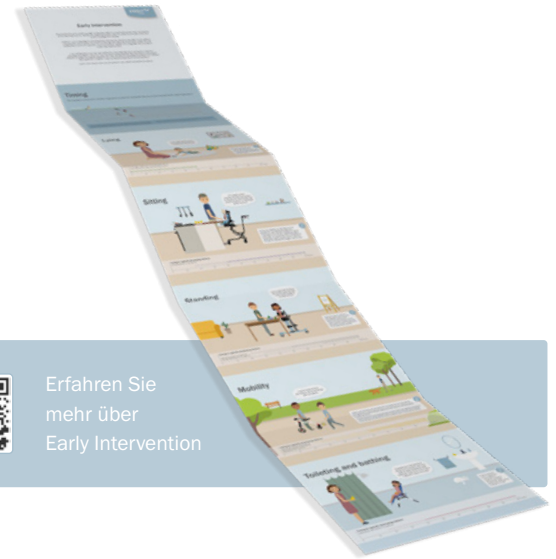


Erfahren Sie
mehr über
Early Intervention



Vielschichtiger Komfort

Die Polster bestehen aus zwei Schaumstoffschichten: Schaumstoff im Polster selbst sowie eine zusätzliche Schaumstoffschicht, die auf den Bezug genäht ist. Dies trägt zu einer besseren Druckverteilung bei und erhöht den Komfort für den Nutzer.

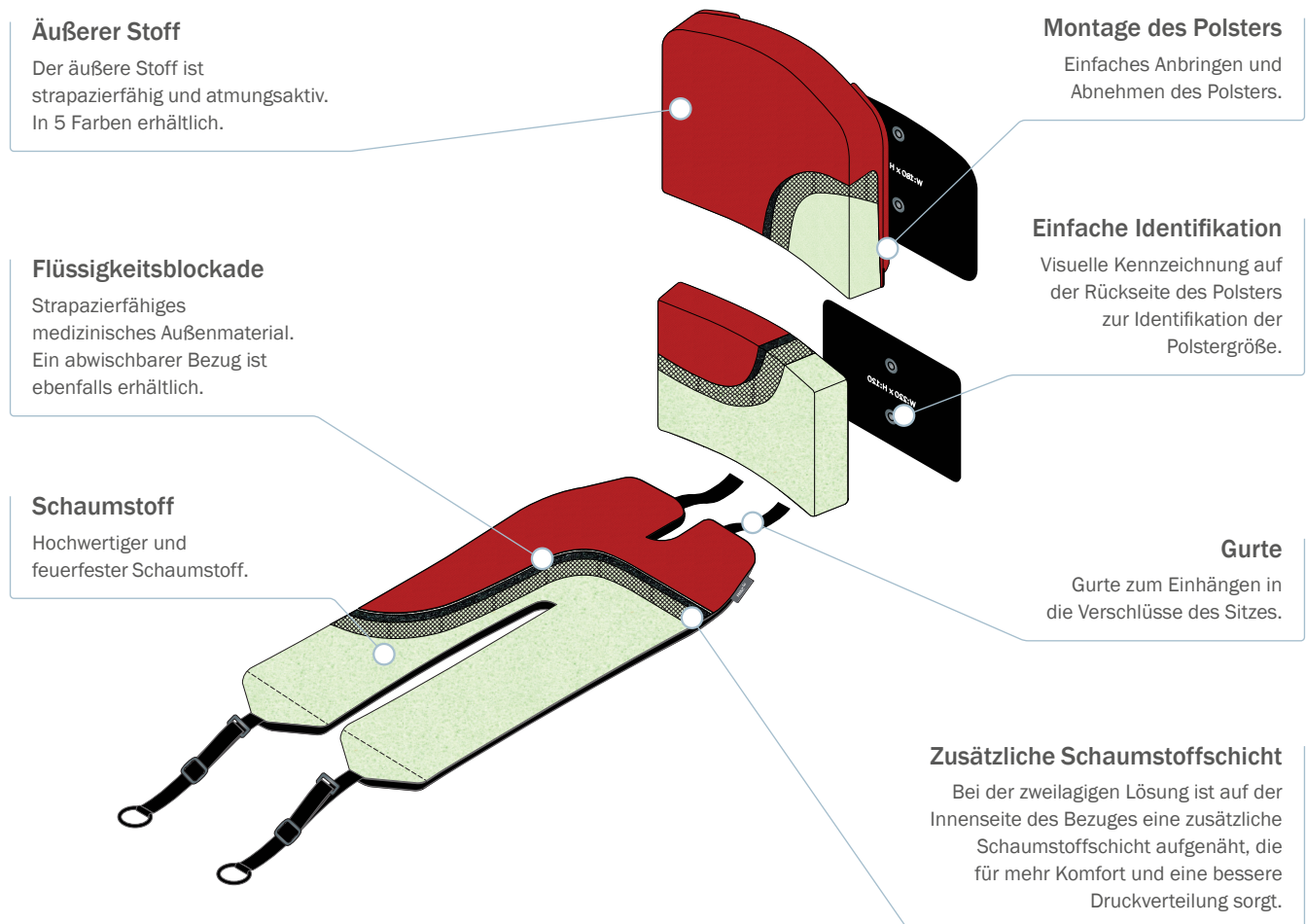

Polsterfarben für Rücken und Sitz



Pink* Blau Rot Grau Schwarz, abwischbar

*nur für x:panda shape Mini

Polsterfarben für Zubehör



Schwarz, abwischbar Schwarz

Highlights

Für die meisten Kinder und Jugendlichen kann eine stabile und bequeme Sitzposition dazu beitragen, dass Bewegungen mit den oberen Extremitäten und dem Kopf ausgeführt werden können. Es wurde eine Reihe verschiedener Funktionen entwickelt, um die bestmögliche Sitzposition für die individuellen Bedürfnisse der Nutzer schaffen zu können.

Kopfstütze

Eine große Auswahl an Kopfstützen, darunter eine neue 3D-Anpassung und ein bequemes, gebogenes Polster. Bietet viele Möglichkeiten zur individuellen Unterstützung beim Ruhen oder bei Aktivitäten.

Westen & Gurte

Die Schnellverschlüsse am Rücken und Sitz des x:panda shape ermöglichen die Montage von Westen und Gurten.

Feste oder abklappbare Seitenpelotten

Die Wahl der abklappbaren oder festen Seitenstützen richtet sich nach der Rumpfkontrolle des Kindes und seiner Fähigkeit, Armbewegungen auszuführen.

Armlehnen

Das Einrastsystem ermöglicht ein einfaches montieren bzw. demontieren der Armlehnen. Markierungen sorgen dafür, dass die Armlehnen nach der Demontage wieder in der gleichen Höhe positioniert werden. Sie können zusätzlich mit Bezügen ausgestattet werden.

Polster und Bezüge

Bequeme Polster mit strapazierfähigen Bezügen für Sitz- und Rückenkissen, Seitenstützen, Hüftstützen und Kniestützen.

Hüft- und Beckenpelotten

Schaffen eine unterstützende Fläche, die seitliche Bewegungen im Sitz verhindert und die Tendenz des Beckens, seitlich zu kippen, reduziert. Sowohl die Hüft- als auch die Beckenpelotten können eingestellt werden, wenn der Nutzer im Sitz positioniert ist.

Anpassbare Sitzkeile

Die Sitzkeile vergrößern die Kontaktfläche zwischen dem Nutzer und dem Polster und sorgen durch eine optimale Positionierung für Stabilität und Kontrolle des Beckens und verhindern, dass das Becken nach hinten rutscht.

Innere und äußere Kniestützen

Bieten Stabilität für die unteren Gliedmaßen und verhindern die Adduktion der Hüfte, indem sie den unteren Teil des Oberschenkels, das innere Knie und den oberen Teil des Unterschenkels stützen.

Untergestelle

Der x:panda shape passt auf eine Vielzahl von Untergestellen für den Innen- und Außenbereich.

Fußplatten/Fußstützen

Verschiedene Varianten für die jeweiligen Untergestelle erhältlich.



Produktseite




Visuelle Kennzeichnungen

Der x:panda shape kann komplexen Anforderungen gerecht werden und bietet dem Kind eine zuverlässige und optimale Positionierung. Zur leichteren Handhabung und Erkennung für Eltern, Betreuer und Fachpersonal hat x:panda shape visuelle Kennzeichnungen auf der Außen- und Innenseite des Sitzsystems, um Anpassungen zu ermöglichen.




Außenseite des Rückens

Anhand der visuellen Kennzeichnungen lässt sich erkennen, wo man die Höhe des Rückens und die Höhe der Kopfstütze einstellen muss.

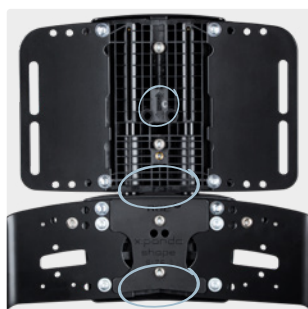

Innenseite des Rückens

Diese visuellen Kennzeichnungen helfen, die Größe des Rückens zu ermitteln und festzustellen, wo der untere und obere Rücken eingestellt werden muss.

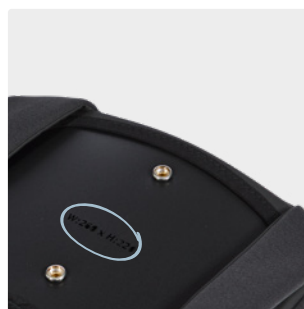

Größenangaben

Visuelle Kennzeichnung auf der Rückseite des Polsters zur Ermittlung der Polstergröße, welche der Rückengröße des Sitzsystems entspricht.



Sperre für den Transport

Einfache Identifikation der Sperre für die dynamische Rückenlehne, die erforderlich ist, wenn der Sitz für den Transport in Kraftfahrzeugen verwendet wird.



Sitzbasis

Einfache Ermittlung der Tiefen- und Breitenverstellung der Sitzbasis.



Sitzbasis: Advanced

Visuelle Kennzeichnungen für die Einstellung der Sitzbasis des x:panda shape Mini und die Position der inneren und äußeren Knieplotten.



Rückenwinkel

Einfache Ermittlung des Winkels der Rückenlehne.



Stärke der dynamischen Rückenlehne

Die einstellbare dynamische Rückenlehne ermöglicht die Einstellung des Widerstandes.

Reinigung und Wartung

Die Nutzung, Reinigung und Pflege des x:panda shape ist einfach und leicht, so dass Eltern und Betreuer mehr Zeit für interessante Aktivitäten haben. Die Bezüge können zum Waschen ganz bequem abgenommen werden.



[Leitfaden zur Reinigung](#)

Maße

		Mini	1	2	3
	Sitzbreite	220 mm	220/260/300 mm	280/320/360/400 mm	380/420/460/500 mm
	Sitztiefe	120–160 mm	160–320 mm	240–420 mm	350–550 mm
	Höhe der Rückenlehne	270–360 mm	280–370/320–420/ 360–470mm	340–440/380–490/ 430–560 mm	420–530/470–600/ 540–690 mm
	Max. Nutzergewicht	35 kg	35 kg	65 kg	90 kg
	Max. Nutzergewicht beim Transport in Fahrzeugen	35 kg	35 kg	65 kg	90 kg
	Rückenlehnenwinkel	-10° – 30°	-10° – 30°	-10° – 30°	-10° – 30°
	Rückenbreite, Oberkante der Rückenlehne	190 mm	180/220/260 /300/340 mm	180/220/260 /300/340/380 mm	220/260/300 /340/380/420 mm
	Gesamtbreite	240 mm	300/400/500 mm	350/460/560/660 mm	600/700/740/780 mm
	Gewicht, Grundmodell	6 kg	6,5 kg	11 kg	14 kg

Die Maßangaben wurden mit beiden Beinen in maximaler Abduktion ermittelt. Die Maße der Größen 1-3 basieren auf dem x:panda shape Advanced.

Weitere Maße finden Sie auf unserer Website

Eine Auswahl an Untergestellen für den individuellen Bedarf

Der x:panda shape schafft eine stabile Basis für das Becken, die Oberschenkel und die Füße. Dies ermöglicht Bewegungsfreiheit des Kopfes, der Arme und Hände. Der x:panda shape kann komplexen Anforderungen gerecht werden und bietet dem Kind eine zuverlässige

und optimale Positionierung. Darüber hinaus sind die Einstellungen intuitiv und relativ einfach vorzunehmen. Außerdem kann das Sitzsystem je nach Größe auf eine Reihe von Untergestellen montiert werden, welche unterhalb aufgeführt sind.




High-low:xo Zimmer- und Kombigestelle (Outdoor)



Stingray Frame



Combi Frame:x und Multi Frame

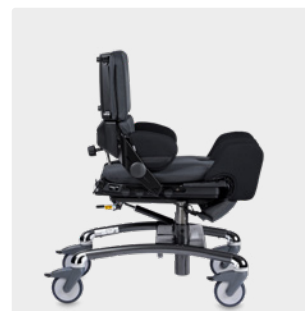

Strong Base

Zubehör



Kopfstützen

Besuchen Sie die Rubrik "Zubehör" auf www.etac.de



Rumpfgurt inkl. Bezug für x:panda shape Mini

31905028-xx



Schiebebügel

3190507x



Wetterschutzdach

3187401x0

Halterung für Wetterschutzdach notwendig




Einstellbare oder feste Oberarmstützen

319050xx-xx



Feste oder abklappbare Seitenpelotten

Besuchen Sie die Rubrik "Zubehör" auf www.etac.de

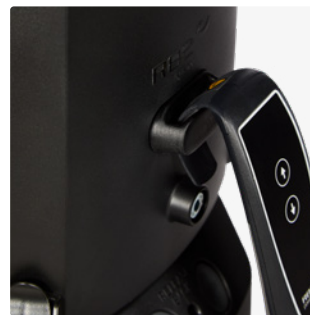

Halterung für Bedienteil, Rücken- oder ArMLEHNE

31905030/31905030-x



Westen und Gurte

Besuchen Sie die Rubrik "Zubehör" auf www.etac.de



Gurtaufnahmen, Schulterführung, breit

31905068



Gurtaufnahmen, Schulterführung, hoch

318910260

Benötigt: 31905068



Distanzstück mit Polster und Bezug

31905059/3190301x-xx



Dynamisches Modul für die Rückenlehne

3190515x



Tisch, gepolstert, für x:panda shape Mini
31905066-70



Tisch
Besuchen Sie die Rubrik "Zubehör" auf www.etac.de



Haltegriff für den Tisch
318910750



Therapiebügel für den Tisch
318910740



Beckenpelotten
3190504x-xx



Hüftpelotten
3190504x-xx



Innere und äußere Kniepelotten
319050xx-xx




Abduktionskeil
319050xx-xx



Äußere Kniepelotten, abklappbar
3190501x-xx
Für x:panda shape Advanced Größe 2 und 3



Sitzkeile
3190505x

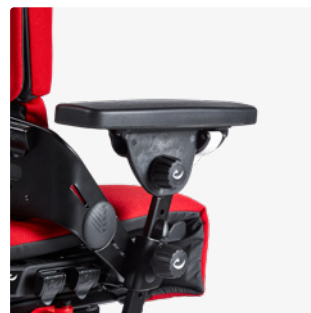

Armlehnen und Set zur täglichen Anpassung
31891061x-xx
3190501x-xx
318910615-11



Halterung für Kommunikationsgerät
31905033-x

Weiteres Zubehör finden Sie auf www.etac.de



Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities