



Duschpallar från Etac

Snygga och praktiska duschpallar
i alla dess former

 **etac**[®]

Etac har en pall för alla – vilken passar dig?

Många badrumsaktiviteter görs egentligen bäst sittande. Inte bara för att det är lättare och säkrare, utan för att det faktiskt är skönare.

Stabilt, säkert och skönt

Etac har ett brett sortiment duschpallar designade för att uppnå högsta komfort och säkerhet. Sittyorna har en rund, mjuk design för ett bekvämt sittande samt ett ytmönster och specialutformade hål som effektivt tränger bort överflödigt vatten från pallen. Benen är vinklade utåt för att maximera dess stabilitet oavsett höjd. Alla pallar är dessutom utrustade med Etacs specialdesignade doppskor som minskar halkrisken även mot våta badrumsgolv. Sitsarna kan diskas i diskmaskin för enkel rengöring.

En pall för varje rumpa

Vårt pallsortiment spänner över de flesta former och höjder och erbjuder en lösning för varje behov. Vilken pall passar egentligen bäst för dig?



Etac Easy har den klassiska runda sittytan för alla behov och miljöer. Den runda formen gör det möjligt att sätta sig på pallen från vilket håll som helst.



Etac Edge är vår smartaste pall. Med dess trekantiga form tar den liten plats och passar in i trånga duschhörn. Pallen bjuder till sadelsittande med en rejäl sittyta för ökad stabilitet och är även ett bra val för att avlasta värkande höfter. Genom att sänka ett ben något och sitta sadel med det lägre benet framåt öppnas sitsvinkeln och värkande höfter avlastas. Edge finns i en högre och en lägre höjddjusterbar variant.



Etac Smarts rektangulära sits erbjuder en smalare eller bredare sittyta och passar därför alla rumpor – även de som behöver lite mer plats. Dess hörn bjuder in till sadelsittande för extra stabilitet. Smart finns i en lägre och en högre höjddjusterbar variant, där den lägre Smart enkelt kan placeras i badkar för att användas som badkarspall.



Etac Smart och Etac Easy kan även fås med vridplatta för ett rörligare sittande. Vridplattan gör det möjligt att även i sittande position enkelt rotera runt pallen så att användaren inte behöver lyfta på rumpan för att rotera, vilket ger ett säkrare sittande.

Detaljer Etac duschpallar



Säker höjdjustering

Etacs duschpallar är utrustade med en speciellt utformad knapp som styr höjdinställningen av pallbenen. Det finns därför ingen risk att pallan plötsligt ändrar höjdläge under användning.



Lätt att montera

Etacs duschpallar levereras i platta paket och monteras mycket lätt utan verktyg på mindre än en minut. Pallarnas konstruktion gör det omöjligt att montera pallarna felaktigt.




Bekväma och säkra att sitta på

Sitsarna är konkava och mycket bekväma. Flexibiliteten i innerbenets fixtur säkerställer att pallarna kan hantera den ojämna viktfordelning som pallarna lätt utsätts för när användaren rör på överkroppen under duschandet.



Stabilitet

Pallarnas ben är vinklade utåt för ökad stabilitet i alla höjdlägen. De mjuka doppskorna anpassar sig till alla golvförhållanden utan att glida.

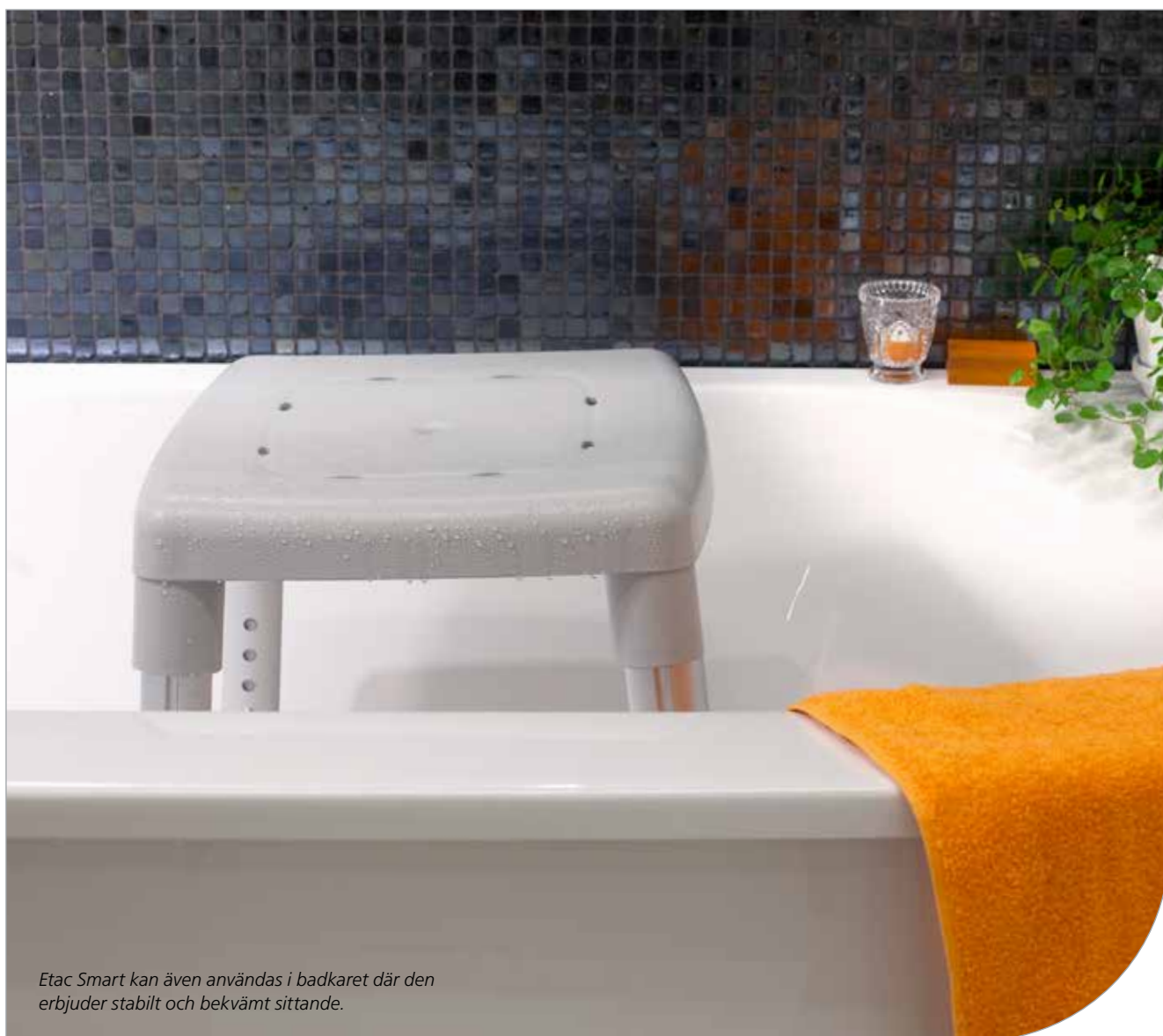

Etac Smart kan även användas i badkaret där den erbjuder stabilt och bekvämt sittande.

Mjuksitsar till duschpallarna

Mjuksitsarna gör sittandet mer bekvämt, varmare och mindre halt. Mjuksitsen torkas enkelt av efter användning. Snäpps på sitsen. Material: Polyeten



Etac Edge mjüksits
Art. nr: 81801132



Etac Smart mjüksits
Art. nr: 80209502



Etac Easy mjüksits
Art. nr: 80209501



Beskrivning

	Art.nr	Art.nr
Etac Edge duschpall	81801010	81801030
Etac Edge duschpall låg	81801040	
Etac Easy duschpall	81901010	81901020
Etac Easy Swivel (m. vridplatta)	81901050	
Etac Smart duschpall	81951010	81951020
Etac Smart duschpall låg	81951030	81951040
Etac Smart Swivel (m. vridplatta)	81951050	

Mått

Sittbredd:	Edge: 45 x 45 x 45 cm
	Easy: 40 cm
	Smart: 43 x 38 cm
Sithöjd:	Edge: 42–57 cm
	Edge, låg: 34,5–42 cm
	Easy: 42–57 cm
	Smart: 42–57 cm
	Smart, låg: 34,5–42 cm

Material

Säte: polypropylen
Ben: aluminium, polypropylen,
polyamid
Doppsko: TPE
Mjuksits: Polyeten

Vikt

Edge: 2,6 kg
Edge låg: 2,4 kg
Easy: 2,75 kg
Smart: 3,15 kg
Smart låg: 3 kg

Max brukarvikt

Edge: 130 kg
Easy: 150 kg
Smart: 150 kg

Edge



Lösningsmedelsfritt rengöringsmedel med ett pH på 6–9 eller med 70% tvättsprit. Dekontamination vid högst 85°C.

Smart och Easy



Lösningsmedelsfritt rengöringsmedel med ett pH på 6–9 eller med 70% tvättsprit. Dekontamination vid högst 85°C.