



Etac Light – bestick
med erkänt god form
och funktion

 etac®

Light – bestick

Besticken finns i ett antal former och är avsedda för personer med nedsatt kraft och rörlighet i hand och arm som gör det lättare att äta. Gemensamt för dem alla är den låga vikten. Samtliga bestick tål maskindisk.

Bestick med lätta tjocka skaft

De lätta och tjocka besticken är skonsamma mot smärtande fingrar och avlastar handen. Handtagen är ovala med en mjukt avrundad topp. De kan greppas på flera olika sätt och ligger säkert i handen. Den stora skedens handtag är smalare vilket underlättar ett grepp mellan tumme och pekfinger. Kniven har en vass egg och handtagets vinkel mot knivbladet ger en skön avlastning åt pekfingret.

Artikel	Art.nr
Light gaffel, tjockt handtag	80402002
Light sked, tjockt handtag	80402004
Light kniv, tjockt handtag	80402006
Light dessertsked, tjockt handtag	80402007

Mått

Gaffel: 18 cm
Sked: 22 cm
Kniv: 21 cm
Dessertsked: 18 cm

Material

Ätdel: Rostfritt stål
Handtag: ABS-plast

Vikt

Gaffel: 27 g
Sked: 37 g
Kniv: 23 g
Dessertsked: 30 g

Skötsel

Tål maskindisk

Design

Ergonomidesign



Vinklad sked

En vinklad sked underlättar när koordinationen är nedsatt eller när handled och underarmrörelser är begränsade. Handtaget är utformat för att kunna användas med både "pennfattning" och tvärhandsgrepp. Skeden finns i två varianter, för höger respektive vänster hand.

Artikel	Art.nr	Vikt
Light sked, vinklad, höger hand	80403201	35 g
Light sked, vinklad, vänster hand	80403202	

Mått

19 cm

Material

Ätdel: Rostfritt stål
Handtag: ABS-plast

Skötsel

Tål maskindisk

Design

Ergonomidesign



De vinklade skedarna ligger stadigt i handen.

Bestick med lätta smala skaft

De smala och långa besticken underlättar vid generell nedsatt muskelkraft. Handtagen är mjukt kantiga och är utmärkta att hållas med "pennfattning". Den extremt låga vikten i kombination med bestickens längd gör att endast minimal kraft och rörelseomfång krävs för att föra ätdelen till munnen.

Artikel	Art.nr
Light gaffel, smalt handtag	80401003
Light sked, smalt handtag	80401005
Light kniv, smalt handtag	80401001
Light dessertsked, smalt handtag	80401007

Mått

Gaffel: 21 cm
Sked: 21 cm
Kniv: 22 cm
Dessertsked: 20 cm

Material

Ätdel: Rostfritt stål
Handtag: ABS-plast

Vikt

Gaffel: 24 g
Sked: 34 g
Kniv: 21 g
Dessertsked: 26 g

Skötsel

Tål maskindisk

Design

Ergonomidesign



Med mycket nedsatt handfunktion är det lättare att hålla och lyfta bestick med "pennfattning".



Besticken ligger stadigt i handen och är sköna att greppa.



Med mycket nedsatt handfunktion är det lättare att hålla och lyfta bestick med "pennfattning".




De vinklade skedarna ligger stadigt i handen.



Med kombinationsbesticken kan greppet varieras för både att skära och plocka upp maten från tallriken.

Kombinationsbestick

Dessa bestick kombinerar kniv/gaffel alternativt kniv/sked vilket gör det möjligt att äta med bara en hand. Handtagen har en plan sida, vilket underlättar varierande grepp med bibehållen stabilitet. Kniv/gaffeln finns i två varianter, för höger respektive vänster hand. Kniv/skeden är utformad för att passa både höger och vänster hand. På samtliga bestick ligger kniveggen på ätdelens undersida, för att undvika skärsår i mungipan.

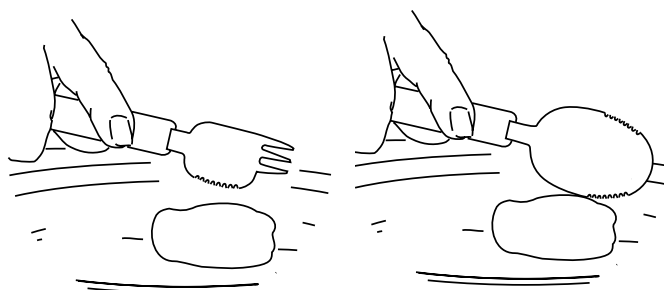

Med kombinationsbesticken kan greppet varieras för både att skära och plocka upp maten från tallriken.

Artikel	Art.nr
Light kniv/sked	80403001
Kniv/gaffel, höger hand	80403002
Kniv/gaffel, vänster hand	80403003
Mått	
Kniv/gaffel: 18 cm	
Kniv/sked: 20 cm	
Material	
Ätdel: Rostfritt stål	
Handtag: ABS-plast	
Vikt	
Kniv/gaffel: 25 g	
Kniv/sked: 35 g	
Skötsel	
Tål maskindisk	
Design	
Ergonomidesign	

