


Produktinformation

Prio, Cross - Forhjulsaksel og møtrik

For at opnå modularitet mellem Prio og Cross forhjulsaksel har vi gennemført en designændring. Ændringen er blevet gennemført i to trin.

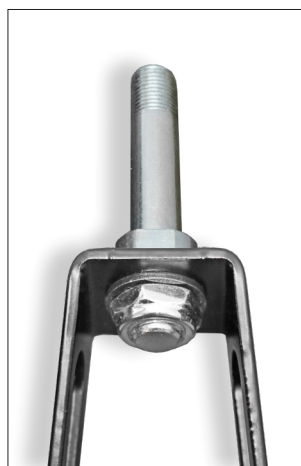

Tidligere løsning

Tidligere forhjulsaksel med møtrik.

Trin 1

Udskiftning af møtrik til 8 mm blank. Uændret aksel medførte at akslen kom til at stikke ud gennem møtrikken. Denne ændring trådte i kraft fra uge 6.

Trin 2

Ny forkortet aksel, tilpasset til ny møtrik. Denne ændring trådte i kraft fra uge 11. Denne løsning er også tidligere indført på Prio 380. Ny møtrik (12077) kan anvendes til gammel aksel (20243). Ny aksel (20526) kan ikke kombineres med gammel møtrik (12037).

Aksel og låsemøtrik

Forhjulsaksel samt 2 stk. låsemøtrik.

Varenavn udgået artikel

Art. nr.

Låsemøtrik sort forkromet

12037

Forhjulsaksel

20243

Udgået fra

Uge 11. 2018

Varenavn ny artikel

Art. nr.

Låsemøtrik forhjulsaksel H 8

12077

Forhjulsaksel stål NV18

20526

Forhjulsaksel stål NV18 inkl. låsemøtrik

28433

Leveret fra

Uge 11. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller
Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33