



Jump Alpha og Vector

Allround kørestole til børn

 **etac**[®]



Jump Alpha

Allround krydsrammekørestol til børn

Jump Alpha er en innovativ kørestol til de aktive børn med forskellige grader af funktionsnedsættelse. Den føres i et stort udvalg af størrelser - fra ca. 3 år og op til den store teenager.

Kørestolen er af god kvalitet og meget fleksibel og stabil. Jump Alpha er udviklet og designet for at give barnet mulighed for en alsidig og aktiv hverdag.

Jump Alpha vokser med barnet, i sædebredde, dybde og ryghøjde. Den kan nemt ændres og tilpasses, og fungerer derfor godt for de børn, der har behov for individuel tilpasning af kørestolen. Ydermere kan der suppleres med det store tilbehørsprogram, for at dække den individuelle brugers behov.

Kørestolen er nem at klappe sammen og den smarte låsemekanisme gør det nemt tage den med ind i/ud af bilen.



Billedet viser Jump Alpha med tilbehør



22 - 38 cm
(+2 cm)




24 - 42 cm
(+4 cm)




25 - 45 cm
(+5 cm)



max. 75 kg

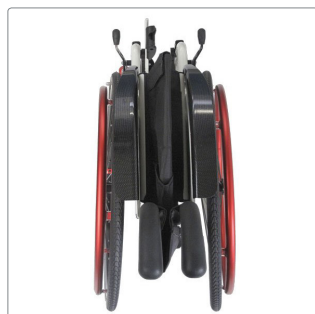


Jump Alpha kan ved transport klappes sammen til en lille og kompakt enhed. Låsestropp er integreret.

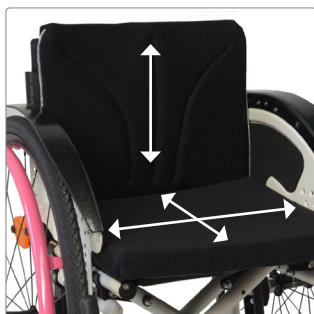

Jump Alpha kan vokse med barnet i sædebredde, sædedybde og ryghøjde - uden brug af ekstra dele. Derudover findes stolen i mange bredder og dybder.



Ryggen på Jump Alpha kan vinkles 80° - 120°.

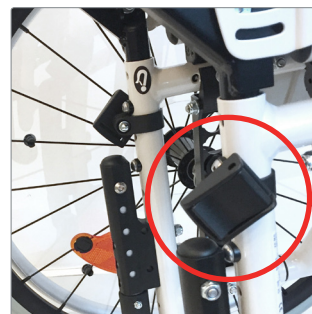

På Jump Alpha er der standard på stelrammen monteret fixlocks for enkel fastgørelse og afmontering af seler.

Standard konfiguration

Sædebredde:	22 - 40 cm
Stelfarve:	Cremehvid
Drivhjul:	20", 22" eller 24" letvægts drivhjul, massive dæk, alu. drivring
Forhjul:	Frit valg mellem alle typer forhjul. Sorte forhjulsgafler
Puder:	Standardpude 3 eller 5 cm, sort betræk
Skubbehåndtag:	Højdejusterbare
Armlæn:	24 cm (alternativ 37 cm)
Ryg:	Stropryg, inkl. rygslag med 2 cm polstring
Sæde:	Nylonsæde med lomme for værktøj
Fodstøtte:	Opklappelig fodstøtte Model 1 eller 2. (afhænger af størrelse stol)
Tipsikringer:	Svingbare
Egerbeskyttere:	Klare/gennemsigtige
Ekstra:	Tøj og hjulbeskytter Reflekser Fixlocks for selemontering.

Mål og vægt

Sædebredde:	22 - 40 cm
Sædedybde:	26 - 42 cm
Ryghøjde:	25 - 45 cm
Ryginkel:	Regulerbar 80° - 105°
Drivhjul:	20", 22" og 24"
Svinghjul:	4", 5" og 6"
Max. brugervægt:	75 kg
Transportvægt:	11 kg



Jump Alpha kan leveres i mange flotte farver - kontakt Etac og hør nærmere.



Jump Alpha kan leveres i mange flotte farver...



Vector

Allround fastrammekørestol til børn

Vector er en innovativ kørestol, som føres i et stort udvalg af størrelser. Hver enkelt størrelse kan vokse med barnet, uden at nye dele skal tilkøbes.

Kørestolen er af god kvalitet og meget fleksibel og stabil. Den er udviklet og designet for at give barnet mulighed for en alsidig og aktiv hverdag.

Velcoryggen giver en enkel og individuel tilpasning af ryggen. Cambringen kan nemt justeres uden brug af ekstra dele. Derudover dækker det store tilbehørsprogram behovet for den individuelle bruger.



Billedet viser Vector med tilbehør



20 - 40 cm
(+4 cm)



22 - 46 cm
(+4 cm)



25 - 45 cm
(+5 cm)



max. 120 kg



Vector kan vokse med barnet i sædebredde, sædedybde og ryghøjde - uden brug af ekstra dele. Derudover findes stolen i mange bredder og dybder.



Vector leveres standard med stropsæde, der fleksibelt kan justeres til barnets anatomi, og formes som en sædebrønd.



Ryggen vinkles ved et enkelt træk i udløserstroppen. Rygvinklen kan derved let ændres til en hvileposition mens bruger sidder i stolen.



Fodpladen kan nemt vippe op for enkel forflytning ind og ud af kørestolen.

Standard konfiguration

Sædebredde:	22 - 40 cm
Stelfarve:	Cremehvid
Drivhjul:	20", 22" eller 24" letvægts drivhjul, massive dæk, alu. drivring
Forhjul:	Frit valg mellem alle typer forhjul. Sorte forhjulsgafler
Puder:	Standardpude 3 eller 5 cm, sort betræk
Skubbehåndtag:	Højdejusterbare
Armlæn:	24 cm (alternativ 37 cm)
Ryg:	Stropryg, inkl. rygslag med 2 cm polstring
Sæde:	Nylonstroppsæde
Fodstøtte:	Opklappelig fodstøtte Model 1 eller 2. (afhænger af størrelse stol)
Tipsikringer:	Svingbare
Egerbeskyttere:	Klare/gennemsigtige
Ekstra:	Tøj og hjulbeskytter Reflekser Fixlocks for selemontering.

Mål og vægt

Sædebredde:	20-40 cm
Sædedybde:	22-46 cm
Ryghøjde:	25-45 cm
Ryginkel:	Regulerbar via udløserstrop, 90° -105°
Drivhjul:	20", 22" og 24"
Svinghjul:	4", 5", 5,5", 6", 7"
Max. brugervægt:	120 kg
Transportvægt:	8 kg



Vector kan leveres i mange flotte farver - kontakt Etac og hør nærmere.





Bestilling Jump Alpha

Sæde- bredde (+2 cm)	Sæde- dybde (+4 cm)	Ryg- højde (+5 cm)	HMI-nr.	Varenr.
22	24	30	113583	S074-222430
22	26	25	113585	S074-222625
22	26	30	113586	S074-222630
24	24	25	113587	S074-242425
24	26	25	113588	S074-242625
24	28	25	113589	S074-242825
24	24	30	114233	S074-242430
24	26	30	114234	S074-242630
24	28	30	114236	S074-242830
26	26	25	113590	S074-262625
26	28	25	113591	S074-262825
26	30	25	113592	S074-263025
26	26	30	114237	S074-262630
26	28	30	114239	S074-262830
26	30	30	114240	S074-263030
28	28	30	113593	S074-282830
28	30	30	113594	S074-283030
28	32	30	113595	S074-283230
28	28	35	114241	S074-282835
28	30	35	114242	S074-283035
28	32	35	114243	S074-283235
30	30	30	113596	S074-303030
30	32	30	113597	S074-303230
30	34	30	113598	S074-303430
30	30	35	114245	S074-303035
30	32	35	114246	S074-303235
30	34	35	114247	S074-303435
32	32	35	113599	S074-323235
32	34	35	323435	S074-323435
32	36	35	323635	S074-323635
32	32	40	114248	S074-323240
32	34	40	114250	S074-323440
32	36	40	114252	S074-323640
34	34	35	114253	S074-343435
34	36	35	114254	S074-343635
34	38	35	114255	S074-343835
34	34	40	114256	S074-343440
34	36	40	114257	S074-343640
34	38	40	114258	S074-343840

Sæde- bredde (+2 cm)	Sæde- dybde (+4 cm)	Ryg- højde (+5 cm)	HMI-nr.	Varenr.
36	36	35	114259	S074-363635
36	38	35	114260	S074-363835
36	40	35	114261	S074-364035
36	36	40	114262	S074-363640
36	38	40	114263	S074-363840
36	40	40	114265	S074-364040
38	38	40	114273	S074-383840
38	40	40	114274	S074-384040
38	42	40	114275	S074-384240
38	38	45	114276	S074-383845
38	40	45	114277	S074-384045
38	42	45	114279	S074-384245



Bestilling Vector

Sæde- bredde (+4 cm)	Sæde- dybde (+4 cm)	Ryg- højde (+5 cm)	HMI-nr.	Varenr.
20	22	25	114149	S069-202225
20	24	25	114166	S069-202425
20	26	25	114168	S069-202625
20	22	30	114169	S069-202230
20	24	30	114175	S069-202430
20	26	30	114176	S069-202630
22	24	25	113584	S069-222425
22	26	25	113602	S069-222625
22	28	25	113603	S069-222825
22	24	30	114177	S069-222430
22	26	30	114178	S069-222630
22	28	30	114179	S069-222830
24	26	30	113604	S069-242630
24	28	30	113605	S069-242830
24	30	30	113606	S069-243030
24	26	35	114180	S069-242635
24	28	35	114181	S069-242835
24	30	35	114182	S069-243035
26	28	30	113607	S069-262830
26	30	30	113608	S069-263030
26	32	30	113609	S069-263230
26	28	35	114184	S069-262835
26	30	35	114185	S069-263035
26	32	35	114186	S069-263235
28	30	30	113610	S069-283030
28	32	30	113611	S069-283230
28	34	30	113612	S069-283430
28	30	35	114187	S069-283035
28	32	35	114188	S069-283235
28	34	35	114189	S069-283435
30	32	35	113613	S069-303235
30	34	35	113614	S069-303435
30	36	35	113615	S069-303635
30	32	40	114190	S069-303240
30	34	40	114191	S069-303440
30	36	40	114192	S069-303640
32	34	35	113616	S069-323435
32	36	35	113617	S069-323635
32	38	35	113618	S069-323835
32	34	40	114195	S069-323440
32	36	40	114196	S069-323640
32	38	40	114197	S069-323840

Sæde- bredde (+4 cm)	Sæde- dybde (+4 cm)	Ryg- højde (+5 cm)	HMI-nr.	Varenr.
34	36	35	114199	S069-343635
34	38	35	114200	S069-343835
34	40	35	114202	S069-344035
34	36	40	114203	S069-343640
34	38	40	114204	S069-343840
34	40	40	114205	S069-344040
36	38	35	114206	S069-363835
36	40	35	114208	S069-364035
36	42	35	114209	S069-364235
36	38	40	114210	S069-363840
36	40	40	114211	S069-364040
36	42	40	114212	S069-364240
38	40	40	114213	S069-384040
38	42	40	114214	S069-384240
38	44	40	114215	S069-384440
38	40	45	114216	S069-384045
38	42	45	114217	S069-384245
38	44	45	114218	S069-384445
40	42	40	114219	S069-404240
40	44	40	114220	S069-404440
40	46	40	114221	S069-404640
40	42	45	114222	S069-404245
40	44	45	114223	S069-404445
40	46	45	114224	S069-404645





Tilbehør til Jump Alpha og Vector *opgiv venligst stolens serienr. eller relevante mål ved bestilling



Sædeklæde til Jump Alpha*

Inkl. lomme under sædet.

Sædeklæde, nylon

S01914



Armlæn

Højdejusterbar. Inkl. armlænspudd.

Armlæn, 1 stk. 24 cm

S0452600

Armlæn, 1 stk. 37 cm

S045260100




Stropsæde til Vector*

Justerbare stropper i sort nylon.

Stropsæde


S01913

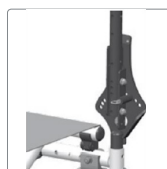

Ryginkling*

Ryginkling 1 stk. justerbar med værktøj S06231

Ryginkling 1 stk. justerbar, udløserstrop S06109

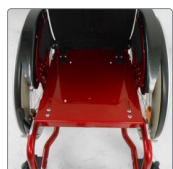

Sædeplade*

aluminium.

SeatFix sædeplade Jump Alpha

S01926

SeatFix sædeplade Vector


S01908

SeatFix sædeforlænger 3 cm

S0191107

SeatFix lås

S0192021

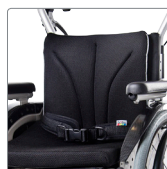

Rygoverslag inkl. polstring*


Sort betræk.

Rygoverslag 2 cm

S0670320

Rygoverslag 4 cm, inkl stroppryg

S0670130

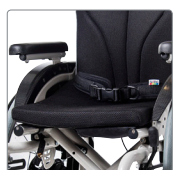

Sædehynde, standard*

Komfortabelt syntetisk skum inkl. sort aftageligt betræk med lynlås.

Standardhynde 3 cm

S08003

Standardhynde 5 cm

S08005

Inkontinensbetræk til std.hynde, 3 cm

S08603

Inkontinensbetræk til std.hynde, 5 cm

S08605



Skubbehåndtag/bøjle

Skubbehåndtag lige, 25 cm, 1 stk.

S0650230

Skubbehåndtag vinklet, 25 cm, venstre

S0650631

Skubbehåndtag vinklet, 25 cm, højre


S0650632

Skubbebøjle sædebredde 26-30 cm

S06534

Skubbebøjle sædebredde 32-40 cm

S06532

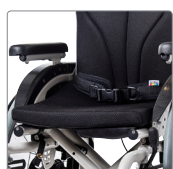

Sædehynde, trykafastende*

Komfortabelt syntetisk skum inkl. sort aftageligt betræk med lynlås.

Sædehynde trykafastende 5 cm

S08105

Betræk, sort

S08201



Justerbar stroppryg*

7 velcrostropper, uden rygoverslag.

Stroppryg

S067010520



Sidebeskytter

Aluminium og kuldeisolerende indlæg.

Sidebeskytter 20"-22" venstre

S045252201

Sidebeskytter 20"-22" højre

S045252202

Sidebeskytter 24" venstre

S045252401

Sidebeskytter 24" højre

S045252402



Fast ryg model 1 + 2

Sort buet ryg med 3 dybder.

RH = ryghøjde.

Model 1, dybde 15 mm (RH + 2 cm)

S0693015

Model 1, dybde 30 mm (RH + 2 cm)

S0693030

Model 1, dybde 50 mm (RH + 2 cm)

S0693050

Model 2, dybde 15 mm (RH + 10 cm)

S0693115

Model 2, dybde 30 mm (RH + 10 cm)

S0693130

Model 2, dybde 50 mm (RH + 10 cm)

S0693150

Model 2, dybde 15 mm (RH + 20 cm)

S0693215

Model 2, dybde 30 mm (RH + 20 cm)

S0693230

Model 2, dybde 50 mm (RH + 20 cm)

S0693250



Hjulafskærmning/ tøjbeskytter

Plast.

Hjulafskærmning 20"-22" venstre

S050240301

Hjulafskærmning 20"-22" højre

S050240302


Hjulafskærmning 24" venstre

S050240401

Hjulafskærmning 24" højre

S050240402


Tilbehør til Jump Alpha og Vector *opgiv venligst stolens serienr. eller relevante mål ved bestilling

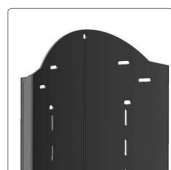

Buet rygplade model 3

Sort buet ryg med 3 dybder. Forhøjet topkant for ekstra stabilitet. RH = ryghøjde.

Model 3, dybde 15 mm (RH + 5 cm)	S0693315
Model 3, dybde 30 mm (RH + 5 cm)	S0693330
Model 3, dybde 50 mm (RH + 5 cm)	S0693350
Model 3, dybde 15 mm (RH + 10 cm)	S0693415
Model 3, dybde 30 mm (RH + 10 cm)	S0693430
Model 3, dybde 50 mm (RH + 10 cm)	S0693450

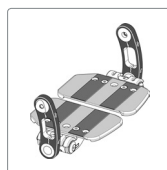

Fodstøtte model 4, sæt

Delt fodplade, udvendigt fæste, sidehængslet, underbenslængde 30-46 cm (målt uden sædehynde). OBS. Anbefales ikke til brugere med spasticitet.

Model 4 Jump Alpha	S0403612
Model 4 Vector	S0404005



Fodstøtte model 5

Svingbar, hel fodplade, udvendigt fæste, sidehængslet, underbenslængde 30-46 cm (målt uden sædehynde).

Model 5 Jump Alpha	S0403611
Model 5 Vector	S0404004
Fodstøttelås	S0400902



Rygforlænger til buet rygplade*

Forlænger ryggen op til 17,5 cm. Inkl. hovedstøttepude.


Rygforlænger	S0686069
--------------	----------



Hælstop

Sort.

Str. 1, 1 stk. (7 x 11,5 cm)	S0402001
Str. 2, 1 stk. (9 x 12,5 cm)	S0402002
Str. 3, 1 stk. (10 x 15,5 cm)	S0402003

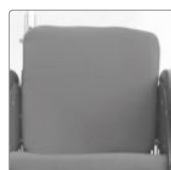

Ryghynde til buet rygplade*

Ryghynde inkl. sort aftageligt betræk med lynlås.


Ryghynde inkl. betræk, 3 cm	S08517
Betræk	S08501



Bremser

1 stk.


Knæledsbremse, standard venstre	S0352501
Knæledsbremse, standard højre	S0352502
Knæledsbremse, låsbar	S03513
Knæledsbremse, "træk og lås"	S03529
Brugerbremse, integreret i hjulafskærmning	S03531
Tromlebremse, ekskl. drivhjul	S0220036
Enhåndsbremse, venstre	S0350901
Enhåndsbremse, højre	S0350902

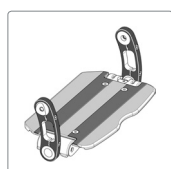

Fodstøtte model 1

Hel fodplade, indvendigt fæste, sidehængslet, underbenslængde 25-30 cm (målt uden sædehynde).

Model 1 Jump Alpha	S0403601
Model 1 Vector	S0403902
Fodstøttelås	S0400902

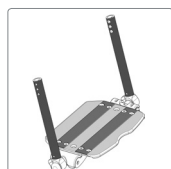

Fodstøtte model 2

Hel fodplade, udvendigt fæste, sidehængslet, underbenslængde 30-46 cm (målt uden sædehynde).

Model 2 Jump alpha	S0403610
Model 2 Vector	S0404002
Fodstøttelås	S0400902



Bremseforlænger

1 stk.

Lige 6 cm med greb	S03510
Lige 6 cm med kuglegreb	S03512
Lige 6 cm med golfkuglegreb	S03512
Vinklet 12 cm med greb	S03515
Vinklet 12 cm med kuglegreb	S03516
Vinklet 12 cm med golfkuglegreb	S03516



Fodstøtte model 3, sæt

Delt fodplade, indvendigt fæste, sidehængslet, underbenslængde 25-30 cm (målt uden sædehynde). Til lige stel fra sædebredde 30 cm. OBS. Anbefales ikke til brugere med spasticitet.

Model 3 Jump Alpha	S0403602
Model 3 Vector	S0403905



Tilbehør til Jump Alpha og Vector *opgiv venligst stolens serienr. eller relevante mål ved bestilling



Hjul

Letvægtshjul inkl. alu drivring, ekskl. dæk.

Drivhjul standard 20" letvægt, 1 stk.	S0212077
Drivhjul standard 22" letvægt, 1 stk.	S0212277
Drivhjul standard 24" letvægt, 1 stk.	S0212477
Drivhjul tromlebremse 20", 1 stk.	S0212082
Drivhjul tromlebremse 22", 1 stk.	S0212282
Drivhjul tromlebremse 24", 1 stk.	S0212482



Forgaffel

Standard aluminium, sort S02826



Tipsikring

Svingbar tipsikring, 20"- 22" S0721501
Svingbar tipsikring, 24" S0721502



Dæk til letvægtshjul

Punkterfri dæk, 1 stk. 1" x 20"	S0232012
Punkterfri dæk, 1 stk. 1" x 22"	S0232212
Punkterfri dæk, 1 stk. 1" x 24"	S0232412
Luftfyldte dæk, 1 stk. 1" x 20"	S0202013
Luftfyldte dæk, 1 stk. 1" x 22"	S0202213
Luftfyldte dæk, 1 stk. 1" x 24"	S0202413



Fronthjul til terræn

Ekstra hjul letter kørsel på blødt eller ujævn underlag. Justerbar i bredde og længde.


Fronthjul S0599520
Stænkskærm til forhjul, plastik S0599511212



Egerbeskytter

Fås i et stort udvalg af motiver og farver.

Transparent 20", 1 stk.	S0252000
Transparent 22", 1 stk.	S0252200
Transparent 24", 1 stk.	S0252400
Motiver og farver	Kontakt Etac

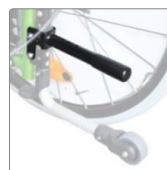

Trædestang

Gør det lettere for hjælperen at tippe kørestolen.

One size S07400



Drivringe

Silikoneovertræk er aftageligt. PWC drivring er med *Tetra Grip*. Alle drivringe sælges stykvis.

Drivring, standard alu, 20"	S0302075
Drivring, standard alu, 22"	S0302275
Drivring, standard alu, 24"	S0302475
Drivring, sort PWC 20"	S03320
Drivring, sort PWC 22"	S03322
Drivring, sort PWC 24"	S03324
Drivring t/tromlebremse, sort alu, 20"	S0302078
Drivring t/tromlebremse, sort alu, 22"	S0302278
Drivring t/tromlebremse, sort alu, 24"	S0302478
Drivring, andre farver	Kontakt Etac
Silikoneovertræk 20", 1 stk.	S0322005
Silikoneovertræk 22", 1 stk.	S0322205
Silikoneovertræk 24", 1 stk.	S0322405



Kropsstøtter

Justerbare. V= venstre, H= højre.

Kropstøtte str. 1 uden pude, V	S068590101
Kropstøtte str. 1 uden pude, H	S068590102
Pude til kropstøtte 1 (10 x 7 cm)	S068590104
Pude til kropstøtte 1 (10 x 9 cm)	S068590105
Forlænger til kropstøtte 1 (3,8 cm)	S068590103
Kropstøtte str. 2 uden pude, V	S068590201
Kropstøtte str. 2 uden pude, H	S068590202
Pude til kropstøtte 2 (15 x 10 cm)	S068590204
Pude til kropstøtte 2 (18 x 13 cm)	S068590205
Forlænger til kropstøtte 2 (5,5 cm)	S068590203



Forhjul

Standard PU 4"	S02812
Standard PU 5"	S02805
Standard PU 6"	S02803
Skaterhjul 4", transparant LED	S02820
Skaterhjul 5", transparant LED	S02834



Bord

Justerbar højde og afstand til brugeren.

Klart bord i akryl, str 1 (45 x 36 cm)	S0920710
Klart bord i akryl, str 2 (59 x 45 cm)	S0920711
Klart bord i akryl, str 3 (70 x 50 cm)	S0920712
Træbord i laminat, str 1 (40 x 50 cm)	S0920713
Træbord i laminat, str 2 (50 x 60 cm)	S0920714
Bord i akryl med tryk/billede	Kontakt Etac

Tilbehør til Jump Alpha og Vector *opgiv venligst stolens serienr. eller relevante mål ved bestilling



Transportbeslag

For fastgørelse af kørestolen i køretøj. 4 dele.

One size

S058507423



Hovedstøtter


Inkl. stangsystem. Se form og mål på illustrationerne nedenfor.

Model 1, skålformet small	S0686021
Model 2, skålformet large	S0686022
Model 3, buet small	S0686023
Model 4, buet large	S0686024
Model 5, x-formet small	S0686025
Model 6 x-formet large	S0686026
Monteringsbeslag til tværstang	S068600804




Ankelsele med spænde

Anvendes for at fastholde og støtte barnets fod på fodpladen, uden at fødderne bliver fastlåste.

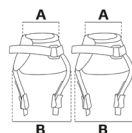


Str. 1 (A: 14-18 B: 22-26 cm)	3185426-1B
Str. 2 (A: 16-20 B: 26-30 cm)	3185426-2B
Str. 3 (A: 18-22 B: 28-32 cm)	3185426-3B
Str. 4 (A: 20-26 B: 30-36 cm)	3185426-4B

Hovedstøtte Model 1

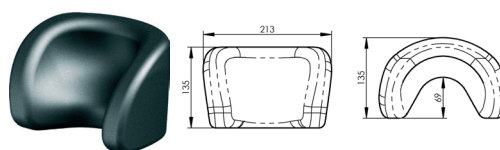


Y-sele

Polstret hoftelele, Y-model, 25 mm endegjerd og plastlås.

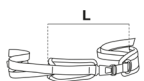


Str. 0 (L: 23-26 cm)	3185427-0
Str. 1 (L: 26-29 cm)	3185427-1
Str. 2 (L: 32-35 cm)	3185427-2
Str. 3 (L: 37-40 cm)	3185427-3

Hovedstøtte Model 2

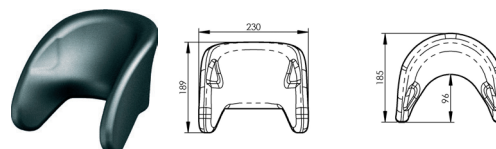


Hovedstøtte Model 3

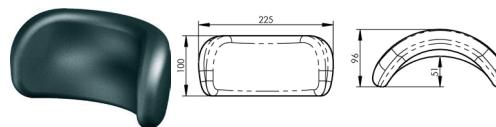


Neoprenvest

Vesten er elastisk og eftergivende for barnets bevægelser.

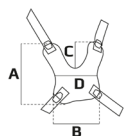


Str. 1 (A: 18 B: 14 C: 10 D: 12 cm)	3189113-1
Str. 2 (A: 27 B: 20 C: 17 D: 15 cm)	3189113-2
Str. 3 (A: 29 B: 23 C: 18 D: 17 cm)	3189113-3

Hovedstøtte Model 4

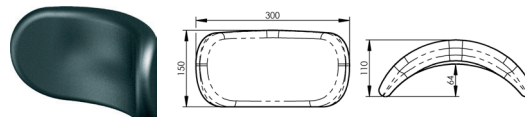


Se www.etac.dk for øvrigt sortiment indenfor veste og seler.

Hovedstøtte Model 5

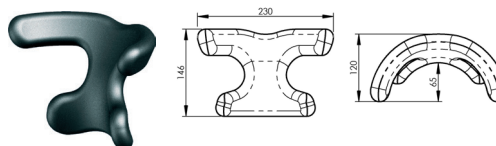

Hovedstøtte Model 6

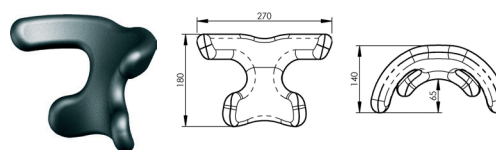



Version 1 - 2019 - Forberedt for tryk og evt. ændringer

“Alle mennesker bør have muligheden for at leve et frit og uafhængigt liv,
at kunne forfølge deres drømme, uanset fysiske forudsætninger.”

For seneste nyheder og løbende produktopdateringer - besøg www.etac.dk

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

 **etac**[®]
Skaber muligheder