



R82[®]

R82 Flamingo Curo

Das Original – jetzt noch flexibler: Eine Lösung für Dusche, Bad und WC.

Toilettentraining liebervoll unterstützen

Der Flamingo Curo ist ein vielseitiger Dusch- und Toilettenstuhl, der Kindern in vielen Alltagssituationen zur Seite steht – ob beim Toilettengang, Duschen oder Baden.

Dank fünf Montagemöglichkeiten – auf drei verschiedenen Gestellen, direkt auf der Toilette oder in der Badewanne – passt sich der Stuhl flexibel an individuelle Bedürfnisse an. So wird die tägliche Pflege leichter und angenehmer – für das Kind und die Eltern.



Toilettraining und die Entwicklung des Kindes

Der Beginn des Toiletentrainings ist ein großer Meilenstein in der Entwicklung eines Kindes. Dabei ist es wichtig, seine Mobilität und die Fähigkeit, selbstständig zu sitzen, genau zu berücksichtigen. Für Kinder, die sich altersgerecht entwickeln, sind der Zugang zu einem Töpfchen oder einer Toilette sowie das Sitzen ohne Unterstützung entscheidende Voraussetzungen für den Start.

Das Alter, in dem Kinder mit dem Training beginnen und trocken werden, variiert stark. Es hängt unter anderem davon ab, wann das Kind erste Anzeichen von Bereitschaft zeigt, wann die Eltern starten, sowie von Geschlecht und kulturellen Gewohnheiten. In manchen Ländern beginnt das Toilettraining bereits mit sechs Monaten, in anderen erst zwischen 18 und 36 Monaten.

Kinder mit Beeinträchtigungen benötigen oft Hilfsmittel und Unterstützung beim Sitzen. Ein gemeinsames Vorgehen von Fachleuten, Eltern und Betreuern ist wichtig, um eine tägliche Routine für Trockenheit am Tag und in der Nacht zu schaffen.

Kinder, die beim Sitzen Unterstützung benötigen, profitieren oft auch in anderen Situationen davon. Besonders bei Verstopfung hilft oft die Hockstellung.

Der Flamingo Curo unterstützt mit speziellen Funktionen: eine Rückenlehne mit -20° Neigung für eine nach vorne geneigte Haltung, höhenverstellbare Fußstützen für die optimale Knieposition und einen gepolsterten Tisch für mehr Halt und spielerische Aktivitäten. Der offene Rahmen erleichtert die hygienische Unterstützung nach dem Toilettengang.

Lesen Sie weiter



Unterstützung der Sitzhaltung bei Toilettenroutinen

Toilettraining ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung eines Kindes und erfordert besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf seine Beweglichkeit. Kinder mit Beeinträchtigungen sind dabei oft auf Hilfsmittel und Unterstützung für ihre Körperhaltung angewiesen, um diesen Schritt zu meistern.



Selbstständigkeit und Lebensqualität

Die Teilnahme an täglichen Toilettenroutinen und das Erlernen persönlicher Hygienefähigkeiten stärken die Fähigkeit zur Selbstfürsorge, das Selbstwertgefühl und die Lebensqualität nachhaltig. Es ist wichtig, die Unabhängigkeit und das Wohlbefinden des Kindes zu fördern, seine Würde zu achten und die Pflege so einfach wie möglich zu gestalten.



Bereitschaft für das Toilettraining

Toiletten- und Badehilfen können Kinder dabei unterstützen, sich aktiv an ihrer Selbstpflege zu beteiligen. Sie stärken die Eigenständigkeit, das Selbstbewusstsein und fördern das allgemeine Wohlbefinden.



Die richtige Haltung beim Stuhlgang

Die Hockstellung kann bei Verstopfung und beim Stuhlgang helfen. Eine nach vorne geneigte Haltung, hochgezogene Knie und Unterstützung im Oberkörper sind wichtig für mehr Komfort und ein besseres Ergebnis beim Toilettengang.

Töpfchengestell


Das Flamingo Curo Töpfchengestell ist ein flexibles Untergestell, das speziell für den Flamingo Curo Sitz der Größe 1 entwickelt wurde. Es hilft Kindern mit Beeinträchtigungen dabei, ihren Weg zur Toilettenunabhängigkeit zu gehen.

Das Toilettentraining ist ein wichtiger Entwicklungsschritt, der besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf die Mobilität, Körperhaltung und Bereitschaft des Kindes erfordert. Während Kinder ohne Beeinträchtigungen je nach Kultur, elterlichem Vorgehen und individueller Reife bereits zwischen sechs Monaten und drei Jahren damit beginnen, benötigen Kinder mit körperlichen oder entwicklungsbedingten Herausforderungen oft Hilfsmittel, um aktiv am Prozess teilzunehmen.

Das Flamingo Curo Töpfchengestell bietet eine stabile, verstellbare und sichere Basis, die Kindern mehr Komfort und Selbstständigkeit bei der täglichen Toilettenroutine ermöglicht. Entwickelt für den Einsatz mit dem Flamingo Curo Sitz, verfügt es über eine unterstützende Einlage und vielfältiges Zubehör, mit dem die Sitzposition individuell angepasst werden kann. So wird eine optimale Haltung gewährleistet – ein wichtiger Faktor für Sicherheit und Erfolg beim Toilettentraining.



Besucht unsere Welt der Pädiatrie

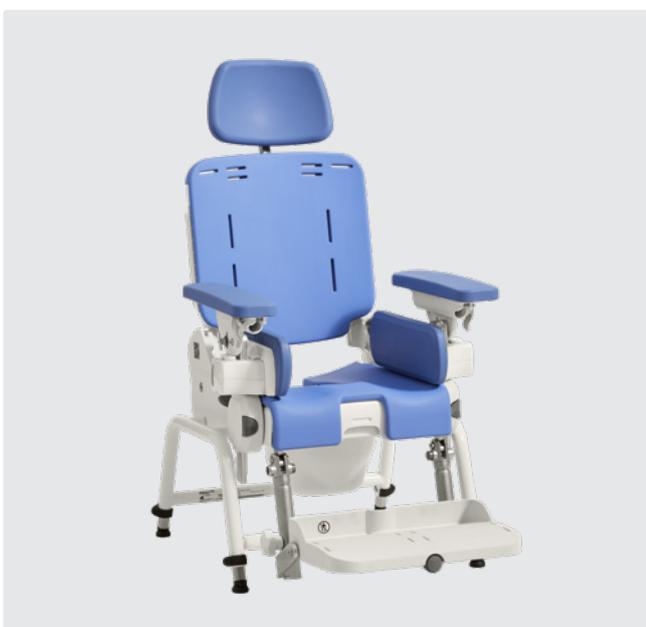

Maße

Flamingo Curo		Größe 1
	Effektive Rückenhöhe	37,5 - 44,5 cm
	Effektive Sitztiefe	23,5 - 29,5 cm
	Effektive Sitzbreite (mit oberen Beinführungen)	18,5 - 26,5 cm
	Max. Belastbarkeit	35 kg
Flamingo Curo Töpfchengestell		Größe 1
	Effektive Höhe von der Fußstütze bis zur Sitzfläche	22 - 28,5 cm
	Höhe der Sitzfläche an der Vorderkante	29 / 31 / 33 cm



Alma und ihre Mutter



Zeit zum Baden!

Baden kann für Kinder mit besonderen Bedürfnissen sowohl beruhigend als auch herausfordernd sein. Ein einfühlsamer und flexibler Umgang ist wichtig, um auf ihre individuellen Sinnes- und körperlichen Anforderungen einzugehen. Manche Kinder reagieren empfindlich auf Wassertemperatur, Oberflächen oder Geräusche. Einfache Hilfsmittel wie Handbrausen oder Lieblingsspielzeuge machen das Baden angenehmer und weniger überwältigend.

Für Kinder mit eingeschränkter Mobilität erhöhen Badestühle oder Transferhilfen Sicherheit und Zugänglichkeit. Geduld und Verständnis sind dabei unverzichtbar. Mit passenden Lösungen wird die Badezeit zu einem wohltuenden Moment der Fürsorge und Entspannung.

Hilfsmittel wie Badestühle spielen eine wichtige Rolle, um während der Badezeit Sicherheit und Komfort zu gewährleisten. Badestühle wie der Flamingo Curo bieten stabilen Halt, entlasten die betreuenden Personen körperlich und fördern die Selbstständigkeit des Kindes.

Der Flamingo Curo verfügt über verstellbare Funktionen, etwa eine kanelbare Rückenlehne, anpassbare Pelotten und eine Kippfunktion, die unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigt und für Stabilität sorgt. Durch den Einsatz solcher Hilfsmittel im täglichen Hygieneablauf können sich die Betreuungspersonen mehr darauf konzentrieren, dem Kind Geborgenheit und Leichtigkeit zu vermitteln – so wird das Baden für alle Beteiligten angenehmer. Gleichzeitig stärken adaptive Hilfsmittel das Würdegefühl des Kindes und motivieren es, aktiver an der eigenen Pflege teilzunehmen.

Eure Wahl für die tägliche Hygieneroutine

Der Flamingo Curo ist ein vielseitiger Dusch- und Toilettenstuhl, der sich an verschiedenste Bedürfnisse anpassen lässt – ideal für den Einsatz beim Toilettengang, Duschen und Baden. Mit fünf verschiedenen Montagemöglichkeiten passt sich der Stuhl flexibel an unterschiedliche Situationen an und bietet so Komfort und Entlastung.



Bereit für das tägliche Leben

Der Flamingo Curo ist ein vielseitiger Dusch- und Toilettenstuhl, der sich sowohl für den Toilettengang als auch zum Duschen und Baden eignet. Mit fünf verschiedenen Montagemöglichkeiten lässt er sich optimal an unterschiedliche Alltagssituationen anpassen.

Wächst mit eurem Kind

Der Flamingo Curo ist in der Rückenhöhe, Sitztiefe und -breite verstellbar. Mit einer großen Auswahl an Zubehör lässt sich der Stuhl flexibel an die Bedürfnisse und das Wachstum eures Kindes anpassen.



Komfort und Unterstützung

Der Flamingo Curo ist mit sorgfältig geformten PU-Einlagen ausgestattet, die eine sanfte Wölbung haben und dem Kind während der Hygieneroutinen bequemen und stabilen Halt bieten.

Sehr nutzerfreundlich

Der Flamingo Curo wurde so entwickelt, dass er leicht zugänglich ist und sich mit nur einer Hand bedienen lässt. So können alle notwendigen Hygieneaufgaben mühelos erledigt und dem Kind gleichzeitig genug Aufmerksamkeit geschenkt werden.



Der Flamingo Curo
mit verschiedenen
Einstellungsmöglichkeiten





Lernt Alma und ihre
Leidenschaft fürs
Baden kennen



Ein Stuhl - viele Möglichkeiten!

Flamingo mit Standarduntergestell



Flamingo mit High-Low Untergestell



Flamingo Töpfchengestell



Nutzung in der Badewanne



Nutzung auf der Toilette



Freistehend mit Topf



Toilettentraining mit Andreas



Andreas ist ein fröhlicher, neugieriger Junge mit Zerebralparese und Lissenzephalie – einer seltenen Erkrankung, bei der die typischen Faltungen im Gehirn fehlen. Das wirkt sich auf seine Entwicklung und Motorik aus. Andreas kann selbstständig sitzen und zeigt eine gute Haltung. Seine rechte Körperseite ist kräftiger – vor allem mit dem rechten Arm spielt er gern mit seinen Autos. Die linke Seite kann er nur eingeschränkt bewegen. Stehen oder gehen kann er nicht ohne Hilfe, aber er erkundet seine Welt auf dem Po rutschend. Auch sprachlich findet er Wege: mit einsilbigen Wörtern teilt er sich mit.

Eines seiner schönsten Rituale ist das gemeinsame Baden mit seinem großen Bruder – ein Moment voller Lachen, Freude und fröhlichem Planschen. Aktuell nutzt Andreas beim Baden einen speziellen Badestuhl, der in die Badewanne gestellt wird. Doch diese Lösung passt immer weniger zu den wachsenden Bedürfnissen von Andreas – und auch nicht mehr ganz zu dem, was seine Familie sich wünscht. Seine Mutter Ditte möchte, dass Andreas weiterhin die Badezeit mit seinem Bruder genießen kann – aber sie hofft auch, dass er Schritt für Schritt mehr Selbstständigkeit beim Duschen und Toilettengang erlangt.

In der Schule nutzt Andreas den R82 Meerkat zum unterstützten Stehen. Wenn er gerade nicht in der Schule ist und fleißig lernt, hört er gerne Musik, spielt gerne mit seinen Autos oder freut sich auf das nächste Abenteuer mit dem Lastenbike seiner Familie.



Eine Lösung mit Fokus auf Unabhängigkeit, Stabilität und Teilhabe

Im Gespräch mit seiner Mutter Ditte wurde schnell klar, dass für die Familie stets im Mittelpunkt steht, die Lebensqualität von Andreas zu verbessern und ihm so viel Entwicklungsfreiraum, Selbstständigkeit und Teilhabe wie möglich zu gewährleisten. Hilfsmittel sind ein fester Bestandteil ihres Alltags, und der nächste Schritt besteht darin, Andreas beim Training für das Duschen und die Toilette zu unterstützen. Hierfür ist der Flamingo Curo eine ausgezeichnete Wahl.

Anfangs stand Andreas der neuen Situation etwas zurückhaltend gegenüber. Ditte nutzte deshalb Kommunikationskarten, um mit ihm über den Flamingo Curo und die Aktivitäten zu sprechen, die er bald üben würde. Als der gepolsterte Tisch angebracht war und er seine Lieblingssendung auf dem Tablett schauen konnte, wirkte Andreas deutlich entspannter. Auch beim Verschieben des Stuhls oder beim Verstellen der Neigung und Rückenlehne konnte Ditte ihn beruhigen, sodass Andreas ein Gefühl von Sicherheit entwickelte.

Dank seiner guten Körperkontrolle kann Andreas mit oder ohne posturaler Unterstützung sitzen. Beim Töpfchentaining, wenn seine Rumpfstabilität auf der linken Seite nachlässt, bieten die Seitenpelotten den nötigen Halt. So kann er sich ganz auf die Übungen konzentrieren, ohne an seine Haltung denken zu müssen.

Begleitet Andreas und
seine Mutter beim
Töpfchentaining



Highlights

Der Flamingo Curo ist ein Dusch- und Toilettenstuhl, der sich flexibel an die individuellen Bedürfnisse anpasst. Dank verschiedener Untergestelle und Montagemöglichkeiten sowie zahlreichem Zubehör ist er die ideale Lösung für das Kind.

Kopfstütze

Eine große Auswahl an Kopfstützen – darunter eine gebogene Version mit weicher Polsterung und verschiedenen Haltestangen.

Feste oder abklappbare Seitenpelotten

Seitenpelotten bieten Kindern mit eingeschränkter Rumpfkontrolle stabilen Halt, sorgen für eine korrekte Körperhaltung und erhöhen den Komfort. Die wegschwenkbare Variante erleichtert den Transfer.

Armlehnen

Für mehr Halt beim Sitzen. Die Armlehnen lassen sich ganz einfach mit einem "Klick" abnehmen, um seitliche Transfers zu erleichtern.

Beckenpelotten

Helfen dabei, Becken und Oberschenkel in Position zu halten, um eine bessere Sitzhaltung zu gewährleisten.

Montagemöglichkeiten

Der Flamingo Curo lässt sich dank vielfältiger Montagemöglichkeiten ganz einfach an verschiedene Hygieneanforderungen anpassen.

Spritzschutz/Abduktionskeil

Erfüllt zwei Aufgaben: Es sorgt für die richtige Positionierung der Beine und erleichtert zudem die hygienische Nutzung der Toilette.

Wadenauflage

Sorgt für stabilen Halt der Unterschenkel und verhindert, dass die Füße bei geneigtem Stuhl nach hinten gleiten.

Fußstütze

Die Fußstütze ist höhen- und winkelverstellbar und unterstützt die Hockposition beim Toilettengang. Dank des Schnellverschlusses lässt sie sich leicht abnehmen oder hochklappen, wodurch der Transfer im Stehen erleichtert wird.



Produktseite





Maße

Flamingo Curo		Größe 1	Größe 2	Größe 3
	Neigungswinkel der Rückenlehne	-20° - 30°	-20° - 30°	-20° - 30°
	Effektive Höhe der Rückenlehne	375 - 445 mm	405 - 485 mm	450 - 550 mm
	Effektive Rückenbreite (mit Seitenpelotten)	140 - 240 mm	175 - 275 mm	220 - 320 mm
	Effektive Rückenbreite (ohne Seitenpelotten)	300 mm	335 mm	390 mm
	Effektive Sitztiefe	235 - 295 mm	295 - 355 mm	335 - 415 mm
	Effektive Sitzbreite (ohne Seitenführungen)	265 mm	300 mm	355 mm
	Effektive Sitzbreite (mit Seitenführungen)	185 - 265 mm	220 - 300 mm	275 - 355 mm
	Effektiver Abstand der Fußstütze zum Sitz	250 - 285 mm	260 - 345 mm	300 - 400 mm
	Max. Nutzergewicht	35 kg	55 kg	70 kg

Flamingo Curo mit Standarduntergestell		Größe 1	Größe 2	Größe 3
	Höhe der Sitzfläche an der Vorderkante	480 - 580 mm	480 - 580 mm	480 - 580 mm
	Sitzneigung	(-10°) - (30°)	(-10°) - (30°)	(-10°) - (30°)

Flamingo Curo mit High-Low Untergestell		Größe 1	Größe 2	Größe 3
	Höhe der Sitzfläche an der Vorderkante	530 - 740 mm	530 - 740 mm	530 - 740 mm
	Sitzneigung	(-5°) - (20°)	(-5°) - (20°)	(-5°) - (20°)

Zubehör




Flamingo Standarduntergestell
31882011, 31882012,
31882013



Flamingo High-Low Untergestell
31882041, 31882042,
31882043



Töpfchengestell
31882050

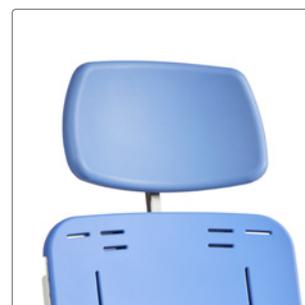

Kopfstütze
Alle Kopfstützen und weiteres
Zubehör finden sie auf www.etac.de
unter der Rubrik "Zubehör"



Gummieinlage für Rücken
31882075, 31882076,
31882077



Rückenseitenteile inkl. Polster
31882081, 31882082,
31882083



Gummieinlage für Sitz
31882071, 31882072,
31882073



Feste Seitenpelotten
31882090, 31882091,
31882092



Abklappbare Seitenpelotten
31882095, 31882096,
31882097



Armlehnen
31882113, 31882114



Beckenpelotten
31882111, 31882112



Lochabdeckung
31882121, 31882122,
31882123



Spritzschutz/Abduktionskeil
31882145, 31882147



Wadenauflage
31882135, 31882136,
31882137



Fußstütze
31882151, 31882152,
31882153



Tisch
31882141, 31882142

Weiteres Zubehör finden Sie auf www.etac.de



Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities