



R82<sup>®</sup>

# R82 Chilla

Der moderne Rehawagen, der neue Maßstäbe setzt.

## Wachstum und maßgeschneiderte Unterstützung

Der Chilla wurde entwickelt, um Komfort, Stabilität und Sicherheit für das Kind zu verbessern. Er wurde mit viel Liebe zum Detail entworfen und verfügt daher über eine Vielzahl von Merkmalen, um eine maßgeschneiderte Passform für die Nutzer zu gewährleisten.

Der Chilla wächst mit Ihrem Kind mit und passt sich seinen wechselnden Bedürfnissen im Laufe der Jahre an.

Das innovative Design umfasst eine Reihe von Zubehörteilen, die sowohl die Funktionalität als auch den Komfort des Buggies verbessern.



## Komfort und Sicherheit

Der Chilla wurde mit Blick auf Komfort und Sicherheit entwickelt. Die Kombination aus bequemen Polstern, einer Weste, einem Gurt und einer einstellbaren Federung sorgt für eine sehr bequeme und sichere Fahrt in den meisten Terrains. Er ist crashgetestet und nach ISO 7176-19 für den sicheren Transport in Kraftfahrzeugen zugelassen.

Der Chilla hat weiche und bequeme Polster mit 30 mm dickem Schaumstoff für maximalen Komfort.

## Einfache werkzeuglose Anpassungen

Der Chilla wurde mit Blick auf die Begleitperson entwickelt, damit alle täglich einstellbaren Funktionen so einfach wie möglich zu bedienen sind, ohne die Sicherheit und den Komfort des Kindes zu beeinträchtigen.



# Für Abenteuer in der Natur gewappnet!

Chilla ist die perfekte Wahl für eine Vielzahl von verschiedenen Familienabenteuern im Freien!

Die Räder für den Chilla gibt es in zwei Ausführungen: pannensicher und Luftbereifung. Bei der Entscheidung zwischen pannensicheren und Luftbereifung ist es wichtig, die verschiedenen Vorteile je nach Einsatzgebiet abzuwägen. Pannensichere Räder haben den Vorteil, dass sie keine lästigen Reifenpannen verursachen, während luftgefüllte Räder den Komfort für das Kind durch eine bessere Stoßdämpfung erhöhen können.

Chilla ist für eine Vielzahl von Wetterbedingungen gerüstet. Ein optionales Wetterschutzdach schützt vor Wind, Regen und Schnee. Es ist in einer Standard- und Premium-Variante erhältlich. Das Wetterschutzdach schützt vor Witterung, kann aber auch als Sichtschutz verwendet werden, wenn die visuellen Reize für das Kind minimiert werden sollen. Die Premium-Variante bietet eine integrierte Lüftungsöffnung, die auch als Fenster fungiert, durch das die Eltern ihr Kind im Auge behalten können und das Kind die Welt weiter beobachten kann.

Wetterschutzdach, standard



Wetterschutzdach, premium



Aufrechte Position



Zur Hälfte heruntergeklappt



Zur Hälfte heruntergeklappt mit  
geöffneter Lüftungsöffnung

## Erlebnis im Freien und multisensorisches Spiel

Forschungsergebnisse zeigen, dass der Kontakt und die Interaktion mit der Natur die Lebensqualität erhöhen, die Konzentrationsfähigkeit steigern und Stress abbauen kann, indem sie einen positiveren emotionalen Zustand fördern, das Energieniveau verbessern und die Konzentrationsfähigkeit steigern.

Multisensorisches Spielen, bei dem Kinder verschiedene Aspekte der Natur berühren, riechen, hören und sehen können, trägt dazu bei, ihre sich entwickelnden Sinne und kognitiven Fähigkeiten zu stimulieren. Diese Erfahrungen fördern nicht nur eine tiefere Verbundenheit mit der natürlichen Welt, sondern unterstützen auch ihre gesamte Entwicklung, einschließlich der körperlichen, kognitiven und emotionalen Entwicklung.



# Highlights

Der Chilla ist die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Familienabenteuern im Freien. Für den Rehawagen wurden verschiedene Eigenschaften und Funktionen entwickelt, die es ermöglichen, jedes Kind bei seinen Erkundungen im Chilla individuell zu unterstützen.

## Komfort und Sicherheit

Bei der Entwicklung des Chilla standen Komfort und Sicherheit im Vordergrund. Er ist crashgetestet und entspricht der ISO 7176-19 für den sicheren Transport in Kraftfahrzeugen.

## Einfacher Transport

Der Chilla lässt sich mit montiertem Sitz und Zubehör mühelos zusammenklappen, was viel beschäftigten Eltern die Arbeit erleichtert. Wenn der Platz begrenzt ist, können Gestell und Sitz auch separat zusammengeklappt werden, was Ihnen noch mehr Flexibilität bietet.

## Nutzung im Freien

Der Chilla ist für eine Vielzahl von Witterungsbedingungen gerüstet. Ein optionales Wetterschutzdach schützt vor Wind, Regen, Sonne und Schnee.

## Aktiv sein oder Ruhepause?

Der Chilla verfügt über eine Tilt-in-Space-Funktion, die mit nur einer Hand bedient werden kann, auch wenn sich das Kind im Sitz befindet. Der Rehawagen hat eine zentrierte Drehachse. Dies bedeutet, dass die Kippfunktion so sanft wie möglich und mit minimalem Kraftaufwand zu bedienen ist.

## Einstellbare Federung

Der Chilla ist mit einer einstellbaren Federung am Rahmen ausgestattet. Die Federung hat eine so genannte echte Dämpfung, was bedeutet, dass die Federung, sobald sie belastet wird, sanft und ohne Wackeln in ihre ursprüngliche Position zurückkehrt.

## Wachstum und Unterstützung

Der Chilla passt sich dank seiner verstellbaren Sitztiefe und Rückenhöhe mühelos an. Und wenn Sie die Sitz- oder Rückenbreite anpassen müssen, können Sie Becken- und Seitenpolstern ergänzen, um einen bequemen und sicheren Sitz zu schaffen.

## Early Intervention

Die Infant-Polsterung für Größe 1 bietet eine unterstützende Sitzgelegenheit für Kleinkinder und ermöglicht die Frühförderung und Teilnahme des Kindes an Aktivitäten und der sozialen Interaktion mit Eltern, Betreuern und der Umwelt.

## Polster

Die Sitz- und Rückenpolster sind in vier verschiedenen Farben erhältlich: Grau, Rot, Blau und Pink. Pink ist nur für Größe 1 erhältlich. Die grauen, blauen und roten Polster sind auch als Mesh-Variante verfügbar.



HMV-Nummer: 18.99.01.2097

Produktseite




# Maße

|  |                                                 | Größe 1<br>standard | Größe 1<br>mit Federung | Größe 2<br>standard | Größe 2<br>mit Federung |
|--|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
|  | Effektive Sitzbreite                            | 330 mm              | 330 mm                  | 380 mm              | 380 mm                  |
|  | Effektive Sitztiefe                             | 180–340 mm          | 180–340 mm              | 240–420 mm          | 240–420 mm              |
|  | Rückenhöhe mit Kopfstützenplatte                | 505–665 mm          | 505–665 mm              | 620–810 mm          | 620–810 mm              |
|  | Rückenhöhe ohne Kopfstützenplatte               | 365–525 mm          | 365–525 mm              | 420–610 mm          | 420–610 mm              |
|  | Sitzhöhe an vorderer Kante                      | 450 mm              | 450 mm                  | 450 mm              | 450 mm                  |
|  | Max. Belastbarkeit                              | 43 kg               | 43 kg                   | 60 kg               | 60 kg                   |
|  | Max. Belastbarkeit beim Transport, Untergestell | 35 kg               | 35 kg                   | 50 kg               | 50 kg                   |
|  | Max. Belastbarkeit beim Transport, Sitz         | 35 kg               | 35 kg                   | 50 kg               | 50 kg                   |
|  | Gesamthöhe bis zum Schiebebügel                 | 1200 mm             | 1200 mm                 | 1200 mm             | 1200 mm                 |
|  | Länge                                           | 730 mm              | 760 mm                  | 730 mm              | 760 mm                  |
|  | Gesamtbreite                                    | 600 mm              | 620 mm                  | 660 mm              | 680 mm                  |
|  | Länge, gefaltet                                 | 1035 mm             | 1035 mm                 | 1035 mm             | 1035 mm                 |
|  | Höhe, gefaltet                                  | 380 mm              | 380 mm                  | 380 mm              | 380 mm                  |
|  | Gewicht, Untergestell                           | 9,2 kg              | 9,7 kg                  | 9,5 kg              | 10 kg                   |
|  | Gewicht, Sitz                                   | 5,3 kg              | 5,3 kg                  | 6,3 kg              | 6,3 kg                  |

Weitere Maße finden Sie auf unserer Website: [www.etac.de](http://www.etac.de)

# Farben

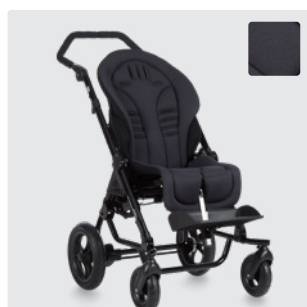

## Grau

Für Größe 1 und 2 - auch als Mesh-Variante erhältlich.



## Rot

Für Größe 1 und 2 - auch als Mesh-Variante erhältlich.



## Blau

Für Größe 1 und 2 - auch als Mesh-Variante erhältlich.



## Pink

Nur für Größe 1 erhältlich.

# Zubehör



**Chilla Sitz**  
318810XX




**Beckenpelotten, fest oder multi-einstellbar**  
Fest: 31881023-X  
Multi-einstellbar: 31881033-X



**Äußere Kniepelotten, inkl. Bezug (Set)**  
31881043-X




**Seitenpelotten**  
31881030-X

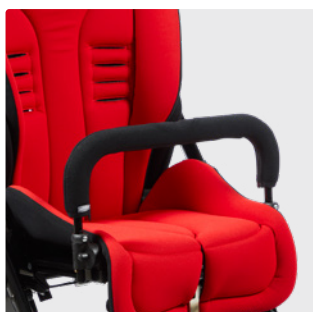

**Haltebügel inkl. Polster**  
31881070-X  
Äußere Kniepelotten erforderlich.



**Therapietisch mit Kante, Modell "Chilla"**  
31881071

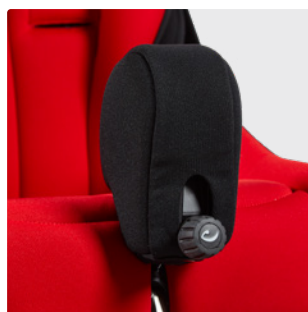

**Abduktionskeil mit Schnellverschluss, inkl. Bezug**  
31881044-X



**Rucksack**  
3187043183-2



**Einkaufskorb**  
31881092



**Rücken- und Sitzpolster "Infant" (Set)**  
31881001-XX  
Pink, Blau und Schwarz.



**Halterung für Kommunikationsgerät**  
31881099



**Aufnahme für Haltebügel und Tisch**  
31881060  
Wird verwendet, wenn der Sitz ohne äußere Kniepelotten genutzt wird.



**Nackenpolster, anatomisch**  
31874084-X




**Kopfstütze, anatomisch**  
31874085-X



**Kopfpolster**  
31874082-X



**Kopfstütze, zweigeteilt**  
31874083

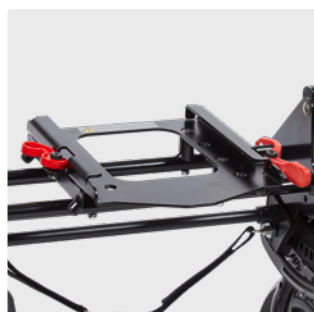

**Adapter für Sitzeinheit, für Untergestell**  
31881091

Zur Montage der Sitze: x:panda shape Gr. 1, x:panda Gr. 1




**Wetterschutzdach, standard**  
31881080-XX



**Wetterschutzdach, premium**  
31881080-XX



**Sitzkeil**  
318720405

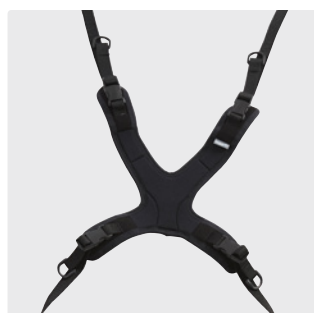


**Westen und Gurte**  
Unsere Westen und Gurte finden Sie auf unserer Website unter Zubehör.



**Medizinische Gerätehalterung**  
31881095



**Halterung für Sauerstoffflaschen**  
31881096

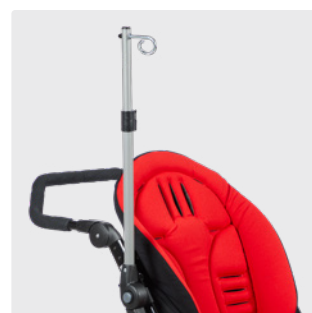

**Infusionsständer**  
31881097

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Website.



© 2022 Chilla, Bloschke & Co. DE

Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie [www.etac.de](http://www.etac.de)

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

[info@etac.de](mailto:info@etac.de)

[www.etac.de](http://www.etac.de)

 **etac**®  
Creating Possibilities