


Produktinformation

Betrifft: Molift Produkt | Motor 1320150 veraltet



Auslaufende Spreizmotoren für alle Mover und Partner 255

Der VALEO-Motor 404689, Artikel 1320150 wurde abgekündigt (Pos. 11 unten). Dies führt zu Änderungen bei den Reparatursätzen und Teilen rund um den Motor:

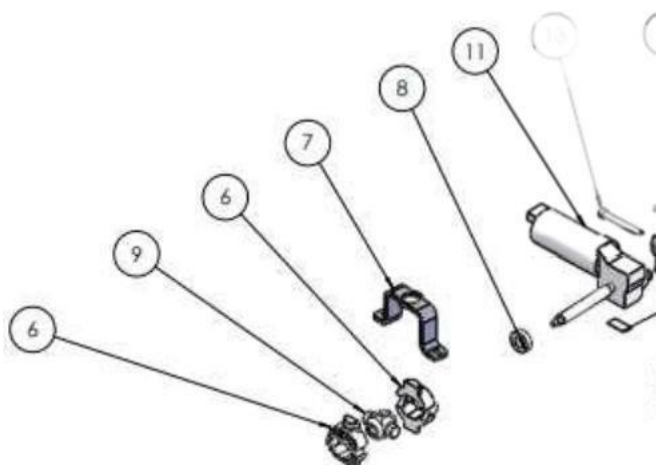

Da der neue Motor andere Abmessungen hat, müssen auch die Mutterspindel (1320117, Pos. 9) und die Gummispindel (1320131, Pos. 8) gewechselt werden.

Die Spindel wird in der Länge von 123mm auf 94mm verkürzt, damit sie in die Mover und Partner 255 passt.

Alte Bezeichnung	Alte Teilenummer	Neue Bezeichnung	Neue Teilenummer
Motor Valeo 404689	1320150	Motor NSTE0220	1320155
Nut spindle	1320117	Nut spindle	1320152
Rubber spindle	1320131	Rubber spindle	1320151
Spare part kit WITH motor	1420513	New spare part kit Mov/Partner	1420540
Spare part kit WITHOUT motor	1420520*	only containing plastic parts for new motor 1320155	1420530

*1420520 wird verfügbar sein, bis der Bestand der vorhandenen Mutterspindel (1320117) und Gummispindel (1320131) aufgebraucht ist.

Wenn Sie ein Gerät mit dem alten Motor haben, müssen Sie einen neuen Motor, eine neue Mutter und eine neue Gummispindel bestellen, um den neuen Motor in das alte Gerät einbauen zu können.