



# Molift RgoSling lyftselar

Ergonomiska lyftselar  
för bekväma lyft

 **etac**<sup>®</sup>

# Molift RgoSlings

Molift har lång erfarenhet av tillverknings av lyftar och lyftselar med hög kvalitet. RgoSling är ett sortiment med lyftselar som är speciellt lämpade för 4-punkts lyftbygel men passar även för 2-punkt. De har utvecklats för att möta kraven på vardagens behov inom vården.

## Standardmodeller: HighBack och MediumBack

Våra standardmodeller är utformade för användning i vanliga förflyttningssituationer och passar de flesta patienter. Standardmodellerna finns i två rygghöjder: HighBack och MediumBack. Den polstrade varianten har polyestertyg med vadderade rygg och benstöd, och nätvarianten har polyesternät med vadderade benstöd.

## Modeller med specifika funktioner

Vi vet att användarna har många olika behov, så vi har designat ytterligare modeller med specifika funktioner för att tillgodose dessa, bland annat RgoSling Toilet och RgoSling Amputee.

### Unik glidfunktion

Glidfunktionen på de övre lyftbanden balanserar vikten i varje skede av lyftet, detta ger en bekväm förflyttning mellan liggande och sittande ställning och vice versa.

### Färgmärkning

Färgmärkning på lyftöglorna underlättar att hitta rätt inställningar.

### Komfortabel polstring

Polstring i rygg- och benstöd fördelar vikten och skapar bättre komfort för patienten.

### Etikett

Tydlig och praktisk information på etiketten. Tvättråd och övrig information ligger skyddad bakom.

### Styrhandtag

Väl synligt placerade styrhandtag på rygg och på sidorna underlättar positionering.


### Appliceringsficka

Ficka bak och på benstöd underlättar appliceringen primärt i sittande position.




# Fakta

## Material

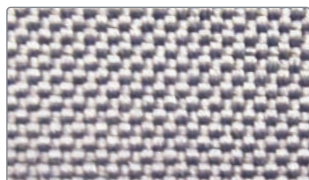

### Polyester

Polyestertyg som är tåligt och slitstarkt. Materialet är lätt att underhålla och har en smutsavvisande yta.

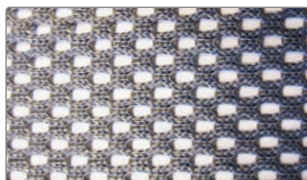

### Nätpolyester

Slitstarkt och tåligt mjukt nättyg, andas bra och torkar snabbt. Lämpligt för bl a dusch och bad.



### Slitstark polyester

Extra slitstarkt polyestertyg för vår lyftsele RgoSling Plus och Repositioneringslakan RgoSling med brukarvikt på 500 kg. Materialet är lätt att underhålla och torkar snabbt.



### Molift RgoSling & EvoSling details

Storlek	Rekommenderad brukarvikt
XXS	12 - 17 kg
XS	17 - 25 kg
S	25 - 50 kg
M	45 - 95 kg
L	90 - 165 kg
XL	160 - 240 kg
XXL	230 - 300 kg

### Tvättinstruktioner



Maskintvätt 60-85°C. Torktumlning låg temperatur, tål inte strykning, kemtvätt eller klorblekning. Att tvätta vid högre temperaturer sliter ut materialet snabbare.

Alla lyftselar har en max brukarvikt på 300 kg. Det finns några undantag som anges under varje produkt.





HighBack polstrad

MediumBack polstrad

HighBack nät

MediumBack nät

## Molift RgoSling HighBack

### Medium benstödsöppning

- Glidfunktion i de övre lyftbanden
- Stöd för hela kroppen och huvudet
- Lyfter till och från liggande / sittande position
- Lyftsele som passar de flesta patienter
- Lyfter enkelt till och från golv
- Möjlighet att justera sittvinkeln vid benstöden

## Molift RgoSling MediumBack

### Medium benstödsöppning

- Glidfunktion i de övre lyftbanden
- Lyfter till och från sittande position
- Lämplig för en patient med huvudkontroll
- Lyftsele som passar de flesta patienter
- Möjlighet att justera sittvinkeln vid benstöden

Storlek	HighBack polstrad	HighBack nät	Storlek	MediumBack polstrad	MediumBack nät
XXS	1720200	1720400	XXS	1720100	1720300
XS	1720210	1720410	XS	1720110	1720310
S	1720220	1720420	S	1720120	1720320
M	1720230	1720430	M	1720130	1720330
L	1720240	1720440	L	1720140	1720340
XL	1720250	1720450	XL	1720150	1720350
XXL	1720260	1720460	XXL	1720160	1720360

Max brukarvikt 300 kg  
HighBack polstrad XL - XXL 350 kg

Max brukarvikt: 300 kg  
MediumBack polstrad XL - XXL 350 kg



## Molift RgoSling Toilet

### Bred benstödsöppning

- Bred benstödsöppning, underlättar påklädning och avklädning
- För patienter med bra bålstabilitet
- Extra kraftig polstring med antihalk på insidan
- Flexibla benstöd
- Finns även med hög rygg
- Bälte med dubbla spännen

## Molift RgoSling Amputee


### Smal benstödsöppning

- Glidfunktion i de övre lyftbanden
- Smal benstödsöppning för minskad urglidningsrisk
- För patienter med förhöjd urglidningsrisk eller för benamputerade
- Idealisk modell för patienter med hög benamputation
- Finns med hög eller axelhög rygg
- Bälte med dubbla spännen

Storlek	Toilet LowBack	Toilet HighBack	Storlek	Amputee MediumBack	Amputee HighBack
XXS	1720500	1720600	XXS	1721100	1721200
XS	1720510	1720610	XS	1721110	1721210
S	1720520	1720620	S	1721120	1721220
M	1720530	1720630	M	1721130	1721230
L	1720540	1720640	L	1721140	1721240
XL	1720550	1721450	XL	1721150	1721250
XXL	1720560	1720660	XXL	1721160	1721260



Comfort HighBack

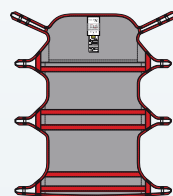

Fabric Stretcher



## Molift RgoSling Comfort HighBack

Stöd för hela kroppen utan delade benstöd

- Glidfunktion i de övre lyftbanden
- Stöd för hela ryggen och huvudet
- Kan ligga kvar i stol eller rullstol
- Polyesternät som ger god ventilation
- Tydlig mittmarkering på ryggen för att underlätta korrekt applicering
- Styrhandtagen är placerade i kantbanden
- Ingen appliceringsficka på ryggen

## Molift RgoSling Fabric Stretcher

En mjuk lyftsele för horisontella förflyttningar

- Passar bra när lyft i en vanlig lyftsele inte är lämpligt
- Polyestertyg med polstring vid huvuddelen
- Åtta fasta lyftband
- Används med en 8-punkts lyftbygel

Storlek	Comfort HighBack
XS	1721410
S	1721420
M	1721430
L	1721440
XL	1721450
XXL	1721460

Storlek	Fabric Stretcher Bredd x Längd	Art.nr
M	450 x 1750 mm	1721520
L	650 x 1780 mm	1721530
XL	900 x 1830 mm	1721540



## Etac Molift RgoSling StandUp

Polstrad uppresningssele perfekt stöd för korsryggen och är det bästa valet vid förflyttning från sittande till sittande.

- Används tillsammans med 2-punkts lyftarm i kombination med uppresningslyften Molift Quick Raiser.
- Finns ett snöre på vardera sidan som fästs på lyftarmen på lyften.
- Hög rygg som fördelar vikten jämnt över en stor yta.
- Halkskydd på insidan och ett midjebälte hjälper till att hålla selen på plats under förflyttning.
- Finns i två olika modeller. Modellen med extra support ger stöd för stussen om brukaren behöver extra hjälp för att komma upp till stående.

Storlek	StandUp	StandUp Support
XS	1720710	1720810
S	1720720	1720820
M	1720730	1720830
L	1720740	1720840
XL	1720750	1720850

## Molift RgoSling Ambulating Vest

För säker och bekväm gåträning

- Fyra lyftband med fasta öglor
- Självvåtdragande i sidorna
- För stå, gå och balansträning
- Dubbla spännen för extra säkerhet
- Polyestertyg med polstring och antihalk på insidan
- Polstrade grenband som tillbehör


Storlek	Ambulating Vest	Art.nr
XXS		1721300
XS		1721310
S		1721320
M		1721330
L		1721340
XL		1721350
Storlek	Grenband	Art.nr
XXS-XS	en per förpackning (beställ två för ett par)	1721700
S-M		1721720
L-XL		1721740



## Molift RgoSling MediumBack Plus

Lyftsele för patienter som väger från 160 kg


- Stöd för hela kroppen
- Lyftband med fasta öglor och flera höjdalternativ
- Polstrade och bekväma benstöd med dubbla lyftband
- Färgkodade lyftöglor
- Delad benstödsöppning och sex lyftband
- Kan användas med ett separat nackstöd

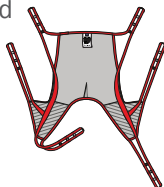

## Molift Repositioneringslakan RgoSling

Ett lyft- och repositioneringslakan

- Vändning av sängliggande patienter och lyft högre upp i sängen
- Överflyttning mellan två ligglägen
- Ligger på plats i sängen
- Underlättar vid omvårdnadssituationer
- Åtta färgkodade lyftband Midi
- Tio färgkodade lyftband Maxi

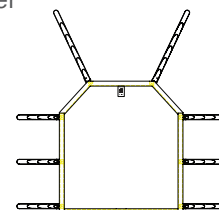

Storlek	MediumBack Plus	Storlek	Antal	Repositioning sheet
L	1721940	Midi L 1340 x B 1250 mm	1 st	1721570
XL	1721950	Midi L 1340 x B 1250 mm	10 st	1721570-C
		Maxi L 2100 x B 1250 mm	1 st	1721550

Max brukarvikt: 500 kg

Vi vill ge människor möjlighet att påverka sin egen tillvaro och skapa en egen vardag på sina egna villkor – oavsett fysiska förutsättningar.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)