



etac[®]

Etac Produktinformation

Januari – Mars 2024

Produktinformation från Etac

För att ge dig en enkel översikt över produktinformation från oss, samlar vi all information per kvartal, som berör förbättringar och nyheter inom alla våra produktområden.

För att ta del av löpande produktinformation samt samlad information från tidigare kvartal, besök vår hemsida www.etac.se.

Vi strävar alltid efter att hålla oss i framkant, vad gäller design och funktion, i utvecklingen av befintliga och nya hjälpmedel.



Innehåll

Barn & Junior

R82 Mustang – Handbroms nytt tillbehör.....	3
R82 Pondus – Ny produkt.....	4
R82 Meerkat – Gunga i sidled nytt tillbehör.....	5
R82 Crocodile – Handtag för handbroms.....	6
R82 Neoprenväst – Utgår.....	7

Rullstolar

Etac Prio – Dynamiskt bäckenstöd.....	8
Etac Transit – Droppställning.....	9
Skydd hjulaxel – Nytt utförande.....	10
Etac Cross/Transit – Syrgashållare nytt tbh.....	11

Hygien

Etac Supporter – Tvärså utgår.....	12
Etac Swift Mobil-2/Clean – Ryggklädsel.....	13
Etac Swift Mobil/-2 – Sits slutet baktill.....	14
Etac Swift Mobil-2 – Avtorkningsbar rygg.....	15

Kontakt

Kontakta oss.....	16–17
-------------------	-------

Produktinformation

Gäller: R82 Mustang

Handbroms – Nytt tillbehör till gästöd R82 Mustang

R82®

Nu finns möjligheten att montera handbroms på Mustang i kombination med underarmstöd, oavsett om Mustang används som ett framåtvänt eller bakåtvänt gånghjälpmedel.

För att montera handbromsen krävs att Mustang är utrustad med 200 mm hjul.



Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Handbroms för underarmstöd	Mustang stl 1 hjul 200 mm	31869346-1
Handbroms för underarmstöd	Mustang stl 2 hjul 200 mm	31869346-2
Handbroms för underarmstöd	Mustang stl 3 hjul 200 mm	31869346-3
Handbroms för underarmstöd	Mustang stl 4 hjul 200 mm	31869346-4
Leverans		Finns i lager

2024-01-25

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Pondus

NYHET! R82 Pondus

R82®

Nu lanserar vi den digitala produkten Pondus - ett verktyg som används för att mäta barnets vikt bäring vid stående i ett R82 ståstöd. Pondus gör det möjligt för vårdgivare och vårdpersonal att få avläsningar i realtid samt avläsningar efter användning, för att lättare förstå vilken vikt bäring som har uppstått under barnets ståsession.

Pondus finns i tre storlekar och består av två fotplattor och Pondus-appen.

För mer information och artikelnummer, se vår hemsida etac.se



2024-01-25

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Meerkat

Gunga i sidled – Nytt tillbehör till ståstöd Meerkat

R82®

I vårt nuvarande tillbehörssortiment finns gunga till Meerkat som gör det möjligt för barnet att gunga fram och tillbaka. Nu har vi tagit fram ett tillbehör, som i kombination med existerande gunga, tillåter barnet att gunga i sidled. Med detta nya tillbehör kan barnet variera viktbäringen mellan höger och vänster ben genom att gunga åt sidorna.

För att montera gunga i sidled krävs existerande gunga: 31118598-1 (stl 1), 31117047-1 (stl 2-3).



Meerkat med gunga i sidled

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Gunga sidled Meerkat stl 1	kräver 31118598-1	31869488-1
Gunga sidled Meerkat stl 2-3	kräver 31117047-1	31869488-2
Leverans		Finns i lager

2024-01-18

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Crocodile

Handtag för handbroms Crocodile

R82[®]

Nu finns möjligheten att montera handbroms på Crocodile i kombination med underarmstöd. Genom att byta till nedan variant av handtag kan handbromsen enkelt monteras i korrekt position. Förutom nedan handtag så krävs handbroms samt underarmstöd.

Handtag till Crocodile stl 2 och 3 levereras med en längre vajer.



Handtag inkl. vajer

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Handtag för underarmstöd	med handbroms Crocodile stl 1 par	3186874-1
Handtag för underarmstöd	med handbroms Crocodile stl 2 par inkl vajer	3186874-2
Handtag för underarmstöd	med handbroms Crocodile stl 3 par inkl vajer	3186874-3
Leverans		Finns i lager

2024-01-09

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Västar och bälten

Neoprenväst – Utgår



Neoprenväst utgår ur sortimentet pga låg försäljning.

Vi hänvisar till vårt övriga sortiment av västar och bälten som ersättning av utgående produkt.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Neoprenväst stl L		AI7151
Neoprenväst stl M		AI7152
Neoprenväst stl S		AI7175
Neoprenväst stl XS		AI7176
Leverans		Utgår

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Dynamiskt bäckenstöd

etac®

Det dynamiska bäckenstödet på Prio sb 50 och 55 har varit begränsat i sin justering p.g.a. vajerns dragning genom "fickan" på bandet. Vi har därför sett över samtliga bredder och gjort några mindre justeringar.

Det vänstra bandet av det dynamiska bäckenstödet har förkortats 3 cm med oförändrat justeringsintervall. Bandet är samma för alla sittbredder. Denna förändring gör att "fickan" på det högra bandet blir mer centrerad och vajerns längd blir därmed tillräcklig. Vajern är oförändrad.

Sb 50 och 55 får nu samma högra band då längden är tillräckligt för båda bredderna. Längden på det högra bandet motsvarar tidigare sb 50 och innebär för sb 55 att draglängden för vajern ytterligare reduceras.

Sb 40 har "fickan" flyttats 3 cm längre från centrum på det högra bandet, detta för att kompensera för justeringen som gjorts av det vänstra bandet.

Nytt artikelnummer för Dynamiskt bäckenstöd 50/55, övriga artikelnummer är oförändrade.

Ändringarna införs fortlöpande, samtliga förändringar beräknas vara genomförda 2024 vecka 2.



Dynamiskt bäckenstöd, monterad på Prio



Det nya bandet, där "fickan" har flyttats 3 cm åt höger

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bäckenstöd dynamiskt B50/55	kpl Prio 3A	28999
Leverans: Samtliga förändringar beräknas genomförda		Vecka 2, 2024

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bäckenstöd dynamiskt B50	kpl Prio 3A	28706
Bäckenstöd dynamiskt B55	kpl Prio 3A	28707
Utgår: Samtliga förändringar beräknas genomförda		Vecka 2, 2024

2024-01-02 ID: P32046A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities


Produktinformation

Gäller: Etac Transit

Droppställning till Transit

etac®

Vi har nu tagit fram en ny droppställning till Transit som monteras på baksidan av gaveln. Produkten levereras komplett med fäste och ställning.

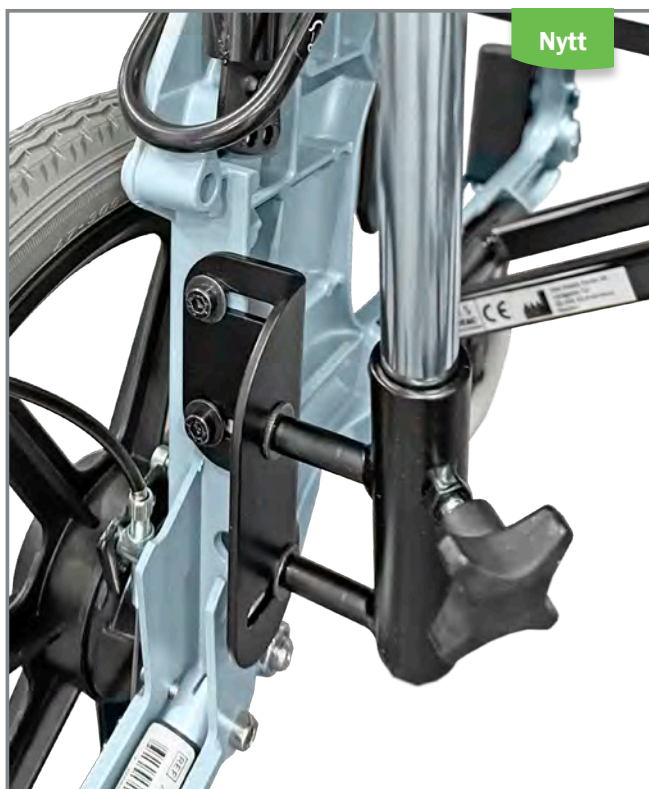

Droppställning till Transit. Monteras på baksidan av gaveln.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Droppställning Transit		28926
Leverans		Finns i lager

2024-01-08 ID: P32061A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Cross | Prio | Crissy | Transit

Skydd hjulaxel – Nytt utförande

etac®

Skydd hjulaxel är justerat för att passa till fler framgafflar.

Det nya skyddet passar till befintligt och kommande sortiment av framgafflar, medan det gamla endast passar till befintligt sortiment. Skillnaden mellan ny och gammal ser du på bilderna nedan.



Det nya skyddet för hjulaxel är lite lägre i höjd, samt att "flärpen" på baksidan är lite mindre än på det gamla.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Skydd hjulaxel		51284
Skydd hjulaxel 50 st	sats	28966
Leverans		Vecka 1, 2024

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Skydd hjulaxel svart		51135
Skydd hjulaxel PA 6 50 st		27954
Utgår		Efter slutförbrukning

2024-01-17 ID: P5633A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Cross | Transit

Syrgashållare

etac®

Vi har nu tagit fram en egen ny syrgashållare till Cross och Transit.

Artikelnummer 28937 är komplett och inkluderar två olika fästen för montering på olika rullstolar.

Art 83981 är vinklat fäste för att passa till ramen på Cross 6, endast för montering på vänster sida.

Art 83983 är rakt fäste och passar till Transit, Cross 5 och Cross 5XL, för montering på höger eller vänster sida.



Vår egen modell av Syrgashållare.

Det raka fästet (1) passar till Cross 5, Cross XL samt Transit.

Det vinklade fästet (2) passar till Cross 6.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Syrgashållare kpl		28937
Fäste syrgashållare vä	Cross 6	83981
Fäste syrgashållare hö/vä	Cross 5XL, Transit, Cross 5	83983
Leverans		Vecka 10, 2024

2024-02-27 ID: P35186A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Supporter med ställbart toalettarmstöd

Tvärslå längd 500 mm utgår

etac[®]



Tvärslå längd 500 mm utgår

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tvärslå 500 mm		80303035
Sista säljdatum		2023-12-31

2024-01-15 ID: P00001A

1/1

För tekniska frågor, kontakta:
Ulf Sjöstrand, ulf.sjostrand@etac.com

För övriga frågor, kontakta:
Maria Clettborn-Persson, maria.persson@etac.com

Produktinformation

Gäller: Swift Mobil-2 | Swift Mobil Tilt-2 | Swift Mobil 24"-2 | Clean | Clean Hight Adjustable | Clean 24"

Mindre förändringar på rygglädsel till Swift Mobil-2 och Clean

etac

På rygglädsel till Swift Mobil-2 och Clean så byts färgen på det bredare bandet så att det stämmer bättre överens med övriga banddetaljer.

Rygglädsel till Swift Mobil-2 ingår i samtliga huvudprodukter och finns som reservdel.

Rygglädsel till Clean ingår i några huvudprodukter samt finns som tillbehör.


Förändringen kommer att införas löpande under Q1 2024.



Nuvarande rygglädsel Swift Mobil-2



Ny rygglädsel Swift Mobil-2

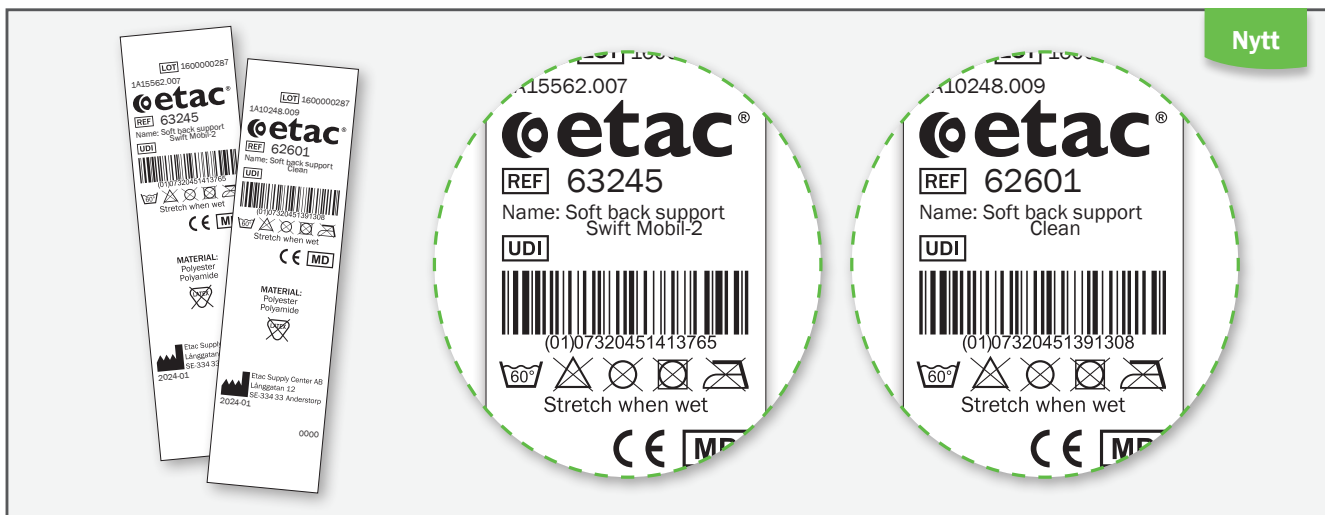

För att förenkla sortering efter tvätt så har namn på artikeln och vilken produkt den tillhör lagts till på etiketten som är fastsydd på samtliga rygglädsel tillhörande Swift Mobil-2 och Clean.

Produktinformation

Gäller: Swift Mobil-2 | Swift Mobil Tilt-2 | Swift Mobil 24"-2 | samt Swift Mobil familjen

Sits sluten baktill

etac[®]

Sits till Swift Mobil som är sluten baktill har genomgått en konstruktionsförändring. Nu passar den både Swift Mobil samt Swift Mobil-2 familjerna.

Ersätter befintliga sitsen 84001307.



Ny artikel

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sits sluten baktill	Swift Mobil-2	84001337
Säljstart		Vecka 9, 2024

Utgående artikel

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sits Swift Mobil	Swift Mobil-2	84001307

2024-01-23 ID: P12832A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Swift Mobil-2 | Swift Mobil Tilt-2 | Swift Mobil 24"-2

Avtorkningsbar rygg

etac®

Som ett alternativ till den mjuka ryggklädseln introducerar vi nu vår nya avtorkningsbara rygg. Den är utformad för att enkelt kunna rengöras mellan olika brukare vilket säkerställer en hygienisk miljö.

Det ergonomiskt utformade ryggstödet ger optimal komfort genom att flexa i den nedre delen och därmed anpassar sig efter varje individ.

Med vred på baksidan är den enkel att montera utan användning av verktyg. Det finns även möjlighet att justera höjden genom att skjuta den upp och ner på chassit. När rätt höjd är vald drar man enkelt åt vreden och därmed sitter den fast.

Den avtorkningsbara ryggen tål manuell rengöring med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel (pH-värde mellan 5-9) och 70% desinfektionssprit.

Observera att den inte passar till Swift Mobil-2 med XL-rygg eller Swift Mobil Tilt-2 med XL-rygg.



Vår nya avtorkningsbara rygg som passar Swift Mobil-2

Benämning artikel Tillbehör	Beskrivning	Art. nr.	Beräknad säljstart
Avtorkningsbar rygg	Swift Mobil-2, Alto	80209530	V. 15 2024

Benämning artikel Reservdel	Beskrivning	Art. nr.	Beräknad säljstart
Vred Avtorkningsbar Rygg 2 st	Swift Mobil-2, Alto	84006223	V. 15 2024

2024-02-27 ID: P5630A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

pernilla.linde@etac.com
Mobil 0703-42 47 40

- Junior

Halland, Skåne, Blekinge,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg
och Västra Götaland



Liv Nyberg

Säljare/utbildare

liv.nyberg@etac.com
Mobil 072-232 25 85

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Värmland, Örebro och Östergötland



Bettina Silver

Säljare/utbildare

bettina.silver@etac.com
Mobil 076-146 57 17

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Halland, Skåne, Blekinge. Kalmar, Kronoberg och
Malmö



Fathi Makvandi

Säljare/utbildare

fathi.makvandi@etac.com
Mobil 076-106 39 51

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Jönköping, Örebro
och Värmland



Annica Brodin

Säljare/utbildare

annica.brodin@etac.com
Mobil 076-140 34 26

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Östergötland



Kristina Henningsson

Säljare/utbildare

kristina.henningsson@etac.com
Mobil 076-119 90 22

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Junior

Jämtland, Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten
och Norrbotten



Josefina Frisk

Key Account Manager

josefina.frisk@etac.com
Mobil 070-297 81 82

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Örebro, Värmland, Jämtland, Härjedalen,
Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten



Inger Skärin

Säljare/utbildare

inger.skarin@etac.com
Mobil 073-075 54 25

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och lyftselar
- Tryckavlastning härl
- Positioneringskuddar

Halland, Skåne, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Västra Götaland och Östergötland



Caisa Jerrå

Säljare/utbildare

caisa.jerra@etac.com
Mobil 070-286 26 52

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Tryckavlastning härl
- Positioneringskuddar
- Luftassisterad överflyttning

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg,
Västmanland, Värmland och Örebro




Sirwan Hurmzyar

Teknisk säljare

sirwan.hurmzyar@etac.com
Mobil 070-519 66 77

- Lyftar & lyftselar

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Östergötland,
Örebro, Värmland, Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten

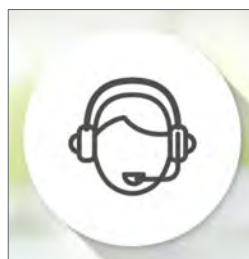

Kundservice

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

Öppettider:
Måndag 09:15-16:00
Tisdag-fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00



© 2023

Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation
– besök www.etac.se

Etac Sverige AB

 0371-58 73 00

 info@etac.se

 www.etac.se

 **etac**[®]

Creating Possibilities