


Storleksguide

Stabil-Air - 7,5 cm cellhöjd

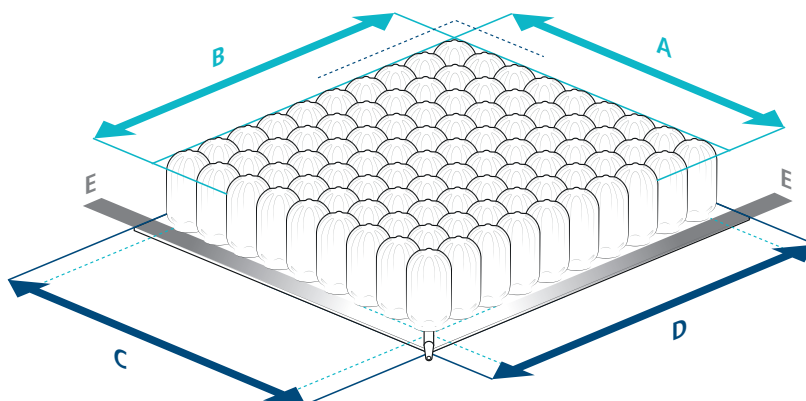

Art.nr ESSA3...	Bottenplatta (C x D) Bredd x Djup (cm)	Antal celler (A x B) Bredd x Djup	Sits bredd* (cm)	Sits djup** (cm)
...0909-1	26 x 26	5 x 5	22 - 25	24 - 27
...0911-1	26 x 30	5 x 6	22 - 25	28 - 31
...0913-1	26 x 34	5 x 7	22 - 25	31 - 35
...1109-1	30 x 26	6 x 5	25 - 30	24 - 27
...1111-1	30 x 30	6 x 6	25 - 30	28 - 31
...1113-1	30 x 34	6 x 7	25 - 30	31 - 35
...1115-1	30 x 39	6 x 8	25 - 30	36 - 40
...1309-1	34 x 26	7 x 5	30 - 35	24 - 27
...1311-1	34 x 30	7 x 6	30 - 35	28 - 31
...1313-1	34 x 34	7 x 7	30 - 35	31 - 35
...1315-1	34 x 39	7 x 8	30 - 35	36 - 40
...1317-1	34 x 44	7 x 9	30 - 35	40 - 45
...1511-1	39 x 30	8 x 6	35 - 40	28 - 31
...1513-1	39 x 34	8 x 7	35 - 40	31 - 35
...1515-1	39 x 39	8 x 8	35 - 40	36 - 40
...1517-1	39 x 44	8 x 9	35 - 40	40 - 45
...1519-1	39 x 49	8 x 10	35 - 40	45 - 50
...1521-1	39 x 53	8 x 11	35 - 40	50 - 55
...1713-1	44 x 34	9 x 7	40 - 44	31 - 35
...1715-1	44 x 39	9 x 8	40 - 44	36 - 40
...1717-1	44 x 44	9 x 9	40 - 44	40 - 45
...1719-1	44 x 49	9 x 10	40 - 44	45 - 50
...1721-1	44 x 53	9 x 11	40 - 44	50 - 55
...1915-1	49 x 39	10 x 8	44 - 49	36 - 40
...1917-1	49 x 44	10 x 9	44 - 49	40 - 45
...1919-1	49 x 49	10 x 10	44 - 49	45 - 50
...1921-1	49 x 53	10 x 11	44 - 49	50 - 55
...2115-1	53 x 39	11 x 8	49 - 54	36 - 40
...2117-1	53 x 44	11 x 9	49 - 54	40 - 45
...2119-1	53 x 49	11 x 10	49 - 54	45 - 50
...2121-1	53 x 53	11 x 11	49 - 54	50 - 55

... För fullständigt artikelnummer, se relaterat produktblad.

Stabil-Air – 7,5 cm cellhöjd

Stabil-Air sittdyna med en cellhöjd på 7,5 cm har en celldiameter på 5 cm.

Bottenplattan är ca 2 cm bredare på alla fyra sidor (E), än måttet från yttercell till yttercell (A and B).

Det är bottenplattans yttermått (C x D) som anges i all dokumentation.

***Sitsbredd:** Placerad i en rullstol kan bottenplattans ytterkanter (E) vikas uppåt. Därav skillnaden mellan bottenplattans mått och rekommenderad sitsbredd.

****Sitsdjup:** Sitsdjupet mäts på mitten av sitsen, från framkant till ryggklädseln. Mät sitsdjupet när ryggklädseln är korrekt inställd. Placera dynan så långt bak på sitsen som möjligt.