



Molift Mover 180

Personlyft med lätt vikt
och stort lyftspann

 **etac**[®]

Molift Mover 180

Personlyft Molift Mover 180 har låg vikt och är en flexibel samt kompakt lyft som passar både i hem, sjukhem och sjukhus.

En favorit i vardagen

Molift Mover 180 är tillverkad i aluminium som gör den lätta och smidiga konstruktionen mycket enkel att manövrera. Det stora lyftspannet, med 4-punkts lyftbygel, 27 – 163 cm, tillåter lyft från höga höjder likväldigt som lyft från golv. Molift Mover 180 finns med både 2-punkts och 4-punkts lyftbygel. Quick release koppling för enkelt byte av lyftbygel är standard.

Ergonomiska lyft

För att förbättra ergonomin för vårdaren är Molift Mover 180 utrustad med ett ergonomiskt utformat körhandtag som ger flera olika greppmöjligheter.

Molift Mover 180 är utrustad med automatisk servicevarning "Service tool". Detta är en inbyggd programvara som räknar ut när lyften behöver service utöver den rekommenderade årliga kontrollen. Det går även att hämta ut statistik som visar lyftens användningsmönster.



Beskrivning

Mover 180 med 2-punkts lyftbygel M och integrerad laddare

Art.nr

M18152

Fakta

Batteri: NiMH 14,4 V – 2,6 Ah
Laddningstid batteri: Ca 3 timmar
Hjulstorlek: 75 mm
Lyfthastighet: 4 cm/ sek
Antal lyft: 50 lyft med 75 kg och 50 cm
Max brukarvikt: 180 kg

Material

Aluminium och stål
Service tool Ingår

Mått och vikt

Vikt Totalt: 32 kg
Höjd: 194 cm
Längd: 126 cm
Hjulunderredets bredd
67 cm utvändigt med stängda ben
102,5 cm invändigt med öppna ben
Lyftområde med 2-punkts lyftbygel: 37 – 173 cm
Lyftområde med 4-punkts lyftbygel: 27 – 163 cm
Lyftintervall: 136,5 cm
Benhöjd: 10,5 cm

Rengöring



Använd pH-neutralt rengöringsmedel. Om desinfektion krävs, använd isopropylalkohol.
Använd inte slipande eller frätande ämnen för rengöring.



Egenskaper



Ergonomiskt körhandtag

Det unika körhandtaget ger ett naturligt grepp, skapar god ergonomi och många greppmöjligheter.



Lätt att manövrera

Molift Mover 180 har en total vikt på bara 32 kg vilket tillsammans med den smidiga designen gör den lätt att manövrera.



Molift Service tool

En automatisk servicevarning är en inbyggd programvara som räknar ut när lyften behöver service utöver den rekommenderade årliga kontrollen.



Flera möjligheter

Lyften Mover 180 kan användas med både 2-punkts och 4-punkts lyftbygel. De finns i 6 storlekar och kan lätt monteras utan verktyg.




Våg till Mover 180



Vågen uppfyller gällande tekniska standarder, och är en godkänd klass III-våg. Vågen kan beräkna BMI.

Lyftbyglar

De nya lyftbyglarna i aluminium passar till de flesta lyftselarna på marknaden. De lätta byglarna gör att den totala vikten för lyftarna blir låg och lyftbyglarna är även lätta för vårdaren att hantera.

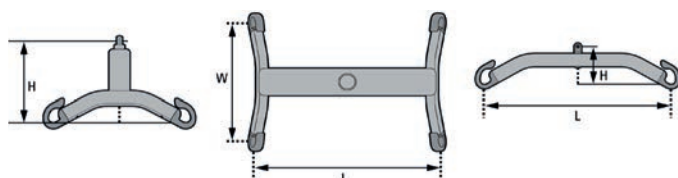

Beskrivning	Art.nr.	Mått L x B x H
Mover 180 2-punktsbygel, S	1830043	350 x 130 mm
Mover 180 2-punktsbygel, M	1830042	450 x 130 mm
Mover 180 2-punktsbygel, L	1830041	550 x 130 mm
Mover 180 4-punktsbygel, S	1830110	350 x 300 x 210 mm
Mover 180 4-punktsbygel, M	1830111	450 x 300 x 240 mm
Mover 180 4-punktsbygel, L	1830112	550 x 350 x 240 mm

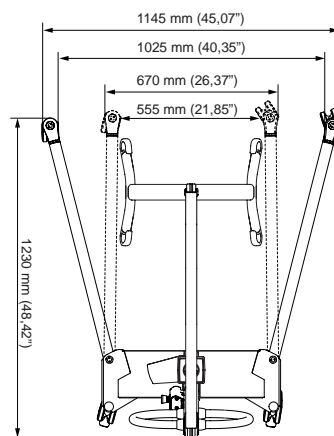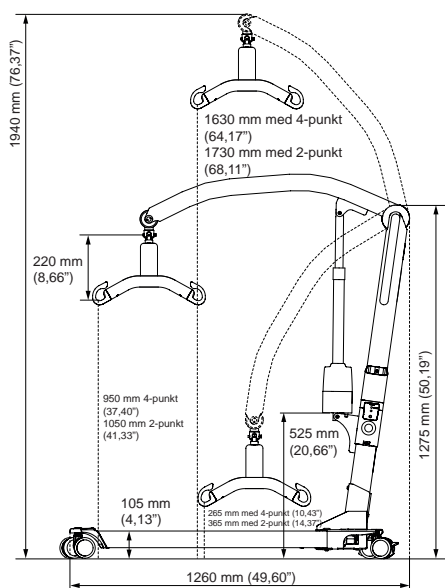



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se