



Molift QuickRaiser 205

Lift til forflytninger fra siddende til stående - med fremragende løfteevne

 **etac**®



Molift QuickRaiser 205

Molift QuickRaiser 205 er en moderne sit-to-stand lift med elektrisk justerbar base og en fremragende løfteevne. Liften er komfortabel, stabil og sikker med exceptionel manøvrerdygtighed.

Stabil og kompakt

QuickRaiser 205 er kompakt, stabil og særdeles let at manøvrere. Den unikke hjulposition, de vinklede håndtag og basens ekstraordinære vægtfordeling giver en lille venderadius og nem manøvrerdygtighed, selv i meget smalle rum. Det elektrisk justerbare understel muliggør adgang næsten overalt - også under de fleste senge og stole, da understellet er meget lavt (ned til 7,5 cm).

Naturligt bevægelsesmønster

Den aktive løftesøjle og de nye sejl: RgoSling Active, giver ekstra støtte ved forflytninger fra siddende til stående. Den skråtstillede løftesøjle giver et naturligt bevægelsesmønster og opfylder behovene for løft for brugere, som i nogen grad selv kan deltage under løftet.

QuickRaiser 205 kombineret med sejlene RgoSling Active yder en komfortabel, stabil og sikker løftesituation.



Molift QuickRaiser 205

Molift QuickRaiser 205				HMI-nr.	Varenr.	Molift RgoSling Active sejl				HMI-nr.	Varenr.
Molift QuickRaiser 205 Active	50/75mm	105097	M29000			Molift RgoSling Active sejl str. XS		105167	1720910		
Molift QuickRaiser 205 Active	75/100mm	105098	M29100			Molift RgoSling Active sejl str. S		105168	1720920		
						Molift RgoSling Active sejl str. M		105169	1720930		
						Molift RgoSling Active sejl str. L		105170	1720940		
						Molift RgoSling Active sejl str. XL		105171	1720950		
Vægt				Hastighed		Hjul		Hjulbase, højde		Vaskeinstruktion	
Max. brugervægt	205 kg	Løftehastighed, 3,5 cm/s	75 kg	Ø 75/50 mm	76 mm	Rengør produktet med et opløsningsmiddel frit for rengøringsmiddel (pH-niveau 5-9) eller med et 70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres ved maks. 85°C		  			
Totalvægt	44 kg	Løftehastighed 3,0 cm/s	205 kg	Ø 100/75 mm	101 mm						
Stel	17 kg	Løfteradius		Hjul		Frihøjde					
Løftearm	4,5 kg		60 cm	Ø 75/50 mm	27 mm						
Benstøtte	3,5 kg	Venderadius		Ø 100/75 mm	52 mm						
Tårn (Tungeste del)	19 kg		115 cm	Hjul		Fodplade, højde					
Batteri SLA 24V	2,9 Ah	Hjulbase, bredde		Ø 75/50 mm	65 mm						
Ladetid	6 timer			Ø 100/75 mm	90 mm						
Estimeret antal løft (75 kg) med fuldt opladet batteri	>100	Udvendig	62 cm								
		Inndvendig	20 cm								

Egenskaber




Ergonomisk design

Den skråtstillede løftesøjle løfter brugeren op og fremad for at efterligne det naturlige bevægelsesmønster.



Automatisk advarsel

Automatisk advarsel for (årligt) eftersyn og service.

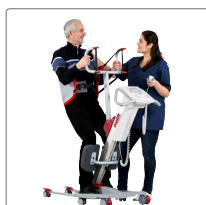

Komfort, sikkerhed og stabilitet

Den aktive løftearm (med firpunkts håndtag) og sejlet RgoSling Active yder ekstra støtte, når bruger rejser fra siddende til stående.



Nem at manøvrere

Nem at håndtere og manøvrere i mange situationer: toilet, sit-to-stand og stand-up træning.



Det nye betjeningspanel og håndkontrollen giver intuitiv og sikker betjening. Derudover indeholder den en Quick guide til sikker brug af sejl.



Aktiv løftearm og sejlet RgoSling Active. Find mere info om de nye sejl på vores hjemmeside.

Tilbehør



StandUp løftearm

Denne løftearm bruges sammen med RgoSling StandUp sejl.

StandUp Lifting Arm

Varenr.
2910061



Indlæg til fodplade

Indlæg med antiskrid, der reducerer friktion.

Indlæg til fodplade, sæt

Varenr.
2920151



Version 1 - 2017 · Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

“Alle mennesker bør have muligheden for at leve et frit og uafhængigt liv,
at kunne forfølge deres drømme, uanset fysiske forudsætninger.”

For seneste nyheder og løbende produktopdateringer - besøg www.etac.dk

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup


Skaber muligheder