

# Etac xact

Økt delaktighet for en aktiv livsstil

Nyheten Etac xact er en helt ny fastrammestol for aktive brukere, utviklet for å gjøre det enkelt å være på farten. Designet og den lave vekten gjør den smidig å håndtere og løfte for både bruker og ledsager.

Etac xact har gode kjøreegenskaper og mange justeringsmuligheter.

Stolen har 3A ryggstøtte som gjør det mulig å stille inn ryggvinkel, rygg høyde og lumbalvinkel. Benstøttene er swing-away og avtakbare, og har oppfellbare fotplater.

Kjørehåndtakene kan fås som enten høyderegulerbare eller faste, og har et sporty design.

Etac xact kommer tett på i ulike hverdagslige situasjoner, som f.eks ved butikkhyllene, kjøkkenbenken, bardisken, minibanken lignende.




## Egenskaper



### Lav vekt

Med en transportvekt på ca. 7,2 kg er Etac xact enkel å frakte med seg til små og store utflukter.

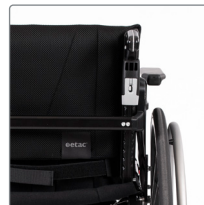

### 3A rygg med markedets beste velcro

3A-ryggen har store innstillingsmuligheter og gjør det enkelt å skape en sittestilling som passer hver unike bruker.



### Avtakbare fotstøtter

Fotstøttene er Swing-away og kan enkelt tas av. Fotplatene er oppfellbare. Dette skaper en sikrere forflytning.



### Høyderegulerbare eller faste kjørehåndtak

Kjørehåndtakene kan fås som enten faste eller høyderegulerbare, og har et sporty design.

## Spesifikasjoner

Setebredde	35-50 cm (2,5 cm intervall)
Setedybde	35-46 cm
Setehøyde front	40,5-50,5
Setehøyde bak	37,5-47,5
Ryggvinkel	4°
Rygghøyde	32-45 cm
Transportvekt*	7,165 kg
Totalvekt	12,52 kg

\*inkl. faste kjørehåndtak og tippesikringer. Uten drivhjul, armstøtter og benstøtter.

