

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities



**etac**<sup>®</sup>

# Etac My-Loo

Toalettsitsförhöjare med fast montering

# Nästa nivå – En ny generation toalett-hjälpmedel som skapar möjligheter



My-Loo toalettsitsförhöjare med fast montering tillhör en helt ny generation smarta produkter från Etac. Genom att ställa extremt höga krav på allt från trygghet och bekvämlighet till anpassningsbarhet och enkel montering, kan vi presentera ett sortiment som erbjuder innovativa och unika lösningar.

Med den nya produktserien tar vi helt enkelt toaletthjälpmedel till en ny nivå. Att design driver utveckling har alltid varit vår ledstjärna och vi är övertygade om att Etac My-Loo kommer hjälpa brukare och förskrivare att skapa nya möjligheter.



# Patenterad armstödslösning

Etac My-Loo's innovativa armstöd har en helt unik höjddregleringsfunktion. Dessutom kan armstöden smidigt fällas upp och ner helt utan klämrisk för brukaren. Denna patenterade armstödslösning ger optimalt individanpassat stöd runt toaletten.



Höjden på armstöden ställer man in med ett enkelt handgrepp. Välj läge genom att placera det orange reglaget i en av de tre positionerna. Stegen är tydligt markerade med 1, 2, 3 på armstödet.

Armstöden monteras ovanifrån vilket är perfekt i trånga utrymmen. Armstöden är markerad med L och R sett från brukarens vänster/höger.

Vid demontering fälls armstödet upp och dras sedan rakt uppåt för att lossas från sitt fäste.

Armstöden kan låsas i ett önskat läge med hjälp av en skruv (inkluderad)

Vid användning av endast ett armstöd täcks det tomma fästets öppning med ett lock (inkluderat)

# Etac My-Loo

Med en unik, patenterad armstödslösning, välformad sits och snabb, enkel montering, erbjuder nya My-Loo tryggt stöd, hög komfort och enkel hantering. Toaletsitsförhöjaren passar de flesta toaletter och sitter stadigt på plats.

## Utvecklad för självständighet och värdighet

My-Loo ger brukare med nedsatt rörlighet eller balansproblem, möjlighet att tryggt och självständigt klara toalettbesöken. Med förhöjd sits och stabila armstöd blir det enklare att sätta sig ner och resa sig upp från toaletten. En större sitsöppning och generösa intimurtag underlättar åtkomlighet vid personlig hygien.

## Finns i fem olika varianter

Etac My-Loo med fast montering finns i olika utföranden, med eller utan armstöd och i sitthöjder på 2, 6 eller 10 cm. Vid behov kan en modell utan armstöd senare kompletteras med armstöd.



### Etac My-Loo toaletsitsförhöjare med fast montering

	Art.nr
My-Loo med armstöd, 20 mm	80301510
My-Loo med armstöd, 60 mm	80301511
My-Loo med armstöd, 100 mm	80301512
My-Loo, 60 mm	80301513
My-Loo, 100 mm	80301514

### Vikt

My-Loo med armstöd, 20 mm: 3,2 kg      My-Loo, 60 mm: 2,2 kg  
 My-Loo med armstöd, 60 mm: 3,4 kg      My-Loo, 100 mm: 2,4 kg  
 My-Loo med armstöd, 100 mm: 3,7 kg

### Max brukarvikt

150 kg  
 Tillsammans med tillbehör Stödben, 80301603: 200 kg

### Material

Armstöd: Polypropen  
 Sits/Lock/Porslinfäste: Polypropen  
 Fästansordning: Rostfritt stål & Polypropen, TPE

### Design

Myra Industriell Design AB

### Tvättråd



Rengör/desinficera produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel och med ett pH-värde mellan 5 och 9 eller med 70 % desinfektionsprensprit. Produkten tål rengöring i kabinetttdiskdesinfektor i 85 °C i 3 minuter. Max brukarvikt: 150 kg.

## Funktioner



### Anpassningsbara armstöd

Med en unik, patenterad lösning kan armstöden snabbt och enkelt anpassas efter behov. Välj mellan 3 olika höjdlägen för bästa stöd. De stabila armstöden fälls enkelt upp och ner utan klämrisk för brukaren. My-Loo kan även användas med bara ett armstöd.



### Enkel, bekväm montering

Med en ny innovativ lösning installeras Etac My-Loo enkelt och snabbt. Praktiska snabbmuttrar gör det möjligt att fästa toaletsitsförhöjaren ovanifrån. Sits och armstöd klickas sedan smidigt i sina fästen.



### Rymlig och praktisk

Generösa urtag och en större sitsöppning ger god åtkomlighet. Toaletsitsförhöjarens utformning med fritt utrymme runt sitsen ger gott om plats oavsett kroppsform.



### Stabil

My-Loo sitter stadigt på plats och har en max brukarvikt 150kg. För extra stöd och ökad vikt kapacitet kan My-Loo kompletteras med tillbehöret Stödben (max brukarvikt 200kg).



### Trygghet och komfort

Med stabila, greppvänliga armstöd och välformad sits gör My-Loo toalettbesöket tryggt och bekvämt för användaren. För extra komfort finns också en mjuksits att beställa.



### Enkel att rengöra

De rena, släta ytorna torkas lätt av med en mjuk trasa. Krävs separat rengöring lyfts sits och armstöd enkelt ur sina fästen och sätts lika enkelt tillbaka.



My-Loo med armstöd  
2 cm



My-Loo med armstöd  
6 cm



My-Loo med armstöd  
10 cm




My-Loo  
6 cm



My-Loo  
10 cm

## Mått

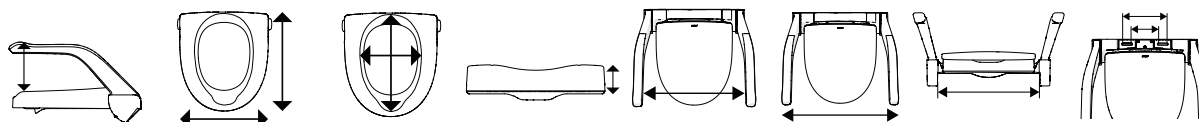

Modell	Höjd armstöd	Bredd/Längd	Inner mått	Höjd	Bredd mellan armstöd	Total bredd	Montering bredd (max toalett bredd)	Mått mellan hål
80301510	215/245/285 mm	360/400 mm	215/285 mm	20 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
80301511	175/205/245 mm	360/400 mm	230/360 mm	60 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
80301512	135/165/205 mm	360/400 mm	230/360 mm	100 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
80301513	-	360/400 mm	230/360 mm	60 mm	-	-	400 mm	c/c 123-203 mm
80301514	-	360/400 mm	230/360 mm	100 mm	-	-	400 mm	c/c 123-203 mm

## My-Loo 2 cm – funktionellt toalettarmstöd

My-Loo 2cm är den perfekta armstödslösningen kring toaletten om man vill undvika ingrepp i väggar eller golv. Produkten består av armstöden och en toalettring som monteras direkt på toalettstolen. Precis som för varianterna med förhöjd sits, kan armstöden ställas in i tre olika höjder för att passa olika användares behov. Med sin moderna, diskreta design passar My-Loo fint in i olika badrumsmiljöer.



*My-Loo levereras i en smart förpackning med rejält handtag för enkel hantering.*

## Tillbehör



### Mjuksits

Art. nr 80301604  
Ergonomiskt formad med skön mjukhet.  
Ger god avlastning och bekvämt stöd.  
Material: Polyurethane




### Toppmonterad skruvsats

Art. nr 80301626  
För toaletter utan genomgående fästhål.  
Får endast användas tillsammans med de inkluderade stödbenen.  
Passar infästningshål Ø20mm.  
Material: Aluminium, Polyamid Polypropen



### Stödben

Art. nr 80301603  
För extra stabilitet. Ökar max brukarvikten till 200 kg. Uppfällbara.  
Material: Aluminium, Polyamid, polypropen, TPE, rostfritt stål

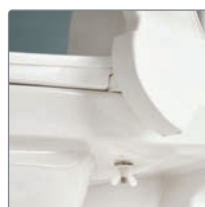

### Fästsats

80301053  
För montering på toaletter där utrymmet är begränsat för standardfästet. En alternativ fästsats inkl kortare skruvar, vingmuttrar, metallmuttrar och medföljande brickor.  
Material: Polymamid, rostfritt stål



### Förvaringskorg

Art. nr 80301602  
Fästs i armstödet.  
Material: Polyamid, polyester/mesh, rostfritt stål



### Toalettpappershållare

Art. nr 80301601  
Fästs i armstödet.  
Material: Polymamid, rostfritt stål



### Armstöd

Art. nr 80301606  
Såls parvis, höger, vänster variant.  
Material: Polypropen



### Tvärså

Art. nr 80303034  
Ett tryggt stöd att hålla sig i.  
Kan användas som kryststöd.  
Fästs runt armstöden. 60,5 cm  
Material: aluminium, PE





Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök [www.etac.se](http://www.etac.se)

**Etac Sverige AB**

 0371-58 73 00

 [info@etac.se](mailto:info@etac.se)

 [www.etac.se](http://www.etac.se)

 **etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities