



R82[®]

R82 Wombat Living

Funktionell och höjjusterbar arbetsstol

Wombat Living

Wombat Living är en funktionell arbetsstol med många anpassningsmöjligheter. Den passar perfekt för aktiviteter såsom läsning och lärande i skolan, ha kul med vänner och hjälpa till med sysslor hemma. Arbetsstolen är justerbar från golvhöjd till bordshöjd, vilket gör den till en mångsidig aktivitetsstol. Inbyggd växtmån i tre storlekar gör att stolen kan användas av samma användare över tid.

När design och funktion blir ett

Genom kontinuerlig utveckling och värdefull feedback från kunder och terapeuter erbjuder Wombat Living alla funktioner och fördelar som krävs av en modern och funktionell arbetsstol. Wombat Living är en tuff aktivitetsstol för både barn och tonåringar. Det fräscha utseendet och de moderna färgerna gör den lämplig i alla inomhusmiljöer. Stolens minimalistiska design, med ett diskret underrede och unika textulfärger, gör att den passar in överallt.

Det höjdjusterbara underredet kan justeras ända ner till 29 cm över golvet, vilket i kombination med den framåttilltande sitsfunktionen underlättar stående förflyttningar och gör att alla onödiga och upprepade lyft kan undvikas. Den justerbara höjden bidrar även till ökad aktivitet och delaktighet i vardagen – från att leka med bollar nära golvet till att sitta vid middagsbordet tillsammans med familjen. Wombat Living finns i tre storlekar och kan konfigureras efter olika behov av kroppsstöd med hjälp av olika dynor och ett brett utbud av tillbehör.



Den genomtänkta designen integrerar den vinkelreglerbara körbygeln med stolen. Körbygeln används för att justera stolens höjd och vinkel, och kan enkelt vinklas upp när den inte används. Körhandtag och körbygel för montering på stolens baksida finns som tillbehör.

Wombat Living är utrustad med fyra lätttrullade hjul som gör stolen enkel att manövrera. Alla hjul är utrustade med broms för säker förflyttning i och ur stolen. I standardutförande levereras Wombat Living med 100 mm hjul och handmanövrerad centralbroms. Vid behov kan fotmanövrerat centralbromssystem eftermonteras.

Egenskaper

Rätt stöd

Wombat Living är en arbetsstol som lämpar sig utmärkt för vardagsaktiviteter såsom läsning och lärande i skolan, ha kul med vänner och hjälpa till med sysslor hemma.

Bekväm sittställning

Dynorna kan fås i olika storlekar och former så att de uppfyller olika behov av kroppsstöd. Välj mellan standarddynor som ger god komfort och ett bekvämt sittande eller formade dynor för utmärkt komfort för både sits och rygg.

Tiltfunktion framåt

Wombat Living kan tiltas upp till -10° framåt. En sits i framåtlutad läge gör att barnet uppmuntras att flytta sin vikt framåt.

Väx med stolen

Wombat Living är en aktivitetsstol med många anpassningsmöjligheter. Stolen kan förses med standardfunktioner som passar specifika behov, beroende på användarens funktionsnivå.

Självständighet

Wombat Living har en låg instegshöjd, tiltfunktion framåt och bromsar på alla hjul, vilket gör det enkelt för användaren att förflytta sig på ett stabilt och säkert sätt.

Anpassa efter behov

För att möta olika behov av kroppsstöd finns dynorna i flera storlekar och former. Standarddynorna ger god sittkomfort, medan de formade dynorna kombinerar hög komfort med utmärkt stöd för både sits och rygg.

Höjdjustering

Höjden på Wombat Living kan justeras på olika sätt. Vårdgivaren kan justera höjden med hjälp av pedalen på underredet eller med reglaget på körbygeln, som både drivs av gaskolv. Alternativt med el via handkontroll av både vårdgivare och användare.

Låg instegshöjd

Wombat Living kan justeras från sitt höjd ända ner till 29 cm och upp till 70 cm över golvet, beroende på storlek och konfiguration.



Klicka här för
instruktionvideos

Klicka här för
komplett måttguide



Anpassa efter behov

Wombat Living är en aktivitetsstol med många anpassningsmöjligheter. För vissa användare lämpar sig en stol med få tillbehör och enkla standardfunktioner. Andra kan behöva en stol med många fler tillbehör och tekniska funktioner, som till exempel en elfunktion för höjdjustering.

Dynor och överdrag

Överdraget är andningsaktivt och vattenavvisande för extra komfort. Både sits- och ryggöverdragen har en ytbehandling som är smuts-, spill- och stänkavvisande. Eventuell utspilld vätska kan torkas bort och torr smuts kan enkelt borstas bort. Dynor inklusive överdrag beställs som tillbehör.



Det handlar inte bara om att sitta

Om du ställer samma krav på god sittkomfort som vi gör, är Wombat Living en stol för dig! Dynorna kan fås i olika storlekar och former så att de uppfyller olika behov av kroppsstöd. Välj mellan standarddynor som ger god komfort och ett bekvämt sittande eller formade dynor för utmärkt komfort för både sits och rygg. Komplettera din stol med ett svankstöd, som ger extra stöd för ryggen. När man sitter ska man sitta skönt och med rätt stöd så att man kan delta i aktiviteter. Därför är Wombat Living det självklara valet.

En bra sittställning måste underlätta:

- Användning av överkroppen och händerna för aktiviteter som att skriva, äta och dricka
- Användning av kommunikationshjälpmedel och främjande av barnets talförmåga
- Förmågan att leka och umgås med sina kamrater
- Självständighet för användaren, vilket gör att behovet av vårdgivare minskar



Höjjustering

Sitsens höjd på Wombat Living kan justeras ända ner till 29 cm och upp till 70 cm över golvet, beroende på stolens storlek och konfiguration. Det höjjusterbara underredet underlättar stående förflyttningar till och från stolen och bidrar till att onödiga och upprepade lyft kan undvikas.

Höjden på Wombat Living kan justeras på olika sätt. Vårdgivaren kan justera höjden med hjälp av pedalen på underredet eller med reglaget på körbygeln, som både drivs av gaskolv. Alternativt med el via handkontroll av både vårdgivare och användare.

Framåttilt för ökad aktivitet

Wombat Living har upp till -10° framåttilt, vilket innebär att sitsen kan vinklas framåt för att uppmuntra användaren att förskjuta tyngdpunkten från sätesdelen till benen. Detta initierar och underlättar övergången från sittande till stående. Funktionen sänker dessutom sitthöjden framtill, vilket gör det enklare för de minsta användarna att sätta sig i stolen.

Genom att kunna variera sittpositionen i stolen – med tilt och ryggvinkeljustering – ökas den posturala aktiviteten. Detta kan minska smärta och trötthet, vilket i sin tur kan bidra till ökad funktionsnivå och större delaktighet i vardagliga och sociala aktiviteter.

Standardutförande

Wombat Living

	Art.nr
- gaskolv, centralbroms, standard rygg, stl 1	31950103121-00
- gaskolv, centralbroms, standard rygg, stl 2	31950203121-00
- gaskolv, centralbroms, standard rygg, stl 3	31950303121-00
- gaskolv, centralbroms, hög rygg, stl 1	31950503121-00
- gaskolv, centralbroms, hög rygg, stl 2	31950603121-00
- gaskolv, centralbroms, hög rygg, stl 3	31950703121-00
- el, centralbroms, standard rygg, stl 1	31950103421-00
- el, centralbroms, standard rygg, stl 2	31950203421-00
- el, centralbroms, standard rygg, stl 3	31950303421-00
- el, centralbroms, hög rygg, stl 1	31950503421-00
- el, centralbroms, hög rygg, stl 2	31950603421-00
- el, centralbroms, hög rygg, stl 3	31950703421-00

I Sverige marknadsförs Wombat Living med svart underrede och grå dynor. Observera att dynor inte ingår som standard utan beställs som tillbehör.

Underrede

Pulverlackerat stål, höjd- och vinkeljusterbart, svart färg

Rygg

Standard eller hög. Höjdställbar och vinkeljusterbar. Exkl ryggdyna.

Sits

ABS plast, vinkeljusterbar. Exkl sittdyna.

Körbygel

Sitsmonterad inkl reglage sitstilt.

Hjul

100 mm hjul, låsbara.

Broms












Handmanövrerad centralbroms

Fotplatta

Avtagbar, höjd- och vinkeljusterbar, uppfällbar.

Mått och vikt

Det är viktigt att mäta användaren för att få en korrekt konfigurering av stolen. För korrekta mått måste användaren ligga på en fast och plan yta med höfter, knän och vristen i 90 graders vinkel.

		1 Gaskolv & EI	2 Gaskolv & EI	3 Gaskolv & EI
	Sitsbredd	300 mm	370 mm	420 mm
	Sitsdjup	180-310 mm	250-380 mm	320-500 mm
	Ryggstödshöjd	280-340 mm	310-380 mm	390-475 mm
	Ryggstödshöjd (hög rygg)	360-430 mm	395-460 mm	460-550 mm
	Sitshöjd över golvet*	230-610 mm	230-610 mm	330-630 mm
	Max. brukarvikt	45 kg	45 kg	70 kg
	Ryggstödsvinkel	0°-28°	0°-28°	0°-33°
	Plan sitsvinkel	-10° - 30°	-10° - 30°	-10° - 22°
	Längd	650 mm	650 mm	650 mm
	Totalbredd	550 mm	550 mm	550 mm
	Vikt	18 kg	18,5 kg	23,5 kg

*Mått med 75 mm länkhjul, exkl. dynor. I standardutförande med 100 mm länkhjul ökar måttet för sitshöjd och totalhöjd med 30 mm.

För fler mått, se etac.se

Tillbehör



Dynor standard
Sittdyna och ryggdyna



Dynor formade
Sittdyna och ryggdyna




Svankstöd




Bålstöd, fasta



Bålstöd, sidosvängbara

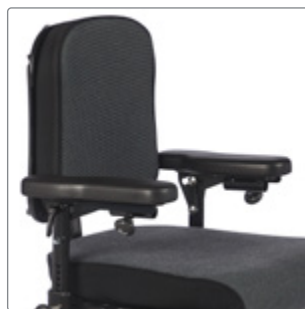

Armstöd

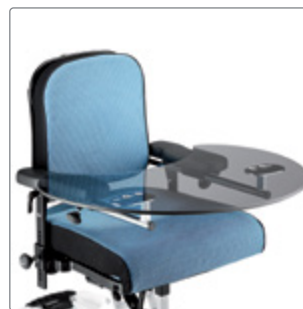

Bord, tonad plast



Ryggförlängare




Inkontinensöverdrag sittdyna



Höftstöd



Bäckenstöd utan sidor

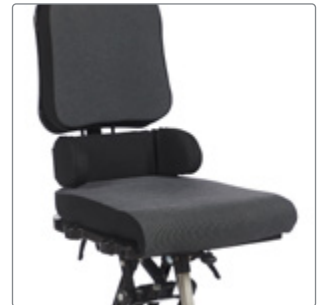

Bäckenstöd med sidor



Bendelare, förlängd



Fotlåda



Polstring till fotlåda



Hållare handkontroll

För fler tillbehör - besök vår hemsida



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities