

Molift-Hebegurte

Regelmäßige Inspektion (DE)

Gemäß ISO:10535

molift[®]
by Etac

PI40002 Rev. A 2022-11-24

Anwendung

Die regelmäßige Inspektion muss mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden.

Wenn der Hebegurt häufiger als üblich verwendet oder gewaschen wird, kann eine häufigere Inspektion erforderlich sein. Die Inspektion muss von geschultem Personal durchgeführt werden. Verwenden Sie diese Prüfliste zum Erkennen von Schäden, Abnutzung und möglichen Mängeln. Vergewissern Sie sich, dass der Hebegurt bis zur nächsten regelmäßigen Inspektion sicher verwendet werden kann. Das Inspektionsprotokoll muss sorgfältig aufbewahrt werden, um bei einem Unfall überprüft werden zu können.



Zerstören und entsorgen Sie beschädigte und alte Hebegurte, welche die Inspektion nicht bestehen.

Produktinformation (verwenden Sie die Aufstellung auf der nächsten Seite im Fall mehrerer Hebegurte):

Hebegurt-Modell:

(Beispiel: RgoSling
ighBack

Artikelnummer:

.....

Größe:

XXS XS S M
 L XL XXL


Seriennummer:

.....

Prüfliste

Bestanden Nicht
bestanden Un-
zutreffend

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. Produktschild
Es können abgelesen werden: Maximallast (Nenntragfähigkeit), Artikelnummer, Seriennummer, Größe, Waschsymbole. | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. Gewebe
Keine Risse, Ausfransungen, Brandflecken, Löcher, Farbabweichungen, schlechter Geruch oder andere Verschleißzeichen. | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. Polsterung
Keine Schrumpfung, Beulen, Knicke oder Falten. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. Nähte
Keine losen Fäden, keine beschädigte Nähte oder Stiche. | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. Hebegurtband und Einfassband
Keine Risse, Ausfransungen, Dehnungsstreifen, Brandflecken oder andere Verschleißzeichen. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. Führunggriffe und Taschen
Keine Risse, Ausfransungen oder losen Nähte. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. Metallteile
Leiterschlosser, Schnallen oder Ringe haben keine Schäden oder Risse |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. Benutzerhandbuch
Das Benutzerhandbuch ist griffbereit (Benutzerhandbücher können von www.etac.com heruntergeladen werden) | |

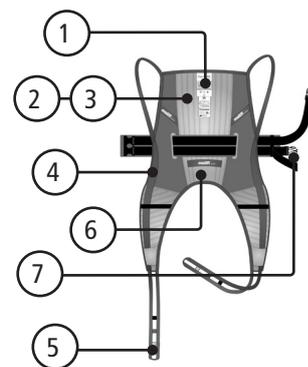

Etac A/S
Parallevej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com


Genehmigt durch:

Kreuzen Sie alle acht Punkte der Prüfliste an. Wenn ein oder mehrere Punkte defekt sind, ist der Hebegurt nicht zugelassen.

Datum:

Name des Technikers:
(Großbuchstaben)

Unterschrift

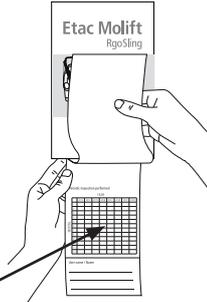

Kennzeichnen Sie das Etikett des Hebegurts mit einem Markierstift oder Locher mit dem Datum der durchgeführten Inspektion. Die nächste Inspektion ist innerhalb von sechs Monaten nach diesem Datum fällig.

Produktinformation Aufstellung

Hebegurt-Modell: (Beispiel: RgoSling Toilet lowback)	Artikelnummer:	Größe:	Seriennummer:	Bestanden	Nicht bestanden
.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Zerstören und entsorgen Sie beschädigte und alte Hebegurte, welche die Inspektion nicht bestehen.