

etac®

Creating Possibilities



molift®

Molift Air Tilt

Plafondlift met elektrisch kanteljuk

Molift Air Tilt

Molift Air Tilt biedt een betere werkomgeving voor verzorgers dankzij het elektrische kanteljuk. Het vermindert de belasting van de verzorger en verhoogt het comfort voor de gebruiker, omdat er geen fysieke inspanning nodig is en handmatige handelingen tot een minimum worden beperkt.

Herpositioneren zonder fysieke inspanning

Molift Air Tilt maakt het mogelijk dat één verzorger veeleisende dagelijkse transfers en het herpositioneren van gebruikers veilig en comfortabel kan uitvoeren. Zonder fysieke belasting kan de verzorger de hoogte en positie van de gebruiker gelijktijdig en nauwkeurig aanpassen. Hierdoor kan de gebruiker eenvoudig in een optimale zithouding worden geplaatst, bijvoorbeeld in een rolstoel.

Dankzij het open ontwerp ervaren zowel gebruiker als verzorger extra comfort. De gebruiker ervaart meer openheid door het brede zichtveld, terwijl de verzorger meer mogelijkheden heeft voor oogcontact.

Een flexibele oplossing

Molift Air 350 is een bekende plafondlift binnen de Molift-familie en is ook verkrijgbaar in een aangepaste uitvoering met kantelfunctie. De kantelfunctie wordt bediend met de handbediening, waardoor de Molift Air Tilt zeer intuïtief en gebruiksvriendelijk is in gebruik.

Molift Air Tilt en het Molift Rail System zijn geschikt voor de meeste zorgomgevingen, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuissituatie.



De oplossing zorgt ervoor dat elke stap bijdraagt aan maximale functionaliteit en een comfortabele, ergonomische tilsituatie voor verzorgers en gebruikers. Molift Air Tilt biedt een flexibele en kosteneffectieve investering voor de zorgsector.


Variant	Inclusief	Art. nr.		
Molift Air Tilt	Plafondlift, tiljuk	M26355		
Feiten				
Maximale gebruikersgewicht (SWL)		273 kg		
Materiaal		Staal, plastic		
Verwachte levensduur		30 000 cycli bij SWL of 10 jaar		
Molift Service Tool		Inbegrepen		
Specificaties Molift Air Tilt				
Gewicht		8,6 kg		
Lengte		360 mm		
Breedte		190 mm		
Hoogte		195 mm		
Accu		26.4 V SLA 2.6 Ah		
Oplaadtijd		6 hrs		
Motor		24V DC		
Tilbereik		2600 mm		
Snelheid tilbanden		50 mm/sec		
Nooddaling		Mechanisch en elektrisch		
			Noodstop	Bereikbaar vanaf de vloer met koord. Reset mogelijk vanaf de vloer
			Beschermingsklasse	IP24
			Specificaties Molift Tilt sling bar	
			Gewicht	7,3 kg
			Lengte	580 mm
			Breedte	580 mm
			Hoogte	500-790 mm
			Kantelbereik	75 graden
			Snelheid actuator	12,6 mm/second
			Beschermingsklasse	IPX4
			 	
			Reinig/desinfecteer het product met een standaard, niet-schurend reinigingsmiddel met een pH-waarde tussen 5 en 9, of met een desinfectieoplossing van 70%.	
				

Kenmerken



Eenvoudige positionering in de rolstoel

Door de mogelijkheid tot gelijktijdige verstelling van de hoeken kan de gebruiker eenvoudig in een optimale zitpositie in de rolstoel worden gebracht.

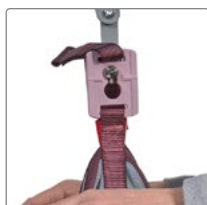

Flexibele verbinding van de sling

De clipbevestiging van de tilband zorgt voor flexibiliteit en een gemakkelijke transfer. De banden van de tilband worden bevestigd aan een nop op het tiljuk. De beenband heeft een flexibele verbinding en kan worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker.



Quick-release koppeling

De tiljukken van Molift hebben een quick-release koppeling. Dit maakt het eenvoudig en soepel om zonder gereedschap tussen verschillende tiljukken te wisselen.



Meer comfort voor de gebruiker

Het tiljuk is zeer open ontworpen en biedt de gebruiker veel ruimte rond het hoofd. Dit draagt bij aan goed zicht, een gevoel van openheid en de mogelijkheid tot meer oogcontact tussen gebruiker en verzorger.


Tilbanden met clipbevestiging



High Easy Sling

Clipbevestiging, Polyester, SWL 220 kg

Klein	HYASMCP
Medium	HYAMEDCP
Groot	HYALRGCP
Extra groot	HYAXLRGCP

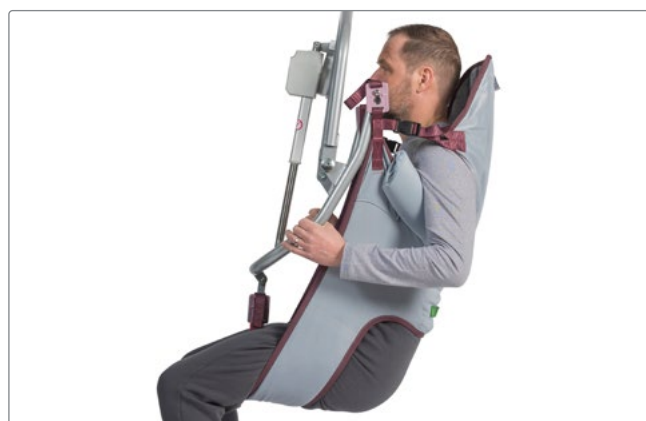

High Easy Toileting Sling

Clipbevestiging, Polyester, SWL 220 kg

Klein	DA-ST3ASM
Medium	DA-ST3AMED
Groot	DA-ST3ALRG
Extra groot	DA-ST3AXLRG



Etac is een toonaangevende ontwikkelaar van ergonomische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten voor een breed scala aan dagelijkse behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfases.

Voor het beoogde gebruik van de producten en de meest recente informatie, bezoek www.etac.nl

Etac

+31 (0)513 68 16 86
contact.nl@etac.com
www.etac.nl

etac[®]
Creating Possibilities