



Förflyttningssystem

Immedia 4Way Glide LPL och
Immedia 4Way Glide LPL Maxi

 **etac**[®]

Immedia 4WayGlide System

Förflyttningssystem för brukare med begränsad rörlighet

Immedia 4WayGlide är ett förflyttningssystem för vändning och förflyttning av brukare med mer omfattande funktionshinder, hög vikt, smärtor eller trycksår. Förflyttningssystemet består av två delar, en glidmadrass och ett nylonlakan som fästs på madrassen. De glatta ytorna gör vändning och förflyttning i alla riktningar enklare. Vändningen kan utföras manuellt eller med personlyft. En av de främsta fördelarna med 4WayGlide förflyttningssystem är att det kan ligga kvar i sängen.

Låssystem (LPL)

En stor utmaning med förflyttningssystem som är placerade i sängen är att förhindra att brukaren oavsiktligt glider i sängen. Det unika låssystemet består av luckor med lågfriktionsmaterial som täcker över områden med högfriktion. Det innebär att när man positionerar brukaren har man luckan stängd och nyttjar lågfriktion och när brukaren är i position öppnar man luckan och nyttjar högfriktion som förhindrar brukaren att glida ned i sängen.



Den översta madrassen på 4WayGlide är utrustad med handtag som kan fästas på en personlyft för hjälp med att vända tunga brukare.



Material med låg friktion tillåter kroppen att glida när huvudänden av sängen höjs och risk för skjuv undviks.

Rekommenderad användning



1. Med det unika låssystemet kan man enkelt dra bort delen med lågfriktions-material och brukaren kan säkert och bekvämt sitta i sängen utan risk för att glida ner.



3. Immedia 4WayGlide förflyttningssystem kan nu användas för att förflytta brukaren t ex högre upp i säng.




2. När brukaren ska flyttas eller ompositioneras drar man enkelt över delen med lågfriktionsmaterial.



4. Även förflyttningar sidledes utförs nu enkelt med en eller två vårdare.

Möjligheter med 4WayGlide System


Immedia 4WayGlide system består av två delar, ett nylonlakan som fästs på madrassen samt en glidmadrass som läggs ovanpå nylonlakanet. Tillsammans utgör de den kompletta lösningen.

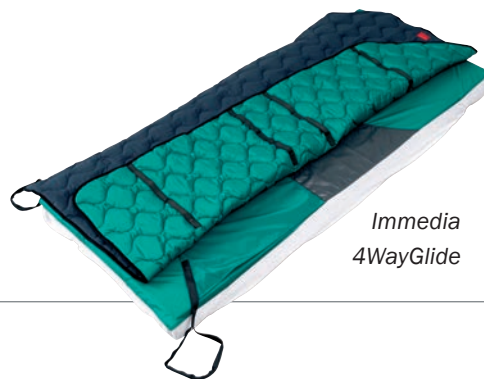

Immedia
4WayGlide

Standardutförande på 4WayGlide System

Vårt standard nylonlakan har en unik låsfunktion med en glidlucka och antihalkmaterial längs sidorna.

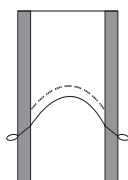

IM85/200LPLNS


Standardutförandet av glidmadrassen har en utsida av bomull/polyester. Handtag längs sidorna som ger bra greppmöjlighet och som även kan kopplas till personlyft.



IM140/200LPL


Alternativa nylonlakan

För att få större flexibilitet används nylonlakan med tre glidluckor och antihalkmaterial längs sidorna.

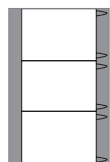

IM85/2003LPL

Nylonlakan med en glidlucka och utan antihalkkant längs sidorna används lämpligast vid förflyttning mellan två liggplatser.

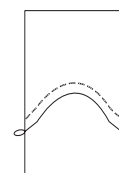

IM85/200LPL

Alternativa glidmadrasser

Glidmadrassen har en mjuk fuktavvisande ovansida av polyuretan och är enkel att torka av. Handtag på insidan gör det möjligt att koppla glidmadrassen till en personlyft.

Immedia 4WayGlide Maxi är en glidmadrass för större och tyngre brukare.




IM140/200LPLG

TwinSheet Glide är en glidmadrass med inkontinensskydd. Handtagen på insidan ger ett bra grepp och kan kopplas till personlyft. Glidmadrassen är delbar för att förenkla vid personlig hygien.



IM4315

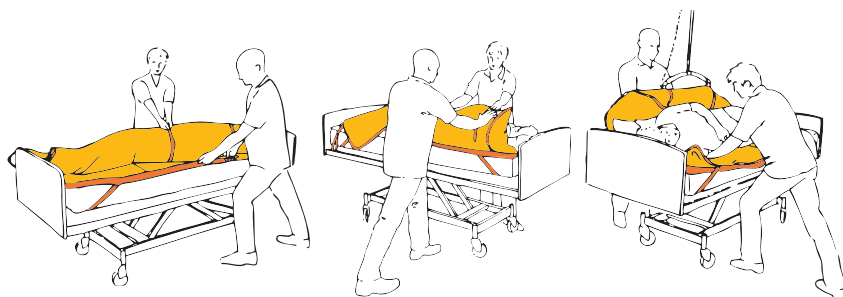

Användningsområden

- Förflyttningssystem för brukare med begränsad rörlighet
- Förflyttningssystem för brukare med hög vikt, smärtor eller trycksår
- Vändning
- Positionering
- Stöd vid förflyttning mellan två liggplatser
- Kan användas tillsammans med personlyft



Glidmadrass med mjuk fuktavvisande yta.

BESKRIVNING	BREDD X LÄNGD X HÖJD	ART. NR	SPECIFIKATIONER
Immedia 4WayGlide LPL	CM		Glidmadrass, LPL OCH Maxi
~ Glidmadrass, bomull/polyester	140 x 200	IM140/200LPL	OVANSIDA: Polyester/bomull eller polyuretan
~ Glidmadrass, polyuretan	140 x 200	IM140/200LPLG	INSIDA: Polyester, vävförstärkning (endast Maxi)
~ Nylonlakan med antihalkkant och en glidlucka	85 x 200	IM85/200LPLNS	UNDERSIDA: Nylon som är antistatbehandlat
~ Nylonlakan med glidlucka	85 x 200	IM85/200LPL	HANDTAG: Polyester
~ Nylonlakan med antihalkkant och tre glidluckor	85 x 200	IM85/2003LPL	POLSTRING: Polyester
Immedia 4WayGlide LPL Maxi			NYLONLAKAN: Nylon
~ Glidmadrass, bomull/polyester	180 x 210	IM180/200LPL	LÅSSYSTEM: Nylon med PU-beläggning
~ Glidmadrass, polyuretan	180 x 200	IM180/200GLPL	
~ Nylonlakan med antihalkkant och en glidlucka	110 x 200	IM110/200LPLNS	
Tillbehör – Kilkudde Wedge			
~ Med antihalköverdrag	30 x 20 x 53	IM53NS	
~ Med antihalköverdrag	30 x 20 x 80	IM53/80NS	
~ Överdrag PU/bomull, vitt	140 x 220	IM140/200PU	
Set – Immedia 4WayGlide LPL			
~ Standard Set – innehåller IM140/200LPL + IM85/200LPLNS		IM4309	
~ Set med 3-glidluckor – innehåller IM140/200LPL + IM85/2003LPL		IM4300	
TVÅTTANVISNING			
Kan torkas av med desinfektionsmedel.			
Gäller ovansida av polyuretan.			
Använd inte sköljmedel eller klorin.			

“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se