

etac®
Creating Possibilities



etac®

Etac Cross 5XL

Per una migliore seduta ed una spinta più efficace

Etac Cross 5XL

Con una portata di 160 kg.

Migliore seduta e propulsione ottimale


Ogni persona, ed ogni corpo a seconda delle proprie esigenze, merita di beneficiare del giusto supporto e della libertà di muoversi in modo indipendente. Cross 5XL unisce uno schienale totalmente regolabile, un telaio innovativo ed un'ampia gamma di opzioni configurabili per offrire un comfort di seduta eccezionale e delle prestazioni di spinta ottimali per chiunque.

Robusta ed elegante

Risparmia tempo prezioso evitando lunghe analisi e complesse misurazioni. È sufficiente individuare la larghezza della seduta più adatta e regolare la carrozzina direttamente sul posto in base alle esigenze dell'utilizzatore. Tutte le regolazioni possono essere effettuate con facilità, utilizzando pochi strumenti, mentre il cliente rimane seduto.



Caratteristiche

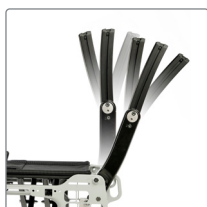

Schienale Etac 3A

La capacità di regolare inclinazione, altezza e conformazione dello schienale offre le migliori condizioni per garantire il supporto e la stabilità del tronco. Disponibile nelle versioni standard e high. Facile da regolare.



36+2 posizioni delle ruote posteriori

Le ruote posteriori possono essere montate in quattro posizioni per ciascun punto di fissaggio. Le molteplici possibilità di regolazione, sia orizzontalmente che verticalmente assicurano una perfetta altezza della seduta ed un equilibrio ottimale.



Telaio pieghevole a doppia crociera

LA Cross 5XL è dotata di un telaio pieghevole estremamente robusto con doppio rinforzo incrociato che offre la stabilità di un telaio rigido. Questa soluzione garantisce una lunga durata nel tempo e delle prestazioni ottimali di propulsione.



Altezza della seduta extra ribassata

L'installazione di una ruota posteriore da 20" nella posizione di montaggio superiore consente di raggiungere un'altezza della seduta di 34 cm.



Cross 5XL è progettata per offrire prestazioni durature nel tempo, combinando eccezionali qualità, stabilità e funzionalità in ogni dettaglio.

Modello Cross 5XL	Codice No.	Larghezza totale	Profondità della seduta dal tubo di supporto dello schienale *	Peso con ruote posteriori
47.5 cm short	13123111	68.5 cm	36-42 cm (+7 cm*)	15.9 kg
47.5 cm long	13123112	68.5 cm	42-48 cm (+7 cm*)	16.1 kg
50 cm short	13123113	71.0 cm	36-42 cm (+7 cm*)	16.0 kg
50 cm long	13123114	71.0 cm	42-48 cm (+7 cm*)	16.2 kg
52.5 cm short	13123115	73.5 cm	36-42 cm (+7 cm*)	16.1 kg
52.5 cm long	13123116	73.5 cm	42-48 cm (+7 cm*)	16.3 kg
55 cm short	13123117	76.0 cm	36-42 cm (+7 cm*)	16.3 kg
55 cm long	13123118	76.0 cm	42-48 cm (+7 cm*)	16.5 kg
57.5 cm short	13123119	78.5 cm	36-42 cm (+7 cm*)	16.4 kg
57.5 cm long	13123120	78.5 cm	42-48 cm (+7 cm*)	16.6 kg
60 cm short	13123121	81.0 cm	36-42 cm (+7 cm*)	16.5 kg
60 cm long	13123122	81.0 cm	42-48 cm (+7 cm*)	16.7 kg

*Con schienale triangolare 3A

I pesi e le dimensioni riportate si riferiscono ad una carrozzina con ruote posteriori da 24" con perni a sgancio rapido, ruote piene, corrimano di spinta in acciaio inox, schienale Cross Brace, pedane (supporti per le gambe) appoggipiedi (pedane appoggipiedi), cinghie fermatallon, freni, attacchi per braccioli e ruote anteriori da 6½" con forcelle medie. Le misure riportate possono variare più o meno del 2%.

Altezza anteriore della seduta

34-56.5 cm

Larghezza di trasporto

32 cm

Lunghezza pedane

26-64 cm

Altezza posteriore della seduta

34-53 cm

Altezza totale

74-128 cm

Inclinazione pedane

108°-114°

Altezza schienale

32-45 cm

Con schienale standard 3A.

Lunghezza totale

102-122 cm

Diametro ruote posteriori

46.5-48.5 cm

Altezza schienale 3A

38-51 cm

Lunghezza da chiusa

76-92 cm

Portata massima

160 kg

Opzioni




Schienale 3A

Con lo schienale 3A- Angulus, Altitudo, Altus- è possibile regolare facilmente altezza e profondità per ottenere un adattamento perfetto alle esigenze dell'utilizzatore. Disponibile nelle versioni con schienale standard e schienale alto.




Prolunga della seduta

Fissata alla seduta tramite chiusura a strappo. Aumenta la profondità della seduta di 7cm

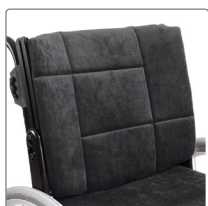

Rivestimento Plush (felpato)

Rivestimento Soft (morbido ed elasticizzato)
Tessuto Dark grey plush (felpato grigio scuro)

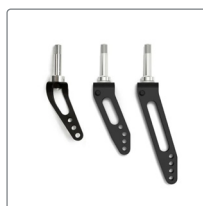

Forcelle anteriori

Forcella anteriore in acciaio con perno.
Larghezza del mozzo 45mm.



Rivestimento comfort

Con imbottitura extra.
Tessuto Dark grey plush (felpato grigio scuro)



Supporti ruote anteriori

Una gamma di supporti per ruote anteriori progettati per adattarsi a differenti modelli e configurazioni. Che si tratti di ridurre l'altezza della seduta, o modificare la posizione delle ruote anteriori, la nostra gamma assicura la soluzione più adatta per ogni tipo di esigenza.



Rivestimento igienico Tidy

Rivestimento igienico.
Materiale: idrorepellente, disinfettabile e lavabile a 90°.
Può essere fornito con ricamo personalizzato.



Ruote anteriori

4" portata massima 100 kg
5" portata massima 135 kg
6" portata massima 160 kg
8" portata massima 160 kg



Rivestimento Airmesh

Per un design moderno e leggero.



Ruote posteriori C6

2Nelle misure 20", 22" e 24", con ruote piene e ad alta pressione




Sedile rigido

Rimovibile. Da completare con un cuscino di seduta idoneo. Installazione ribassata.



Ruote posteriori Maxx

Nelle misure 20", 22" e 24", con ruote piene e ad alta pressione.
Nella misura 26" ad alta pressione

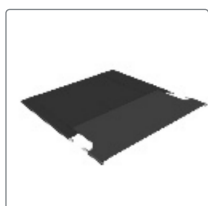

Rivestimento della seduta

In tessuto.



Corrimani di spinta

Scegli tra alluminio, acciaio inox e rivestimento in plastica.
Sono disponibili numerose altre soluzioni da poter installare successivamente.



Monoguida

Installabile sul lato sinistro o destro della sedia. Non compatibile con il freno per accompagnatore.



Maniglione di spinta

Regolabile in altezza e rimovibile, con impugnature dotate di rivestimento antiscivolo. Disponibile anche con freni a tamburo.



Freni a tamburo

100mm di distanza tra l'impugnatura del maniglione e la leva del freno.



Freno con impugnatura inclinata

Questo freno, dotato di leva con impugnatura inclinata, offre una superficie di presa più ampia. Disponibile in nero o rosso.



Freno unilaterale

Disponibile per il lato destro o sinistro della carrozzina.




Campanatura

Standard 2°, opzionale 0°.



Antiribaltamento

Ripiegabile, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione. Compatibile con tutte le altezze di seduta.

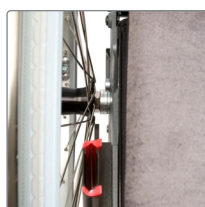

Kit di allargamento

Consente di incrementare la larghezza della seduta e la larghezza complessiva della carrozzina fino ad 1cm.

Accessori



Bracciolo standard

Rimovibile e regolabile in altezza con appoggiabraccio rigido da 25cm o 38cm di lunghezza. Regolazione dell'altezza con chiave a brugola o vite a serraggio manuale.




Cuscino seduta Plush

Cuscino seduta anatomicamente sagomato, lungo 50cm, adattabile tramite taglio alla profondità della seduta. Rivestimento in tessuto felpato grigio scuro e velluto nero.



Bracciolo con pad rimovibile

Con appoggiabraccio da 25cm o 35cm. Regolazione dell'altezza con chiave a brugola o vite a serraggio manuale.

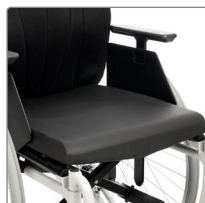


Cuscino seduta con rivestimento igienico Tidy

Dotato di rivestimento igienico. Idrorepellente, facilmente pulibile con un panno umido e resistente al lavaggio fino a 90°.



Bracciolo Hemi

Regolabile in inclinazione, l'altezza regolabile tramite regolazione del bracciolo. Si monta sul bracciolo lungo. Rivestimento imbottito rimovibile in tessuto felpato grigio scuro. Disponibile in due versioni: con supporto anatomico sagomato o con piastra estraibile.

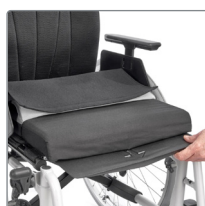

Cuneo seduta

Fornisce un ulteriore supporto ed una migliore conformazione della seduta. Da inserire all'interno della fodera del cuscino seduta.




Bracciolo ampio e morbido

Da applicare al bracciolo in uso. Dimensioni 8x40cm. Compatibile sia con il bracciolo lungo che con quello corto, sia sul lato destro che sinistro.




Supporto laterale arti inferiori

Da montare sul bracciolo in uso. Disponibile nelle versioni corta (50 cm) e lunga (57cm).

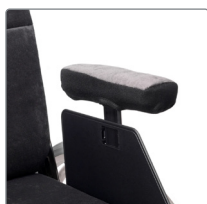

Rivestimento del bracciolo

imbottito con schiuma a freddo o gel, rimovibile. Disponibile nelle versioni corta (25cm) o lunga (38cm). Rivestimento felpato grigio scuro o in tessuto igienizzabile nero.

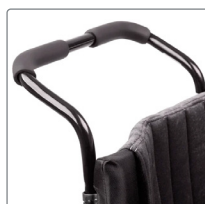

Maniglione ad arco

Regolabile in altezza e rimovibile.



Parafango laterale

Regolabile in altezza, profondità ed inclinazione.



Poggiatesta Plush

Il rivestimento è rimovibile e lavabile. L'attacco del poggiatesta è da ordinare separatamente.




Pad per protezione laterale

Le protezioni laterali sono rimovibili e regolabili in profondità. I supporti laterali sono rimovibili e regolabili in altezza.



Poggiatesta con rivestimento igienico Tidy

Il rivestimento, realizzato in materiale igienico, è rimovibile e lavabile. L'attacco del poggiatesta è da ordinare separatamente.

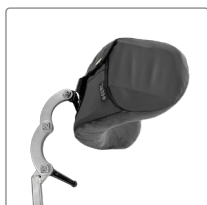

Poggiatesta con supporti laterali

Regolabile in altezza e rimovibile, con impugnatura dotata di rivestimento antiscivolo. Disponibile anche con freno per accompagnatore. L'attacco del poggiatesta è da ordinare separatamente.




Poggiatesta con supporti laterali e rivestimento igienico

Rivestimento rimovibile e lavabile. L'attacco del poggiatesta è da ordinare separatamente.



Prolunga per poggiatesta

La prolunga consente di portare più in avanti il poggiatesta qualora la regolazione standard non fosse sufficiente, garantendo comfort ed un supporto ottimale del capo. L'attacco del poggiatesta è da ordinare separatamente.

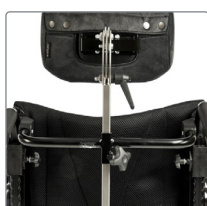

Attacco per poggiatesta

Facilmente estraibile grazie al sistema con chiusura a scatto.



Funzione Memory

Viene applicata al poggiatesta e consente di mantenere la stessa posizione inizialmente impostata qualora il poggiatesta dovesse venire rimosso e successivamente reinstallato.




Attacco per pettorina

Regolabile in altezza e rimovibile.



Pelotta 3A regolabile

Regolabile in altezza e profondità per garantire un contenimento aderente al corpo e libertà di movimento per le braccia. L'asta di supporto del pad è disponibile in quattro versioni. Rimovibile senza l'uso di attrezzi. Venduto singolarmente.

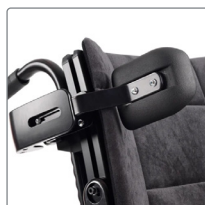


Pelotta 3A swing away

Regolabile in altezza e profondità. La cerniera montata sul retro non interferisce con i braccioli. Garantisce un contenimento aderente al corpo e libertà di movimento. L'asta di supporto del pad è disponibile in tre versioni. Venduto singolarmente.




Rivestimento pelotte

Rivestimento greu plush (felpato grigio scuro) con un piccolo cuscino lineare

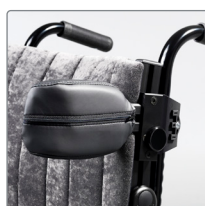


Pelotta 3A soft

Imbottitura morbida. Regolabile in altezza e profondità. Due posizioni di larghezza opzionali. Rivestimento in materiale igienico.

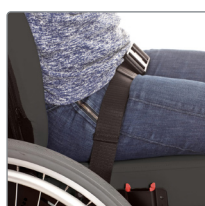


Cintura di posizionamento

Con chiusura a scatto, regolabile in lunghezza. Due diversi punti di fissaggio sul telaio.

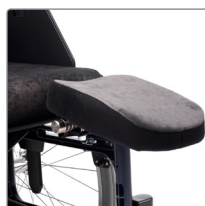

Supporto per amputati

Design reversibile, utilizzabile sia per la gamba destra che per la sinistra. Disponibile con rivestimento felpato oppure in materiale igienico.

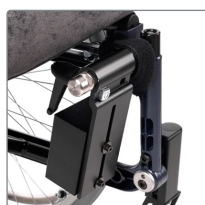

Contrappeso per amputati

Riduce il rischio di ribaltamento per utilizzatori con amputazione e migliora le prestazioni di propulsione della carrozzina. Rimovibile e regolabile in inclinazione. Compatibile con il supporto per amputati. Peso: 3Kg.



Perno QR


Perno a sgancio rapido per una semplice rimozione delle ruote

Altri accessori




Pedana standard

Nero. Rimovibile e swing away. Disponibile anche con dispositivo di bloccaggio.

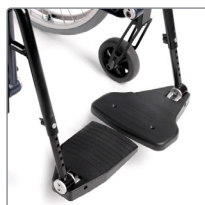

Estensione pedana

Aumenta la profondità della pedana. Montabile sulla pedana già in uso.

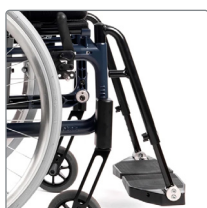


Pedana Narrow o slim

Avvicina di 5cm la pedana al telaio. Può essere utilizzato esclusivamente con ruote anteriori da 4" o da 5". Disponibile anche nella versione corta con dispositivo di bloccaggio.




Cinghia fermatallone

Regolabile in lunghezza. Non compatibile con l'estensione pedana.

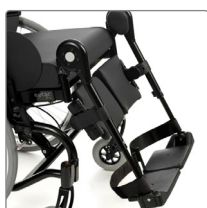

Pedana elevabile

Rimovibile e swing away. Dotato di supporti polpaccio ribaltabili, regolabili in altezza e profondità. Rivestimento: tessuto igienico

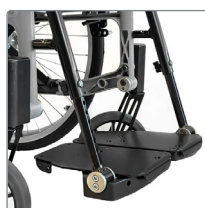

Estensione Add-On

Include pedane standard, pedane estese Add-On e kit di assemblaggio. Per larghezza seduta da 40 a 45cm sono inclusi gli Add-On misura Medium. Per larghezza seduta da 50 a 55cm sono inclusi gli Add-On misura Large.



Poggiabiedi

Ripiegabile e regolabile in profondità, inclinazione ed altezza. Fornita con tubo di fissaggio standard. Disponibile anche con tubo di fissaggio corto o lungo.



Protezione laterale

Montata sulla pedana Add-On Extended per evitare che il piede entri in contatto con la ruota anteriore.



Pedana Unica

Ripiegabile e regolabile in altezza ed inclinazione.




Pedana box

Accessorio leggero con imbottitura morbida, semplice da installare sulle carrozzine Etac Cross e Prio. Contiene e sostiene in modo sicuro i piedi, lasciando allo stesso tempo una limitata libertà di movimento.



Rivestimento pedana

Rivestimento felpato per un maggiore comfort.

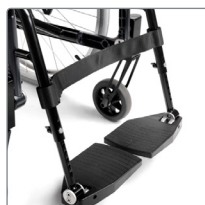

Fascia di supporto per polpacci

Rimovibile e regolabile in lunghezza.




Rivestimento pedana unica

Rivestimento felpato per un maggiore comfort.



Imbottitura per fascia di supporto polpacci

Garantisce un supporto più confortevole. Disponibile nelle lunghezze di 20cm, 30cm e 40cm.

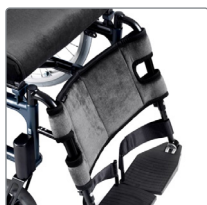

Fascia di supporto per polpacci imbottita

Morbida e confortevole, dotata di regolazione tramite chiusura a strappo. Montabile su supporti per le gambe fissi o elevabili.



Tavolino

Trasparente. Montabile su braccioli lunghi.




Cunei

Realizzati in schiuma cellulare e dotati di fissaggio con chiusura a strappo. Lunghezza: 13cm; larghezza: 9,5cm; altezza: 2cm. Venduti a coppie.




Tavolino Hemi

Montabile sul lato sinistro o destro della carrozzina. Non compatibile con il freno per accompagnatore.

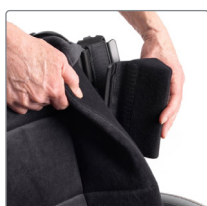


Cunei posteriori

Cuneo morbido che si fissa tramite chiusura a strappo sotto il rivestimento dello schienale. Disponibile nelle versioni lunga o corta.

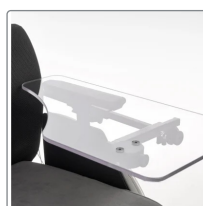

Tavolino Small

Regolabile in profondità e larghezza. Ripiegabile lateralmente. Da fissare al supporto del bracciolo. L'altezza viene regolata tramite il bracciolo.

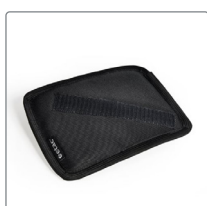

Pad di ampliamento

Con questo accessorio è possibile aggiungere un comfort extra nelle aree in cui è necessario, contribuendo a ridurre i punti di pressione localizzati.



Copriraggi

Trasparenti.




Cuscino laterale

Supporto avvolgente. Può essere ruotato per scegliere tra due differenti forme di supporto. Altezza: 29cm; profondità: 15cm. Sostenuto dal bracciolo e/o dal supporto laterale diritto. Venduto singolarmente.



Portabombola di ossigeno

Progettato per sostenere una bombola di ossigeno del carico massimo di 5Kg. Il kit completo include due diversi sistemi di fissaggio, per consentire il montaggio su differenti modelli di carrozzina.

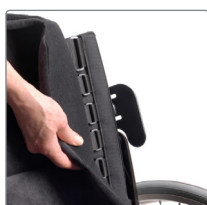

Supporto laterale diritto

Da utilizzare in combinazione con i cunei o i cuscini laterali. Regolabile in altezza. Venduto singolarmente.



Asta portaflebo

Completa di attacco.



Estensione larghezza schienale 30mm

L'estensione della larghezza viene montata sullo schienale 3A, e ne aumenta la larghezza di 30mm per lato. Montabile in combinazione con i cunei ed un rivestimento di maggiori dimensioni.



Etac è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti.

Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorano la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei suoi caregivers.

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web.

Etac



+39 051 2819228



italia.ordini@etac.se



www.etac-it.com

etac[®]
Creating Possibilities