




etac®

Etac Cross 6

La carrozzina pieghevole più personalizzabile

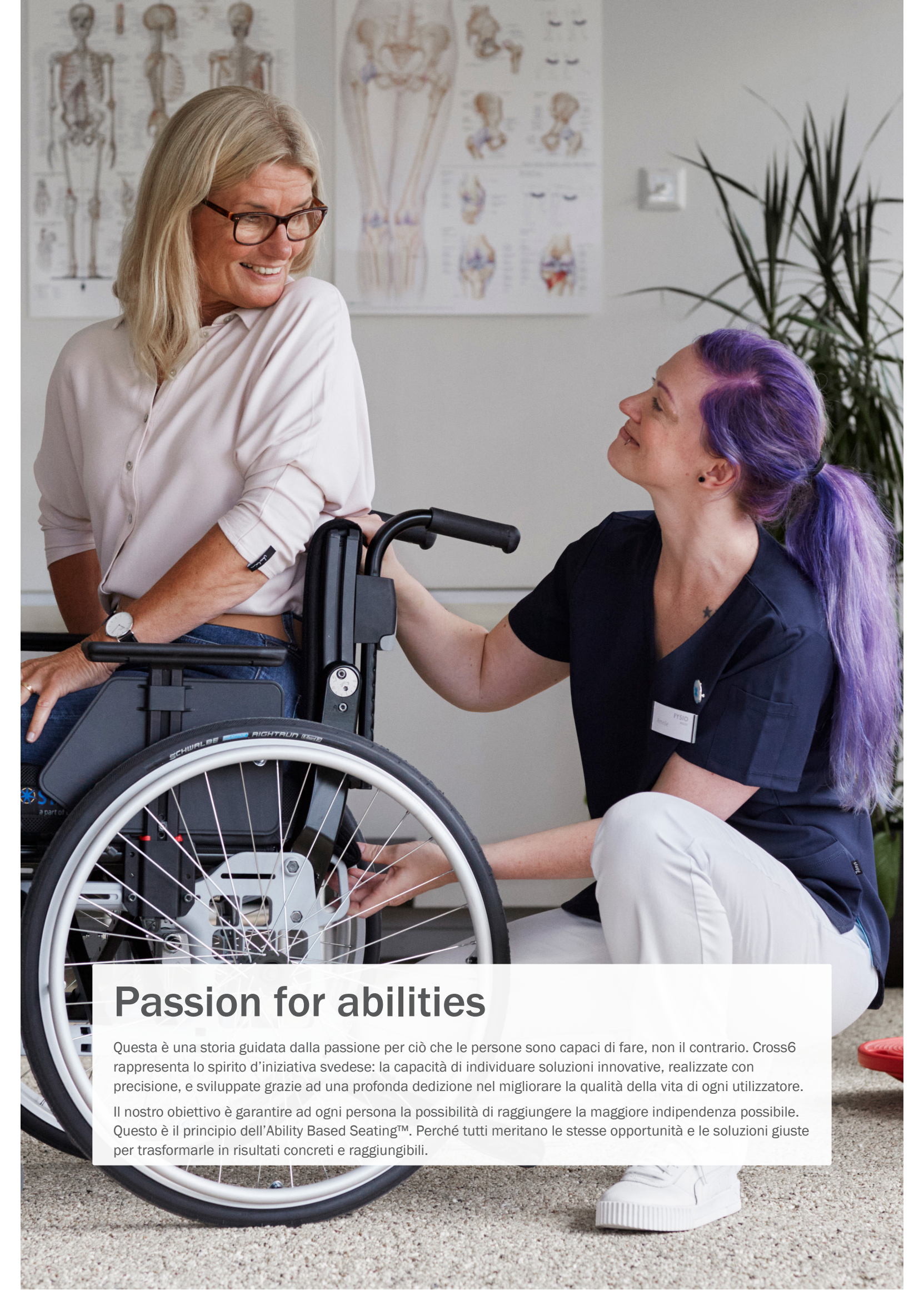

Passion for abilities

Questa è una storia guidata dalla passione per ciò che le persone sono capaci di fare, non il contrario. Cross6 rappresenta lo spirito d'iniziativa svedese: la capacità di individuare soluzioni innovative, realizzate con precisione, e sviluppate grazie ad una profonda dedizione nel migliorare la qualità della vita di ogni utilizzatore.

Il nostro obiettivo è garantire ad ogni persona la possibilità di raggiungere la maggiore indipendenza possibile. Questo è il principio dell'Ability Based Seating™. Perché tutti meritano le stesse opportunità e le soluzioni giuste per trasformarle in risultati concreti e raggiungibili.

Etac Cross 6

La carrozzina pieghevole più personalizzabile di sempre

La carrozzina giusta. Al momento giusto

Risparmia tempo prezioso evitando lunghe analisi e complesse misurazioni. È sufficiente individuare la larghezza della seduta più adatta ed effettuare le dovute regolazioni direttamente sul posto.

Cross 6 è stata progettata dal sistema di Welfare più esigente al mondo: quello scandinavo, per il quale ogni aggiustamento fa la differenza, perché ogni persona conta

Risparmio di tempo

Cross 6 permette di risparmiare molto tempo grazie alla sua semplicità di regolazione. I professionisti confermano quanto sia facile e veloce adattarla alle esigenze di ciascun utilizzatore.

Cross 6- Progettata in Scandinavia, realizzata in Svezia. Perché ogni persona meriti la soluzione giusta. Al momento giusto.



È sufficiente misurare il bacino

Un unico telaio per un'altezza della seduta da terra compresa tra 32 e 56 cm! La posizione sfalsata delle ruote garantisce una stabilità ottimale a qualsiasi altezza della seduta. Ogni posizione di montaggio offre quattro soluzioni. La maggior parte degli utilizzatori rientra nelle misure standard del telaio*. Ordina la carrozzina giusta misurando solo la larghezza del bacino!

*La profondità della seduta standard è adatta alla maggior parte degli utilizzatori fino a 190cm di altezza. Valutare il telaio lungo da 185cm, in funzione delle regolazioni 3A necessarie per il corretto posizionamento posturale.

Caratteristiche

Progettato in collaborazione con alcuni professionisti del settore tra i più esigenti al mondo, dall'idea al prodotto finito. Ogni dettaglio della Cross 6 è stato studiato per ottimizzare il tempo prezioso dei professionisti.



Riequilibrio più rapido

Regolazione delle ruote più veloce del settore. Design che garantisce una stabilità ottimale. Disponibile in 44 posizioni di regolazione.




Un'unica profondità del sedile

La profondità standard della seduta copre la maggior parte delle esigenze. Semplificando e velocizzando il processo di acquisto.



Angolazione anca semplice da trovare

La regolazione dell'inclinazione è intuitiva con un click sonoro che conferma la corretta impostazione.

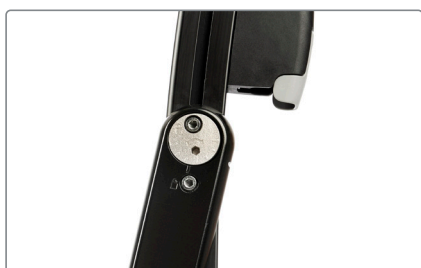

Si adatta a qualsiasi corporatura

Facili e veloci da regolare garantiscono un supporto posturale ottimale e personalizzato.



Maniglie di spinta

Facili da regolare in altezza, garantiscono una presa ergonomica e confortevole.



Stabilità rigida oggi. E domani.

Progettata con stabilità rigida. Il telaio a doppia crociera, il fissaggio della spondina senza viti e le tolleranze contenute assicurano una struttura stabile priva di movimenti indesiderati.



Posiziona la cintura dove vuoi

Regolazione semplice ed immediata della cintura.



Antiribaltamento

Copre una variazione dell'altezza della seduta fino a 24 cm, mantenendo la stessa profondità di seduta. Facile da regolare.


Colori del telaio



Nero -01



Grigio -78

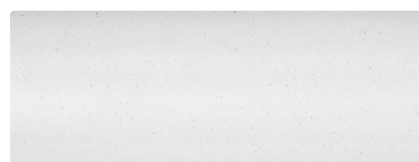

Bianco -92



La carrozzina giusta. Anche domani! Cross 6 può sempre essere regolata per garantire una seduta ottimale e rispondere alle nuove esigenze dell'utilizzatore. Resistente e facilmente regolabile sia per il primo utilizzatore, che per i successivi. Cross 6 è una soluzione sostenibile e progettata per durare nel tempo.

Modello Cross 6	Codice no.	Larghezza totale	Profondità seduta dal tubo schienale	Peso con ruote post.
35 cm standard	13240101	55.5 cm	36-49 cm	14.6 kg
35 cm long	13240102	55.5 cm	42-55 cm	14.8 kg
37.5 cm standard	13240103	58.0 cm	36-49 cm	14.7 kg
37.5 cm long	13240104	58.0 cm	42-55 cm	14.9 kg
40 cm standard	13240105	60.5 cm	36-49 cm	14.8 kg
40 cm long	13240106	60.5 cm	42-55 cm	15 kg
42.5 cm standard	13240107	63.0 cm	36-49 cm	14.9 kg
42.5 cm long	13240108	63.0 cm	42-55 cm	15.1 kg
45 cm standard	13240109	65.5 cm	36-49 cm	15.1 kg
45 cm long	13240110	65.5 cm	42-55 cm	15.3 kg
47.5 cm standard	13240111	68.0 cm	36-49 cm	15.2 kg
47.5 cm long	13240112	68.0 cm	42-55 cm	15.4 kg
50 cm standard	13240113	70.5 cm	36-49 cm	15.3 kg
50 cm long	13240114	70.5 cm	42-55 cm	15.5 kg
52.5 cm standard	13240115	73.0 cm	36-49 cm	15.4 kg
52.5 cm long	13240116	73.0 cm	42-55 cm	15.6 kg

* I pesi e le dimensioni riportate si riferiscono ad una carrozzina con ruote posteriori da 24" con perni a sgancio rapido, ruote ad alta pressione, corrimano di spinta in alluminio, pedana, appoggiatesta, freni, braccioli e ruote anteriori da 6½" con forcelle medie. Le misure riportate possono variare più o meno del 2%.


Altezza anteriore sedile 32-56.5 cm (12½-22¼")	Larghezza di trasporto 32 cm (12½")	Lunghezza da chiusa 62-86 cm (24½-33¾")	Dimensioni ruote posteriori 46.5-58 cm (18 ¾-22¾")
Altezza posteriore sedile 32-53 cm (12½-20¾")	Altezza totale 72-116 cm (28½-45¾")	Lunghezza pedana 26-64 cm (10¼-25¼")	Portata massima 135 kg (297.6 lb)
Schienale Guardare pag.7 per i dati tecnici.	Lunghezza totale 80-122 cm (31½-48")	Angolazione pedana 108°-114°	

Schienale Etac 3A

Progettato per soddisfare le esigenze posturali più complesse richieste dai professionisti della riabilitazione.

Non esiste schienale paragonabile al Cross 3A. Esplora le molteplici possibilità e scopri come raggiungere i tuoi obiettivi di posizionamento senza ricorrere a costosi sistemi di schienale personalizzati. Personalizza direttamente forma e sostegno con l'utilizzatore già seduto sulla carrozzina. I risultati sono immediati, ed il supporto può essere facilmente modificato man mano che cambiano le esigenze.

La stabilità prossimale è il punto di partenza per il controllo posturale. Cross 3A è uno strumento progettato per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di postura, sulla base delle capacità individuali e della conformazione fisica di ogni utilizzatore. Supporta l'abilità, migliora la mobilità ed incoraggia l'attività. Questo è ciò che definiamo come Ability Based Seating™.

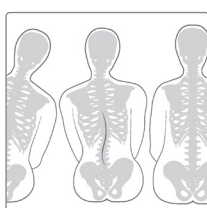


Ability Based Seating™

Un approccio basato sulle abilità, l'obiettivo è valorizzare e rafforzare le capacità dell'utilizzatore. Fornire una postura equilibrata serve a migliorare la qualità di vita. Le abilità sono preziose e devono essere incentivate per non essere perdute.



Adattamento immediato

Supporti laterali, distributori di pressione e cunei sono esempi di semplici accessori che consentono di ottenere immediatamente una configurazione perfetta.

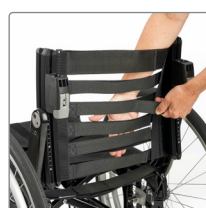

Raggiungere la stabilità prossimale

Creare un adeguato supporto per il bacino è il primo passo per ottenere la stabilità prossimale. L'inclinazione dello schienale e le cinghie di supporto lombare sono fondamentali per stabilizzare il bacino.




Come ottenere la configurazione ideale.

Una postura scorretta ci priva di energia. Per svolgere le attività quotidiane in modo attivo stando seduti è necessario uno schienale adeguato. Scopri di più sul nostro sito su come configurare il Cross 3A!

Eccellente versatilità


3A deriva dai termini latini Angulus, Altitudo e Altus, che esprimono i concetti di angolazione, altezza e profondità. Lo schienale 3A offre numerose ed intelligenti possibilità di regolazione, garantendo un'eccellente adattabilità. La combinazione delle regolazioni dell'inclinazione dello schienale e del supporto lombare consentono di assumere differenti posizioni.

Sotto sono riportati esempi delle posizioni conseguibili grazie allo schienale Etac 3A

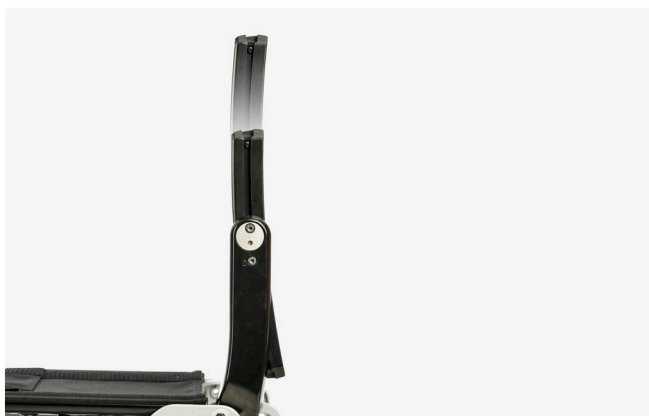


Schienale regolabile in altezza - Altitudo

Regolabile tra 32 - 45 cm

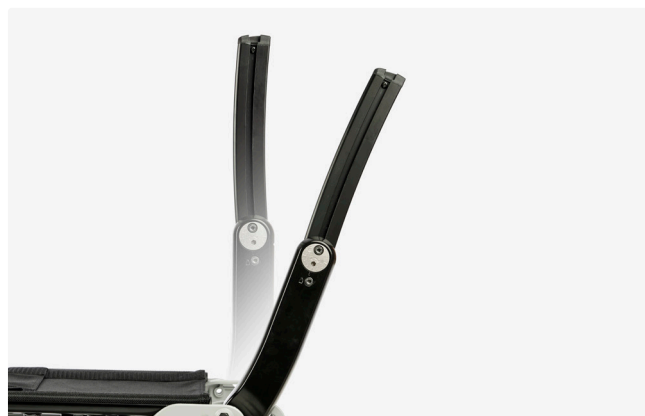


Inclinazione dello schienale regolabile

Regolabile da -5° a +20°

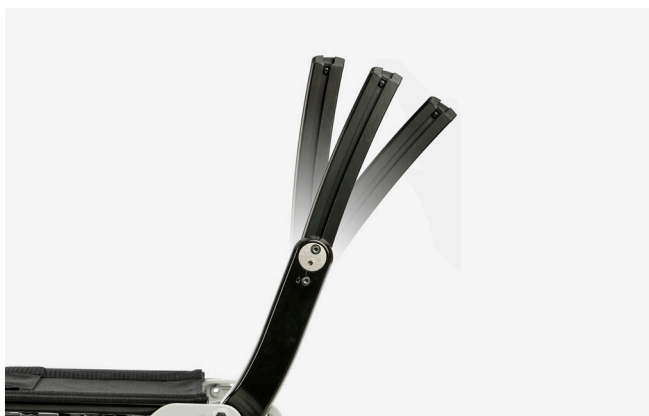

Inclinazione lombare regolabile - Angulus

Regolabile da -16° a +16°

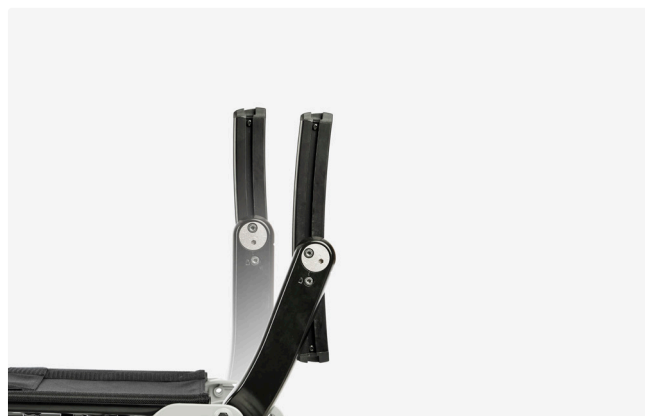

Regolabile in profondità - Altus

Aggiunge 7 cm

Altezza

Regolabile da 32 a 45 cm
Versione alta: regolabile da 38 a 51 cm

Inclinazione dello schienale

Versione standard 2°, regolabile da -5 a 20°

Inclinazione lombare

Versione standard 7°, regolabile da -16° a 16°

Rivestimento schienale

6 cinghie posteriori a tensione regolabile. Rivestimento in schiuma ad alta densità con fodera in poliestere elastico.

Profondità della seduta

Telaio standard: 36 - 49 cm
Telaio lung: 42 - 55 cm
Le regolazioni della profondità della seduta possono essere effettuate tramite la regolazione anteriore, le impostazioni dell'inclinazione dello schienale, l'uso di una prolunga della seduta e diverse opzioni di rivestimento della stessa.



Etac è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti.

Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorano la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei suoi caregivers.

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web.

Etac +39 501 2819228 italia.ordini@etac.it www.etac-it.com

**etac**[®]
Creating Possibilities