



Etac Clean

Sedie da doccia/wc manovrabili

 **etac**[®]

Etac Clean - Un classico sempre attuale

Clean è senza dubbio uno dei prodotti più conosciuti di Etac, creata nel 1999, è il riferimento nel settore delle sedie da doccia e la sua posizione è ancora immutata tutt'oggi. Le sue eccellenti caratteristiche costruttive e la sua facilità di utilizzo la fanno apprezzare nelle strutture assistenziali e a domicilio in tutto il mondo.

Facile da spingere e manovrare

Una delle caratteristiche più significative di Clean è la sua grande manovrabilità. E' leggera da spingere e grazie alle sue dimensioni compatte passa facilmente attraverso porte o spazi ridotti. Il maniglione di spinta particolarmente ampio permette ai caregivers di gestirla facilmente.

Funzionalità e facilità d'uso

Clean è estremamente semplice da utilizzare. I braccioli possono essere regolati o rimossi con un semplice click per facilitare i trasferimenti; i freni sono facilmente azionabili e la pedana può essere ripiegata o riposta sotto il sedile quando non è utilizzata.

Tante opzioni per diversi usi

La serie Clean è composta da tre modelli e numerose varianti, tutte con caratteristiche uniche studiate per le diverse esigenze.



Caratteristiche



Compatta e confortevole

Il design è essenziale e compatto pur offrendo un'ampia superficie di seduta.



Accesso facilitato

L'incavo anteriore e l'apertura nella parte posteriore della seduta facilitano l'accesso per le operazioni di igiene personale. E' disponibile anche la versione con apertura nella parte anteriore della seduta.



Adatta a qualsiasi modello di wc

La sedia può essere posizionata sopra a qualsiasi tipo di wc, a pavimento o a sospensione.



Pedana ergonomica

La forma leggermente curva della pedana poggia piedi fornisce un supporto ottimale all'arcata plantare garantendo comfort, stabilità e relax.



Etac Clean sedia doccia/wc

	Bianco	Verde acqua
44 cm, 4 ruote frenabili	80229269	80229209
49 cm, 4 ruote frenabili	80229270	80229210
49 cm, 2 ruote frenabili	80229273	80229213
55 cm, 4 ruote frenabili	80229271	80229211
55 cm, 2 ruote frenabili	80229274	80229214
60 cm, 2 ruote frenabili regolabile in altezza	80229275	80229215

Etac Clean sedia doccia/wc confezione da 2 pezzi

	Bianco	Verde acqua
49 cm, 4 ruote frenabili, Conf. 2 pezzi	-	80229220
49 cm, 2 ruote frenabili, Conf. 2 pezzi	80229283	80229223
55 cm, 4 ruote frenabili, Conf. 2 pezzi	80229281	80229221
55 cm, 2 ruote frenabili, Conf. 2 pezzi	80229284	80229224

Peso

44 cm: 13.5 kg
49 cm: 14.0 kg
55 cm: 14.5 kg
60 cm: 15.0 kg

Portata Massima

130 kg

Materiali

Telaio: Acciaio verniciato a polvere
Seduta/schienale: Polipropilene
Braccioli: Polipropilene
Pedana: Polipropilene
Freni ruote: Poliammide
Ruote: Poliammide/TPE

Manutenzione



Lavare il prodotto utilizzando agenti pulenti senza solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure un prodotto disinfettante al 70%. Il prodotto può essere decontaminato a una temperatura massima di 85° C/185° F per 3 minuti se necessario.



Etac Clean regolabile in altezza

Con la Clean regolabile in altezza è possibile modificare l'altezza della seduta, adattando così l'ausilio a varie esigenze, per esempio permettendo di facilitare i trasferimenti o favorendo la compatibilità con alcuni modelli di wc.

Questa versione è particolarmente adatta alle strutture di cura dove una sola sedia può soddisfare le esigenze di vari utilizzatori.

La stessa sedia per tutte le altezze

La possibilità di regolare l'altezza permette di adattare la sedia a specifiche esigenze. Si può arrivare ad un'altezza massima della seduta di 60 cm senza l'uso di alcun attrezzo.

Ampia gamma di pedane

Per questo modello, sono disponibili vari modelli di pedane. Per i dettagli vedere la sezione accessori.



Pronti per le esigenze di cura di domani

Le proiezioni demografiche ci dicono da tempo che con l'invecchiamento della popolazione, le persone anziane saranno sempre di più assistite a domicilio. Questo richiede già ora ausili da bagno che possano essere facilmente utilizzati sia in casa che in struttura.

L'ergonomia e la funzionalità di Clean rendono questo ausilio già adatto ad entrambi gli ambienti.

Etac Clean regolabile in altezza Bianco Verde Acqua

4 ruote frenanti	80229208	-
------------------	----------	---

Peso

14.2 kg

Portata massima

130 kg

Materiali

Telaio: Acciaio verniciato a polvere
 Seduta/schienale: Polipropilene
 Braccioli: Polipropilene
 Pedana: Polipropilene
 Ruote: Poliammide/TPE/Acciaio
 Supporti ruote regolabili in altezza: Acciaio

Manutenzione



Lavare il prodotto utilizzando agenti pulenti senza solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure un prodotto disinfettante al 70%. Il prodotto può essere decontaminato a una temperatura massima di 85° C/185°F per 3 minuti se necessario.





Etac Clean ad autospinta

Per utilizzatori più attivi, esiste un modello ad autospinta della Clean. Mantiene le stesse caratteristiche degli altri modelli della serie, ma offre una maggior indipendenza agli utilizzatori che la possono manovrare autonomamente.

Facilità di manovra

Le ruote posteriori sono da 24", posizionate in modo da ottimizzarne la maneggevolezza e rendere la Clean adatta a tutte le attività quotidiane garantendo comunque sicurezza e comfort.

Facilità di trasferimento

I trasferimenti laterali possono essere compiuti in maniera sicura grazie all'ampio spazio della seduta nella parte anteriore. Inoltre i freni sono collocati appena al di sotto della seduta in modo da non essere d'intralcio durante i trasferimenti e rimanendo comunque a portata di mano.



Costantemente aggiornata

Come la maggior parte dei prodotti Etac, Clean viene continuamente migliorata dal punto di vista tecnico e funzionale per mantenere inalterato lo standard qualitativo delle prestazioni offerte.

Nuovi modelli sono stati aggiunti alla serie Clean per venire incontro alle diverse esigenze in materia di igiene personale.

Etac Clean autospinta	Bianco	Verde acqua
55 cm con ruote posteriori da 24"	80229276	-
55 cm con ruote posteriori da 24"		80229216

Peso
20.0 kg

Portata massima
130 kg

Materiali

Adattatore ruote posteriori: alluminio
 Ruote posteriori: poliammide, pneumatici pieni
 Telaio: Acciaio verniciato a polvere
 Seduta/schienale: Polipropilene
 Braccioli: Polipropilene
 Pedana: Polipropilene
 Freni ruote: Poliammide
 Ruote: Poliammide/TPE

Manutenzione



Lavare il prodotto utilizzando agenti pulenti senza solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure un prodotto disinfettante al 70%. Il prodotto può essere decontaminato a una temperatura massima di 85° C/185° F per 3 minuti se necessario.





Tante soluzioni per esigenze diverse

Oltre ai modelli principali della serie Clean, sono disponibili numerose varianti in modo da soddisfare le esigenze individuali. L'ampia gamma di soluzioni ha l'obiettivo di aiutare gli utilizzatori a gestire le attività di igiene personale secondo le proprie necessità.



Clean con apertura anteriore della seduta

Per coloro che preferiscono l'accesso anteriore, esiste una versione con l'apertura nella parte frontale della seduta.

L'apertura anteriore facilita il lavoro del caregiver ed è particolarmente indicata quando si usa una doccetta nelle operazioni di nursing. Disponibile come variante.

Clean con schienale tensionabile traforato

La versione con lo schienale tensionabile traforato può essere regolata per rispettare più facilmente l'anatomia dell'utilizzatore. Gli utenti con cifosi, ad esempio, possono trarre particolare beneficio dallo schienale che si adatta alla curva della propria schiena. Lo schienale si regola facilmente attraverso le tre cinghie situate nella parte posteriore.

Disponibile sia come variante che come accessorio.



Clean con Kit Comfort

Il Kit Comfort migliora il benessere degli utenti che hanno bisogno di un maggior contenimento o di una seduta più morbida.

L'imbottitura della seduta, dello schienale e dei braccioli assicurano una piacevole sensazione di comfort.

Disponibile sia come variante che come accessorio.

Etac Clean con schienale tensionabile traforato	Bianco	Verde Acqua	Etac Clean con apertura anteriore	Bianco	Verde acqua
44 cm, 4 ruote frenanti, schienale tensionabile traforato, supporti per padella	80229286	-	49 cm, 4 ruote frenanti	-	80229325
49 cm, 4 ruote frenanti, schienale tensionabile traforato, supporti per padella	80229287	-	55 cm, 4 ruote frenanti	-	80229321
49 cm, 2 ruote frenanti, schienale tensionabile traforato	80229305	-	49 cm, 4 ruote frenanti, Conf. 2 pezzi	-	80229319
55 cm, 2 ruote frenanti, schienale tensionabile traforato	80229306	-	55 cm, 4 ruote frenanti, Conf. 2 pezzi	-	80229320
			Etac Clean con Kit Comfort	Bianco	Verde acqua
			49 cm, 4 ruote frenanti, kit comfort	80229298	-
			55 cm, 4 ruote frenanti, kit comfort	80229299	-

Accessori per la personalizzazione

Avere la possibilità di personalizzare i prodotti è estremamente importante per facilitare la partecipazione alle attività di vita quotidiana. La gamma di accessori della Clean offre un gran numero di soluzioni per adattare l'ausilio alle diverse esigenze individuali in materia di comfort, supporto o funzionalità aggiuntive.



Comfort

L'utilizzo di imbottiture aggiuntive garantisce una piacevole sensazione di comfort. E' disponibile un ampio assortimento di imbottiture per sedute, schienali e braccioli.

Postura

Offrire una buona posizione di seduta facilita le attività dell'utilizzatore e aumenta il senso di sicurezza. Sono disponibili diversi tipi di cinture, una barra di protezione anteriore e supporti laterali.

Ulteriori funzionalità

Alcuni accessori facilitano il lavoro dei caregivers. Ad esempio, sono disponibili vari modelli di padelle e alla sedia può essere aggiunto anche un portasapone.

Accessori



Schienale tensionabile traforato

80209225

Schienale regolabile in tessuto traforato. Si adatta facilmente all'anatomia di soggetti con particolari esigenze posturali. Si regola facilmente con le 3 cinghie posteriori.



Imbottitura seduta

80209528

Imbottitura morbida per offrire un piano di seduta unico. Altezza 2 cm. Colore grigio.



Supporti laterali tronco

80209509

Supporti laterali imbottiti che migliorano la postura e aumentano il comfort. Regolabili in larghezza e utilizzabili solo con lo schienale standard.



Imbottitura seduta

80209247

Imbottitura morbida per offrire un piano di seduta unico. Altezza 2 cm. Colore nero.



Schienale Soft

80209261

Schienale imbottito per offrire una piacevole sensazione di comfort. Materiale morbido e anti-scivolo. Utilizzabile solo con lo schienale standard.



Imbottitura seduta

80209260

Imbottitura morbida con superficie antiscivolo e apertura posteriore. Larghezza apertura: 17 cm.

Accessori



Imbottitura Soft Comfort, 2 cm

80209517
Seduta imbottita per offrire maggiore comfort. Ampia apertura posteriore con incavo frontale per facilitare l'accesso. Larghezza apertura 18 cm.



Imbottitura Soft Comfort, 4 cm

Larghezza apertura 15 cm: 80209301
Larghezza apertura 18 cm: 80209227
Seduta imbottita per offrire maggiore comfort. Ampia apertura posteriore con incavo frontale per facilitare l'accesso.



Imbottitura Soft Comfort, apertura frontale

80209527
Seduta imbottita per offrire maggiore comfort. Utilizzabile solo su Clean con apertura anteriore. Altezza 2 cm.



Imbottitura braccioli Comfort

80209226
Una superficie d'appoggio morbida e confortevole che permette comunque l'appoggio durante i trasferimenti.



Imbottitura Comfort

80209228
Composta da schienale e braccioli imbottiti per offrire maggior comfort e stabilità. Superficie impermeabile.




Kit Comfort

80209237
Il kit migliora la sensazione di comfort e stabilità. E' composto da imbottitura, seduta e braccioli.



Cintura tronco/bacino

80209524
Cintura imbottita ad asciugatura rapida per il controllo posturale. Può essere usata come cintura bacino per tutti i modelli Clean, per il tronco sulla Clean con schienale tensionabile. Lunghezza regolabile da 65 a 130 cm.

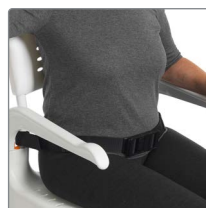

Cinghia pelvica

80209440
Offre un buon posizionamento posturale del bacino. Facile da regolare attraverso la fibbia centrale. Si fissa intorno ai tubi dello schienale con appositi fissaggi in velcro.




Cintura per il tronco

80209442
Offre un buon supporto anteriore del tronco. Viene fissata nella parte posteriore dello schienale e se ne raccomanda l'utilizzo associato ad una cinghia pelvica. Utilizzabile solo con schienale tensionabile.



Cintura di sicurezza

80209034
Attaccata nella parte posteriore dello schienale, dovrebbe essere utilizzata in associazione con la cinghia pelvica. Utilizzabile con lo schienale standard.

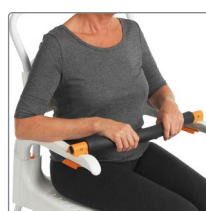

Barra sostegno anteriore

80209246
Può essere utilizzata come punto d'appoggio anteriore e/o per aumentare la sensazione di sicurezza dell'utilizzatore. Si fissa facilmente ai braccioli.



Porta sapone

80209266
Si inserisce sul lato della seduta, è perfetto per riporre il sapone, il coperchio della padella o la carta igienica. E' anche dotato di un alloggiamento per la cornetta della doccia.



Paraspruzzi

80209430
Il paraspruzzi viene applicato nella parte anteriore della seduta e può essere facilmente rimosso.



Padella

Padella, coperchio incluso: 80209255
Padella: 80209254. Coperchio: 80209256
E' dotata di una maniglia posteriore e di una superiore che automaticamente blocca il coperchio quando viene sollevata. Gli attacchi per la padella non sono inclusi.

Accessori



Attacchi per padella

80209257

Adatti per qualsiasi tipo di padella con il bordo sottile. Vengono fissati sotto al sedile utilizzando gli appositi alloggiamenti.



Attacchi per montaggio ribassato

80209259

Permettono di abbassare gli attacchi per padella/secchio di 6 cm.



Secchio con maniglia e coperchio

80209265

Capiente secchio con maniglia e coperchio. Gli attacchi non sono inclusi e vanno ordinati separatamente.



Padella monouso

80209282

Padella monouso resistente e pratica. Confezione da 50 pezzi.



Attacchi per secchio

80209258

Adatti per qualsiasi tipo di secchio. Vengono fissati sotto al sedile utilizzando gli appositi alloggiamenti.



Kit di fissaggio per padella monouso

80209229

Kit di fissaggio per l'utilizzo di padelle monouso.

Accessori speciali

Solo per Clean 49 o 55 cm



Kit adattatore ruote posteriori

Grigio: 80209262

Bianco: 80209305

Kit adattatore per sostituire le ruote posteriori di serie con ruote da 24". Utilizzabile solo su Clean 55 cm.




Kit ruote per rialzo seduta

Bianco: 80209511

Verde Acqua: 80209512

Ruote con distanziatori che alzano l'altezza seduta di 5 cm. Utilizzabile solo su Clean 55 cm. Venduto in confezione da 4 pezzi.

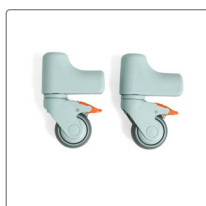

Ruote 75 mm

Bianco: Ant. 80209515 - Post. 80209516

Verde Acqua: Anteriore 80209513 -

Posteriore 80209514

Permette di ribassare l'altezza seduta di 5 cm. Montati di serie su Clean 44 cm. Utilizzabile su Clean 49 cm. Venduti a coppia.

Solo per Clean regolabile in altezza




Poggiambraccio regolabile in altezza

Destro: 80209252 Sinistro: 80209253

Permette di variare l'inclinazione dell'arto inferiore in 4 posizioni predefinite. Utilizzabile con la pedana singola 80209443.

Gli attacchi sono inclusi.

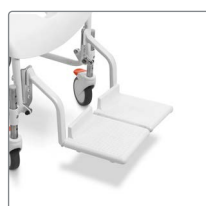

Pedane poggipiedi ribaltabili

80209250

Le pedane sono ribaltabili, regolabili in altezza e rimovibili. Utilizzabili solo con Clean regolabile in altezza. Venduti a coppia.

Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni su accessori e caratteristiche tecniche, visita www.etac-it.com.



Etac è azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti. Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorino la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei caregivers.

Per le ultime novità e aggiornamenti sui prodotti,
visita il nostro sito web: www.etac-it.com

Etac s.r.l.
Via XXV Aprile 1945, n.17
San Giorgio di Piano (BO), 40016
Tel +39 051 2819228
www.etac-it.com

etac[®]
Creating Possibilities