



Molift Partner 255

Sollevamento verticale che garantisce un'elevata stabilità

Molift Partner 255 è un sollevatore mobile progettato per situazioni in cui sicurezza, efficienza e affidabilità sono requisiti fondamentali. Ideale per ospedali e strutture assistenziali, consente trasferimenti sicuri e controllati in un'ampia gamma di scenari operativi. Grazie a un range di sollevamento da 39 a 168 cm, supporta il sollevamento sia dal pavimento sia da superfici più elevate.

La colonna a sollevamento verticale e la barra di presa fissa assicurano un'eccellente stabilità, offrendo allo stesso tempo maggiore spazio e comfort all'utente. Con un peso di appena 40 kg, è uno dei sollevatori più leggeri della sua categoria. Il telaio ben bilanciato, la struttura robusta e le ruote di alta qualità garantiscono una manovrabilità fluida e precisa, anche negli ambienti clinici con spazi ridotti.

Grazie a una portata massima di lavoro di 255 kg, assicura prestazioni di sollevamento affidabili anche per utenti completamente assistiti, favorendo trasferimenti sicuri, efficienti e confortevoli e contribuendo a ridurre il carico fisico per gli operatori sanitari.



molift®



Posizionamento bilanciato

Grazie al sollevamento verticale a distanza costante, l'utilizzatore rimane sempre stabile e perfettamente centrato



Barra di presa a 4 punti

Assicura una posizione di sollevamento confortevole e ampia, garantendo al contempo un trasferimento stabile.



Per il training riabilitativo

I bracci di supporto sono ideali per il training della deambulazione, garantendo all'utente sicurezza e stabilità.



Elevata portata SWL

Molift Partner 255 ha una portata operativa sicura di 255 kg.

Caratteristiche

Impugnatura ergonomica

Molift Partner 255 è dotato dell'esclusiva impugnatura Molift, che offre molteplici possibilità di presa, migliorando l'ergonomia dell'operatore.

Vita utile

Il sollevatore ha una vita utile prevista di 30.000 cicli o 15 anni.

Batteria

La batteria utilizza l'avanzata tecnologia agli ioni di litio (Li-Ion) ed è dotata di un design sigillato e sicuro che ne consente il lavaggio (IPX6). Con un peso di soli 0,9 kg, può essere sostituita facilmente con una sola mano.

Ricaricabile direttamente sul sollevatore o tramite caricabatterie esterno. Tempo di ricarica: 3,5 ore. Una carica completa consente fino a 100 sollevamenti con un carico di 75 kg. Compatibile con tutti i sollevatori mobili Molift.

Durata prevista di 1.700 cicli di ricarica e garanzia di 3 anni per un'affidabilità a lungo termine.

Speed boost



La funzione Speed Boost consente di aumentare la velocità di sollevamento quando l'attuatore non è sottoposto a carico.

Pulsantiera


La pulsantiera di comando è robusta e affidabile. È dotata di indicatori del livello di carica della batteria, di sovraccarico e di manutenzione, per garantire prestazioni ottimali e la massima sicurezza.

Progettata per garantire la massima durata, la pulsantiera consente una facile sostituzione del cavo in caso di malfunzionamento ed è lavabile (IPX6).

Molift Service Tool

Come tutti i sollevatori Molift, anche Smart 150 è dotato di un sistema di notifica per la manutenzione, che segnala quando è necessario un intervento di assistenza. Il software integrato consente inoltre di visualizzare i dati di utilizzo e supporta i tecnici nelle attività di diagnostica e risoluzione dei problemi.

Inoltre, il sollevatore è dotato di connettività Bluetooth, che consente il collegamento wireless al Molift Service Tool.

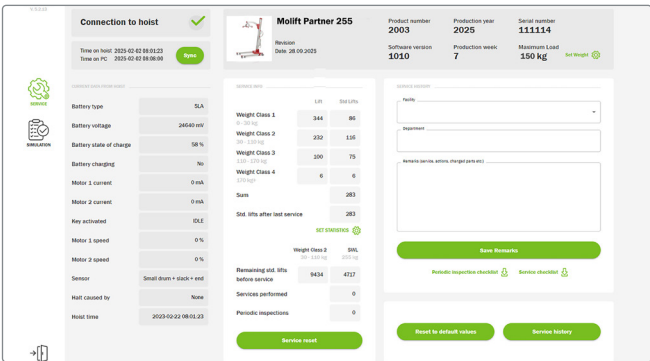

Product	Item no.	Materiali
Molift Partner 255, escl. barra di presa	M1301	Alluminio, plastica, acciaio
Molift Partner 255 con supporto braccia, escl. barra di presa.	M1303	
Peso		
Safe working load (SWL)	255 kg	Li-Ion 25.2V, 2.85Ah
Peso ausilio (inclua batteria)	40 kg	3.5 hours
Peso del supporto braccia (inclusa batteria)	45 kg	42.9 mm/sec with 75 kg
		50 hoists/75 kg/500 mm
Dimensioni		
Altezza	1905 mm	
Lunghezza	1285 mm	
Altezza della base	115 mm	
Escursione sollevamento	390-1680 mm	
Sollevamento massimo	1290 mm	
Dati tecnici		
Batteria		
Tempo di ricarica della batteria		
Velocità del sollevamento		
Prestazioni		
Lavaggio		
		
		
		
		
Pulire/disinfettare il prodotto utilizzando un detergente standard non abrasivo con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.		

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e per tutti gli aggiornamenti, visita il nostro sito.

Etac

+39 051 2819228
italia.ordini@etac.it
www.etac-it.com

etac®
Creating Possibilities