

Molift RgoSling MediumBack og HighBack

Innebygd ergonomi for komfortable løft.

For hjemmetjenesten og institusjoner

Molift RgoSling MediumBack og Molift Rgo Sling HighBack er all-round seil som passer de fleste brukere og løftesituasjoner i hjemmetjenesten og institusjoner.

Molift RgoSling

RgoSling MediumBack gir støtte til kroppen, og RgoSling HighBack gir støtte for hodet også. Det gjør det mulig for brukeren å ha en svakt skrå sittestilling, som passer for brukere med svekket kropps- og hodestabilitet.

Seilet egner seg spesielt for løft til og fra liggende stilling og løft fra gulv.

Molift RgoSling i Nett-versjon

RgoSling MediumBack og RgoSling HighBack finnes også i et mykt nett-polyester materiale. Materialet puster godt og tørker svært raskt. Seilet er egnet for dusj- og badesituasjoner. Nett-versjonen har samme form og funksjon som polstrede versjoner, så som; glidestroppe, påføringslomme på ryggen og stropper for økt vektfordeling i bendelene.



RgoSling HighBack Nett

Molift RgoSling MediumBack

Str	Polstret	Nett
XXS	M1720100	M1720300
XS	M1720110	M1720310
S	M1720120	M1720320
M	M1720130	M1720330
L	M1720140	M1720340
XL	M1720150	M1720350
XXL	M1720160	M1720360

Molift RgoSling HighBack

Str	Polstret	Nett
XXS	M1720200	M1720400
XS	M1720210	M1720410
S	M1720220	M1720420
M	M1720230	M1720430
L	M1720240	M1720440
XL	M1720250	M1720450
XXL	M1720260	M1720460


For HMS nr. se side 44.

Anbefalt brukervekt

XXS	12–17 kg
XS	17–25 kg
S	25–50 kg
M	45–95 kg
L	90–160 kg
XL	160–240 kg
XXL	230–300 kg


Materiale

Polyester,
PE -skum

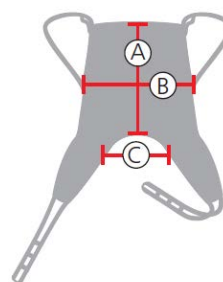

Mediumback

Str.	A	B	C
XXS	44	55	18
XS	50	62	20
S	56	66	27
M	62	76	32
L	65	91	40
XL	68	109	52
XXL	68	124	66

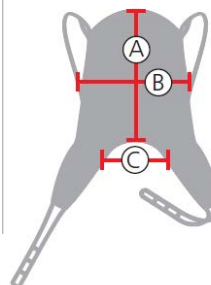

Highback

Str.	A	B	C
XXS	58	52	18
XS	68	62	20
S	80	66	27
M	92	76	32
L	98	93	40
XL	98	110	52
XXL	100	124	66



Løftestropper

Flere fargekodede løkker for å finne riktig tilpasning.

Anti-skli

For større sikkerhet er sklisikring påført på innsiden av RgoSling Amputasjon, RgoSling Toalett og RgoSling StandUp.

Belte

Molift RgoSling Amputasjon og RgoSling Toalett har et belte for komfort og sikkerhet.

Benstøtte

Polstret benstøtte for pasientens komfort. En lomme forenkler påføringen av benstøtten.

RgoSling MediumBack Polstret.

Merking

Klar og synlig informasjon for det daglige behov. Etiketten med vedlikeholdsinformasjon finnes bak hovedetiketten, som vippes opp

Polstring

Polstringen fordeler vekten og gir bedre komfort for pasienten.

Påføringslomme på ryggen

Lomme som forenkler påføringen, hovedsakelig i sittende stilling.




Rygglomme

Lommen på ryggen gir en enkel og komfortabel påføring.




Benstøtte

Den polstrede benstøtten, med den unike plasseringen av stroppen, fordeler presset på låret, og derved økes komforten.

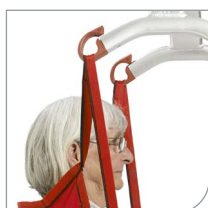


Glideløkker

Glideløkker gir en balansert vektfordeling.

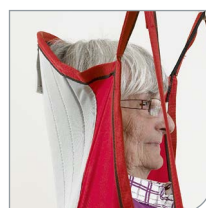


Mange alternativer

Seilene er tilgjengelige med høy rygg og medium rygg.

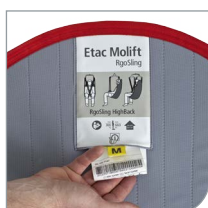

Vipp-opp merking

Klar og synlig informasjon for daglig bruk. Etiketten med vedlikeholdsinformasjon finnes bak hovedetiketten, som vippes opp.

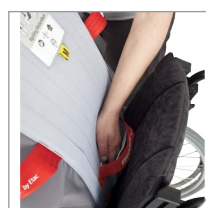


Påføringslomme på ryggen

Lomme på baksiden av ryggen letter påføringen av seilet.



Lomme på benstøtten


Lommen gir lett og behagelig påføring av benstøtten.

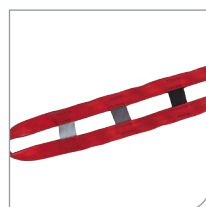

Fargekoder for enkel montering

Farge-kode-systemet på benstroppene gjør det enkelt å finne de riktige høydene, når stroppene skal festes på

Fargekoder størrelser

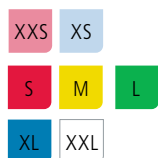

Vaskeanvisning, gjelder alle RgoSlings

