



Molift Smart 150

Compattezza e praticità: leggero, pieghevole e facile da trasportare, senza necessità di utensili.

Molift Smart 150 è progettato per trasferimenti su brevi distanze, ad esempio tra il letto e una sedia o il bagno. Grazie alla sua struttura compatta e al peso ridotto, può essere facilmente spostato e trasportato.

Le dimensioni contenute e l'elevata manovrabilità consentono di utilizzarlo con facilità anche in spazi ristretti. Ideale per l'assistenza domiciliare, Molift Smart 150 è perfettamente adatto a qualsiasi ambiente di cura.

L'ampia escursione di sollevamento garantisce un'eccellente altezza massima e consente il recupero del paziente direttamente dal pavimento. La barra di presa integrata a 4 punti assicura una posizione confortevole per l'utente. Molift Smart 150 può essere ripiegato in un unico blocco senza l'utilizzo di attrezzi, ideale per i viaggi e facile da riporre. Come accessori sono disponibili una borsa da trasporto e una valigia rigida.



Facile da manovrare

Il design leggero e compatto garantisce un'eccellente manovrabilità.




Barra di presa a 4 punti

Garantisce una posizione di sollevamento confortevole e spaziosa per l'operatore.



Pieghevole senza attrezzi

Pratico e facile da trasportare, è il compagno ideale anche in viaggio.

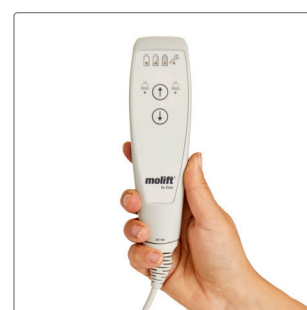

Pulsantiera

Robusto e lavabile, con indicatori per batteria, sovraccarico e manutenzione.

Caratteristiche

Impugnatura ergonomica

Il Molift Smart 150 è dotato di un'impugnatura, che offre diverse possibilità di presa per garantire maggiore flessibilità e migliorare l'ergonomia dell'operatore.

Vita utile

Il sollevatore ha una vita utile prevista di 30.000 cicli o 15 anni.

Batteria

La batteria utilizza l'avanzata tecnologia agli ioni di litio (Li-Ion) ed è dotata di un design sigillato e sicuro che ne consente il lavaggio (IPX6). Con un peso di soli 0,9 kg, può essere sostituita facilmente con una sola mano.

Ricaricabile direttamente sul sollevatore o tramite caricabatterie esterno. Tempo di ricarica: 3,5 ore. Una carica completa consente fino a 100 sollevamenti con un carico di 75 kg. Compatibile con tutti i sollevatori mobili Molift.

Durata prevista di 1.700 cicli di ricarica e garanzia di 3 anni per un'affidabilità a lungo termine.

Speed boost

La funzione Speed Boost consente di aumentare la velocità di sollevamento quando l'attuatore non è sottoposto a carico.

Pulsantiera


La pulsantiera di comando è robusta e affidabile. È dotata di indicatori del livello di carica della batteria, di sovraccarico e di manutenzione, per garantire prestazioni ottimali e la massima sicurezza.

Progettata per garantire la massima durata, la pulsantiera consente una facile sostituzione del cavo in caso di malfunzionamento ed è lavabile (IPX6).

Molift Service Tool

Come tutti i sollevatori Molift, anche Smart 150 è dotato di un sistema di notifica per la manutenzione, che segnala quando è necessario un intervento di assistenza. Il software integrato consente inoltre di visualizzare i dati di utilizzo e supporta i tecnici nelle attività di diagnostica e risoluzione dei problemi.

Inoltre, il sollevatore è dotato di connettività Bluetooth, che consente il collegamento wireless al Molift Service Tool.

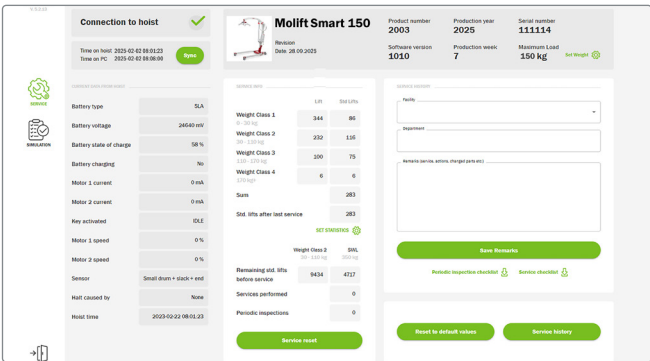

Prodotto		Codice	Materiali	
Molift Smart 150		M1020	Aluminio, acciaio, plastica	
Molift Borsa da trasporto		3049177	Dati tecnici	
Molift valigia rigida		0990200		
Peso			Batteria	Li-Ion 25.2V, 2.85Ah
Safe working load (SWL)		150 kg	Tempo di ricarica della batteria	3.5 hours
Peso ausilio (batteria inclusa)		26 kg	Velocità del sollevamento	63 mm/sec
Dimensioni			Prestazioni	100 hoists/75 kg/500 mm
Lunghezza		1200 mm	Lavaggio	
Altezza gambe		110 mm		
Dimensioni da chiuso		L1160 x W475 x H360 mm	    	
Escursione sollevamento		195-1665mm		
Sollevamento massimo		1470 mm	Pulire/disinfettare il prodotto utilizzando un detergente standard non abrasivo con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.	

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e per tutti gli aggiornamenti, visita il nostro sito.

Etac

+39 051 2819228
italia.ordini@etac.it
www.etac-it.com

etac®
Creating Possibilities