



etac®

Etac Xact

Per una vita attiva

Etac Xact

Pensata per tutti coloro che vogliono vivere la vita al massimo usufruendo di una carrozzina rigida, leggera e attiva, dotata di pedana swing away. Per giovani e anziani. Per chiunque appoggi i piedi a terra per i trasferimenti. Per ogni persona, con la propria conformazione fisica e la propria esigenza di stabilità. Xact è progettata per uno stile di vita attivo.



Unica nel suo genere

Lo schienale 3A rende Xact l'unica carrozzina superleggera dotata di regolazioni integrate per il controllo posturale. Xact è unica nel suo genere. Composta da un telaio rigido con pedana swing away in cui regolabilità della seduta, leggerezza e efficienza di spinta si combinano per inaugurare una nuova era.

Ability Based Seating™

Ogni persona ha una specifica conformazione fisica ed un particolare livello di abilità. La nostra filosofia consiste nell'individuare e valorizzare le capacità di ogni utilizzatore attraverso una regolazione accurata e una personalizzazione della carrozzina in base alle esigenze individuali. Questo approccio prende il nome di Ability Based Seating™.

Con le giuste modifiche, ognuno può beneficiare di una migliore postura, ridurre l'affaticamento, aumentare la tolleranza alla posizione seduta durante l'arco della giornata e rendere più efficienti le manovre e la spinta della carrozzina.



xact reasons

Per una vita attiva

Quando Xact viene regolata e perfezionata sulla base delle esigenze e delle abilità dell'utilizzatore, offre a quest'ultimo il potenziale per vivere la vita al massimo delle sue possibilità.

Xact è quella carrozzina che grazie a regolazioni, modifiche, accessori ed elementi opzionali garantisce una vita più attiva, contribuendo a esaltare le capacità individuali di ciascun individuo.

9.8

Leggera, a partire da un peso di 9,8kg con annessi gli accessori necessari per esigenze posturali. Unica nel suo genere.

3A

Tutti meritano una carrozzina premium. Ogni giorno, per uno stile di vita attivo. Lo schienale 3A si combina con le esigenze individuale in termini di conformazione fisica e supporto posturale. Regolabile e modificabile più volte nel tempo a seconda delle proprie necessità.



E ci sono tante altre configurazioni, opzioni e caratteristiche che contribuiscono a rendere Xact la sedia giusta per te oggi. E anche domani.

Schienale 3A per un supporto ottimale

Lo schienale 3A prende il suo nome da Altus, Altitudo e Angulus, i tre principali elementi regolabili.

Lo schienale 3A offre un supporto adeguato del bacino- la chiave per una postura stabile del tronco dal momento che influisce sulla curvatura della colonna vertebrale. Una seduta correttamente supportata ha effetti positivi sulla spinta e le prestazioni della carrozzina. Scopri tutte le possibili regolazioni dello schienale 3A e la semplicità con cui è possibile apportare modifiche.



Profondità

L'angolo tra schienale e seduta può essere regolato in base alla postura più corretta del bacino, oppure per persone con gambe più lunghe. Consente di adattare la profondità della seduta a esigenze diverse (modificabile di 8cm).



Altezza

Regolazione continua dell'altezza dello schienale, per adattarsi a ogni persona in ogni momento.

*con estensione dello schienale



Angolazione

La regolazione lombare consente di modellare il profilo dello schienale seguendo la curvatura naturale della spina dorsale, offrendo un supporto efficace per il bacino e la schiena.



Soluzioni Always Fit

La forma curva del profilo dello schienale 3A in combinazione con lo schienale tensionabile a cinghie e gli accessori Always Fit, quali supporti laterali, cunei, kit di ampliamento dello schienale ecc... consente di arrivare alla perfetta configurazione per il supporto necessario ad ogni utilizzatore.



Caratteristiche



Altezza della seduta

L'altezza della seduta può essere regolata e adattata facilmente al variare delle esigenze, sia per lo stesso utilizzatore che per uno nuovo. Per info su regolazioni e aspetti da considerare consultare il manuale d'uso. Regolabile in altezza di 10cm.



Compatta e leggera

Compatta da piegata, con un peso trasportabile di soli 5,4kg, Xact è leggera e semplice da portare dovunque tu voglia.



Propulsione

Configurazione ottimale e peso ridotto permettono a Xact di ridurre lo sforzo di spinta. Lo schienale 3A e il posizionamento dell'asse posteriore bilanciano il peso, migliorando l'efficienza di propulsione.



Pedana leggera

La pedana swing-away pesa 200 g in meno. Si ruota o si rimuove per facilitare passaggi in piedi e brevi spostamenti con la spinta dei piedi. Quando non in uso, resta in verticale su superfici piane, pronta all'uso.

Opzioni



Profondità della seduta

Sono applicabili due profondità grazie a due cerniere. Le regolazioni dello schienale-seduta 3A e del supporto lombare garantiscono una continua versatilità. Profondità standard: 38-46cm. Profondità ridotta: 35-43cm.




Corrimano

Sono in alluminio duro e sono leggeri e resistenti. Per una presa più sicura, è possibile scegliere un rivestimento in plastica. Sono tutti dotati di un distanziale regolabile che consente di impostare la corretta distanza ruota/corrimano.



Ruote posteriori

Le ruote posteriori Maxx, grazie al loro design e ai materiali di alta qualità offrono maggiore rigidità ed una risposta più efficiente alla spinta. Le ruote posteriori C6 sono disponibili come opzione qualora sia richiesta un'altezza della seduta ridotta.

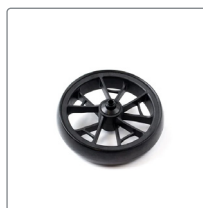

Ruote anteriori

La nostra ruota anteriore più leggera, la 5" (125x28mm), è dotata di un esclusivo sistema di protezione e di un robusto pneumatico in poliuretano. Ruote da 4" o da 6" sono disponibili come opzione extra, in base all'altezza della seduta.



Pneumatici

Scegli tra pneumatici ad alta pressione con battistrada liscio per una minore resistenza al rotolamento, o pneumatici ad alta pressione con una maggiore protezione dalle forature.



Freni

Freno a forbice studiato per non ostacolare i trasferimenti. Tra le opzioni ci sono il freno a leva con impugnatura angolata, che offre una superficie di presa più ampia, il freno monolaterale a una mano ed il freno per accompagnatore.

Accessori



Braccioli corti

Leggeri con un pad robusto da 25cm. rimovibile e regolabile in altezza da 23 a 29cm a partire dal telaio della seduta.

Active L25 R..... Codice.no. 28855-1
Active L25 L..... Codice.no. 28855-2



Braccioli lunghi

Leggeri con un pad robusto da 38cm. rimovibile e regolabile in altezza da 23 a 29cm a partire dal telaio della seduta.

Active L38 R..... Codice.no. 28856-1
Active L38 L..... Codice.no. 28856-2

Accessori



Maniglie di spinta fisse

Montate ai lati dello schienale 3A, con una presa corta di 7,5cm.

Fisse codice.no. 28875



Maniglie di spinta regolabili in altezza

Regolabili in altezza fino a 15cm, con una presa corta di 7,5cm.

Active reg. altezza codice.no. 28873



Maniglia di spinta swing away

La maniglia può essere ruotata verso destra o verso sinistra, si blocca a 0° e a +/- 45°. Regolabile in altezza.

Maniglia swing away Codice.no. 24591



Pedana unica

Ripiegabile e regolabile in altezza ed inclinazione.

Profondità seduta 35-37,5..Codice.no. 25936

Profondità seduta 40-50.....Codice.no. 25937




Pad di supporto per amputazioni

Compatibile sia sul lato destro che sul sinistro (reversibile). Rivestimento: tessuto dark grey plush o black hygiene.

Dark grey plush, 35-50...Codice.no. 25516-60

Black hygiene, 35-50.....Codice.no. 25516-63

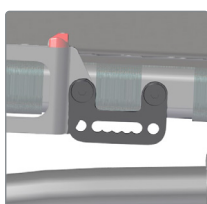

Attacco per cintura pelvica

Accessorio per il montaggio di cinture a 2 e 4 punti. Fornito in coppia per l'installazione su entrambi i lati.

Attacco cintura pelvica.....Codice.no. 28933



Portastampelle

Supporto per stampelle e bastoni da passeggio composto da due parti: una coppa di sostegno e una fascetta di fissaggio.

Destro/sinistro.....Codice.no. 28932



Antiribaltamento

Swing away, può essere attivato o disattivato direttamente dall'utilizzatore.

Ant. 1 post. 37-39.....Codice.no. 24163-1/-2

Ant. 2 post. 40-41,5.....Codice.no. 24164-1/-2

Ant. 3 post. 42,5-45.....Codice.no. 24165-1/-2

Ant. 4 post. 46-47,5.....Codice.no. 24166-1/-2



Parafanghi / Fianchetti

Regolabile in altezza, profondità e inclinazione. In fibra di carbonio.

S cpl destra/sinistra....Codice.no. 24091-1/-2

M cpl destra/sinistra....Codice.no. 24092-1/-2

L cpl destra/sinistra....Codice.no. 24093-1/-2



Protezioni laterali

Protezioni laterali rimovibili e regolabili in profondità. Pelotte laterali rimovibili e regolabili in altezza.

destra Codice.no. 24592-1

sinistra Codice.no. 24592-2



Copriraggi

Per ruote con 6 attacchi per il corrimano.

Visita il sito per alternative compatibili con ruote dotate di freno per accompagnatore.

20" Codice.no. 28934

22" Codice.no. 28935

24" Codice.no. 28936



Monoguida


Visita il sito per scoprire misure e compatibilità.



Schienali Axiom

La gamma completa di schienali che garantisce la scelta più adatta per ogni esigenza di postura e seduta. Visita il sito per scoprire misure e compatibilità

Kit di assemblaggio Codice.no. 24046

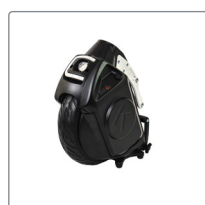

Staffa di montaggio Klaxon

Per l'utilizzo in combinazione con i dispositivi di assistenza alla propulsione Klaxon.



Modello Xact	Codcie No.	Portata massima	Lunghezza totale	Profondità seduta	Peso	Peso trasporto
Standard 35 cm	13250101	100 kg	55 cm	38 - 46 cm	9.8 kg	5.4 kg
Short 35 cm	13250102	100 kg	55 cm	35 - 43 cm	9.8 kg	5.4 kg
Standard 37.5 cm	13250103	100 kg	57.5 cm	38 - 46 cm	9.9 kg	5.5 kg
Short 37.5 cm	13250104	100 kg	57.5 cm	35 - 43 cm	9.9 kg	5.5 kg
Standard 40 cm	13250105	100 kg	60 cm	38 - 46 cm	10 kg	5.6 kg
Short 40 cm	13250106	100 kg	60 cm	35 - 43 cm	10 kg	5.6 kg
Standard 42.5 cm	13250107	100 kg	62.5 cm	38 - 46 cm	10.1 kg	5.7 kg
Short 42.5 cm	13250108	100 kg	62.5 cm	35 - 43 cm	10.1 kg	5.7 kg
Standard 45 cm	13250109	135 kg	65 cm	38 - 46 cm	10.3 kg	5.8 kg
Short 45 cm	13250110	135 kg	65 cm	35 - 43 cm	10.3 kg	5.8 kg
Standard 47.5 cm	13250111	135 kg	67.5 cm	38 - 46 cm	10.4 kg	5.9 kg
Short 47.5 cm	13250112	135 kg	67.5 cm	35 - 43 cm	10.4 kg	5.9 kg
Standard 50 cm	13250113	135 kg	70 cm	38 - 46 cm	10.4 kg	6 kg
Short 50 cm	13250114	135 kg	70 cm	35 - 43 cm	10.4 kg	6 kg

I pesi e le dimensioni riportate si riferiscono ad una carrozzina con schienale 3A, ruote posteriori Maxx da 24" con pneumatici ad alta pressione corrimano di spinta in alluminio, freni a forbice, forcelle anteriori Alu S con ruote anteriori 5" 125x28, pedana e appoggiatesta Active con tubo di attacco corto. Peso di trasporto come nella tabella sopra ad esclusione delle ruote posteriori e la pedana. Le misure riportate possono variare più o meno del 2%.

Altezza seduta anteriore
40,5 - 50,5 cm (15¾-19,9")

Altezza seduta posteriore
37,5 - 47,5 cm (14¾-18¾")

Schienale
Angolo schienale-seduta da -14° a 11°
Altezza schienale 32-45cm,
6cm con prolunga schienale
Angolo lombare +/-16°

Larghezza di trasporto
Larghezza seduta + 18 cm (7")

Lunghezza totale
83 (32½") - 93 cm (36½")

Inclinazione seduta
4°
Campanatura
2,2° (o 0° solo come pezzo di ricambio)

Storie

Agneta

La vita è sempre stata sinonimo di attività e relazioni. Seduta sulla carrozzina da molti anni. Non ha mai lasciato che le difficoltà legate alla mobilità ostacolassero il suo modo di vivere. Che si tratti di svolgere faccende quotidiane, fare la spesa settimanale, o uscire per incontrare la sua cara amica Elisabeth per un caffè e una chiacchiera, Agneta è riuscita a trovare la libertà di movimento.



Matilda

20 anni e piena di energie, Matilda è una forza della natura. Carismatica e determinata, affronta la vita con un entusiasmo contagioso. Che si stia allenando in palestra con sua mamma, o che si metta alla prova davanti al suo personal trainer Emil, Matilda sa come rendere ogni momento degno di essere vissuto.



Guida per modificare l'altezza della seduta

Etac Xact è altamente configurabile, e offre nove differenti altezze di seduta, facilitando l'accesso dell'utilizzatore alle ruote posteriori e ottenere l'altezza più adeguata per i trasferimenti. Ruote posteriori, attacchi per ruote posteriori, forcelle anteriori, ruote anteriori e antiribaltamento possono essere cambiati sulla base dell'altezza seduta scelta.


Modificare l'altezza della seduta è semplice. Prima di cominciare:

L'inclinazione della seduta è fissa a 4°, con un'altezza della parte frontale della seduta di 3 cm più alta rispetto a quella posteriore. Per la perfetta configurazione è opportuno consultare la tabella delle altezze seduta, dove troverete le perfette combinazioni di forcelle anteriori, ruote anteriori e posteriori. Alcune altezze sono compatibili con diverse configurazioni, altre si adattano ad una sola soluzione ottimale.



Modifica misura ruote anteriori

C Scegli la misura delle ruote anteriori (4", 5", o 6") Sulla base dell'altezza della seduta desiderata. La ruota più leggera è la 5" 125x28.

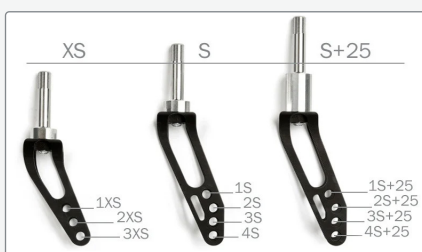

Modifica forcelle anteriori

La scelta dell'altezza seduta e delle ruote anteriori determina la giusta forcella anteriore (XS, S, or S+25) e la posizione di quest'ultima.




Regolazione della posizione della ruota anteriore nella forcella

La distanza tra le posizioni della forcella è di 12,5mm.




Modifica misura ruota posteriore

Scegli la ruota posteriore (20", 22", 24", or 25") sulla base dell'altezza seduta desiderata, è opportuno considerare la distanza tra la seduta ed il corrimano in caso la mobilità della spalla fosse limitata.

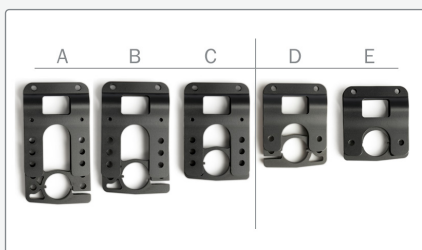

Modifica attacco dell'asse posteriore

L'altezza seduta e la ruota posteriore scelte determinano il tipo di attacco necessario (A-E, con posizione A-C nell'attacco alto, e D-E nell'attacco standard).

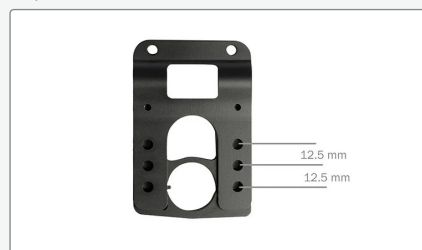

Regolare la posizione della ruota posteriore nell'asse di attacco

è possibile scegliere tra attacco standard o high. La distanza tra le posizioni è di 12,5mm.



Scelta dell'antiribaltamento

La scelta dell'altezza seduta determina il modello ottimale di antiribaltamento (1, 2, 3, or 4).

Tabella altezza seduta



		4"	5"	6"	20"	22"	24"	25"	Model
375	405	1XS			E				1
388	418	2XS			D				1
400	430	3XS	1S		C	E			2
413	443		2S		B	D			2
425	455		3S	2S	A	C	E		3
438	468		4S	3S		B	D	E	3
450	480		3S+25	4S		A	C	D	3
463	493		4S+25	3S+25			B	C	4
475	505			4S+25			A	B	4

Le dimensioni sopra riportate hanno una tolleranza di +/- 10mm.

Sono disponibili più combinazioni di quelle riportate.





Etac è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti.

Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorano la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei suoi caregivers.

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web.

Etac



+39 051 2819228



italia.ordini@etac.it



www.etac-it.com

etac[®]
Creating Possibilities