



R82[®]

x:panda shape

Designet for å passe barnets individuelle behov

Designet for individuelle behov

x:panda shape er skapt for å gi en best mulig sittestilling der barnet ditt kan leve livet fullt ut. Den er designet for å endre form etter hvert som barnet utvikler seg, og kan justeres i setebredde og -dybde samt ryggbredde og -høyde for å sikre en skreddersydd passform med høy komfort. På den måten skaper den alltid en stabil sittestilling der barnet kan samhandle og delta i livet på en mest mulig selvstendig måte.



Unik dynamisk rygg

x:panda shape har en unik, dynamisk ryggfunksjon. Motstanden forblir konstant når ryggen lenes bakover. Med justerbar dynamisk rygg er det mulig å endre motstanden daglig eller etter hvert som barnet vokser, avhengig av individuelle behov.


x:panda shape er utviklet med spesiell oppmerksomhet på ryggstøttens omdreiningpunkt i forhold til setet. Målet har vært å skape et setesystem som beveger seg i harmoni med kroppen. Den dynamiske ryggen gjør at barnet kan strekke seg og skyve seg bakover med riktig motstand og deretter komme tilbake til den opprinnelige sittestillingen.



Bygget for vekst

Setesystemets mange justeringsmuligheter og vekstfunksjoner gjør det mulig å justere benstøtten, rygg høyden og både setebredden og -dybden individuelt slik at den kan tilpasses barnets vekst.

x:panda shape er svært konfigurert og gir skreddersydd støtte for å passe til individuelle behov. Den kan brukes ved svært komplekse sittestillinger; den kan være en enkel aktivitetsstol, og den kan være alt annet imellom.

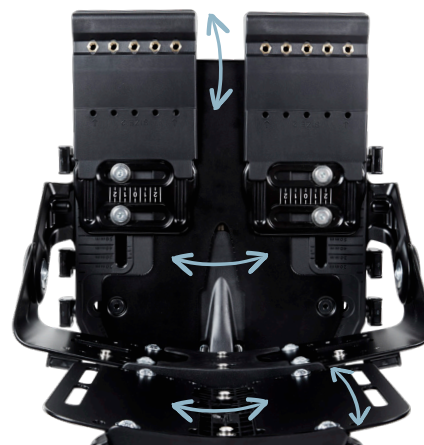

Småbarn – enkel eller avansert sittestilling

Setebasen på x:panda shape er grunnlaget for å bygge seter for småbarn, enkle eller avanserte seter. Designet for å endre form og vokse med barnet.



Setegrop

Setekiler skaper kontur i setet og forbedrer funksjonen og trykkfordelingen. Kilene gir bekkenet stabilitet og kontroll gjennom optimal posisjonering og hindrer at bekkenet vinkles bakover. Kilene kan justeres i lengden, slik at de passer barn i vekst. Kun tilgjengelig for avanserte seter.




Støtter tidlig intervensjon

Babusetet gir støtte til spedbarn og gir dermed mulighet for tidlig intervensjon og tilrettelegging for barnets deltakelse og sosiale samhandling med foreldre, omsorgspersoner og miljøet.

Sittesystemet er designet for å gi en komfortabel, sikker og omsluttende passform selv for de minste barna. Sittesystemet og tilbehør kan justeres og støtte den ønskede sittestillingen.

Et hjelpemiddel som x:panda shape kan brukes til å støtte og la barnet utfordre og utvikle sine kognitive, sosiale, emosjonelle, tale- og språkferdigheter samt fin- og grovmotorikk.

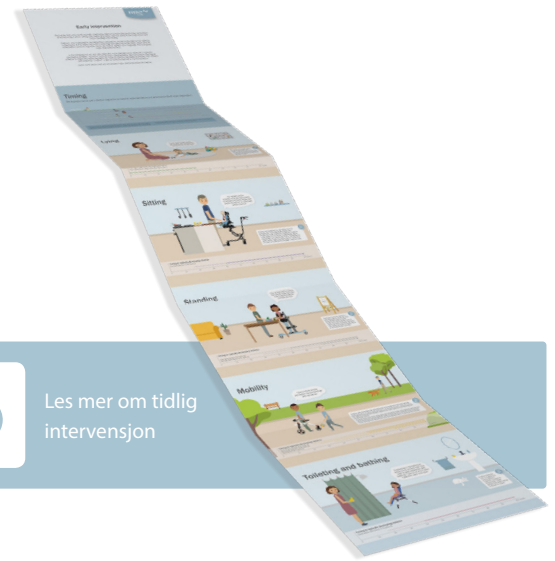


Les mer om tidlig intervensjon



Komfort i flere lag

Putene består av to lag skum: skum i selve puten og et ekstra lag skum sydd på trekket. Dette bidrar til bedre trykkfordeling og komfort for brukeren.

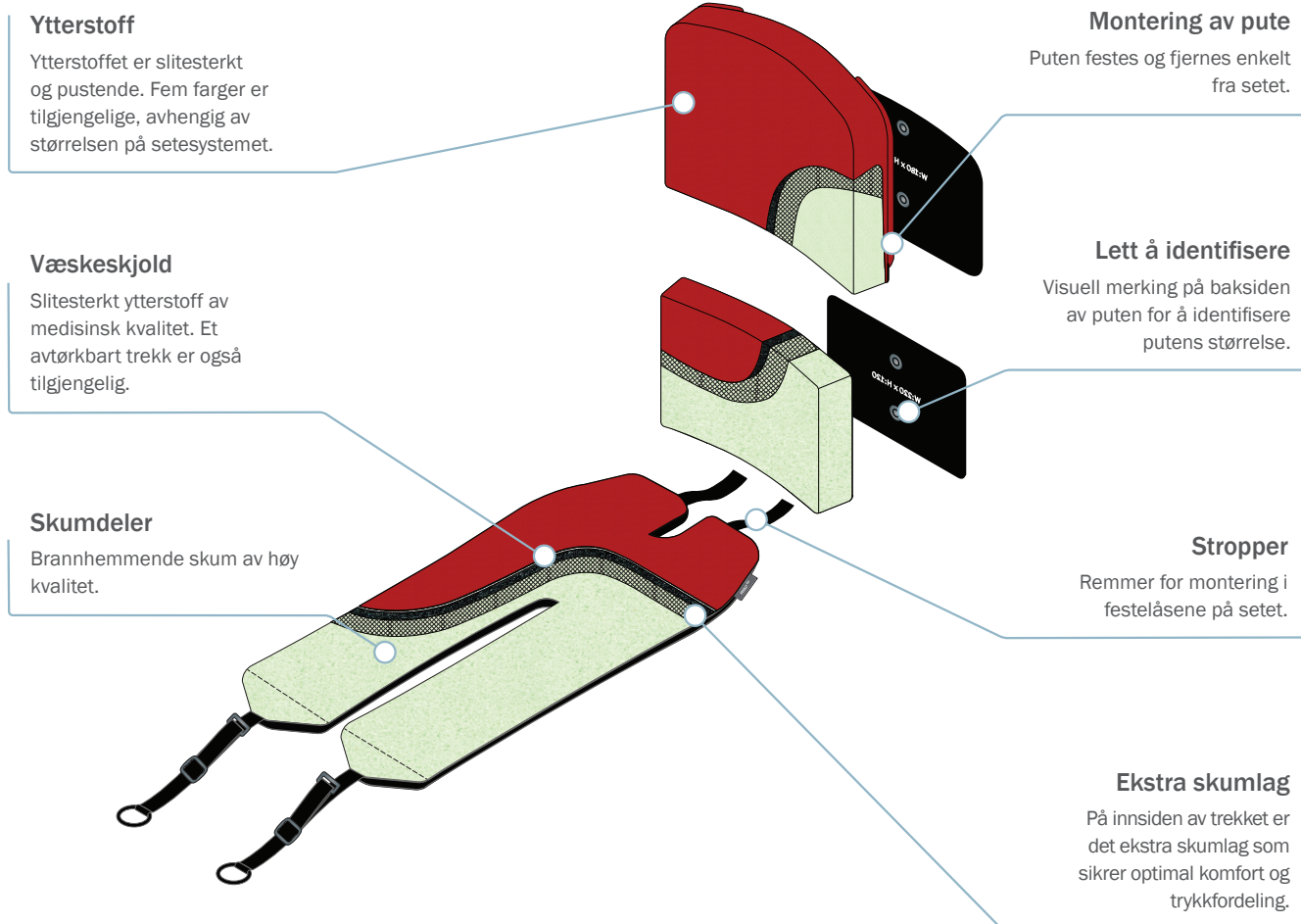

Fargevalg rygg- og setepute



Rosa*

Lyseblått*

Grått

Sort, avtørkbart

*Kun tilgjengelig for spedbarn-/infantilsete

Fargevalg tilbehør



Sort, avtørkbart

Sort

Egenskaper

For de fleste barn og unge kan en god og behagelig sittestilling bidra til å gjøre det lettere å bevege overekstremitetene og hodet. En rekke ulike funksjoner er utviklet for å skape en mest mulig tilpasningsdyktig sittestilling i tråd med den enkelte brukers sittebehov.

Hodestøtte

Et bredt utvalg av hodestøtter, inkludert en ny 3D-tilpasning og en komfortabel, buet pute. Gir mange muligheter for individuell støtte ved hvile eller aktivitet.

Faste eller utsvingbare sidestøtter

Utsvingbare eller faste sidestøtter velges basert på barnets kroppskontroll og evne til å utføre armbevegelser.

Puter og trekk

Komfortable puter med slitesterke trekk for sete- og ryggputer, sidestøtter, hoftestøtter og knestøtter.

Justerbare setekiler

Kilene gir bekkenet stabilitet og kontroll gjennom optimal posisjonering og hindrer at bekkenet vinkles bakover.

Understell

x:panda shape passer til en rekke understell til både innendørs og utendørs bruk.

Vester og belter

De mange festelåsene på ryggen og setet på x:panda gjør det mulig å montere vester og belter.

Armlen

Det enkle festesystemet gjør det enkelt å montere og demontere armlenet. Markeringene bidrar til å sikre at armlenet monteres i samme høyde igjen etter at det er fjernet. Armstøttene kan leveres med trekk.

Hofte- og bekkenstøtter

Danner en støtteflate som hindrer laterale bevegelser i setet og reduserer tendensen til at bekkenet vipper til siden. Både hofte- og bekkenstøtten kan justeres mens brukeren sitter i setet.

Innvendig og utvendig knestøtte

Gir stabilitet i ved å støtte nedre delen av låret, innsiden av kneet og den øvre delen av leggen.

Fotstøtter

Ulike fotstøtter er tilgjengelige for montering på understellene som brukes til x:panda shape.



Gå til videospillelisten for
x:panda shape



Visuell merking

x:panda shape kan dekke kompliserte behov og gi barnet en pålitelig og optimal posisjonering. x:panda shape har visuelle merker for å gjøre det lettere for foreldre, pleiere og spesialister å justere.




Ryggstøttens utvendige overflate

Disse visuelle markeringene kan brukes til å identifisere ryggstøttens vinkel, ryggghøyde og høyde på hodestøtten.



Ryggstøttens innvendige overflate

Disse visuelle markeringene gjør det lettere å identifisere størrelsen på ryggstøtten og justere nedre og øvre del av ryggen.

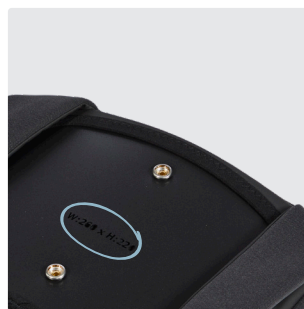

Størrelsesmerking på pute

Visuell merking på baksiden av puten for å identifisere størrelsen på puten, som tilsvarer størrelsen på ryggen til setesystemet.



Transportlås

Enkel identifisering av låsen på den dynamiske ryggen, som må brukes hvis setet brukes til transport i motorkjøretøy.




Seteflate

Enkel identifisering av dybdemål og bredden på seteunderstellet.



Avanserte seteplater

Visuell merking av posisjonen til de avanserte seteplatene og posisjonen til de innvendige og utvendige knestøttene.

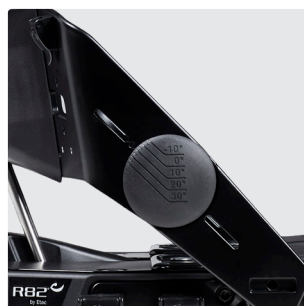

Vinkel ryggstøtte

Enkel identifisering av vinkelen til ryggstøtten.



Motstand i den dynamiske ryggen

Justerbar dynamisk rygg gjør det mulig å justere










Rengjøring og vedlikehold

Bruk, rengjøring og vedlikehold av x:panda shape er enkelt og praktisk og gir foreldre og omsorgspersoner mer tid til å engasjere seg i mer interessante aktiviteter. Trekkene kan enkelt tas av for vask.



Se vår rengjøringsguide for x:panda shape

Mål

		Spedbarn	+1	+2	+3
	Effektiv setebredde	220 mm	220/260/300 mm	280/320/360/400 mm	380/420/460/500 mm
	Effektiv setedybde	120-160 mm	160-320 mm	240-420 mm	350-550 mm
	Høyde ryggstøtte	270-360 mm	280-370/320-420/360-470 mm	340-440/380-490/430-560 mm	420-530/470-600/540-690 mm
	Maks. brukervekt	35 kg	35 kg	65 kg	90 kg
	Maks. brukervekt under transport	35 kg	35 kg	65 kg	90 kg
	Vinkel ryggstøtte	-10° - 30°	-10° - 30°	-10° - 30°	-10° - 30°
	Ryggbredde, målt øverst på ryggstøtten	190 mm	180/220/260/300/340 mm	180/220/260/300/340/380 mm	220/260/300/340/380/420 mm
	Total bredde	240 mm	300/400/500 mm	350/460/560/660 mm	600/700/740/780 mm
	Vekt	6 kg	6,5 kg	11 kg	14 kg

Målinger utført med begge ben ved maks abduksjon. Målene i størrelse 1-3 er basert på avanserte seter. Flere mål på etac.no

Du finner flere mål på etac.no

Utvalg av understell for individuelle behov

x:panda shape skaper en stabil base for bekkenet, lårene og føttene, som overkroppen, skulderen og hodet balanserer på. Dette gjør det mulig å bevege hodet, armene og hendene. Den kan imøtekomme komplekse krav og gir barnet en stabil og optimal posisjon. I tillegg

er justeringene intuitive og enkle å utføre. Avhengig av størrelsen kan setet monteres på ulike understell, som Multi Frame, Combi Frame og understellene angitt nedenfor.




High-low:xo innendørs- og utendørs



Stingray




Combi Frame:x, Multi Frame:x og Multi Frame

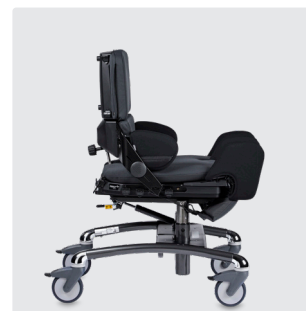

Strong Base

Tilbehør

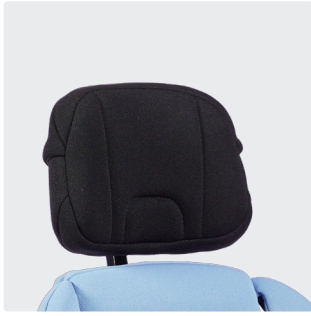

Hodestøtter

Se flere varianter på etac.no



Brystbelte til spedbarnssete, inkl. trekk




Skyvehåndtak for øvre del av ryggen



Kalesje

Krever braketter til beskyttelsestrekk

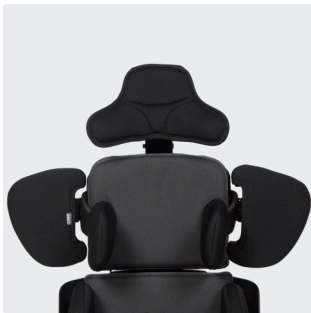

Justerbare eller faste overarmstøtter




Faste eller utsvingbare sidestøtter

Se flere varianter på etac.no



Holder for fjernkontroll, øvre del av rygg eller

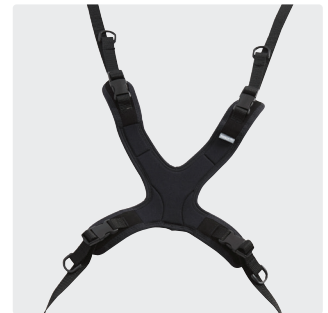

Vest og belter

Se flere varianter på etac.no



Beslag til skuldersele, bredere



Beslag til skuldersele, høyere



Slanger til behandlingssett og avstandskloss med pute og trekk



Dynamisk ryggstøttemodul



Mykt bord for spedbarnssete



Bord
Se flere varianter på etac.no



Gripehåndtak til bord



Lekebøyle



Bekkenstøtter




Hoftestøtter



Innvendig og utvendig knestøtte




Abduksjonskloss

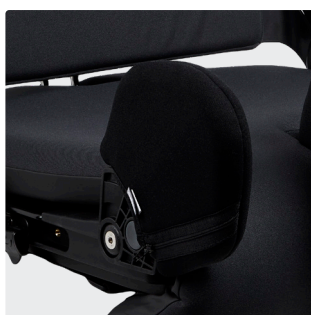

Nedfellbar utvendig knestøtte



Sittekiler

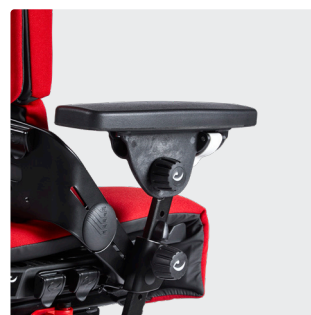

Armlen og justeringskit



Brakett for kommunikasjonshjelpemiddel

For mer tilbehør – se etac.no



B9501.1.0 | xpana shape brochure - Global NO | 2023 | Vitar forbehold om trykfeil eller utgåtte produkter.
Du finner en oppdatert utgave på vårt nettsted etac.no © R82 A/S Med enerett.

Etac er en verdensledende utvikler av innovative hjelpemidler og pasienthåndteringsutstyr. Siden 1973 har vi arbeidet for å forbedre livskvaliteten for enkeltpersoner, familiemedlemmer og pleiere.

For tiltenkt bruk av produktene og oppdatert informasjon, gå til www.etac.no

R82 A/S

+45 79 68 58 88

R82@etac.com

www.etac.com

etac[®]
Creating Possibilities