



R82®

Chilla

Progettato per migliorare il comfort, la stabilità e la sicurezza del tuo bambino

Progettato per l'avventura

Il sistema di seduta R82 Chilla è stato progettato per garantire al tuo bambino una posizione di seduta sicura e confortevole. Per le tue avventure in famiglia, per scoprire la città o per esplorare la natura.

La seduta di Chilla può essere posizionata sia fronte-strada che fronte-mamma, così che il bambino possa osservare il mondo che lo circonda o avere la sicurezza dello sguardo dei suoi genitori.

In base alle tue necessità puoi decidere di chiudere il sistema con tutti gli accessori montati o se hai uno spazio limitato separare la seduta dalla base.



Crescita e supporto personalizzato

Chilla è progettato per garantire comfort, stabilità e sicurezza al tuo bambino. E' stato pensato e realizzato con attenzione ai dettagli, con una grande varietà di accessori per garantire una seduta personalizzata.

Chilla cresce insieme al tuo bambino, adattandosi alle sue esigenze e ai cambiamenti durante gli anni. La seduta è regolabile in profondità e lo schienale regolabile in altezza, unite alla grande varietà di accessori disponibili, può essere utilizzato per molto tempo.

Con il suo design innovativo e grazie ai numerosi accessori, riusciamo a garantire sia funzionalità che praticità. Puoi portare con te tutto ciò di cui hai bisogno senza rinunciare ad un adeguato supporto, comfort e protezione dagli agenti atmosferici. Chilla garantisce praticità e comodità per ogni avventura all'aperto!



Comfort e sicurezza

Progettato avendo in mente comodità e sicurezza. Chilla ha superato i crash test ed è conforme alla normativa ISO 7176-19 per il trasporto in auto.

Tutto quello di cui hai bisogno sono i dispositivi di fissaggio per il trasporto, in modo da assicurare Chilla al veicolo... sei pronto per una nuova avventura in famiglia!

Chilla ha delle imbottiture morbide e confortevoli, con 3 cm di spessore! La combinazione di imbottiture comode, cinture, pettorine e sospensioni regolabili garantiscono un viaggio sicuro!

Regolazioni senza chiavi per l'uso di tutti i giorni

Chilla è progettato tenendo in considerazione anche le necessità del caregiver, infatti, la reclinazione dello schienale avviene senza l'utilizzo di chiavi.

Puoi passare facilmente dalla posizione seduta a quella sdraiata. Grazie al basculamento e alla reclinazione dello schienale si riduce l'effetto della gravità, aiutando così il bambino a conservare le energie per le sue attività di gioco durante la giornata.

La seduta di Chilla può essere posizionata sia fronte-strada che fronte-mamma, in modo tale che il bambino possa osservare il mondo che lo circonda, o avere la sicurezza dello sguardo dei suoi genitori. Puoi invertire il sistema di seduta attraverso la leva del basculamento posizionata dietro lo schienale.



Pronto per l'avventura

La base Chilla ha come accessorio sospensioni regolabili che possono garantire molti benefici e migliorare la stabilità quando si affrontano terreni accidentati. Assorbono vibrazioni garantendo un viaggio più comodo e sicuro.

Le sospensioni di Chilla permettono il cosiddetto smorzamento reale, conosciuto anche come smorzamento critico. Questo si riferisce alla velocità con la quale il sistema ritorna alla posizione di equilibrio, senza rimbalzi.

Una volta che le sospensioni sono in carico queste ritorneranno alla loro posizione originale in maniera fluida, permettendo un viaggio più comodo e rilassante per il bambino anche su terreni accidentati.

Le sospensioni possono essere regolante in precarico agendo sulla molla, grazie a tre settaggi previsti.

Si possono così adattare alle esigenze del bambino e dello spazio circostante, in quanto il peso dell'utente, il terreno e le diverse attività richiedono differenti regolazioni in precarico.

Questo implica che, ad esempio, se state trasportando una bombola di ossigeno agganciata a Chilla, il carico presente su quel lato del passeggino sarà maggiore che sull'altro. Con le sospensioni regolabili, potrai livellare il carico, rendendo quindi più semplice manovrare il passeggino sulle diverse tipologie di terreno.

Adatto per l'esterno

Chilla è la tua scelta per affrontare ogni nuova avventura all'aperto insieme a tutta la famiglia.

Le ruote di Chilla sono disponibili in due tipologie: piene e pneumatiche. Nel decidere per quale tipo di ruote optare, è fondamentale valutare i pro e i contro in base all'utilizzo che si farà del passeggino.

Le ruote piene offrono un vantaggio eliminando fastidiose forature, mentre le ruote pneumatiche migliorano il comfort del bambino, garantendo un migliore assorbimento delle asperità.

Chilla è equipaggiato per affrontare qualsiasi condizione del meteo. E' disponibile una copertura antipioggia per proteggere da vento, pioggia e neve. In aggiunta, si può optare tra una cappottina parasole standard ed una premium, per aumentare la versatilità e la protezione. La cappottina protegge dal sole e dal vento, ma è pensata anche per ridurre gli stimoli visivi e uditivi esterni, che potrebbero infastidire il bambino. La cappottina premium dotata di un sistema di areazione, che funge anche da finestrella, aiuta i genitori a controllare il bambino e il bambino ad esplorare il mondo che lo circonda.

Cappottina parasole standard



Cappottina parasole premium



Posizione sollevata


Semi-aperta

Semi-aperta, con finestrella aperta

Vita all'aperto e gioco multisensoriale

Ricerche hanno dimostrato che il contatto e l'interazione con la natura migliorano la qualità di vita, aumentando i livelli di concentrazione e riducendo lo stress. Promuovono inoltre uno stato emotivo positivo, aumentando l'energia e migliorando la concentrazione.

Il gioco multisensoriale, dove i bambini possono tastare, annusare, ascoltare e vedere i vari aspetti della natura, aiutano a stimolare lo sviluppo delle loro abilità cognitive e sensoriali. Queste esperienze non solo favoriscono una connessione più profonda con la natura circostante, ma supportano anche la crescita globale del bambino, fisica, cognitiva ed emotiva.

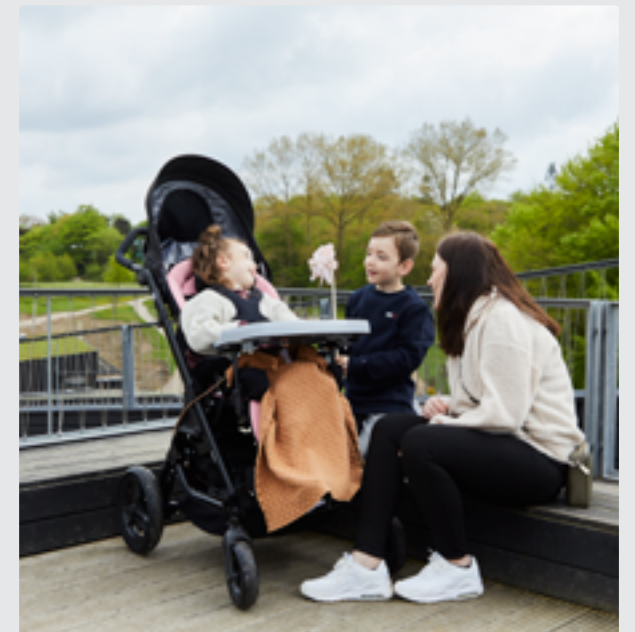

Misure

		1 Standard	1 Sospensioni	2 Standard	2 Sospensioni
	Larghezza seduta	330 mm	330 mm	380 mm	380 mm
	Profondità seduta	180-340 mm	180-340 mm	240-420 mm	240-420 mm
	Alteza schienale con supporto per il capo	505-665 mm	505-665 mm	620-810 mm	620-810 mm
	Alteza schienale senza supporto per il capo	365-525 mm	365-525 mm	420-610 mm	420-610 mm
	Alteza superficie seduta anteriore	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
	Portata massima	43 kg	43 kg	60 kg	60 kg
	Peso massimo utilizzatore	35 kg	35 kg	50 kg	50 kg
	Portata massima omologata per il trasporto	35 kg	35 kg	50 kg	50 kg
	Alteza totale, maniglia di spinta	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
	Lunghezza totale	730 mm	760 mm	730 mm	760 mm
	Larghezza totale	600 mm	620 mm	660 mm	680 mm
	Lunghezza da chiusa	1035 mm	1035 mm	1035 mm	1035 mm
	Alteza da chiusa	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
	Peso dispositivo (seduta + base)	9,2 kg	9,7 kg	9,5 kg	10 kg
	Peso dispositivo (solo seduta)	5,3 kg	5,3 kg	6,3 kg	6,3 kg

*Further measurements can be found online.

Un tocco di colore



Imbottitura grigia

Per misura 1 e 2 - anche in versione mesh.



Imbottitura rossa

Per misura 1 e 2 - anche in versione mesh.



Imbottitura blu

Per misura 1 e 2 - anche in versione mesh.



Imbottitura rosa

Solo per misura 1.

Caratteristiche principali

Chilla è una scelta ovvia per affrontare ogni nuova avventura all'aperto insieme a tutta la famiglia. E' stata sviluppata una grande varietà di accessori e funzioni, per garantire ad ogni bambino un supporto personalizzato mentre esplora il mondo con Chilla.

Comfort e sicurezza

Progettato avendo in mente comodità e sicurezza. Chilla ha superato i crash test ed è conforme alla normativa ISO 7176-19 per il trasporto in auto. Tutto quello di cui hai bisogno sono i dispositivi di fissaggio per il trasporto, in modo da assicurare Chilla al veicolo... sei pronto per una nuova avventura in famiglia!

Adatto per l'esterno

Chilla è equipaggiato per affrontare qualsiasi condizione del meteo. E' disponibile una copertura antipioggia per proteggere da vento, pioggia e neve. In aggiunta, si può optare tra una cappottina parasole standard ed una premium, per aumentare la versatilità e la protezione.

Sospensioni regolabili

Chilla è disponibile anche nella versione con sospensioni regolabili montate sulla base. Queste permettono il cosiddetto smorzamento reale, facendo sì che, una volta che le sospensioni sono in carico, queste ritorneranno alla loro posizione originale in maniera fluida e senza rimbalzo.

Intervento precoce

L'imbottitura seduta Infant, disponibile per la seduta misura 1, garantisce confort e stabilità ai più piccoli. L'intervento precoce facilita la partecipazione del bambino alle attività quotidiane, incrementa le interazioni sociali con i genitori, i care-giver e l'ambiente che lo circonda.

Facile da trasportare

In base alle tue necessità puoi decidere di chiudere il sistema di seduta con tutti gli accessori montati o se hai uno spazio limitato separare la seduta dalla base.

Passeggiata o pisolino?

Chilla è dotato di basculamento e per azionare la leva, posizionata dietro lo schienale, puoi usare una sola mano anche con il bambino seduto sopra perchè è stato progettato con il fulcro del basculamento nel centro dell'asse di rotazione. Questo permette, con un minimo sforzo di attivazione, un movimento estremamente fluido.

Crescita e supporto personalizzato

Chilla si adatta facilmente ad ogni situazione grazie alla regolazione della profondità della seduta e dell'altezza dello schienale. Se, invece, hai bisogno di regolare la larghezza della seduta o dello schienale, puoi aggiungere i supporti bacino o le pelotte laterali per creare una posizione comoda e sicura. Questa versatilità permette al tuo bambino di godersi una seduta stabile, promuovendo l'interazione e la partecipazione alle attività quotidiane con tutta la famiglia.

Imbottiture e rivestimenti


Le imbottiture di Chilla sono disponibili in quattro colorazioni: grigio, rosso, blu e rosa. La colorazione rosa è disponibile solo per la misura 1. Per la colorazione grigia, blu e rosso sono disponibili anche le imbottiture mesh per offrirti una seduta ancora più morbida.




Vai alla playlist dei video di Chilla




Accessori

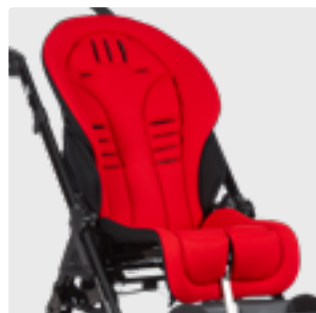

Seduta Chilla
8810xx

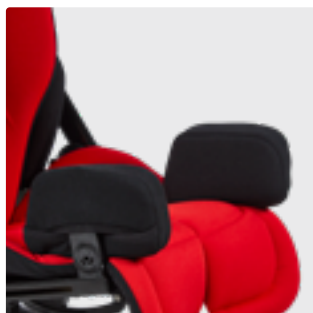

Adduttori, incluso rivestimento, set
881043-x

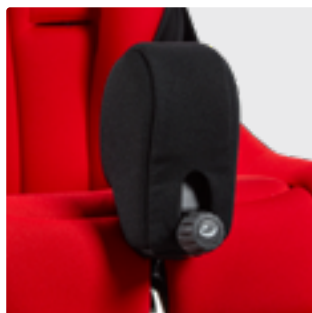

Divaricatore con sgancio rapido, incluso rivestimento
881044-x



Supporto per respiratore
881095
Per il montaggio sulla base



Supporto bombole ossigeno
881096



IV Pole asta porta flebo
881097



Zaino
87043183-2



Cestino portaoggetti
881092
Per il montaggio sulla base




Cuscino seduta Infant
881001-xx
Rosa, azzurro e nero



Pelotte laterali
881030-x



Staffa di supporto per comunicatore
881099

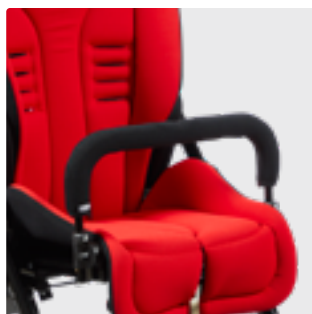

Barra di appoggio anteriore, incluso rivestimento
881070-x
Necessita degli adduttori o attacchi per la barra anteriore e tavolino



Attacchi per barra anteriore o tavolino
881060
Da utilizzare quando non sono montati gli adduttori




Poggiatesta sculpted
874084-x



Poggiatesta anatomico, incluso attacco per poggiatesta su Chilla
874085-x



Cuscino poggiatesta
874082-x

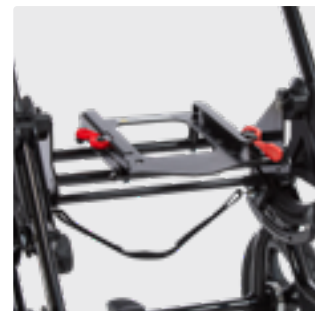


Adattatore per montaggio sistema di seduta
881091
Per montare x:panda shape mis. 1, x:panda mis. 1, mis. 2 S-M



Cappottina parasole, standard
881080-xx




Cappottina parasole, premium
881080-xx

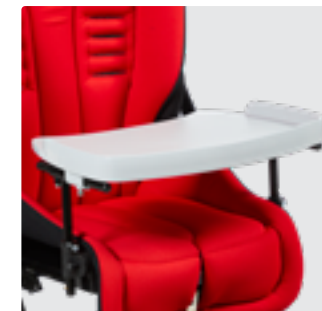


Tavolino, modello Chilla
881071



Cunei per avvallamento ischiatico
8720405

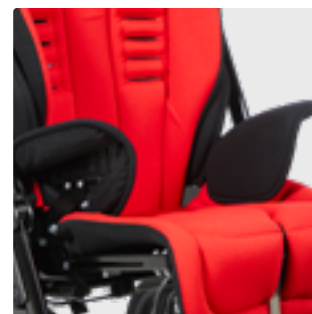

Supporti bacino, fissi
881023-x

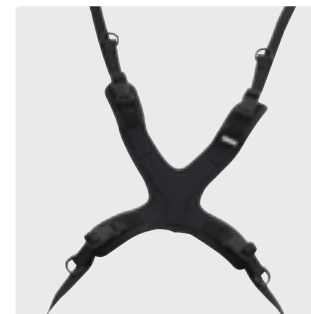

Pettorine e cinture
See the accessory category online

Visita il nostro sito web per altri accessori

Incontra Mathilde e la sua famiglia

Durante una bellissima giornata di Maggio, abbiamo avuto il piacere di incontrare Mathilde, sua mamma Chelina e il suo caro fratellino di 6 anni, Oliver, alla riserva naturale Hindsgavl a Middelfart, in Danimarca.

Mathilde è una bimba di 4 anni con una paralisi cerebrale discinetica diagnosticata quando aveva 2 mesi. Mathilde è stata classificata come livello V della Gross Motor Function Classification System, ha perciò difficoltà nel mangiare, nel comunicare, nel controllo muscolare e nella coordinazione. Comunica attraverso suoni ed espressioni facciali, e non appena suo fratello Oliver si avvicina, si illumina con un gran sorriso sul volto.

Mathilde attraverso la sua mamma fa terapia domiciliare per 37 ore a settimana. Ricevono supporto 2 volte al mese da una fisioterapista e collaborano insieme per individuare gli obiettivi da raggiungere, in modo tale da studiare un trattamento il più efficace possibile.

Visitare i parchi naturali e gli zoo è una delle attività preferite in famiglia e Chelina è diventata esperta nel trovare quelli facilmente accessibili per bimbi con diversa abilità, questo permettere un'esperienza esaltante ad entrambi i suoi figli. Animali esotici, profumi e altalene adattate per l'utilizzo con passeggini e sistemi di seduta da esterni creano le condizioni adatte per le grandi avventure in famiglia.

Durante il tempo libero, Mathilde, Oliver e Chelina hanno intrapreso una nuova avventura: andare in campeggio

in varie località della Danimarca. Tutti hanno imparato ad apprezzare le piccole gioie che solo il campeggio può dare.

Condividere gli spazi ristretti della loro roulotte, circondati da parchi immersi nella natura, offre una moltitudine di attività sensoriali da esplorare e tempo di qualità speso in famiglia.

Una soluzione su misura per Mathilde

Insieme al poggiatesta anatomico, il sistema di seduta R82 Chilla può essere reclinato e basculato per permettere a Mathilde di controllare la posizione del capo. Le pelotte laterali, la pettorina e i supporti per bacino regolabili con la cintura a quattro punti garantiscono un supporto stabile e una posizione ottimale del tronco. Le gambe e i piedi possono essere posizionati perfettamente grazie agli adduttori, al divaricatore e alla pedana.

Mathilde è nutrita esclusivamente tramite PEG e per garantirle una nutrizione sicura ed efficace porta sempre con sé la sua borsa con tutte le sacche con il cibo e i tubicini di scorta. L'aggancio dell'asta porta flebo, posizionato sullo schienale di Chilla, e il cestino portaoggetti consentono alla sua mamma di trasportare tutto il necessario ovunque vadano.

La cappottina parasole premium garantisce a Mathilde ombra e protezione dalla pioggia. La finestrina posizionata sulla cappottina consente a Chelina di controllare Mathilde, quando la cappottina è abbassata.

Grazie alle numerose regolazioni e alla grande varietà di accessori disponibili per Chilla Mathilde è nelle migliori condizioni per sentire il vento sulla faccia e il calore del sole. Riesce a godere della varietà dei colori, delle varie condizioni di luminosità e dei divertenti scherzi di suo fratello mantenendo sempre una postura corretta, ben supportata attraverso una posizione di seduta ottimale e confortevole. Il tavolino permette a Mathilde di ampliare la superficie d'appoggio, aiutandola a stabilizzare il tronco con le braccia, creando così una posizione stabile dalla quale può comunicare e interagire con il mondo che la circonda.

Mathilde in precedenza per le sue avventure all'aperto aveva usato il sistema di seduta Stingray, recentemente ha ricevuto la carrozzina Kudu, per vivere nuove esperienze ancora più esaltanti. A casa, Mathilde adora stare in posizione eretta grazie al supporto che le offre lo standing Caribou, e le piace fare il bagno con il suo Flamingo, provvisto di ventose, per un montaggio sicuro nella vasca da bagno.





Etac è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti.

Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorino la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei suoi caregivers.

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web.

ETAC SRL



+39 051 2819228



italia.ordini@etac.com



www.etac-it.com

 **etac**®

Creating Possibilities