



R82 Crocodile – AT variant

Den perfekte ledsager til udendørsaktiviteter

R82 Crocodile All-Terrain størrelsesvariant (Crocodile AT) åbner op for en verden af muligheder for børn med fysiske begrænsninger. Dette innovative ganghjælpemiddel er designet til at tilbyde støtte og komfort og giver børn mulighed for at forblive aktive i mange forskellige miljøer. Uanset om det er på en asfalteret sti, en grusvej eller en græsklædt legeplads, sikrer Crocodile AT, at dit barns skridt er stabile, understøttede og fulde af eventyr.

Med robust stabilitet og den forbedrede komfort fra de terrængående hjul kan barnet bevæge sig trygt, hvilket gør det til den ideelle ledsager til udendørsaktiviteter - såsom at udforske parker, haver eller stier.

Crocodile AT fremmer en aktiv, uafhængig livsstil for børn - uanset om det er indendørs eller udendørs. Den giver en indgang til social interaktion, leg og glæden ved at udforske.




Scan for mere info om Crocodile og Crocodile AT



NYHED

R82®

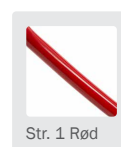

Str. 1 Rød




Str. 2 Grøn



Str. 3 Metalgrå




Klar til at udforske

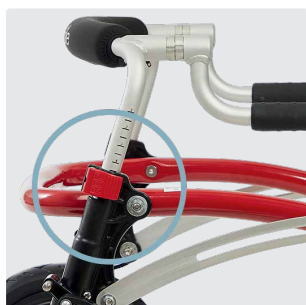

Nem at højdejustere



Klar til alle terræner

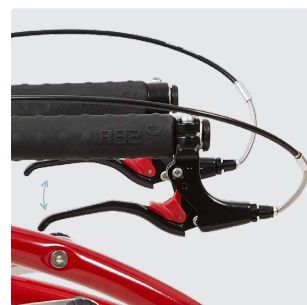

Sikkerhed i alle situationer

Egenskaber

Crocodile AT er den perfekte ledsager til hverdagens eventyr. En bred vifte af tilbehør kan tilføjes for at imødekomme dit barns behov for støtte, mens det udforsker verden.

Vækst og støtte

Højdejustering og vinkeljusterbare håndtag, der er placeret tæt på kroppen giver bedre støtte og gangstilling. Mere tilbehør kan tilføjes så barnet er sikret en stabil gangstilling og kan interagere med jævnaldrende og sin familie.

Aktiv eller brug for pause?

Ved at tilføje et Flip-down-sæde, kan barnet hvile sig, når det er nødvendigt.

Sikkerhed

Tilbageløbsbremse sikrer at rollatoren ikke ruller baglæns. Håndbremsen kan monteres for ekstra sikkerhed.

Klar til transport

Sammenklappeligt stel gør det nemt at opbevare og transportere Crocodile.

Forhjul med retningsstabilisator

Muligheden for at låse forhjulene med retningsstabilisatoren mindsker bevægelserne fra side til side, og gør det nemmere for barnet at styre.

Tilpasset udendørsbrug

De store hjul med dyb slidbane giver bedre kontrol på ujævne, glatte og bløde overflader og sikrer en jævn og stabil kørsel. En bred vifte af tilbehør kan desuden tilføjes for at imødekomme dit barns behov for støtte, mens det udforsker verden.



Crocodile AT som standard

	Str. 1	Str. 2	Str. 3
Varenr.	3186801AT-ATS	3186802AT-ATS	3186803AT-ATS
HMI-nr.	145482	145485	145488
Stel	Letvægtsaluminium, sammenklappeligt		
Topbøjle	Højdejusterbar, polstret med betræk		
Håndtag	Polstrede komforthåndtag, bredde- og højdejusterbare		
Hjul	Forhjul: 7" massive forhjul, drejelige med retningsstabilisator Baghjul: 12" massive baghjul med quick release		
Bremser	Tilbageløbsbremse på baghjul		

