



R82[®]

R82 Crocodile

Letskørende rollator til det aktive barn



Crocodile – skabt til frihed og bevægelse

Crocodile er en bagudvendt rollator til det aktive barn, der både kan og vil lidt mere. Rollatoren er placeret bag barnet, hvorved barnet får en mere opret gang, samt frihed til bevægelse. Den er enkel at slå sammen og derfor nem at tage med overalt.

I standardudgaven anvendes Crocodile af de børn, der kun har brug for lidt støtte, men der kan suppleres med forskelligt tilbehør, alt efter behovet for støtte.

Crocodile kan anvendes både inden- og udendørs. Anvendes den udendørs anbefales det at montere håndbremsen (tilbehør).

Crocodile leveres i fire størrelser.

Multijusterbare håndtag

Håndtagene kan justeres både i højden og bredden. Ved at indstille håndtagene nær kroppen opnås mere støtte og en bedre gangstilling.

Højdejustering

Nemt at højdejustere - helt uden brug af værktøj.

Tilbageløbsbremse

Tilbageløbsbremse sikrer at gangstativet ikke ruller baglæns. Nemt at slå til/fra.

Sammenklappelig

Sammenklappeligt stel gør det nemt at opbevare og transportere et Crocodile gangstativ.

Justerbare baghjul

Ved at indstille spændingen på baghjulene kan modstanden tilpasses efter barnet og dets evner.

Forhjul med retningsstabilisator

Muligheden for at låse forhjulene med retningsstabilisatoren mindsker bevægelserne fra side til side, og gør det nemmere for barnet at styre.



Bestilling og mål

		Str. 0 (Hvid)	Str. 1 (Gul)	Str. 2 (Sort perlemor)	Str. 3 (Metalgrå)
	Varenr.	3186800	3186801	3186852	3186803
	Hmi-nr.	132627	32354	32355	73430
	Bredde mellem håndtag	10-25 cm	19-35 cm	24-42 cm	33-48 cm
	Højde fra gulv til håndtag	30-61 cm	42-71,5 cm 38-70 cm*	55-84 cm	75-104,5 cm
	Maks. brugerhøjde	105 cm	115 cm	150 cm	180 cm
	Maks. brugervægt	30 kg	30 kg	45 kg	80 kg
	Længde	64 cm	72 cm	84 cm	87 cm
	Bredde	58 cm	62 cm	69 cm	69 cm
	Længde, sammenklappet	65 cm	72 cm	86 cm	100 cm
	Bredde, sammenklappet	58 cm	62 cm	69 cm	69 cm
	Højde, sammenklappet	30 cm	31 cm	27 cm	29 cm
	Min. venderadius	144 cm	160 cm	190 cm	200 cm
	Vægt	6 kg	7 kg	7 kg	12 kg

*Med Starter Kit tilbehør. Se yderligere mål på vores hjemmeside.

Crocodile som standard

Stel	Letvægts aluminium, sammenklappeligt
Stelfarver	Gul (str. 1), sort perlemor (str. 2) og metalgrå (str. 3)
Topbøjle	Højdejusterbar, polstret med betræk
Håndtag	Polstrede komfort håndtag, bredde- og højdejusterbare
Håndtag	Polstrede komfort håndtag, bredde- og højdejusterbare
Forhjul	Massive 150 x 30 mm, drejelige med retningsstabilisator
Baghjul	Massive 200 x 30 mm
Bremser	Slæbebremse integreret i baghjul og tilbageløbsbremse på baghjul.



Tilbehør




Rygstøtte med sidestøtter
Til tværgående hoftestøtte.

Rygstøtte m/sidestøtter str. 0+1
17 x 13 cm (BxD) 3186808
Rygstøtte m/sidestøtter str. 2
24 x 13 cm (BxD) 3186809



Underarmsstøtter inkl. håndtag

Underarmsstøtter inkl. håndtag,
sæt str. 0+1, fra version 5 3186858-1
Underarmsstøtter inkl. håndtag,
sæt str. 2, fra version 5 3186859-1
Underarmsstøtter inkl. håndtag,
sæt str. 3, fra version 5 3186860-1

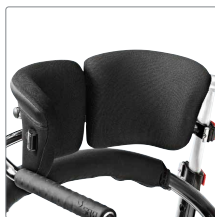


Polstret rygstøtte
Findes kun til størrelse 3. Monteres på tværstang.

Polstret rygstøtte str. 3
24 - 29 cm 3186886
Gjord 3185490-2



Holder til håndbremse
Muliggør samtidig brug af håndbrems og underarmsstøtter. Monteres på Crocodile underarmsstøtte.

Str. S 3186874-1
Str. M 3186874-2
Str. L 3186874-3

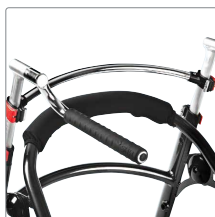

Tværstang
Til montering af rygstøtte. Kun nødvendig på Crocodile str. 3.

Tværstang str. 3 3186880



Håndbrems

Håndbremse og tilbageløbsbremse kan ikke være monteret på samme tid.

Håndbrems str. 1-2 3186834
Håndbrems str. 3 3186873



Gjord til sidestøtter
Giver øget sikkerhed ved gang. Til Crocodile str. 1+2.
Længde 38-47 cm.

Gjord til sidestøtter 31SN4016



Hastighedsdæmpende bremse

Til sænkning af fart eksempelvis ned af bakke, uden at den indbyggede slædebremse er konstant aktiveret. Med gråt låsegreb.

Hastighedsdmp. bremsekit,
1+2 3186834-DEC
Hastighedsdmp. bremsekit,
3 3186834-DEC



Hoftestøtter til sidemontering
Sæt. Passer til str. 0, 1, 2 og 3.

Hoftestøtter til sidemontering
8 x 19 cm (HxB) 3186819



Anti-tips, swing-away

Ekstra sikkerhed som forhindrer tipning.

Svingbar tipsikring str. 0+1+2 3186815
Svingbar tipsikring str. 3 3186815-3S

Tilbehør



Anti-tips, faste

Ekstra sikkerhed som forhindrer tipning.

Fast tipsikring str. 1+23186815-F

Fast tipsikring str. 3.....3186815-3F



Taske

Til transport af f.eks. legetøj. Kapacitet op til 3 kg. Til størrelse 0, 1 og 2.

Taske til str. 0+1+2 3186839



Sæde


Giver mulighed for hvileposition, f.eks. når barnet bliver træt. Kan slås op ved gang.

Sæde str. 0, 32 x 18 cm (BxD) 3186820-01

Sæde str. 1, 30 x 12 cm (BxD) 3186820

Sæde str. 2, 30 x 12 cm (BxD) 3186823

Sæde str. 3, 36 x 16 cm (BxD) 3186863

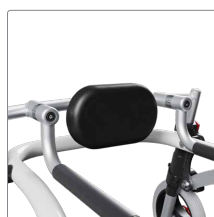

Rygstøtte

Benyttes til str. 0+1+2+3

Rygstøtte 3186816



Slingsæde

Giver støtte til at bære kropsvægten

Slingsæde, small passer til

Crocodile str. 0*+1**3186824-1


Slingsæde, medium, passer til

Crocodile str. 2***3186825-1

* Skal benyttes enten med Rygstøtte m. sidestøtte 3186808 + Gjord 31SN4016 eller med kropsstøtte 31868610

** Skal benyttes med Rygstøtte m. sidestøtte 3186809 + Gjord 31SN4016.

*** Skal benyttes med Rygstøtte m. sidestøtte 3186809 + Gjord 31SN4016.

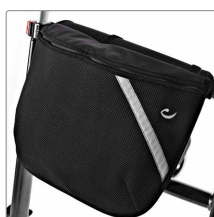

Taske

Til transport af f.eks. legetøj. Kapacitet op til 5 kg. Til størrelse 3.

Taske til str. 3.....3186843




Hængesæde

Til størrelse 1 og 2. Giver støtte til at bære kropsvægten.

Hængesæde str. 0+1, 60 cm 3186824

Hængesæde str. 2, 70 cm 3186825

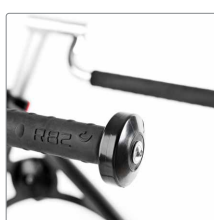

Endeknop til håndtag

Sæt.

Endeknop t/håndtag str. 3 & Str. 0+1+2 vers. 5..... 3186861



Ledsagerhåndtag

Justerbar i højde og vinkel. Kan monteres på højre eller venstre side foran eller bagtil.

Ledsagerhåndtag til str. 0+1+2..3186866-1



Crocodile starter kit (KUN TIL STR. 1)

Dette kit gør det muligt for endnu mindre brugere, at benytte Crocodile, da håndtagene bliver sænket og ført længere ind mod bruger. Med dette starter kit kan børn benytte Crocodile gangstativ fra de er ca. 70 cm høje, afhængig af kropsbygning.

Crocodile starter kit (kun til str. 1)3186801-0


Tilbehør



Underarmsmanchet

Benyttes til Crocodile str. 0+1+2+3.

Underarmsmanchet 31869370

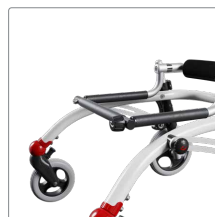

Gribebøjle

Til tværgående hoftestøtte.

Gribebøjle, str. 0 3186879-0

Gribebøjle, str. 1 3186879-1


Gribebøjle, str. 2 3186879-2



Kropsstøtte

Benyttes til Crocodile str. 0

Kropsstøtte, str. small..... 31868610

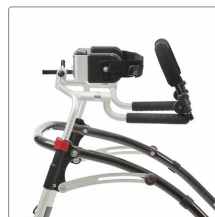

Gribebøjle vinkeljusterbar

Giver barnet mulighed for at placere hænderne mere ind foran kroppen. Dermed reduceres behovet for fleksion af truncus for at nå stangen og en mere opret holdning fremmes. Skal bruges med enten kropsstøtte eller ryg- og sidestøtte.

Gribebøjle, vinkeljusterbar, str. 0 .. 3186878-0

Gribebøjle, vinkeljusterbar, str. 1 ... 3186878-1

Gribebøjle, vinkeljusterbar, str. 2 ... 3186878-2

Farver



Hvid



Gul

Crocodile str. 0

Crocodile str. 1



Sort perlemor



Metalgrå

Crocodile str. 2

Crocodile str. 3



Version 2 - 2024 - Forbehold om ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk

Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk

etac[®]
Creating Possibilities