



Etac Cross 6

Tillbehör

 **etac**[®]

Tillbehör

Vi erbjuder ett brett urval av tillbehör för våra rullstolar Etac Cross 6, Cross 5 och Cross 5 XL.



Huvudstöd, plysch

Inklusive stag. Reglerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes. Monteras på huvudstödsfäste alt körbygel (fäste köps separat).




Huvudstöd, hygien

Inklusive stag. Reglerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes. Monteras på huvudstödsfäste alt körbygel (fäste köps separat).



Huvudstöd med sidostöd

Reglerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes. Överdrag: grå hygien, avtagbart och tvättbart. Monteras på huvudstödsfäste alt körbygel (fäste köps separat).

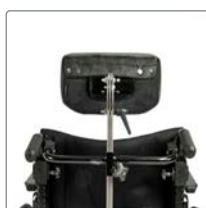

Huvudstödsfäste

Avtagbart med snäplås.



3A ryggstöd

Justerbart i höjd, höft- och lumbalvinkel. Finns med standard eller hög rygg.



Överdrag rygg

Mjukt elastiskt överdrag i mörkgrå plysch.




Komfortöverdrag

Med extra tjock polstring. Finns även till hög rygg. Mörkgrå plysch.




Överdrag Airmesh

Överdrag i Airmesh textil för ett aktivt intryck och luftigare känsla. Överdraget kan användas till 3A ryggstödet (standardhöjd).

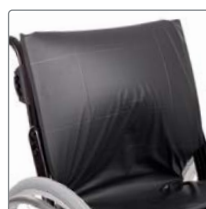

Hygienöverdrag Tidy

Vattenavstötande hygienöverdrag med skumdyna samt svetsade sömmar. Kan levereras med kundspecifik brodyrmärkning.

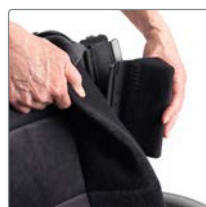


Ryggkil, kort

Mjuk kil som fästs med kardborre mot klädseln. 15 cm hög. Kombinera med sidostopp eller sidostopp med breddning. Klädsel: mörkgrå plysch. Styck.



Ryggkil, lång

Mjuk kil som fästs med kardborre mot klädseln. 30 cm hög. Kombinera med sidostopp eller sidostopp med breddning. Klädsel: mörkgrå plysch. Styck.

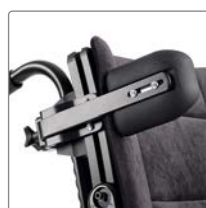


Bålstöd, justerbart och avtagbart

Flera möjligheter att få ett kroppsnära stöd som inte begränsar armrörelsen. Dynan kan roteras för olika former och justeras i djup och höjd. Kan tas av och på för sidoförflyttning utan verktyg. Styck.




Bålstöd, sidosvängbart och avtagbart

Svagt böjdyna som kan roteras för att passa olika kroppsformer. Justeras i djup och höjd. Utsvängbart med ett enkelt knapptryck. I utsvängt läge kan armstödet enkelt hanteras utan att kollidera med bålstödsfästet. Styck.

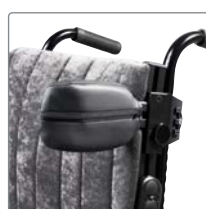

Bålstöd

Mjukt bålstöd i svart Dartex. Justerbart i höjd, djup och bredd. Två alternativa breddpositioner.

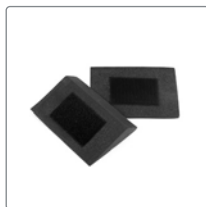

Komfortkil liten

Kan kombineras med flera kilar och klippas till önskad passform. Inklusive självhäftande kardborre.
Längd: 13 cm, Bredd: 9.5 cm, Höjd: 2 cm
Par.



Komfortkil medium

Par. Kan kombineras med flera kilar och klippas till önskad passform. Inklusive självhäftande kardborre.
Längd: 19 cm, Bredd: 12 cm, Höjd: 2 cm
Par.



Komfortkil stor

Kan kombineras med flera kilar och klippas till önskad passform. Kan användas för att anpassa en sittdyna för användare med bäckenskevheter.
Längd: 20 cm, Bredd: 17 cm, Höjd: 2.5 cm
Par.



Breddningssköldar rygg

Längd: 20 cm
Bredd: 15 cm
Höjd: 1 cm



Sidodyna

Ger ökad sidostabilitet till originalklädselns kroppsnära stöd. Kan roteras och användas i två olika riktningar. Styck.




Sidostopp, rakt

Kombineras med sidostödsdyna, eller tillförs bara för att hålla ryggkilen på rätt plats.
Styck.



Sidostopp, större breddning

Sidostoppet ökar ryggstödetets bredd med 30 mm på var sida. Kombinera gärna med ett bredare ryggöverdrag eller en ryggkil. Styck.

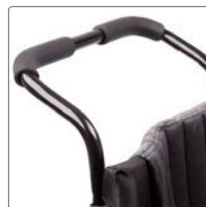

Körbygel

Höjdreglerbar och avtagbar.



Körbygel, vinkelreglerbar

Höjd- och vinkelreglerbar. Avtagbar. Kan kombineras med vårdarbroms.



Körhandtag

Höjdreglerbara och avtagbara.



Fasta körhandtag

Endast till 3A ryggstöd.



Tvärstag rygg

Ger extra stabilitet. Monteras i 3A-profilen. Fällbart med snäpplås på ena sidan.



Armstöd

Höjdjusterbara med massiv platta, med kort (25 cm) alternativt lång (38 cm) armstödsplatta. Justering med insexnyckel.



Överdrag armstöd

Polstrat med kallskum eller gel. Avtagbart. Finns i kort (25 cm) och lång (38 cm) modell. Kläddel i mörkgrå plysch alternativt svart Dartex.

Tillbehör och tillval, forts.



Armstödsdyna bred och mjuk

Monteras på befintligt armstöd. Passar både kort (25 cm) och långt (38 cm) armstöd, höger och vänster sida.



Armstödsdyna Hemi

Justerbar i vinkel, höjden ställs in vid justering av armstödet. Passar endast till långa armstöd (35 och 38 cm). Polstrat avtagbart överdrag. Överdrag i mörkgrå plysch.




Sidoskydd

Avtagbart och justerbart i höjd.



Lårstöd

Monteras på befintligt armstöd. Finns i kort (50 cm) och lång (57 cm) modell.

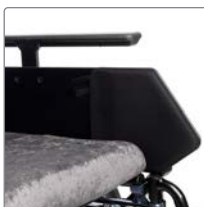


Mjukdyna, lårstöd

Mjukdyna i cellpolyeten. Fästs på lårstödet med kardborre.



Stänkskärm i kolfiber

Justerbar i höjd, djup och vinkel. Benstöd standard

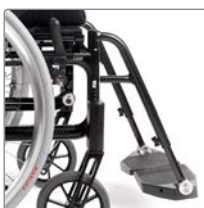

Benstöd standard

Svarta. Avtagbara och sidosvängbara. Finns även med låsning.



Snäva benstöd / Snäva korta benstöd

Gör att fotstödet kommer cirka 5 cm närmare sitsen. Kan endast användas med 4" eller 5" länkhjul. Finns även i en kort version och med låsning.



Vinkelreglerbart benstöd modell 1

Kombineras med vadplatta i mjuk plysch som kan regleras i höjd, djup, vinkel och sidled. Benstöd, dynkonsol och vadplatta beställs separat.



Vinkelreglerbart benstöd modell 3 med vadplatta


Med skålad, uppfällbar vadplatta som kan justeras i två höjdlägen på benstödsröret. Passar till både höger och vänster sida. Fotplattor beställs separat.



Vinkelreglerbart benstöd

Sidosvängbara och avtagbara. Med fällbara vadstöd, justerbara i höjd- och djupled.

Överdrag: Hygienklädsel.

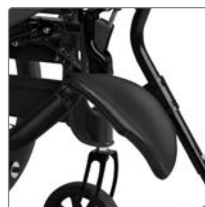

Överdrag vadplatta

Till vinkelreglerbart benstöd. Överdrag i mörkgrå plysch alternativt svart Dartex.



Fotplattor

Uppfällbara. Justerbara i djup och vinkel, reglerbara i höjd. Levereras med standard infästningsrör. Finns även med korta (-8 cm) respektive långa (+10 cm) infästningsrör. Djup 13 cm



Polstring, delad fotplatta

För extra mjuk komfort. Plysch.



Hel fotplatta

Uppfällbar och ställbar i höjd, djup och vinkel.



Polstring, hel fotplatta Cross

För extra mjuk komfort. Plysch.



Förlängd fotplatta

Monteras på befintlig fotplatta. Ger större understödsyta. Djup 21 cm.



Förlängning fotplatta

Förlängningen kommer i tre storlekar och monteras på standard fotplattor.
Small: 250 x 225 mm (hel platta)
Medium: 150 x 225 mm (hö och vä)
Large: 200 x 225 mm (hö och vä)



Breddad fotplatta

Monteras på den befintliga fotplattan. Passar till sitsbredd 52,5–60 cm



Vadband

Avtagbart, reglerbart i längd.



Polstring till vadband

Ger ett mjukare stöd för vaderna. Finns i 20, 30 och 40 cm längd.



Vadmatta

För extra mjuk komfort. Justerbart med Velcro. Plysch. Monteras på fast eller vinkelställbara benstöd.



Hälband

Reglerbart i längd. Passar både höger och vänster sida. Kan ej kombineras med förlängd fotplatta.



Amputationsbenstöd

Justerbart i höjd, reglerbart i djup, vinkel och sidled. Passar för höger och vänster sida. Överdrag i mörkgrå plysch alternativt svart Dartex. Avtagbart.



Amputationsvikt

Motverkar tipprisk och förbättrar köregenskaperna. Avtagbar och vinkelreglerbar. Vikt: 3 kg




Gipsbenstöd

För helbensgips. Stödet har tre separata dynor som är reglerbara i höjd, djup, vinkel och sidled. Finns till höger och vänster sida.



Drivhjul

20", 22" alternativt 24", samt 24" lågviktsdrivhjul. Välj mellan massiva eller luftpumpade med högtryckssläng.

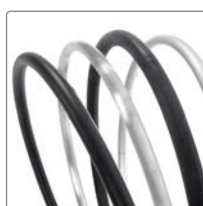

Drivringar

Välj mellan plastade, cellgummi, aluminium, titan och rostfria.

Tillbehör och tillval, forts.



Enarmsdrift

Till 20", 22" och 24".
Passar både höger och vänster sida.
Kan inte kombineras med vårdarbroms.



Länkhjul

4", 5", 6.5" alternativt 8".



Lodningsverktyg länkhjul

Vattenpass för lodning av länkhjul.



Cambervinkel

Standard 2°, alternativt 0°.



Ekerskydd

Grå eller gul logo.



Broms med vinklat bromshandtag

Ger en större greppyta.
Färg: svart



Broms med vinklat bromshandtag

Ger en större greppyta.
Färg: rött




Broms med bromsspaksförlängare

Bromsspaken kan vinklas framåt, för att underlätta vid sidoförflyttning.



Enhandsbroms

Höger alternativt vänster sida. Kan kombineras med vårdarbromshjul.

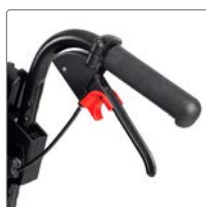

Vårdarbroms

100 mm mellan handtagsgrepp och bromsspak.



Hård sits

Avtagbar. Kompletteras med lämplig sittdyna.
Lågmonterad.



Hög montering, plan sits

Tillbehörsats för att få plansitsen i samma höjd som sitsrören.



Sittdyna

Anatomisk formad sittdyna. 56 cm lång.
Kan kapas till inställt sittdjup.
Klädsel: mörkgrå plysch.



Sittdyna Tidy

Med vattenavstötande hygienöverdrag i svart Dartex.
46 cm lång (sitsbredd 35–40 cm)
50 cm lång (sitsbredd 42.5–60 cm)



Sitsförlängare

Fästs med kardborre mellan transportfästen.
Ökar sitsdjupet med upp till 7 cm.



Hemibord

Fästs mot armstödsdynor (ingår) med velcro.
Passar både korta och långa armstöd. Finns upp till 50 cm sitsbredd. Halkskydd finns som extra tillbehör.



Skydd

Skydd när inte benstöd används.
För fotframdrivning (endast till Cross 6)



Hemibord, halvt

Justerbart i djup och bredd. Fällbart åt sidan.
Fästs på armstödskonsollen. Höjden justeras med armstödet.




Teleskoperande tippskydd

Uppfällbara, justerbara i höjd och reglerbara i längd och vinkel. Passar alla sitshöjder.



Fäste bröstsele

För övre infästning av bröstsele.
Monteras på huvudstödsstaget.

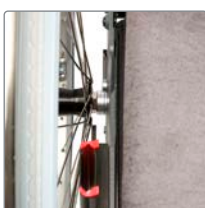

Breddningssats drivhjul

Ökar avståndet mellan armstöd, broms och drivhjul per sida med 1 cm.
Totalbredden ökar med 1 cm.
Ej i kombination med vårdarbroms.



Höftbälte och bälte

Med snäpplås, justerbara i längd.
Höftbälte: Två alternativa fästpunkter på ramen.



Breddat framgaffelfäste

Flyttar ut länkhjulet 3 cm, stolens totalbredd påverkas inte.



Käpphållare Universal

Inklusive fästband för övre fixering av käppen. Monteras på tramppröret alternativt tippskyddet. Passar både höger och vänster sida.



Framgaffelfäste kort

För 4" och 5" länkhjul.
För extra låg sitshöjd.



Droppställning

Komplett med fäste.



Bord

Transparent. Monteras på långa armstöd.



Verktygsats

Innehåller ringnyckel (8, 10, 13 och 24 mm), insexnyckel (3, 4, 5 och 6 mm), hylsnyckel (19 mm) och skruvmejsel PH1.



Etac är en världsledande utvecklare och leverantör av ergonomiska hjälpmedel och hjälpmedel för patientförflyttningar och lyft. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se


Creating Possibilities