



Etac My-Loo

Rialzo wc,
con sistema di fissaggio fisso

 **etac**[®]

Etac My-Loo

Grazie ad una soluzione brevettata per il supporto dei braccioli e ad una seduta ergonomica di facile installazione, My-Loo con sistema di fissaggio fisso garantisce sicurezza, un alto livello di comfort e facilità di utilizzo.

Il rialzo WC si adatta alla maggior parte dei modelli di WC.

Sviluppato per facilitare l'autonomia

My-Loo permette agli utenti con mobilità ridotta o con limitazioni funzionali di gestire autonomamente e in tutta sicurezza le attività di toilette.

La seduta rialzata e i braccioli fissi facilitano l'alzarsi ed il sedersi. Gli incavi e l'ampia apertura della seduta facilitano le operazioni di igiene personale.

Disponibile in 5 diverse varianti

Etac My-Loo con sistema di fissaggio fisso è disponibile in diverse varianti, con o senza braccioli e con diverse altezze della seduta (2, 6 e 10 cm).

I braccioli, se necessari, possono essere aggiunti anche successivamente.

My-Loo 2 cm è la soluzione più semplice per avere una seduta WC con braccioli senza dover forare muri o pavimenti.

Grazie ad un design moderno ed elegante, My-Loo si integra facilmente in qualsiasi arredo bagno.



Etac My-Loo rialzo WC con fissaggio fisso.

	Codice numero
My-Loo con braccioli, 20 mm	80301510
My-Loo con braccioli, 60 mm	80301511
My-Loo con braccioli, 100 mm	80301512
My-Loo, 60 mm	80301513
My-Loo, 100 mm	80301514

Peso

My-Loo con braccioli, 20 mm: 3.2 kg	My-Loo, 60 mm: 2.2 kg
My-Loo con braccioli, 60 mm: 3.4 kg	My-Loo, 100 mm: 2.4 kg
My-Loo con braccioli, 100 mm: 3.7 kg	

Portata massima

150 kg
Con l'accessorio Gambe di supporto, 80301603: 200 kg

Materiali

Braccioli: Polipropilene
Seduta/Coperchio: Polipropilene
Sistema di fissaggio: Acciaio, Polipropilene, TPE

Design

Myra Industriell Design AB

Manutenzione



Pulire il prodotto con normali detersivi non abrasivi (pH compreso tra 5-9). Sciacquare e asciugare. Disinfettare il prodotto con un disinfettante a base alcolica, 70%. Il prodotto può essere decontaminato a una temperatura massima di 85° C/185° F per 3 minuti se necessario.



Caratteristiche



Braccioli regolabili

Utilizzando una soluzione unica e brevettata, i braccioli possono essere regolati in altezza in modo rapido e semplice. Sono facilmente ribaltabili senza rischi per l'utilizzatore. Se necessario My-Loo può essere utilizzato con un solo bracciolo.



Installazione semplice e pratica

Etac My-Loo si installa in modo semplice e veloce utilizzando una soluzione innovativa. La seduta e i braccioli si inseriscono dall'alto negli appositi alloggiamenti e si fissano facilmente utilizzando i sistemi di bloccaggio.



Accogliente e funzionale

Gli ampi incavi e l'apertura del sedile extra-large garantiscono un'eccellente accessibilità. Il design e l'ampia superficie d'appoggio offrono una seduta sicura e confortevole.



Stabile

Il rialzo WC è molto stabile ed ha una portata di 150 kg. Utilizzando l'accessorio Gambe di sostegno la portata massima viene incrementata fino a 200 kg.



Sicuro e confortevole

I braccioli robusti e facili da impugnare uniti ad un'ampia seduta, donano una sensazione di sicurezza e comodità d'uso. Per un maggiore comfort, è possibile aggiungere un sedile morbido.



Facile da pulire

Le superfici lisce sono facili da pulire con un panno morbido. Qualora fosse necessaria una pulizia più accurata, è facile rimuovere e altrettanto semplice riposizionare il sedile e i braccioli.



My-Loo con braccioli
2 cm



My-Loo con braccioli
6 cm



My-Loo con braccioli
10 cm




My-Loo
6 cm



My-Loo
10 cm

Dimensioni

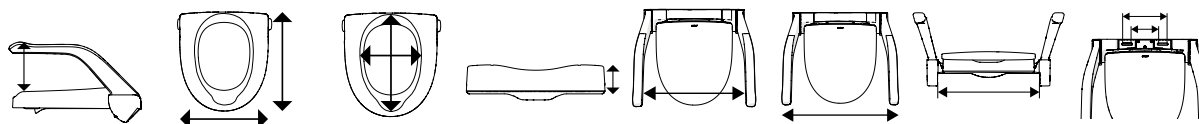

Modello	Altezza braccioli	Larghezza/Profondità	Dimensioni interne	Altezza	Distanza braccioli	Larghezza totale	Larghezza massima WC	Distanza tra i fori
80301510	215/245/285 mm	360/400 mm	215/285 mm	20 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
80301511	175/205/245 mm	360/400 mm	230/360 mm	60 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
80301512	135/165/205 mm	360/400 mm	230/360 mm	100 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
80301513	-	360/400 mm	230/360 mm	60 mm	-	-	400 mm	c/c 123-203 mm
80301514	-	360/400 mm	230/360 mm	100 mm	-	-	400 mm	c/c 123-203 mm

Accessori



Seduta morbida

80301604

Seduta morbida, comoda ed ergonomica. Favorisce una buona riduzione delle pressioni di contatto e un maggiore comfort. Materiale: Poliuretano



Set di fissaggio

80301626

Per l'utilizzo su wc senza fori passanti (montaggio cieco). Include le gambe di sostegno. Adatto per fori di montaggio Ø20 mm. Materiale: alluminio, poliammide, acciaio inossidabile, EPDM



Gambe di sostegno

80301603

Per una maggiore stabilità. Aumentano la portata massima da 150 kg a 200 kg. Pieghevoli. Materiali: Alluminio, poliammide, polipropilene, TPE, acciaio



Supporto carta igienica

80301601

Si attacca ai braccioli. Materiali: Poliammide, acciaio



Cestino porta oggetti

80301602

Si attacca ai braccioli. Materiali: Poliammide, poliestere/mesh, acciaio



Barra di supporto

80303034

Un supporto per aumentare la sicurezza e la stabilità. Si aggancia ai braccioli. 60.5 cm Materiali: Alluminio, polietilene



Braccioli

80301606

Forniti al paio, destro e sinistro. Materiale: Polipropilene

Etac è azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti. Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorino la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei caregivers.

Per le ultime novità e aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web: www.etac-it.com