



Etac Edge, Smart, Easy

Sgabelli per doccia

 **etac**[®]

Sgabelli per doccia su cui contare

Sedersi durante le attività di cura e igiene è un modo efficace per evitare infortuni e cadute. Etac offre un'ampia selezione di sgabelli per doccia studiati per assicurare il massimo del comfort e della sicurezza.

La caratteristica più importante di uno sgabello per doccia è la stabilità.

I modelli Easy, Smart e Edge si distinguono per la solidità della struttura delle gambe: sono appositamente inclinate verso l'esterno per offrire sempre la massima stabilità indipendentemente dall'altezza.

Gli sgabelli sono tutti dotati di puntali antiscivolo studiati per adattarsi a superfici irregolari e per assicurare una buona aderenza su pavimenti bagnati.

I prodotti sono accuratamente testati in conformità agli standard europei ed internazionali.

La portata massima è di 200 kg per i modelli Easy e Smart e di 130 kg per il modello Edge.



Uno sgabello per ogni esigenza

La gamma di sgabelli per doccia Etac offre soluzioni alle diverse esigenze degli utenti grazie ad un assortimento di forme, altezze e colori.



Easy, con la classica forma circolare, è adatto a molteplici utilizzi ed ambienti.

E' utilizzabile da ogni lato e facilita gli spostamenti laterali.



La seduta rettangolare di Smart può essere utilizzata da due diversi lati offrendo così una superficie di seduta più ampia ed una più stretta.

Gli angoli permettono agli utenti di stare a cavallo per una maggiore stabilità.



Grazie alla sua forma triangolare, Edge si adatta bene agli spazi più piccoli o agli angoli della doccia. Gli utenti possono stare a cavallo del sedile per una maggiore stabilità.

Abbassando leggermente una delle gambe telescopiche e sedendosi a cavalcioni del sedile, l'angolo del piano di seduta permette di posizionare l'anca in modo da alleviare eventuali sintomatologie dolorose o limitazioni funzionali.



I modelli Smart e Easy sono disponibili anche con cuscino girevole per una più agevole mobilità.

I cuscini girevoli facilitano il movimento e riducono l'attrito. I materiali utilizzati sono impermeabili, rendono la seduta antiscivolo e donano una piacevole sensazione di comfort.

Varianti colore

Gli sgabelli per doccia Etac sono disponibili in 3 diversi colori: bianco, grigio e blu pastello. L'assortimento permette agli utenti la possibilità di coordinare lo sgabello per doccia all'arredo del bagno.



I prodotti Etac sono progettati secondo alti standard di sicurezza, igiene e sostenibilità. I prodotti hanno un ciclo di vita stimato di 10 anni, se utilizzati secondo le indicazioni fornite e sono coperti da una garanzia di 5 anni.

Caratteristiche




Stabile

Le gambe degli sgabelli sono inclinate verso l'esterno per offrire una maggiore stabilità. I puntali antiscivolo si adattano al pavimento e forniscono una buona aderenza anche su superfici bagnate e irregolari.



Confortevole e sicuro

L'ampia area di seduta, le forme arrotondate e la superficie antiscivolo rendono lo sgabello comodo e sicuro. Speciali fessure consentono all'acqua in eccesso di defluire rapidamente.

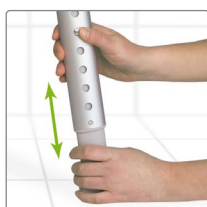

Regolabile in altezza

È facile regolare l'altezza. Basta premere sul tasto e far scorrere fino all'altezza desiderata. La forma ovale impedisce alle gambe telescopiche di girare durante la regolazione.



Facile da montare

Gli sgabelli per doccia vengono consegnati in pratici imballaggi piatti e possono essere montati facilmente, senza la necessità di alcun attrezzo. La funzione di blocco dei pulsanti facilita il montaggio e la rimozione delle gambe.






Accessori

Cuscino:

Alla seduta si può aggiungere un cuscino imbottito per maggior comfort. Si aggancia alla seduta e si asciuga facilmente dopo l'uso.

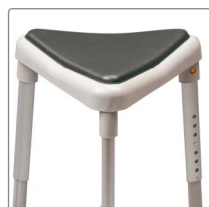

Sedile Soft per sgabello Edge

Materiale: Polipropilene
Codice numero81801132



Sedile Soft per sgabello Smart

Materiale: Polipropilene
Codice numero 80209502



Sedile Soft per sgabello Easy

Materiale: Polipropilene
Codice numero 80209501

Cuscino girevole:

Il cuscino girevole facilita la mobilità. La superficie impermeabile e antiscivolo dona una piacevole sensazione di comfort



Cuscino girevole

Per i modelli Smart e Easy
Materiale: Polipropilene
Codice numero 80209503

Nome Prodotto	Bianco	Grigio	Blu pastello
Etac Edge	81801060	81801010	81801030
Etac Edge Low		81801040	n/d
Etac Easy	81901060	81901010	81901020
Etac Easy Girevole		81901050	
Etac Smart	81951060	81951010	81951020
Etac Smart Low		81951030	
Etac Smart Girevole		81951050	

Colori

Bianco Grigio **Blu pastello**

Dimensioni

Larghezza seduta: Edge: 45x45x45 cm
Easy: 40 cm
Smart: 43x38 cm

Altezza seduta: Edge, 42-57 cm
Edge, Low, 34,5-42 cm
Easy, 42-57 cm
Smart, 42-57 cm
Smart, Low, 34,5-42 cm

Materiali

Seduta: Polipropilene
Gambe: Alluminio, polipropilene, poliammide
Puntali: TPE
Seduta morbida: polietilene

Peso

Edge: 2,6 kg
Edge, Low: 2,4 kg
Easy: 2,75 kg
Smart: 3,15 kg

Portata massima

Edge: 130 kg
Easy: 200 kg
Smart: 200 kg

Manutenzione



Lavare il prodotto utilizzando agenti pulenti senza solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure un prodotto disinfettante al 70%. Il prodotto può essere decontaminato a una temperatura massima di 85° C/185° F per 3 minuti se necessario.



Etac è azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti. Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorino la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei caregivers.

Per le ultime novità e aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web: www.etac-it.com