



HÖJD BRUKARVIKT
160
KG

Etac Swift fristående

Toalettsitsförhöjare

 **etac**[®]

Etac Swift fristående toaletsitsförhöjare

Swift fristående toalettstol är det perfekta valet när du vill förhöja toaletsittandet snabbt, enkelt och säkert. Genom att ställa in den till önskad höjd och placera den över toaletten har du en sitthöjd anpassad efter dina behov. När Swift kompletteras med en potta kan den lika gärna användas i sovrummet som en fristående toalettstol. Den har en bekväm sits med stadiga armstöd som underlättar vid uppresning.

Designad för flexibilitet

Förutom att kompletteras med en potta kan Swift också utrustas med ryggstöd och mjukdynor för extra komfort och stöd.

Swift fristående kan även användas som en duschpall. Dess låga vikt gör den lätt att flytta och den är utformad för att klara våta miljöer. Pallen är extremt stabil och har halkfria doppskor som ger ett utmärkt grepp på våta eller ojämna ytor.

Sitthöjden kan regleras mellan 42 och 57 cm och kan ställas in med en liten främre lutning som ytterligare underlättar uppresning och lindrar trycket på höftlederna

Enkel montering och rengöring

Swift fristående är lätt att montera utan att behöva några verktyg. Armstöden och benen kan lätt tas bort, vilket är perfekt för biltransport och förenklar rengöring. Stolen har ett integrerat stänkskydd, släta ytor och är inte korroderande.



Produktnamn	Art. nr	Vikt	
Swift Fristående toaletsitsförhöjare	81702020	3.9 kg	
Fakta		Max brukarvikt	
Total bredd: 56 cm		160 kg	
Sitsens bredd: 54 cm			
Sitshöjd (min-max): 42-57 cm		Maintenance	
Bredd mellan armstöden: 45 cm			
Material			
Sits och armstöd: Polypropen		Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pHvärde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C i 3 minuter.	
Ben: aluminium och polyamide			
Doppskor: TPE			

Detaljer



Smart höjjustering

Teleskopbenen kan snabbt justeras till önskad höjd tack vare en självlåsand knapp som klickar på plats. Den ovala formen hindrar benen från att vrida sig när justeringen görs. Det finns inga lösa delar som kan placeras fel.



Säkert stabil

Stolen har ett stort fotavtryck vilket gör den extremt stabil och har en generös maximal brukarvikt på 160 kg. De mjuka doppskorna anpassar sig efter ojämna golvytor och har en form och ett material som gör att de inte glider.



Enkel hantering

Swift Fristående kommer plattpackat i en lättburen förpackning. Eftersom stolen enkelt kan monteras och demonteras kan förpackningen sparas och användas för ytterligare transporter om stolen används på flera ställen.



Potta med integrerat, självlåsand lock

En potta finns som tillbehör. Den har ett tätt självlåsand lock, passar smidigt och blir ett med sitsen. Pottan har ett handtag i bakänden samt ett upprätt handtag som automatiskt låser locket när pottan lyfts upp.



Swift fristående
toalettsitsförhöjare



Swift fristående med ryggstöd



Swift fristående med ryggstöd
och potta

Tillbehör



Ryggstöd

84006181
För extra stöd och komfort. Lätt att klicka på plats utan att verktyg behövs.
Material: Polypropylen



Potta, med eller utan lock

Utan lock: 84005066
Med lock: 84005068
Enbart lock med handtag: 84005067
Material: Polypropylen




Mjukdyna sits

84005064
Swift kommod
Den halkfria sittdynan ger en omedelbar varm känsla och gör sittandet mer bekvämt. Lätt att torka av.
Material: Polyeten



Tvålkopp/lockstöd

80209266
Fästs på sitsens sida. Perfekt plats för att förvara duschgel, schampo, pottlock eller toalettpapper. Utrustad med en inbyggd duschhållare.
Material: Polypropylen

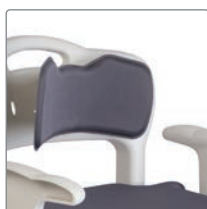

Mjukdyna rygg

84005065
Swift kommod
Monteras på ryggstödet för extra komfort och ger en varm känsla. Det är halkfritt, enkelt att klicka på plats och lätt att rengöra.
Material: Polyeten



Stänkskydd

80209430
Ett mjukt skydd mot urinstänk framåt. Fästs över sitsens främre urtag och kan enkelt tas bort, alternativt hållas på plats vid användande med hjälp av det greppvänliga handtaget. Material: Polyuretan



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se