



etac®

Etac Swift Mobil-2

Dusch- och toalettstolar

Vi presenterar Swift Mobil-2-familjen

Dusch- och toalettstolarna Etac Swift Mobil-2 är enkla att hantera och underlättar såväl förflyttning av patienter som transport till och från badrummet. De är utformade för att göra livet lite enklare för de personer som använder dem. Vi förstår vad som är viktigt för vårdare och brukare eftersom vi frågar dem. Tack vare att vi lyssnar på våra kunder förstår vi hur viktigt det är med sådant som åtkomlighet, anpassningsmöjligheter, värdighet och bekvämlighet.



Swift Mobil-2-familjen levereras med 5 års garanti och 10 års livslängd.

Förenklar åtkomligheten

Majoriteten av vårdarna anser att bristen på åtkomlighet är en utmaning under hygienvårdsrutiner och kräver ofta ansträngande arbetsställningar. För att förenkla åtkomligheten är sitsen på Swift Mobil-2 öppen baktill och har fritt utrymme på båda sidorna. Justeringen kan verka liten, men den kommer att göra hygienvårdsrutinerna snabbare och göra dem mer värdiga för alla.

Produktflexibilitet och bekvämlighet

Alla Swift Mobil-2-modeller har en generös maximal brukarvikt på 160 kg och kan enkelt anpassas till mindre eller större brukare med olika tillstånd och behov. Stolarna kan justeras på många sätt och har ett stort antal tillbehör för att ge bättre komfort och stabilitet. Några få små justeringar kan göra stor skillnad för brukarens säkerhet och välbefinnande samt för vårdarnas arbetssituation.

Upptäck fördelarna

En serie funktionella och flexibla mobila dusch- och toalettstolar, utformade för att underlätta hygienvård för både vårdare och brukare. Swift Mobil-2 finns i tre olika modeller: en dusch- och toalettstol av standardtyp, en modell med sitslutning och en modell med 24" drivhjul.

Multijusterbart huvudstöd

Utformat för att ge högsta komfort och flexibilitet och kan justeras för att passa flera brukares behov.

Skönt ryggstöd

Justerbart och snabbtorkande. Stabil passform med dubbla fästen runt körbygeln.

Bekväm åtkomlighet

Sits med öppning baktill, urtag framtill och fritt utrymme på båda sidorna.

Höjdreglerbar

Enkel att reglera till olika fasta sitshöjder utan att använda verktyg.



Swift Mobil-2



Swift Mobil 24"-2

Flexibla armstöd

Justerbara i höjd- eller sidled.

"Etac Easy-Clean"

En unik yta speciellt utvecklad för Etac och som har en perfekt balans mellan friktion och renlighet, antihalk- och hygienegenskaper!

Ergonomiska fotplattor

De mjukt välvda fotplattorna ger stöd för vrist och fotvalv, skapar komfort, stabilitet och avspänning.



Etac Swift Mobil Tilt-2

Etac Swift Mobil-2

Swift Mobil-2 är en flexibel vårdardriven dusch- och toalettstol som ger vårdaren bästa möjliga åtkomlighet för att utföra hygienvård. Den är enkel att hantera och kan anpassas efter många olika brukares behov.

Unik sits

Sitsen har en öppning baktill så att vårdaren enkelt kan komma åt att hjälpa brukaren med den personliga hygien. Dessutom är friktionsmönstret "Etac Easy Clean" på sitsens yta unikt för Etac och ger en perfekt balans mellan friktion och renlighet.

Bekväm avlastning

För känsliga brukare finns det extra mjuka sittdynor, som ger både stöd och bekväm avlastning. Det mjuka och snabbtorkande ryggstödet och de välvda fotplattorna på Swift Mobil-2 ökar brukarens bekvämlighet ytterligare.

Mycket anpassningsbar

Swift Mobil-2 har en generös maximal brukarvikt på 160 kg som standard och höjden kan justeras mellan 44 och 59 cm. Armstöden kan justeras i höjd- och sidled, 6 cm i vardera riktning. De svängbara fotplattorna kan justeras på höjden och finns även i en kortare variant, t.ex. för när högre mjuka sitsar används.

Konfigurationsalternativ

För större brukare finns en utformning med en bredare ryggstödsram som ger ytterligare 6 cm mellan armstöden. Dessa modeller har också en ökad bredd på 12 cm mellan benstöden tack vare en breddningssats.

Både den bredare ryggstödsramen samt breddningssatsen går att köpa som tillbehör. Swift Mobil-2 har också en upprätt ryggkonfiguration som, i kombination med det upprättstående huvudstödet, gör att stolen kan placeras 7 cm närmare väggen, vilket ger en bättre passform över väggmonterade toaletter.



Etac Swift Mobil-2

Art.nr

Swift Mobil-2, delmonterad	80229400
Swift Mobil-2, monterad	80229401
Swift Mobil-2, monterad, inkl bäckengejder	80229406
Swift Mobil-2 XL, delmonterad med bred rygg	80229467
Swift Mobil-2 delmonterad, upprätt rygg, bäckengejder, uppfällbara vridbara fotplattor	80229489
Swift Mobil-2, delmonterad, upprätt rygg, bäckengejder	80229490

Standard: ryggstöd, sits, armstöd, fotplattor och fyra låsbara hjul

Vikt

16,6 kg

Mått

Totalbredd: 58/64 cm XL: 61/64/70 cm
Bredd mellan armstöden: 42/48/54 cm XL: 48/54/60 cm

Material

Chassi: pulverlackerat stål
Sits/armstöd: PP
Ryggstöd: polyester/kardborre
Fotstöd: PP
Hjul: polyamid/TPE, låsbara, kullagrade



max 160 kg
max 353 lbs



Rengör/desinficera produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel och med ett pH-värde mellan 5 och 9 eller med 70 % desinfektionssprit.
Produkten tål rengöring i kabinetttdiskdesinfektor i 85 °C i 3 minuter.
Max brukarvikt: 160 kg

Etac Swift Mobil-2 med upprätt rygg

För bästa passbarhet över vägghängda toalettmodeller finns en variant med upprätt rygg. Den kommer 7 cm närmare väggen vilket ger en perfekt passning över toalettöppningen.

Utöver en komplett Swift Mobil-2-variant, finns den upprätta ryggen även som tillbehör. Ryggen passar alla Swift Mobil-2 standardmodeller utom tilt-varianterna.

Ryggen passar rent tekniskt även Swift Mobil-2 24"-modellen, men ger där ingen funktionell fördel då 24"-hjulen tar i väggen före ryggen/körhandtaget.



Swift Mobil med upprätt rygg

Placering mot vägg med upprätt rygg över vägghängd toalett.



Passning över vägghängd toalett med upprätt rygg.

Funktioner



Sits med öppning baktill

Ger åtkomlighet för vårdaren och bekvämlighet för brukaren. Den unika ytan, speciellt utvecklad för Etac, har en perfekt balans mellan friktion och renlighet, antihalk- och hygienegenskaper!




Reglerbart ryggstöd

Enkelt att reglera efter kroppshållning, kroppsform och för bästa komfort. Utrustat med två fästen runt körbygeln. Mjukt och snabbtorkande material.



Justerbara armstöd som standard

Enkla att anpassa efter olika brukares behov. Justerbara både i höjd- och sidled, +/-6 cm i vardera riktning.

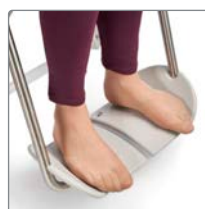

Ergonomiska fotplattor

Välvda fotplattor ger stöd för vrist och fotvalv, och skapar komfort, stabilitet och avspänning.



Etac Swift Mobil Tilt-2

Swift Mobil Tilt-2 är utformad med hänsyn till både vårdarens och brukarens behov. Den hanterar alla de utmaningar som vårdgivare möts av i sitt dagliga arbete och ger den bekvämlighet och säkerhet som brukaren behöver för att känna sig trygg.

Unik sitslutningsfunktion

Swift Mobil Tilt-2 har en unik lutningsfunktion som ger brukaren ökad trygghet och vårdaren en ergonomisk arbetsställning. Lutningsfunktionen på +5° till -35° kan manövreras från stolens båda sidor. Detta gör att vårdaren kan lugna brukaren under lutningsprocessen.

Åtkomlighet och bekvämlighet

Tack vare utmärkt åtkomlighet runt sitsområdet blir hygienvårdsrutinerna enklare för vårdaren och kan utföras på ett värdigt sätt för brukaren. För känsliga brukare finns det extra mjuka sittdynor. Det mjuka och snabbtorkande ryggstödet och de välvda fotplattorna på Swift Mobil-2 ökar brukarens bekvämlighet ytterligare.

Passar många brukare

Dusch- och toalettstolen kan anpassas och passar därmed många brukare med olika behov och storlek. Den har en generös maximal brukarvikt på 160 kg som standard, och höjden från sits till golv kan ändras (47,5-62,5 cm). Armstöden kan justeras i höjd- och sidled, 6 cm i vardera riktning, och de svängbara fotplattorna kan justeras på höjden och finns även i en kortare variant.

Swift Mobil tilt-2 med XL rygg

För större brukare finns en variant av Swift Mobil tilt med en bredare ryggstödsram som ger ytterligare 6 cm mellan armstöden och 12 cm mellan benstöden. Swift Mobil Tilt-2 med XL rygg kan endast köpas som färdig stol.



Etac Swift Mobil Tilt-2

Swift Mobil Tilt-2, monterad	80229410
Swift Mobil Tilt-2, monterad inkl bäckengejder	80229412
Swift Mobil Tilt-2 XL, monterad, med bred rygg	80229480
Swift Mobil Tilt-2 XL monterad inkl bäckengejder, med bred rygg	80229481

Standard: Huvudstöd, ryggstöd, sits, armstöd, fotplattor och fyra låsbara hjul

Vikt

20,4 kg

Mått

Totalbredd: 58/64 cm XL: 61/64/70 cm
Bredd mellan armstöden: 42/48/54 cm XL: 48/54/60 cm

Art.nr

Material

Chassi: pulverlackerat stål
Sits/armstöd: PP
Ryggstöd: polyester/kardborre
Fotstöd: PP
Hjul: polyamid/TPE, låsbara, kullagrade



max 160 kg
max 353 lbs



Rengör/desinficera produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel och med ett pH-värde mellan 5 och 9 eller med 70 % desinfektionssprit.
Produkten tål rengöring i kabinetttdiskdesinfektor i 85 °C i 3 minuter.
Max brukarvikt: 160 kg

Funktioner



Sits med öppning baktill

Ger åtkomlighet för vårdaren och bekvämlighet för brukaren. Den unika ytan är speciellt utvecklad för Etac och har en perfekt balans mellan friktion och renlighet, antihalk- och hygienegenskaper!



Unik och säker lutningsfunktion

Kan manövreras från stolens båda sidor, vilket ger en bra arbetsställning för vårdaren och lugnar brukaren under lutningsprocessen.



Justerbara armstöd som standard

Enkla att anpassa efter olika brukares behov. Justerbara både i höjd- och sidled, +/-6 cm i vardera riktning.



Multijusterbart huvudstöd

Huvudstödet är utformat för att ge högsta komfort och flexibilitet och kan justeras för att passa flera brukares behov.



Etac Swift Mobil 24"-2

Etac Swift Mobil 24"-2 är en brukardriven modell utformad för självständiga brukare.

Lätt att manövrera

Dusch- och toalettstolen är enkel att använda och lätt att manövrera. Drivhjulen sitter så att de är enkla att nå och ger maximal kontroll. Uppfällbara armstöd och generöst utrymme framför hjulen gör det enkelt att förflytta sig i sidled. Även den relativt jämna formen på sittytan underlättar sidoförflyttning.

Bekväm sits

För att förenkla åtkomsten har sitsen en öppning baktill och ett hygienurtag framtill. Sitsen är utformad för att vara bekväm oavsett brukarens kroppshållning eller bredd på bäcken. För ytterligare komfort finns det ergonomiska mjuka sitsar.

Passar många brukares behov

Swift Mobil 24"-2 kan anpassas och passar därmed många brukare med olika behov och storlek. Den har en generös maximal brukarvikt på 160 kg som standard, och höjden från sits till golv kan ändras (45–60 cm). Armstöden kan justeras både i höjd- och sidled, och det mjuka ryggstödet kan justeras utefter positionering och bekvämlighet.

För större brukare finns det en extra bred ryggstödsram, vilket ger ytterligare 6 cm mellan armstöden.



Etac Swift Mobil 24"-2

Swift Mobil 24"-2

Swift Mobil 24"-2, inkl bäckengejder

Standard: ryggstöd, sits, armstöd, fotplattor och fyra låsbara hjul

Vikt

25,1 kg

Mått

Totalbredd: 74 cm

Bredd mellan armstöden: 42/48/54 cm

Art.nr

80229402

80229408

Material

Chassi: pulverlackerat stål

Sits/armstöd: PP

Ryggstöd: polyester/kardborre

Fotplattor: PP

Hjul: polyamid/TPE, låsbara, kullagrade

Drivhjul: solida hjul, polyamid, kullagrade

Bromsar: polyamid, rostfritt stål



max
160 kg
max
353 lbs



Rengör/desinficera produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel och med ett pH-värde mellan 5 och 9 eller med 70 % desinfektionssprit.

Produkten tål rengöring i kabinetttdiskdesinfektor i 85 °C i 3 minuter.

Max brukarvikt: 160 kg

Funktioner



Lätt att manövrera

Placeringen av drivhjulen gör att stolen är lätt att köra framåt och underlättar även sidoförflyttningar.



Ställbar sitshöjd

Swift Mobil 24"-2 kan enkelt ställas in på olika fasta höjder utan verktyg, vilket ger en trygg och bekväm höjd.



Reglerbart ryggstöd

Enkelt att reglera efter kroppshållning, kroppsform och för bästa komfort. Utrustat med två fästen runt körbygeln. Mjukt och snabbtorkande material.



Ergonomiska fotplattor

Välvda fotplattor ger stöd för vrist och fotvalv, och skapar komfort, stabilitet och avspänning.



Tillbehör – för alla modeller

(Se tvättinstruktioner på sidan 14)



Sluten sits baktill

84001337

En sits som är sluten baktill och har en hygienöppning framtill.
Material: Polypropylen



Mjuk komfortsits, 4 cm öppning baktill

80209519

Ergonomiskt formad med skön mjukhet som ger god avlastning och bekvämt stöd. Försedd med ett urtag framtill.
Material: polyuretan



Mjuk komfortsits, 2 cm öppning baktill

80209518 Utformad med god mjukhet och runda former för bästa komfort. Försedd med ett urtag framtill.
Material: polyuretan



Mjuk komfortsits, 4 cm öppning baktill

Liten öppning 15 cm: 80209507
Stor öppning 18 cm: 80209506
Ergonomiskt formad, mjuk komfortsits med urtag framtill. Höjd 4 cm vid lägsta punkt.
Material: polyuretan.



Mjuk komfortsits, 2 cm öppning baktill


Öppning 18 cm: 80209306
Formad, mjuk komfortsits med urtag framtill. Höjd 2 cm vid lägsta punkt. Material: polyuretan.



Sitslock

80209434

Ett bekvämt sitslock när man vill täcka hygienöppningen. Kan användas i duschen.
Höjd 2 cm.
Material: polyuretan.

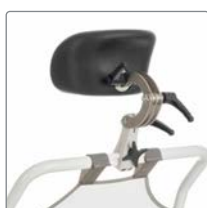

Huvudstöd upprätt

80209533

Närmare placering mot väggen i kombination med upprätt rygg. Delar funktioner med huvudstödet, vilket säkerställer funktionalitet och komfort. Material: Dyna: Polyuretan
Stöd: Rostfritt stål



Huvudstöd

80209521

Multijusterbart huvudstöd med formad kudde. Reglerbart i höjd-, djup- och sidled samt i vinkel. Komplet med fäste.
Material: Kudde: polyuretan
Stag: rostfritt stål



Komfortskal

80209455

Mjukrygg med integrerade armstödsdynor. Komfortskalet ger ett varmt mjukt stöd samtidigt som greppytan på armstöden lämnas fritt.
Material: PE.



Bålstöd /sidostöd

80209509

Fixerar bålen i stolen så att brukaren sitter bättre och känner sig tryggare.
Passar ej på XL-rygg.
Material: polyester, kardborre, PE.



Standard rygg

80209538

Passar de flesta användare, inkluderar ryggstöd i mjukt nät. och armstöd. Kompatibel med avtorkningsbar rygg. Justerbara armstöd med 6 cm åt varje håll.
Material: Polyester, pulverlackerat stål, rostfritt stål, polypropylen



XL-rygg

80209454

Erbjuder bättre plats för rygg och axlar för större brukare. Ökar bredden mellan armstöden med 6 cm till 48/54/60 cm. (XL-rygg passar inte till Swift Mobil Tilt-2)
Material: polyester, pulverlackerat stål, rostfritt stål, PP



Rygg Swift Mobil-2 upprätt

80209529

Kommer 7 cm närmare väggen vilket ger en perfekt passning över toalettöppningen på vägghängda toaletter.
Upprätt rygg passar alla Swift Mobil -2 standardmodeller utom tilt-varianter. (Passar Swift Mobil 24 men man vinner inte något på att montera det, då drivhjulen tar i väggen före körbågen.)




Avtorkningsbart ryggstöd

80209530

Bekvämt med ergonomisk form och flexibel nedre del. Justerbar i höjddel för optimalt stöd. Snabbtorkande material och lämpligt för tvättmaskin eller tunnel. Lätt att montera.
Material: Polypropylen Polypropylen

Tillbehör – för alla modeller

(Se tvättinstruktioner på sidan 14)

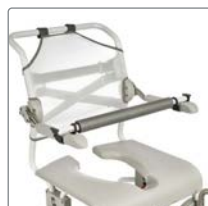

Tvärså

60,5 cm 80303034

66,5 cm 80209452

Ett tryggt stöd att hålla sig i eller som kan användas som ett kryststöd. Fästs runt armstöden.

Material: aluminium, PE.



Mjuk ryggdyna

80209448

Erbjuder brukaren värme och mjukhet.

Används innanför armstöden vilket gör det möjligt att fälla upp armstöden och skapa tillgänglighet vid sidoförflyttning.


Material: PE.



Armstödsdyna

80209508


Används för att skapa mjukhet runt armstöden. Ger ett varmt, mjukt underlag som stöd för armarna och lämnar greppytan fri för trygg uppresning. Säljs i par. Material: PE.

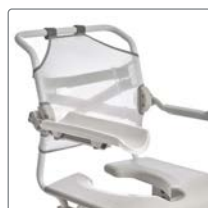

Armstöd Hemiplegi

80209035

Erbjuder ett stöd för underarmen med dess skålade form. Försedd med ett mjukt värmereflekterande material utvändigt. Passar både höger och vänster armstöd. Material: PE

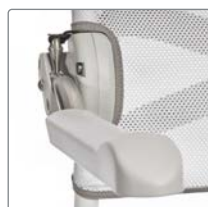

Armstödslås

80209445

En låstapp som används när man vill ha möjlighet att låsa armstödet i nedfällt eller uppfällt läge.

Material: rostfritt stål.




Stänkskydd

80209430

Ett mjukt skydd mot urinstänk framåt. Fästs över sitsens främre urtag och kan enkelt tas bort.


Material: polyuretan

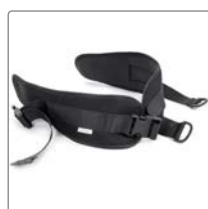

Höft-/brösthäls med klädsel

80209524

Tvådelat bälte för positionering som kan användas antingen som höft- eller bröstbälte. Justerbart med tre spännen med en längd på 65 till 130 cm. Materialet är bekvämt och snabbtorkande och ger ett stabilt stöd vid positionering.

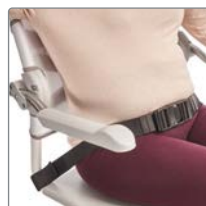

Höftbälte

80209440

Enkelt att justera med plastspänne. Fixeras runt ryggrören i bakkant med kardborreband. Material: polyester



Brösthäls

80209442

Enkelt att justera och som fästes runt banden till rygglädseln. Rekommenderas att användas tillsammans med höftbälte.

Material: polyester



Bäcken med lock

Bäcken med lock och handtag: 80209255

Unik invändig form som bryter strålen och minskar stänk. Locket har ett handtag som låser vid bäckenet och gör att innehållet säkras från spill.

Material: PP



Bäcken

Bäcken utan lock 80209254

Lock med handtag 80209256

Unik invändig form som bryter strålen och minskar stänk.

Material: PP




Bäckengejder

80209257

Passar både Etacs bäcken eller traditionella sjukhusbäcken. Används tillsammans med gejderfästen som beställs separat.

Material: PP

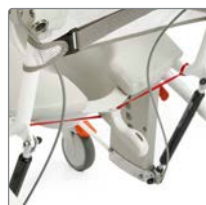

Bäckenhållare

80209049

Bäckenhållaren håller bäckenet på plats när stolen tillas. Passar Swift Mobil Tilt-2 och Swift Mobil Tilt-2 XL rygg.



Gejderfäste

80209435

Monteras fast under sitsen för att kunna använda bäckengejder. Monteras med skruvmejsel. Komplet sats.

Material: polyamid

Tillbehör – för alla modeller

(Se tvättinstruktioner på sidan 14)



Låg upphängning av bäcken/hink

80209259

Används när man vill ha bäckenet/hinken lägre placerat under sitsen. Monteras tillsammans med bäcken- alt. hinkgejderna. Sänker bäcken-/hinkgejderna 6 cm. Material: PP.



Hinkgejder

80209258

Används som hållare till bäcken/hinkar eller bäcken med högre kanter. Används tillsammans med gejderfästen som beställs separat. Material: PP.



Hink med handtag och lock

80209265

Traditionell hink som används tillsammans med hinkgejder. Material: PP



Tippskydd Swift Mobil Tilt-2

Tippskydd till Swift Mobil Tilt-2: 80209459

Ger ett skydd från att stolen tippar bakåt. Ökar tryggheten om tyngdpunkten ligger långt bak.

Material: PP och aluminium



Tippskydd Swift Mobil-2

Tippskydd inklusive fäste: 80209439

Tippskydd exklusive fäste: 80209438

Ger ett skydd från att stolen tippar bakåt.

Material: PP och aluminium



Tippskydd fram Swift Mobil-2

80209526

Ger ett skydd från att stolen tippar framåt. Ökar tryggheten om tyngdpunkten ligger långt fram. Säljs i par.

Material: rostfritt stål och Polypropylen



Tramprör

80209449

Underlättar förflyttning över t.ex. trösklar eller ramper. Säljs komplett med fäste.

Material: PP och aluminium



Kort benstöd komplett

80209520

Ett kort benstöd med fotplatta som kan svängas åt sidan. Kan justeras 12,5 cm och ger en fotstödshöjd på 24 – 36,5 cm. Fotplattan har en rundad form. Säljs i par. Material: rostfritt stål och PP



Fotstöd med fällbara fotplattor

80209446

Justerbar för de som behöver en mer öppen fotvinkel. Kan förses med hälband.

Säljs i par.

Material: rostfritt stål och PP.



Breddningssats till benstöd

80209525

Breddningssatsen ger ytterligare 12 cm bredd mellan benstöden. Ingår i alla XL stolar.

Säljs i par.

Material: polyamid



Ben- och vadväst

80209437

Vinkelställbart stöd för benet som kan användas både för höger och vänster ben. Säljs per styck. Material: rostfritt stål och ABS-plast



Överdrag för ben- och vadväst

80209535

Den mjuka ytan förbättrar komforten hos ben- och vadvästet. Lätt att montera genom att dra den över stödet. Rengörs snabbt med en enkel avtorkning. Material: Polyester: Polyester, polyuretan, nylon, spandex



Fotplatta för ben- och vadväst

80209443

Sats med separat fotplatta att montera tillsammans med ben- och vadväst.

Material: ABS-plast



Vinklade benstöd plus

80209531

Vid vinkel. Flyttar fotstödet 5 cm längre bort från sitsen Säljs i par.

Material: Rostfritt stål och polyuretan

Tillbehör – för alla modeller

(Se tvättinstruktioner på sidan 14)



Vinklade benstöd minus

80209532

Snäv vinkel. Flyttar fotstödet 4 cm närmare sitsen. Säljs i par.

Material: Rostfritt stål och polyuretan




24-tums drivhjulssats

80209436

24-tums drivhjul med massiva däck och inbyggda tippskydd. Monteras enkelt.

Inklusive fäste och broms.
Material: polyamid, rostfritt stål, polyuretan, aluminium

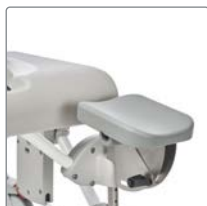

Amputationsbenstöd

80209510

Justerbart i höjd och reglerbart i längd och vinkel. Kan användas både till höger eller vänster sida. Är brukaren amputerad rekommenderar vi att man använder tippskydd.

Material: rostfritt stål och polyuretan



Hälband

80209553

Monteras på fotplattorna. Hindrar fötterna att glida bakåt. Längden kan justeras.

Säljes i par.

Material: polyester



Tvättinstruktioner

Seat closed rear, Soft Comfort seats and Seat cover, Head support, Head support upright, Arm support lock, Splash guard, Pan, Pan holder, Attachment holder, Low mounting attachment, Bucket holder, Bucket, Anti-tip, Tilter, Foot supports, Leg and calf support, Amputee leg support, Angles leg supports, Rear wheel 24" kit, Wipeable back support



Back support upholstery, Hip/chestbelt upholstered, Hip belt, Chest belt, Heel strap



Soft cushions, Comfort cover, Soft back pad, Arm support pad, Arm support hemiplegia, Cross bar, Cover leg and calf support



Förklaring av tvättsymboler



Maskintvätt – max tvätttemperatur 60 °C



Produkten tål rengöring i kabinettddiskdesinfektor i max. 85 °C i 3 minuter.




Avtorkning – produkten kan torkas av med en rengöringsduk. Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 6–9 eller med 70 % desinfektionssprit.



Mått



Model	Längd	Bredd	Sitshöjd	Rygghöjd	Sitsdjup
Swift Mobil-2	93 cm	58/64 cm	44 / 59 cm	50 cm	46,5 cm
Swift Mobil-2 XL	93 cm	61/64/70 cm	44 / 59 cm	50 cm	46,5 cm
Swift Mobil 24"-2	106 cm	74 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5 cm
Swift Mobil Tilt-2	102 cm	58/64 cm	47,5 / 62,5 cm	55 cm	46,5 cm
Swift Mobil Tilt-2 XL	102 cm	61/64/70 cm	47,5 / 62,5 cm	55 cm	46,5 cm

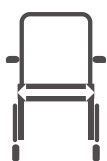

Model	Fotstödshöjd	Sitsbredd	Armstödshöjd	Armstöd till armstöd	Djup mot vägg
Swift Mobil-2	34 / 46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	54 cm (47 cm*)
Swift Mobil-2 XL	34 / 46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	48/54/60 cm	54 cm
Swift Mobil 24"-2	34 / 46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	67 cm
Swift Mobil Tilt-2	34 / 46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	60 cm
Swift Mobil Tilt-2 XL	34 / 46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	48/54/60 cm	60 cm

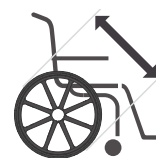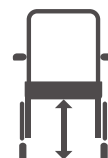

Model	Höjd	Hjul	Fritt utrymme över toalett	Fritt utrymme över toalett	Bakhjul
Swift Mobil-2	95-110 cm	12,5 cm	40 cm	40-55 cm	-
Swift Mobil-2 XL	95-110 cm	12,5 cm	40 cm	40-50 cm	-
Swift Mobil 24"-2	95-110 cm	12,5 cm	40 cm	41-56 cm	61 cm
Swift Mobil Tilt-2	100-115 cm	12,5 cm	40 cm	43,5-58,5 cm	-
Swift Mobil Tilt-2 XL	100-115 cm	12,5 cm	40 cm	43,5-58,5 cm	-



Model	Vändradie	Max brukarvikt	Vikt
Swift Mobil-2	ø 99 cm	160 kg	16,6 kg
Swift Mobil-2 XL	ø 99 cm	160 kg	17,3 kg
Swift Mobil 24"-2	ø 121 cm	160 kg	25,1 kg
Swift Mobil Tilt-2	ø 104 cm	160 kg	20,4 kg
Swift Mobil Tilt-2 XL	ø 104 cm	160 kg	21 kg



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac®
Creating Possibilities