



Etac Swift

sedia doccia/sgabello

 **etac**[®]

Etac Swift

sedia doccia/sgabello

Negli ultimi 20 anni, clienti in tutto il mondo si sono affidati agli sgabelli e sedie doccia Swift, che li hanno fatti sentire sicuri durante le attività di cura e igiene. Sviluppati in stretta collaborazione con professionisti della riabilitazione, designer industriali e utenti, gli sgabelli e le sedie doccia Swift sono progettati per assicurare comodità, supporto e comfort.

Da oltre 40 anni, Etac sviluppa prodotti di alta qualità che rappresentano nel mercato un sicuro punto di riferimento per utilizzatori e operatori sanitari. Swift è stata premiata per il suo design versatile e l'eccellente funzionalità.

Diffida delle imitazioni, usa solo prodotti originali Etac!



reddot

Progettato per un uso sicuro e sostenibile.

Un buon prodotto deve poter rispondere a molteplici esigenze. La sedia doccia/sgabello Swift è consegnata in pratici imballaggi piatti, ideali per trasportare e riporre il prodotto. Facile da montare, non vi è necessità di alcun attrezzo.

I prodotti Etac sono progettati secondo alti standard di sicurezza, igiene e sostenibilità. La sedia doccia/sgabello Swift è stata testata in conformità alle normative europee ed internazionali: il prodotto è resistente, ha un ciclo di vita stimato di 10 anni ed è coperto da una garanzia di 5 anni.



Scopri i vantaggi

Grazie a solide gambe regolabili in altezza, uno schienale e braccioli rimovibili, la sedia doccia/sgabello Swift è stata pensata per un uso sicuro e versatile.



*Etac Swift
sgabello per doccia*

*Etac Swift
sgabello per doccia
con braccioli*

Facilmente adattabile

Lo schienale e i braccioli sono rimovibili, si fissano facilmente senza il bisogno di attrezzi.

Robuste impugnature

Quando i braccioli non sono in uso, gli appositi alloggiamenti possono essere utilizzati come impugnature.

Superficie antiscivolo

La superficie antiscivolo della seduta assicura stabilità anche quando è bagnata.

Regolabile in altezza

Gambe telescopiche con meccanismo di regolazione dell'altezza.

Superficie traforata

Fori appositamente pensati per rimuovere efficacemente l'acqua in eccesso dal piano di seduta.

Una seduta versatile

Dotata di un'ampia apertura anteriore.

Stabile

I puntali antiscivolo delle gambe si adattano al pavimento e offrono un'ottima presa su qualsiasi superficie.



*Etac Swift
sedia per doccia*

Etac Swift sedia doccia/sgabello

Una seduta per doccia con molte opzioni.

Una Swift - tre opzioni

- La versione sgabello di Swift è senza braccioli. Le aperture laterali offrono una presa salda ed un ottimo supporto.
- Aggiungendo i braccioli, si facilita l'utilizzatore nel sedersi e nell'alzarsi.
- Aggiungendo i braccioli e lo schienale, si ottiene una sedia doccia estremamente sicura e confortevole.



Due opzioni di altezza


Le sedie doccia/sgabelli Swift sono disponibili in due altezze diverse, entrambe completamente regolabili. Il modello Low può essere posizionato a quattro diverse altezze, il modello normale può essere posizionato a sette diverse altezze.

Regolando le gambe anteriori uno scatto più in basso, si ottiene una seduta leggermente inclinata in avanti per facilitare l'alzarsi in piedi.



Etac Swift	Bianco	Grigio	Verde acqua	Blu pastello
sgabello per doccia	81701610	81701410	81701710	81701510
sgabello per doccia con braccioli	81701620	81701420	81701720	
sedia per doccia con schienale e braccioli	81701630	81701430	81701730	81701530
sgabello per doccia Low		81701450		
sedia per doccia Low con schienale e braccioli		81701460		

Colori

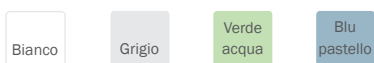

Dimensioni

Altezza totale con schienale: 80-95 cm
 Altezza totale Swift Low con schienale: 72.5-80 cm
 Larghezza totale, sgabello: 54 cm
 Larghezza totale, con braccioli: 54.5 cm
 Profondità totale: 50 cm
 Profondità totale Swift Low 46.5 cm
 Distanza braccioli: 45 cm
 Altezza seduta: 42-57 cm
 Altezza seduta Swift Low: 34.5-42 cm
 Dimensioni seduta: 54 x 41 cm

Peso

Sgabello per doccia Swift: 3.1 kg
 Sgabello per doccia Low Swift: 2.9 kg
 Sedia per doccia Swift: 4.7 kg
 Sedia per doccia Swift: 4.5 kg



Portata massima

Portata massima: 160 kg

Materiali

Seduta: polipropilene
 Gambe: alluminio, poliammide
 Puntali: TPE
 Seduta morbida: polietilene


Manutenzione



Lavare il prodotto utilizzando agenti pulenti senza solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure un prodotto disinfettante al 70%. Il prodotto può essere decontaminato a una temperatura massima di 85° C/185°F per 3 minuti se necessario.



Caratteristiche

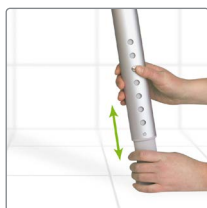

Regolabile in altezza

È facile regolare l'altezza. Basta fare clic e premere. La forma ovale impedisce alle gambe telescopiche di girare durante la regolazione.



Stabile

I puntali antiscivolo delle gambe si adattano al pavimento e offrono un'ottima presa su superfici bagnate o irregolari.



Facilmente adattabile

Design modulare, schienale e braccioli facilmente staccabili che si fissano senza bisogno di attrezzi.



Facilità di accesso

La seduta con una superficie liscia e un'ampia apertura anteriore facilita le attività di igiene personale.

Varianti colore

Le sedie doccia e gli sgabelli Swift sono disponibili in quattro diversi colori. Grigio, verde acqua, blu pastello e bianco. L'assortimento permette agli utenti di coordinare lo sgabello per doccia all'arredo del bagno.






Accessori



Schienale

Schienale modulare, montabile facilmente e rimovibile senza l'uso di attrezzi.

Grigio.....	84006181
Verde acqua.....	84006198
Blu pastello.....	84006183
Bianco.....	84006196

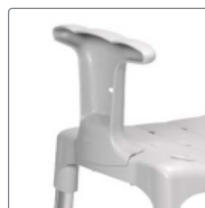

Braccioli

I braccioli rimovibili si montano facilmente senza l'uso di attrezzi.


Grigio.....	84006184
Verde Acqua.....	84006199
Blu pastello.....	84006186
Bianco.....	84006197



Porta sapone

Si inserisce sul lato della seduta, è perfetto per riporre il sapone e lo shampoo. E' anche dotato di un supporto per la cornetta della doccia.

Grigio	80209266
--------------	----------

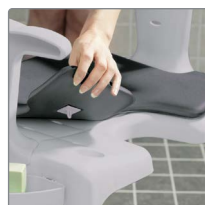

Sedile Soft

Imbottitura aggiuntiva Soft in materiale impermeabile ed antiscivolo per aumentare il comfort. Si aggancia al sedile e si asciuga facilmente dopo l'uso.

Grigio	84005073
--------------	----------



Schienale Soft

Imbottitura aggiuntiva Soft in materiale impermeabile ed antiscivolo per aumentare il comfort. Si aggancia allo schienale e si asciuga facilmente dopo l'uso.

Grigio.....	84005072
-------------	----------



Leggero e facilmente trasportabile, la sedia doccia/sgabello Swift viene fornito smontato in una pratica confezione per il trasporto.



Etac è azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti. Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorino la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei caregivers.

Per le ultime novità e aggiornamenti sui prodotti,
visita il nostro sito web: www.etac-it.com