

Molift EvoSling Embrace Vest



Ståskalsvästen i kombination med ståskalet ger stöd och underlättar uppresning från liggande till stående.

EvoSling Embrace Vest skapar möjlighet att på ett smidigt sätt lyfta barnet med ståskalet från liggande till stående. Kombinationen av ståskal och ståskalsväst minimerar risken för belastningsskada hos den som assisterar samtidigt som uppresningen kan ske mjukt och smidigt för barnet.

Vid lyft till ståskalet rekommenderas en lyftsele som kan lämnas kvar i ståskalet, exempelvis skalsele EvoSling Shadow HighBack.


Ståskalsvästen fästs runt om både barnet och ståskalet och de båda grenbanden håller västen på plats. Västen ger stöd för överkropp och huvud och blir en del av ståskalet.

Barnet får möjlighet att komma upp i stående med hjälp av denna kombination av produkter. Stårträningen kan medverka till positiva effekter för kroppens funktioner och öka självkänslan för barnet.

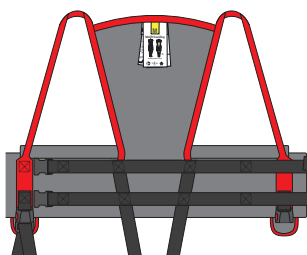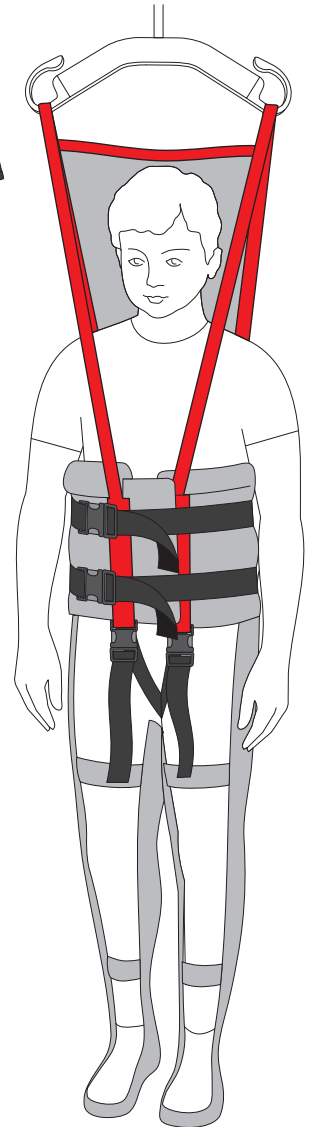


Tydlig färgmarkering

Röda lyftband skiljer lyftbanden från skalselens svarta lyftband. Tydlig skillnad i färg minimerar risken att koppla fel band till lyftbygel.

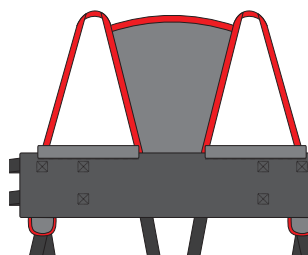

Antihalktyg

Antihalkfunktionen på insidan av ståskalsvästen gör att lyftselen bättre hålls på plats.

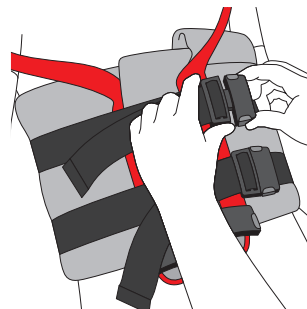


Dubbla spännen

Ger säkerhet och en bred yta som avlastar.




Balanserar tyngdpunkten


Lyftbanden balanserar tyngdpunkten under uppresningen så det kan ske smidigt.

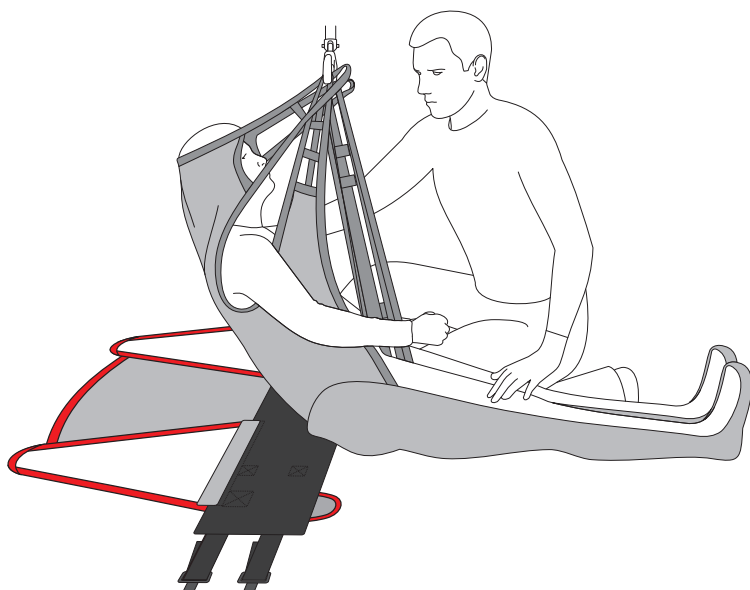

Lyftbanden balanserar tyngdpunkten under uppresningen så det kan ske smidigt.

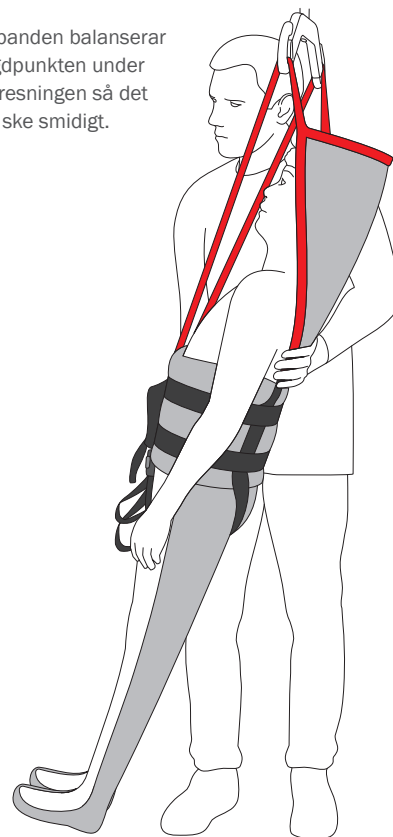

Kombinationen av ståskal och ståskalsväst minimerar risken för belastningsskada för den som assisterar samtidigt som uppresningen kan ske mjukt och smidigt.

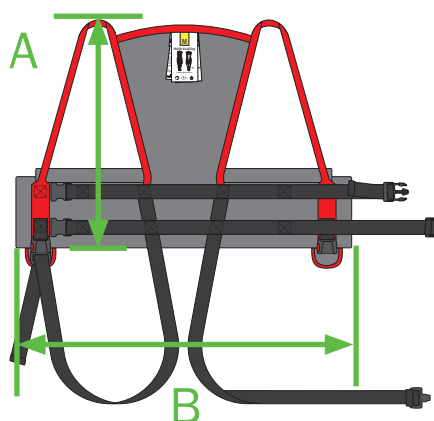**Storlek**

XXS
XS
S
M

A Ryghöjd

70 cm
75 cm
75 cm
80 cm

B Bredd

72 cm
84 cm
96 cm
110 cm

Molift EvoSling Embrace Vest

	Art. nr.
XXS	1721000
XS	1721010
S	1721020
M	1721030

Material:

Polyester, polyeten

Tvättinstruktioner

Maskintvätt - maxtemperatur 85 °C/185 °F. Tvätt vid lägre temperaturer ökar produktens livslängd. Torktumling - låg temperatur; maxtemperatur 60 °C/140 °F. Får ej strykas. Får ej kemtvättas. Använd ej blekmedel

max
300
kg

max
660
lbs

För de senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation, gå in på: www.etac.se